

GC AUSTRIA NEWS & HIGHLIGHTS

JANUAR BIS JUNI 2024

PRAXIS






Back to your roots!

Das Prinzip der Minimalintervention bei Wurzelkaries

Wurzelkaries und die alternde Bevölkerung

Herausforderungen bei der Versorgung älterer Menschen mit eigenen Zähnen

Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung nimmt stetig zu – sowohl in absoluten wie in relativen Zahlen. Und immer mehr Menschen haben auch im hohen Alter noch eigene Zähne. Diese Entwicklung stellt Zahnärzte vor besondere Herausforderungen – nicht nur, weil defekter Zahnersatz repariert oder ersetzt werden muss, sondern auch wegen der zunehmenden Häufigkeit von Wurzelkaries. Wurzeloberflächen, die dem oralen Milieu ungeschützt ausgesetzt sind, haben ein erhöhtes Demineralisierungsrisiko, insbesondere wenn der Speichelfluss und die Pufferkapazität des Patienten reduziert sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, Wurzelkaries ganzheitlich zu behandeln: die Risikofaktoren zu ermitteln (Diagnose), sie zu vermeiden (Prävention) und bereits bestehende Läsionen minimalinvasiv zu versorgen (Restauration).

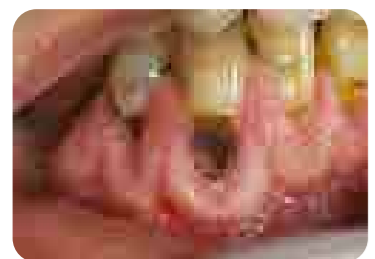

Mit freundlicher Genehmigung von Wirm Nützer, Niederlande



Identifikation

- GC Tri Plaque ID Gel: Identifizierung neuer, alter und säurebildender Plaque
- Saliva-Check BUFFER: Wie gut schützt der Speichel die Zähne?

Schutz und Prävention

- GC MI Paste Plus und MI Varnish: Stärken und desensibilisieren
- GC Dry Mouth Gel: Hilfe bei Mundtrockenheit
- Erosion, Mundhygieneprobleme und freiliegende Wurzeln: Mit Fuji TRIAGE die Probleme in den Griff bekommen

Behandlung und Kontrolle

- Minimalinvasive Restauration von Wurzelkariesläsionen
- Kontrollierte Geschwindigkeit mit Fuji II LC
- Schnelle Langzeitrestorationen mit Kariesschutz: EQUIA Forte HT
- Ästhetische Restaurationen mit G-ænial Universal Injectable

Kontrolle


- Kontrolltermine an Behandlungsverlauf und Kariesrisiko anpassen

Risikofaktoren im Alter

- Verminderter Speichelfluss bzw. verminderter pH-Wert des Speichels → geringere Pufferkapazität zur Abwehr von Säureangriffen
- Allgemeine und orale Erkrankungen → Risiko von (Ko-)Morbiditäten
- Medikamenteneinnahme und Polypharmazie → Risiko von Nebenwirkungen, z. B. Xerostomie
- Beeinträchtigung der Feinmotorik → Schwierigkeiten bei der Mundhygiene
- Kognitiv oder funktionell bedingte eingeschränkte Kooperationsfähigkeit → z. B. Demenz, ausgeprägter Tremor ...
- Hohe Pflegebedürftigkeit → erschwerten Zugang zur zahnärztlichen Versorgung, (z. B. Unfähigkeit, eine Zahnarztpraxis aufzusuchen)
- Veränderung des Essverhaltens mit Tendenz zu erhöhtem Zuckerkonsum → zunehmende Vorliebe für Süßes

VORBEUGEN


IDENTIFIZIEREN

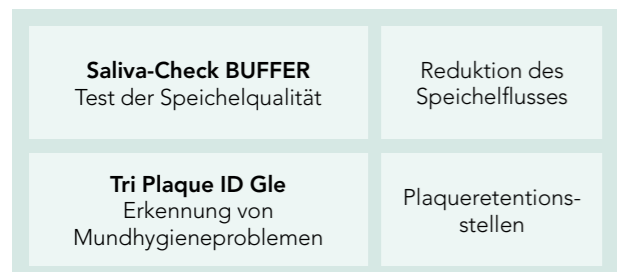


Saliva-Check BUFFER GC Tri Plaque ID Gel



Dry Mouth Gel MI Paste Plus MI Varnish Fuji TRIAGE

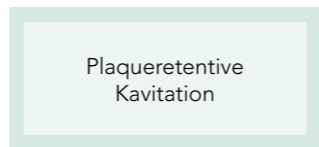

RESTAURATION

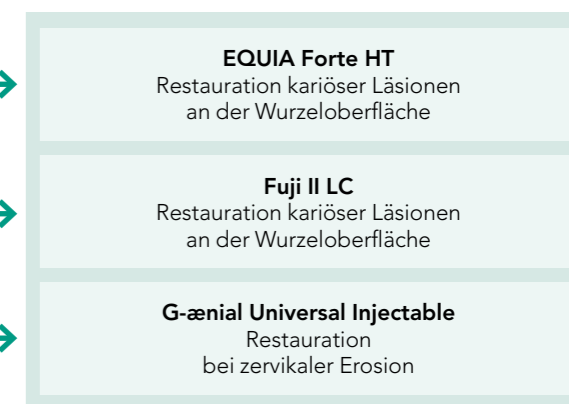

EQUIA Forte HT Fuji II LC G-ænial Universal Injectable

KONTROLLE



EQUIA Forte™ HT

Das neueste Glas-Hybrid-Bulk-Fill-Restaurationssystem – Ihr verlässlicher Partner für Seitenzahnrestaurationen

- Stärkeres und nicht klebriges Material, perfekt für die Bulk-Fill-Platzierung
- Erhöhte Transluzenz
- Kofferdam-Platzierung und das Auftragen des Adhäsivs fallen weg
- Hervorragende Biokompatibilität
- Einfache Seitenzahnrestaurationen in wenigen Schritten – ohne absolute Isolation
- Restauration empfindlicher, hypomineralisierter MIH-Zähne bei jungen Patienten



EQUIA Forte HT – Hybrid Technologie

- verbesserte Transluzenz
- noch einfachere Verarbeitung

INDIKATIONEN

- Klasse-I-Restaurationen/ permanent
- Kaudruckbelastete Klasse-II-Restaurationen/ permanent
- Interimsfüllungen
- Klasse-V- und Wurzeloberflächenrestaurationen Stumpfaufbau



1 x EQUIA Forte HT PROMOPACKUNG
Inhalt: à 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

1 x EQUIA Forte HT INTROPACKUNG GRATIS
Inhalt: 20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose


Kaufe 1 x EQUIA Forte HT Promopackung (à 100 Kapseln, 1 EQUIA Forte Coat 4ml) und erhalte 1 x EQUIA Forte HT Intropackung (20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose) gratis!

Aktion nur gültig für alle Promopackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
176,- EUR
Preis pro Packung

Erhalte 5 EQUIA Forte HT Refillpackung zum Preis von 4 !
Erhalte 13 EQUIA Forte HT Refillpackungen zum Preis von 10 !
Aktion nur gültig für alle Refillpackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

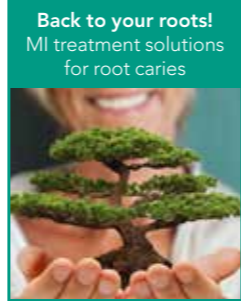

Hier geht's zu den Videos



PREISVORTEIL

EQUIA Forte HT PROMOPACKUNG A2 oder A3
Inhalt: à 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

15% 291,81 EUR
~~343,30 EUR~~
Preis pro Packung

Preisvorteil von 15% gilt ausschließlich für die Promopackung in Farbe A2 (Art-Nr. 10004866) oder der Promopackung in Farbe A3 (Art-Nr. 10004811)!

Weitere erhältliche Verpackungseinheiten:

EQUIA Forte HT, Nachfüllpackung: 176,00 EUR
Inhalt: 1 Packung beinhaltet 50 Kapseln EQUIA Forte HT, 0,40g Pulver und 0,13g (0,10ml) Liquid; gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml Farben: sortiert, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

EQUIA Forte HT Intropackung: 99,10 EUR;
Inhalt: 20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose
Farben: A2, A3, B2

EQUIA Forte HT Promopackung:
291,81EUR anstatt 343,30 EUR
Aktionspreis gültig für Farbe A2 und A3
Inhalt: 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml
Farben: A2, A2-A3, A3, A3-B2

EQUIA Forte HT Klinikpackung: 581,00 EUR
Inhalt: 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml)
Farben: A2, A3, B2

Art.-Nr. 10004885 **EQUIA Forte Coat FlipCap**
4 ml Flasche, Zubehör, 86,20 EUR

Art.-Nr. 10003513 **EQUIA Forte Coat, Unitdose-Packung**
50 Unitdose (à 0,1 ml) 114,00 EUR



+ 1 SILVERMIX KAPSELMISCHER GRATIS!
+ 1 CAPSULE APPLIER IV GRATIS!

1 x EQUIA Forte HT KLINIKPACKUNG
Inhalt: à 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

Kaufe 1 Packung EQUIA Forte HT Klinikpackung und erhalte 1 Silvermix Kapselmischer (im Wert von 450,- EUR) und 1 Capsule Applier IV (im Wert von 113,90 EUR) gratis!

EQUIA Forte HT Klinikpackung: 581,- EUR
(200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml) Farben: A2, A3, B2

Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Aktion für alle verfügbaren Klinikpackungen gültig.



GC GLASIONOMER / GLAS-HYBRID-MATERIAL (5 PACKUNGEN)

SILVERMIX KAPSELMISCHER GRATIS !

Kaufe 5 Packungen GC Glasionomer oder GC Glas-Hybrid + 1 Silvermix Kapselmischer (im Gesamtwert von 450,- EUR) gratis!

Aktion für alle erhältlichen GC Glasionomer/ Glashybrid Kapselpackungen gültig. Farbmix möglich.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



NEU Änderung der Primärverpackung

EQUIA Forte Coat Selbstadhäsiver Composite-Schutzlack

EQUIA Forte Coat ist ein selbstadhäsiver, nanogefüllter Composite-Schutzlack, der die darunter liegende Restauration während der Aushärtung schützt und dadurch die physikalischen Eigenschaften optimiert. Er ist ein Bestandteil des kosteneffizienten Glas-Hybrid-Bulk-Fill Restaurationssystems EQUIA Forte HT. Die Farbe der Verschlusskappe und des Flaschenetikettes von EQUIA Forte Coat wurden angepasst, um eine deutliche Unterscheidung von der Flasche unseres Adhäsives (GC G-Premio Bond) zu ermöglichen.

GC Fuji™ II LC


Lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes Glasionomer-Restaurationmaterial

Besonders geeignet zur Verwendung bei Klasse III- und bei Klasse V-Fällen, bei denen hohe Anforderungen an die Ästhetik gestellt werden und Wurzelkaries, Sandwich-Technik, Restaurationen bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfüllungen oder als Liner.

- Kontrollierter Lichteinsatz für ein direktes und einfaches Verfahren
- Ausgezeichnete Ästhetik & Transluzenz
- Ideal für zervikale Erosion, Ausbrechungen, Restaurationen der Wurzeloberfläche und die Behandlung von Kindern
- Optimal auch bei der geschlossenen und offenen Sandwich-Technik
- Hohe chemische Haftung für eine perfekte Randintegrität
- Hervorragende praxiserprobte, klinische Leistung



MUST HAVE!
JETZT TESTEN!

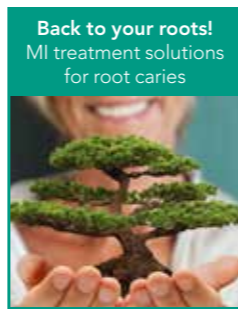

PREISVORTEIL

4 + 1	183,- EUR <small>Preis pro Packung</small>
10 + 3	

Erhalte 5 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 10!
Art.-Nr. 10000035 **Fuji II LC Kapseln A2**
Art.-Nr. 10000036 **Fuji II LC Kapseln A3**
Inhalt: à 50 Kapseln (0,33 g Pulver und 0,10 g (0,085 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,10 ml)
Aktion für alle Farben gültig.
Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

**GC GLASIONOMER/
GLAS-HYBRID-MATERIAL
(5 PACKUNGEN)**



**SILVERMIX
KAPSELMISCHER
GRATIS!**

Kaufe 5 Packungen GC Glasionomer oder GC Glas-Hybrid + 1 Silvermix Kapselmischer (im Gesamtwert von 450,- EUR) gratis!
Aktion für alle erhältlichen GC Glasionomer / Glashybrid Kapselpackungen gültig. Farbmix möglich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



GC Fuji IX GP FAST

Selbsthärtendes, hochviskoses, stopfbares Glasionomer-Restaurationmaterial

Die stopfbare, nicht klebende Konsistenz von Fuji IX GP FAST macht ihn zu einem idealen Glasionomer für Restaurationen der Klassen V, I & II, als Basis- oder Stumpfaufbaumaterial. Die charakteristischen Glasionomereigenschaften in Kombination mit leichter Handhabung stellen die Anforderungen der heutigen Füllungsmaterialien sicher.

- Breites Indikationsspektrum
- Sehr guter chemischer Verbund
- Schnelle Bulkapplikation
- Keine Mikrosplattbildung
- Hervorragende Druckfestigkeit und Oberflächenhärte
- Schutz durch Fluoride
- Biokompatibel



PREISVORTEIL

4 + 1	156,30 EUR <small>Preis pro Packung</small>
10 + 3	


Erhalte 5 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 10!
Art.-Nr. 10000078 **Fuji IX GP FAST Kapseln A2**
Art.-Nr. 10000079 **Fuji IX GP FAST Kapseln A3**
Inhalt: à 50 Kapseln (0,40 g Pulver und 0,11 g (0,09 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml)
Aktion für alle Farben gültig.
Farben: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

G-æniat™ Universal Injectable

Injizieren Sie unser stärkstes Material für direkte Restaurationen

Fließfähige Konsistenz – dauerhafte Festigkeit
Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise!

Das innovative Design sorgt für einfache Handhabung und Formstabilität. Durch mühelose Materialausgabe und der einfachen Darreichung macht es Freude unsere Spritzen und Unitips in Verwendung zu haben.

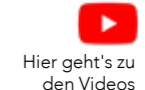

PREISVORTEIL

4 + 1	AB 41,40 EUR <small>Preis pro Packung</small>
10 + 3	

4 x G-æniat Universal Injectable UNITIPS oder SPRITZEN
G-PREMIO BOND 5 ML GRATIS

Kaufe 4 Packungen G-æniat Universal Injectable Spritzen (à 1 ml/1,7 g) oder Unitips (à 15 x 0,16 ml/0,27 g) und erhalte 1 x G-Premio BOND 5 ml Flasche (im Wert von 103,50 EUR) gratis!



Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



G-æniat Universal Injectable Spritze 1 ml (1,7 g); 41,40 EUR Preis pro Packung

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr. 10003705 A1 | Art.-Nr. 10003714 AO1 | Art.-Nr. 10003712 CV |
| Art.-Nr. 10003706 A2 | Art.-Nr. 10003715 AO2 | Art.-Nr. 10003713 CVD |
| Art.-Nr. 10003707 A3 | Art.-Nr. 10003716 AO3 | Art.-Nr. 10003717 JE |
| Art.-Nr. 10003708 A3.5 | Art.-Nr. 10003710 B1 | Art.-Nr. 10003703 XBW |
| Art.-Nr. 10003709 A4 | Art.-Nr. 10003711 B2 | |
| Art.-Nr. 10003718 AE | Art.-Nr. 10003704 BW | |

G-æniat Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); 62,40 EUR Preis pro Packung

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr. 10006896 A1 | Art.-Nr. 10006905 AO1 | Art.-Nr. 10006903 CV |
| Art.-Nr. 10006897 A2 | Art.-Nr. 10006906 AO2 | Art.-Nr. 10006904 CVD |
| Art.-Nr. 10006898 A3 | Art.-Nr. 10006907 AO3 | Art.-Nr. 10006908 JE |
| Art.-Nr. 10006899 A3.5 | Art.-Nr. 10006901 B1 | Art.-Nr. 10006910 JBW |
| Art.-Nr. 10006900 A4 | Art.-Nr. 10006902 B2 | |
| Art.-Nr. 10006909 AE | Art.-Nr. 10006911 BW | |

Verpassen Sie nicht unseren Injection-Moulding-Technik-Workshop mit dem Referenten Dr. Artur Grila!

Weitere Informationen auf Seite 25

Injection-Moulding-Technik

Neuartige Spritzgusstechnik zur Behandlung von Patienten mit hohen ästhetischen Ansprüchen



**JETZT
INFORMIEREN!**



Sehen Sie hier Injection-Moulding-Techniken!



Injection-Moulding-Technik mit EXACLEAR und G-ænial Universal Injectable mit Dr. Serhat Köken

Art.-Nr. 10003753 **Injection Moulding Kit**
Inhalt: je 1 Spritze G-ænial Universal Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3; 1 Exaclear Kartusche 48 ml; 146,30 EUR

EXACLEAR Klares Vinyl- Polysiloxan-Material

- Hohe Transparenz ermöglicht visuelle Detailkontrolle
- Effektive Lichthärtung durch exzellente Transparenz
- Optimale Konsistenz für einfache Platzierung im Abformlöffel
- Einfach zu schneiden oder zu durchbohren
- Gut reproduzierbar, hat während des Applizierens optimale Stabilität und Reifestigkeit

Perfekt geeignet für:
• Injection Moulding Technik: einfache Kontrolle beim Injizieren und effektive Lichthärtung

Art.-Nr. 10001483 **Exaclear**
2 x Kartuschen à 48 ml (51 g), 6 x Mixing Tips II L (blue); 77,50 EUR



G-Premio BOND Lichthärtendes Einkomponenten- Universaladhäsiv

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung
- Für Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzitverstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperativen Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

Nähere Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 12.



G-ænial Universal Injectable

Injizieren, formen und konturieren – alles zugleich

- Ultra-feine Bariumfüller (150µm)
- Hoher Fülleranteil
- Full-coverage Silane Coating (FSC) Technologie verbessert: das Ausbringen & den Verbund der Füller in der Matrix
- Geringer Auspressdruck
- Klebt nicht
- Hohe Röntgensichtbarkeit

Nähere Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 7.



D-Light® Pro

Mehr sehen, als das Auge wahrnimmt
LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge, autoklavierbar & Detection Mode



Aushärten

- HP Modus (High Power) 1400 mW/cm²
- Blaue LED (Wellenlänge: 460 – 465 nm)
- Violette LED (Wellenlänge: 400 – 405 nm)
- Effiziente Härtung alternativer am Markt befindlichen Licht-Initiatoren

Schützen

- LP Modus (Low Power) mit reduzierter Leistungsabgabe von 700 mW/cm² z. B. bei tiefen Kavitäten, wenn die Präparation nahe an der Pulpa liegt

Erkennen

- DT Modus (Detection Mode) verwendet ausschließlich UV-nahes Licht
- Visualisierung von Plaque
- Visualisierung von infiziertem Dentin
- Visualisierung von Mikro-Rand-Undichtheiten
- Bewertung von Bakterienaktivität z. B. in den Fissuren
- Visualisierung von fluoreszierenden Materialien
- Bewertung der Risttiefe

Autoklavieren

- Hochstabiler Lichtleiter
- Gesteigertere Akkuleistung

**GC PRODUKT-
AKTION**

D-LIGHT PRO GRATIS

Kaufe GC-Produkte (G-ænial, Essentia, EverX Flow, CERASMART270 oder EQUIA Forte HT) im Wert von 2900,- EUR und erhalte die D-Light Pro gratis!

Produktmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

AKTIONSPREIS

999,- EUR ~~1357,50 EUR~~

Art.-Nr. 70000008 **D-Light Pro**

Inhalt: Handstückhülle und Elektronikmodul, Lichtleiter 8 mm; Akkus (2 Stk.), Ladestation, Netzteil, EU-/UK-Adapter, Lichtschuttschild, weicher Augenschutz (3 Stk.)

Verpassen Sie nicht unsere Composite-Workshops mit unseren Top-Referenten!
Weitere Informationen auf Seite 28




Hier gehts zur G-ænial A'CHORD Webpage
<http://gaenialachord.com>



G-ænial A'CHORD

Das hochentwickelte Universal-Composite mit der Einfachheit des Unishade-Systems

Einfachheit, Ästhetik und Funktionalität in Ihren Händen

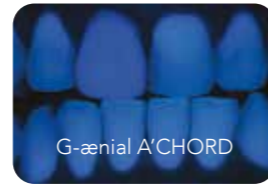

G-ænial A'CHORD



Konventionelles Composite Veneer

© Dr. J. Tapia Guadix, Spanien

A'CHORD Vereinfachung

- Einfaches Unishade-System
- Einfache Handhabung
- Einfach Universal

A'CHORD Ästhetik

- Natürliche Fluoreszenz
- Langanhaltender Glanz
- Extreme Herausforderungen

A'CHORD revolutionäre Technologie

- Patentierte Füllstoffe und Beschichtung
- Hohe Farbstabilität und Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit



Vor Politur | Nach Politur



Der Leitfaden „Restaurative Lösungen“ von GC

Der Leitfaden bietet Ihnen 3D-Darstellungen aller Kavitätenarten und zeigt deren Wiederherstellung mit GCs fortschrittlichen Glasionomeren, Glas-Hybriden und/oder Restaurations-Compositen. Außerdem stellt die App Schritt für Schritt dar, welche Farbtöne und Schichtdicke verwendet

werden sollten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Zusätzlich enthält die App Informationen über Adhäsivsysteme und Glasfaserverstärkten Restaurationstechniken, sowie detaillierte Verfahrensdarstellungen für die Reparatur von indirekten Restaurationen.



SPRITZEN

Art.-Nr. 10006767
G-ænial A'CHORD Layering Kit
1 Spritze / Farbe: A2; A3; AO2; AE; JE
(à 2,1 ml/4 g); 277,60 EUR (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006768
G-ænial A'CHORD Core Kit
1 Spritze / Farbe: A1; A2; A3; A3,5; A4
(à 2,1 ml/4 g); 277,60 EUR (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006769 **Trial KIT A**
3 Spritzen, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)
167,40 EUR (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006771
G-ænial A'CHORD Bleach Kit
1 Spritze/Farbe: BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4g)
167,40 EUR (Preis pro Packung)
G-ænial A'CHORD Bleach KIT nur in Spritzenform erhältlich. Bleachfarben für Unitips als Refill verfügbar.

Spritzen Refill
Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
(à 2,1 ml/4 g)
Opaque AO1, O1, AO2, AO3; (à 2,1 ml/4 g)
Enamel JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel); (à 2,1 ml/4 g)
Bleach BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); (à 2,1 ml/4 g)
61,80 EUR (Preis pro Packung)

UNITIPS

Art.-Nr. 10006772
G-ænial A'CHORD Layering Kit Unitips
15 Unitips / Farbe: A2, A3, AO2, AE, JE
(à 15 x 0,16 ml); 297,80 EUR (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006773
G-ænial A'CHORD Core Kit Unitips
15 Unitips / Farbe: A1, A2, A3, A3.5, A4
(à 15 x 0,16 ml); 297,80 EUR (Preis pro Packung)

Unitips Refill
Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
(à 15 x 0,16 ml)
Opaque AO1, AO2, AO3; (à 15 x 0,16 ml)
Enamel JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel); (à 15 x 0,16 ml)
Bleach BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach);
(à 15 x 0,16 ml);
66,20 EUR (Preis pro Packung)



PREISVORTEIL

4 + 1	AB
10 + 3	61,80
	EUR
	Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 5 Packungen G-ænial A'CHORD zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-ænial A'CHORD zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

3 x G-ænial A'CHORD UNITIPS oder SPRITZEN

G-PREMIO BOND 5 ML GRATIS

Kaufe 3 x G-ænial A'CHORD Spritzen (à 2,1 ml/4 g) oder Unitips (à 15 x 0,16 ml) und erhalte eine G-Premio BOND 5 ml Flasche im Wert von 105,30 EUR gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Hier geht's zu den Videos





G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv für alle Bonding Techniken und ideal für Reparaturen und als Desensitizer einsetzbar!



DIE ERFOLGREICHEN 2!

Unsere starken und kompetenten Adhäsivsysteme für all Ihre täglichen restaurativen Aufgabestellungen

Fragen Sie zusätzlich Ihren GC Fachberater nach weiteren Informationen!

Optimal geeignet für die IDS-Technik (IMMEDIATE DENTIN SEALING Technik)!

G2-BOND Universal

Der neue Standard der 2-Flaschen-Universal-Bondings – wegweisend für einen neuen Standard in Ihren Händen



G2-BOND Universal mit seiner patentierten Dual-H-Technologie, die für fortschrittlich optimierten Haftverbund sowohl am Zahn als auch am Composite sorgt, ist ein vielseitig einsetzbares 2-Flaschen-Universal-System, das die zahnärztlichen Anforderungen in Hinblick auf die existierenden Goldstandards für Selbstätzung (SE) und Etch-and-Rinse (ER) erfüllt und darüber hinaus folgendes bietet:



Ein neuer 2-Flaschen-Bonding-Standard für alle Ätzverfahren

Für eine rundum Zufriedenheit und den Komfort Ihrer Patienten!

JETZT EINSTEIGEN

162,50 EUR

Art.-Nr. 10006819
G2-BOND Universal Flasche Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml,
Zubehör; 162,50 EUR

- Auswahl des bevorzugten Ätzverfahrens
- Hervorragende Haltbarkeit und erstklassiger Haftverbund
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Randverfärbungen
- Hervorragende Dosierung und geringe Techniksensibilität
- Multiindikativ¹
- Modernes, intelligentes und ergonomisches Design: 1-PRIMER/2-BOND

PREISVORTEIL

G-PREMIO BOND
3-BOTTLE PACKUNG

269,40 EUR

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001458
G-Premio BOND 3-Bottle-Packung
3 Flaschen à 5 ml; 269,40 EUR

G-PREMIO BOND BOTTLE

105,30 EUR

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001461
G-Premio BOND Bottle
1 Flasche à 5 ml, 105,30 EUR

3 x GC COMPOSITE
PACKUNGEN

G-PREMIO BOND 5 ML
GRATIS

Zur Auswahl der Composite-Packungen stehen: G-æniel A'CHORD Spritze oder Unitips (15 Stk.) oder G-æniel Anterior oder Posterior Spritze oder Unitips (20 Stk.) oder Essentia Spritze oder Unitips (15 Stk.).

Produkt- und Farbmix möglich.
Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



FLIP-TOP VERSCHLUSSKAPPE

Genießen Sie die gewohnte Performance und entdecken Sie gleichzeitig ein einfaches Handling
300 Applikationen pro 5 ml Flasche

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung
- Für Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzitverstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperativen Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

Gesamtleistung einer einzigartigen Zusammensetzung

- 4-MET für zuverlässige Adhäsion an Zahnschmelz und Dentin
- MDP für ausgezeichnete Adhäsion an Zahnschmelz und Dentin, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Nichtedelmetallen
- MDTP zur Adhäsion an Edelmetallen
- HEMA-freies Bonding-System für klinisch nachgewiesene, herausragende Haltbarkeit²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.



Verkleinerter Kontaktpunkt zwischen Schutzhülle und Flasche


Lamelle für effektives Drücken der Flasche

Weitere erhältliche Verpackungseinheiten:
Art.-Nr. 10001242 G-Premio BOND Unitdose
50 Stück à 0,1 ml, Zubehör; 132,40 EUR
Art.-Nr. 10001457 G-Premio BOND Kit
1 Flasche 5 ml, Zubehör; 133,60 EUR
Art.-Nr. 10001349 G-Premio BOND DCA
1 Flasche 3 ml Dual Cure Activator (DCA); 55,00 EUR

Als weitere Option:



G-Premio BOND DCA = Dual-cure Aktivator

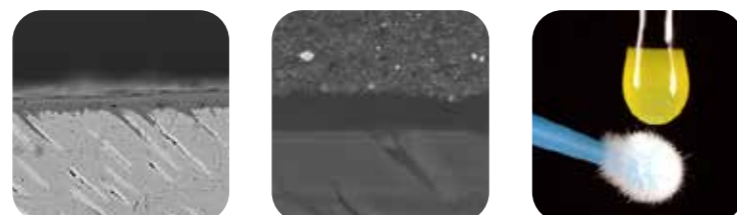

Weitere Verpackungseinheiten: Nachfüllpackungen
Art.-Nr. 10006821 G2-BOND Universal 1-PRIMER Refill
1 x Flasche 5 ml; 119,00 EUR
Art.-Nr. 10006822 G2-BOND Universal 2-BOND Refill
1 x Flasche 5 ml; 50,30 EUR

¹ Indikationen: Direkte Composites | Intraorale Reparatur | Sofortige Dentinversiegelung (IDS) | Behandlung von Hypersensibilitäten | Behandlung freiliegender Wurzeloberflächen | Befestigung indirekter Restaurationen (mit G-CEM LinkForce) | Stiftbefestigung & Stumpfaufbau (mit GRADIA CORE & GPB DCA).



G-æniaal

Das Allround-Composite für unsichtbare Restaurationen – mit altersspezifischem Farbauswahlssystem



- G-æniaal Anterior** überzeugt durch
- Seine Ästhetik & Röntgensichtbarkeit
 - Seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit
 - Auf das Alter abgestimmtes Farbsystem
 - Mühelose Verarbeitung

- G-æniaal Posterior** überzeugt durch
- Ein angepasstes Farbsystem
 - Sehr gute Röntgensichtbarkeit
 - Seine gute Stopfbarkeit
 - Hervorragende Festigkeit und Langlebigkeit

PREISVORTEIL

4 + 1	AB 103,50 EUR
10 + 3	

Preis pro 20er-Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniaal Anterior/ Posterior Unitips zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-æniaal Anterior/ Posterior Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Art.-Nr. 10000776 **Anterior Unitip A2**
Art.-Nr. 10000777 **Anterior Unitip A3**
Art.-Nr. 10000798 **Posterior Unitip PA2**
Art.-Nr. 10000799 **Posterior Unitip PA3**

Farben: Anterior Packung mit 20 Unitips: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Anterior Packung mit 10 Unitips: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Posterior Packung mit 20 Unitips: PA1, PA2, PA3, PA3.5, PJE, PIE

PREISVORTEIL

4 + 1	AB 72,80 EUR
10 + 3	

Preis pro 20er-Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniaal Anterior/ Posterior Spritzen zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-æniaal Anterior/ Posterior Spritzen zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Art.-Nr. 10000805 **Anterior Spritzen A2**
Art.-Nr. 10000806 **Anterior Spritzen A3**
Art.-Nr. 10000826 **Posterior Spritzen PA2**
Art.-Nr. 10000827 **Posterior Spritzen PA3**

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE und P-IE

PREISVORTEIL

4 + 1	AB 58,60 EUR
10 + 3	

Preis pro Spritzenpackung

Wählen Sie zwischen den G-æniaal Anterior und Posterior oder wählen Sie zwischen den G-æniaal Flo X, G-æniaal Universal Flo und G-æniaal Universal Injectable Angeboten und stellen Sie sich Ihre individuellen Wunschfarben zusammen.

Erhalte 5 Packungen G-æniaal Anterior oder Posterior oder G-æniaal Flo X, G-æniaal Universal Flo oder G-æniaal Universal Injectable zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-æniaal Anterior oder Posterior oder G-æniaal Flo X, G-æniaal Universal Flo oder G-æniaal Universal Injectable zum Preis von 10!

Nur gültig innerhalb gleicher Packungseinheit.

Essentia® Universal Shade

Lichthärtendes röntgensichtbares Universal-Composite für alle Indikationen im Seitenzahnbereich

Eine Farbe – immer passend.



PREISVORTEIL

4 + 1	AB 58,60 EUR
10 + 3	

Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 5 Packungen Essentia HiFlo, LoFlo, Spritzen, Essentia Universal Spritzen oder Unitips zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen Essentia HiFlo, LoFlo, Spritzen, Essentia Universal Spritzen oder Unitips zum Preis von 10!

- Aktion nur gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit. Preise pro Packung.
Art.-Nr. 10003383 **Essentia HiFlo Spritze**
1 x 2 ml (3,6 g), U; 20 Dispensing Tips III Plastic; 58,60 EUR
Art.-Nr. 10003385 **Essentia LoFlo Spritze**
1 x 2 ml (3,4 g), U; 20 Dispensing Tips III Plastic; 58,60 EUR
Art.-Nr. 10003524 **Essentia Universal Spritze**
1 x 3 ml (4,0 g) U; 58,60 EUR
Art.-Nr. 10003549 **Essentia Universal Unitips**
15 x 0,16 ml (0,32 g) U; 65,80 EUR

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater und nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit.

G-æniaal Flo X

Der perfekte Partner!

G-æniaal Flo X enthält homogen verteilte, ultrafeine Partikel in einer mittleren Füllergöße (Barium-Glasfüller) und zeichnet sich durch seine niedrige Viskosität und insbesondere durch seine sehr gute Röntgenopazität (300 % bei 1 mm, 284 % bei 0,5 mm Schichtung) aus, was unter anderem die Diagnose von Sekundärkaries vereinfacht.

PREISVORTEIL

4 + 1	AB 73,40 EUR
10 + 3	

Preis pro Spritze

Erhalte 5 Packungen G-æniaal FloX Spritzen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniaal FloX Spritzen zum Preis von 10!

- Art.-Nr. 10003362 **G-æniaal Flo X A2**
Art.-Nr. 10003363 **G-æniaal Flo X A3**
Spritze 3,6 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung
Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 und AO3

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



G-æniaal Universal Injectable

Hochfestes Composite für Restaurationen
Fließfähige Konsistenz – dauerhafte Festigkeit

G-æniaal Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationscomposite mit außerordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen. Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-æniaal Universal Injectable außerordentliche Festigkeit – fester als führende feste am Markt verfügbare Composite.

PREISVORTEIL

4 + 1	AB 41,40 EUR
10 + 3	

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniaal Universal Injectable Spritzen oder Unitips zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniaal Universal Injectable Spritzen oder Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Preis pro Spritzen-Packung 41,40 EUR
Art.-Nr. 10003706 **A2 Spritze**
Art.-Nr. 10003707 **A3 Spritze**
- Preis pro Unitip-Packung 61,20 EUR
Art.-Nr. 10006897 **A2 Unitip**
Art.-Nr. 10006898 **A3 Unitip**



Weitere Informationen zu G-æniaal Universal Injectable finden Sie auf Seite 7 im Praxistell.

G-æniaal Universal Flo

Fließfähig und absolut universell für alle Kavitätenindikationen

Durch die einzigartige Fließfähigkeit lässt sich G-æniaal Universal Flo wie ein Flowable applizieren und ist zusätzlich so standfest wie ein herkömmliches Composite. Es ist für alle Kavitätenklassen geeignet und zeichnet sich durch hervorragende Festigkeit, Polierbarkeit und Vielseitigkeit aus.

PREISVORTEIL

4 + 1	AB 75,10 EUR
10 + 3	

Preis pro Spritze

Erhalte 5 Packungen G-æniaal Universal Flo Spritzen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniaal Universal Flo Spritzen zum Preis von 10!

- Art.-Nr. 10000839 **G-æniaal Universal Flo A2**
Art.-Nr. 10000840 **G-æniaal Universal Flo A3**
Spritze 3,4 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung
Standardfarben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;
Innenfarben: AO2, AO3; Außenfarben: JE, AE

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Die erfolgreichen Restaurations- und Befestigungssysteme von GC!

G-ænial Family
G-ænial Universal Injectable

G-ænial A'CHORD

GRADIA DIRECT Family

Essentia Family

RESTORATIVE SOLUTIONS

everX Posterior everX Flow

G2-BOND Universal G-Premio BOND

LUTING SOLUTIONS

EQUIA Forte HT

GC Fuji IX GP FAST GC Fuji II LC

G-CEM LinkForce

G-CEM ONE

FujiCEM 2 SL FujiCEM Evolve



Hier geht's zum GC Europe You tube Channel:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



3D-Konfigurator GC Restorative Dentistry Guide zum GRATIS-Download:
www.gceurope.com



everX Flow®



Mit Glasfasern verstärktes fließfähiges Composite für den Dentinersatz

AUCH ALS BULK-FARBE BEI TIEFEN KAVITÄTEN MIT AUSHÄRTUNGSTIEFE BIS 5,5 MM OPTIMAL GEEIGNET!



Hier geht's zu den Videos

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3

AB
64,40
EUR

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen everX Flow zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen everX Flow zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10001488 **everX Flow Bulk**
Spritze 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 Dispensing Tip III Kunststoff, Lichtschutzkappe

Art.-Nr. 10001489 **everX Flow Dentin**
Spritze 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 Dispensing Tip III Kunststoff, Lichtschutzkappe

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Überzeugend stabile Struktur

everX Flow ist die neue Lösung aus dem Hause GC für die widerstandsfähige und unkomplizierte Verstärkung all ihrer Restaurationen. Mit seiner einfachen Anwendung, zwei Farbtönen und seiner herausragenden Festigkeit wird everX Flow schnell zu Ihrem neuen Nummer-1-Produkt für alle Restaurationen, die einen starken Aufbau erfordern. Die „Bulk-Farbe“ mit einer Aushärtungstiefe von 5,5 mm eignet sich optimal für tiefe posteriore Kavitäten, während die Dentin-Farbe die erste Wahl für herausragende ästhetische Ergebnisse ist.

everX Posterior®

Glasfaserverstärkte Composite-Unterkonstruktion für große Kavitäten



Art.-Nr. 10001048 **everX Posterior**;
85,70 EUR pro Packung 15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Art.-Nr. 10001148 **everX Posterior**;
257,10 EUR pro Packung 50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

G-CEM ONE™

Selbstadhäsives Befestigungs-Composite

Zuverlässig

Optimale Haftwerte bei retentiven und nicht-retentiven¹ Präparationen, dank der einzigartigen GC Touch Cure Technologie des optionalen G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primers.

Anwenderfreundlich

Ausgeprägte Dunkelhärtung, „tack-cure“ Überschussentfernung, hohe Toleranz gegenüber Speichel und Feuchtigkeit¹, Fließfähigkeit ideal für Befestigungen, praktisch keine postoperativen Sensibilitäten³.

Universell

Hervorragende Haftfestigkeit zum Zahn und zu allen Substraten: Schmelz, Dentin, Zirkonoxid, Metall, Glaskeramik², Hybrid-Keramik².

Ästhetisch

Unsichtbare, abrasionsstabile Ränder für ästhetische Ergebnisse.



GC Touch Cure

Der Initiator im G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer beschleunigt die chemische Aushärtung (Dunkelhärtung) des BefestigungsComposites an der Zahnoberfläche und stellt einen stabilen Verbund her.

Optional: G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Für alle Pfeilerzähne und Kavitäten

- MDP: Verbund zur Zahnhartsubstanz, Zirkonoxid und Nichtedelmetall
- 4-MET: Verbund zur Zahnhartsubstanz
- MDTP: Verbund zu Edelmetall
- Beschleuniger → Starker Verbund an Pfeilerzahn und Kavität durch GC Touch Cure-Funktion

PREISVORTEIL
4 + 1 AB **65,80** EUR
Preis pro Packung

Erhalte 5 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 4!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10006918 **G-CEM ONE Starter Kit A2**
Art.-Nr. 10006919 **G-CEM ONE Starter Kit Transluzent**
Inhalt pro Starter Kit: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml; 76,30 EUR

Art.-Nr. 10006921 **G-CEM ONE Twin Refill A2**
Art.-Nr. 10006922 **G-CEM ONE Twin Refill Transluzent**
Inhalt pro Twin Refill: 2 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix Endo Tips; Preis pro Packung 125,60 EUR

Art.-Nr. 10006923 **G-CEM ONE Single Refill AO3**
Art.-Nr. 10006924 **G-CEM ONE Single Refill Weiß Opak**
Inhalt pro Single Refill: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips; Preis pro Packung 65,80 EUR

Art.-Nr. 10006925 **G-CEM ONE Value Refill A2**
Art.-Nr. 10006926 **G-CEM ONE Value Refill Transluzent**
Inhalt pro Value Refill: 8 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 60 x GC Automix Tips Regular, 20 x GC Automix Endo Tips; Preis pro Packung 399,00 EUR

Art.-Nr. 10006833
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; Preis pro Packung 68,10 EUR

Zubehör:
Art.-Nr. 10003289 **Automix Tip for Endo**
10 Stk. mit Verlängerungstip; 13,00 EUR
Art.-Nr. 10003335 **Automix Tip Regular**
10 Stk.; 12,00 EUR



PREISVORTEIL
Initial LiSi Block + G-CEM ONE
355,- EUR
anstatt 429,30 EUR
Preis pro Packung

Zusatzware im Bundlepack bereits inkludiert

Art.-Nr. 10007571
Initial LiSi Block + G-CEM ONE Starter Kit
Inhalt: Initial LiSi Block (5 Blöcke A2 LT, 5 Blöcke A2 HT, 5 Blöcke A3 HT), 1 G-CEM ONE Starter Kit A2 (1 Spritze G-CEM ONE A2 (4,6 g), 8 GC Automix Tips Regular, 2 GC Automix Endo Tips, 1 G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml)

G-CEM ONE Universal Kits

Universelles, selbstadhäsives Befestigungs-Composite




NEU

Vereinfachtes Universal-Adhäsiv in nur einer Flasche dank G-Premio BOND:

- Die Kombination aus drei funktionellen Monomeren, sorgt für eine optimale Haftung – nur ein Adhäsiv für alle direkten und indirekten Workflows!
- Das preisgekrönte Flaschendesign gewährleistet eine sehr präzise Anwendung.
- Einfache Anwendung: G-Premio BOND auftragen, 10 Sekunden warten, Luft trocknen, Lichthärtung für 10 Sekunden. Kompatibel mit allen Ätzverfahren (Self-Etch, Selektive und Total-Etch).

Farben G-CEM ONE & G-CEM ONE Universal

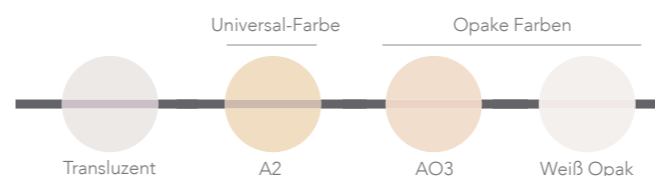

Befestigungslösungen

Der GC „Luting Guide“ Befestigungsleitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Materials. Er enthält darüber hinaus Informationen zu den einzelnen Befestigungsschritten.



Angaben zur klinischen Situation
Auswahl des Materials

GC Befestigungsleitfaden
Auswahl des richtigen Materials für jede Indikation

Zum Downloaden in App-Store:



Entdecken Sie den **GC Luting Guide!**



Individuelle Schritt-für-Schritt-Anleitung

Auswahl des Materials

GC FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Gasionomer für Zuverlässigkeit und angenehmen Komfort

Einen Schritt voraus

Ein neues Dosiersystem und die Möglichkeit der Lichthärtung zur Entfernung von Rückständen machen die Zementierung einfacher denn je. Darüber hinaus besticht FujiCEM Evolve durch verbesserte Eigenschaften, wie eine höhere Röntgenopazität und einen langlebigeren Haftverbund – hauptsächlich auf Zirkonoxid.

Ideal für Metall- und Zirkonrestaurationen

- Handmischvariante oder Automix
- Keine Vorbehandlung
- Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
- Hervorragende Randdichtigkeit
- Kein Kofferdam, feuchtigkeitstolerant
- Optimale Viskosität
- Geringe Filmstärke
- Optionale Lichthärtung



Hier geht's zu den Videos

PREISVORTEIL

JETZT EINSTEIGEN

3 + 1 99,40 EUR
Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen FujiCEM Evolve zum Preis von 3!

Art.-Nr. 10004926 **FujiCEM Evolve Single Pack**
Inhalt: 1 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mischkanülen Regular

Weitere Verpackungseinheiten:
Art.-Nr. 10004916 **FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix**
Inhalt pro Triple Pack Handmix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritzen (à 9,2 g / 5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22; 216,30 EUR

Art.-Nr. 10004928 **FujiCEM Evolve Triple Pack Automix**
Inhalt pro Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click Mischkanülen Regular; 253,40 EUR

Art.-Nr. 10006621 **FujiCEM Evolve Clinic Pack**
Inhalt: 8 x GC FujiCEM Evolve syringe (9,2 g / 5,0 ml), 2 x Mixing Pad #22; 512,60 EUR

Zubehör:
Art.-Nr. 10004917 Push and Click Mixing Tips Regular (15 Stk.); 19,30 EUR

Art.-Nr. 10004929 Push and Click Mixing Tips Endo (15 Stk.); 28,90 EUR

GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter Gasionomer-Befestigungszement in Kombination mit der innovativen Force & Fusion Technologie



Verpackungseinheiten:
Art.-Nr. 10003463 **FujiCEM 2 Starter Kits – Paste Pak Dispenser**
15 Mixing tips, 5 Intra oral Tips, 1 Kartusche (13 g/7,2 ml); 254,60 EUR

Art.-Nr. 10003462 **FujiCEM 2 Starter Kits – Kunststoffdispenser**
15 Mixing tips, 5 Intra oral Tips, 1 Kartusche (13 g/7,2 ml); 179,90 EUR

Art.-Nr. 10003460 **FujiCEM 2 SL, Automix Package**
+ 44 x Mixing Tip SL FujiCEM 2 SL Automix Package (13 g/7,2 ml); 335,60 EUR

Art.-Nr. 10003459 **FujiCEM 2 SL, Refill + Mixing pad N° 22**
FujiCEM 2 SL Refill (13 g/7,2 ml); 250,80 EUR

Zubehör:
Art.-Nr. 10003465 **FujiCEM 2 Mixing Tips SL für Endo**, Nachfüllpackung (10 Stk.) (nur für FujiCEM 2 SL Kartusche geeignet); 27,90 EUR

Art.-Nr. 10003464 **FujiCEM 2 Mixing Tips SL**, Nachfüllpackung (20 Stk.), (nur für FujiCEM 2 SL Kartusche geeignet); 53,60 EUR

PREISVORTEIL

FUJICEM 2 SL CLINIC PACK

752,- EUR
anstatt 1003,20 EUR
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003469 **FujiCEM 2 SL Clinic pack**
Inhalt: 8 FujiCEM 2 SL Kartuschen (à 13,3g/7,2 ml)

PREISVORTEIL

FUJICEM 2 SL ECO PACK

376,- EUR
anstatt 501,60 EUR
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003468 **FujiCEM 2 SL Eco pack**
Inhalt: 4 FujiCEM 2 SL Kartuschen (à 13,3g/7,2 ml)



Hier gehts zur Webpage:
www.initiallisiiblock.com



GC FUJICEM EVOLVE
GC FUJICEM 2 SL
GC INITIAL LISI BLOCK



GC Initial™ LiSi Block

Vollkristallisierter CAD/CAM-Block aus Lithium-Disilikat

Stärke, Präzision und Ästhetik in einem vollständig kristallisiertem Block

Initial LiSi Block ist ein vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie (High Density Micronization) für die CAD/CAM-Zahnmedizin, sorgt für hohe Abrasionsbeständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. In Verbindung mit der ONE SQIN Technik – dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramiksistem – können Sie schnell und einfach ästhetischere Ergebnisse erzielen.



PREISVORTEIL

4 + 1 120,50 EUR
10 + 3
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.) zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.) zum Preis von 10!

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur innerhalb derselben Produktgruppe und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Farben: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, BL; Größe 14: 120,50 EUR
Packungseinheit: 5 Blöcke pro Packung

Preis pro Initial LiSi Block Packung (à 5 Stk.) 120,50 EUR

PREISVORTEIL

10% 422,82 EUR
~~469,80 EUR~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10007322 **Initial LiSi Block Aesthetic Kit**
Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, 5 Farben à 1 Block; A1 HT, A2 HT; A2 LT; A3 HT; A3 LT; Initial IQ, Lustre Paste ONE, 5 Farben à 4 g; L-NFL; L-A; L-3; L-2; L-OP; Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, Diluting Liquid, 8 ml; Refresh Liquid, 8 ml Zubehör; 422,82 EUR anstatt 469,80 EUR



Politur und Fertigstellung



1 Schleifen 2 Vorpulitur 3 Brennplatte vorbereiten 4 Kristallisation 5 Abkühlung 6 Entfernen der Brennplatte 7 Reinigung 8 Abschließende Politur
Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage. Unter Testbedingungen basierend auf Gebrauchsanweisung.

KAUFE 5 x PACKUNGEN INITIAL LISI BLOCK

1 x G-CEM ONE STARTER KIT UNIVERSAL IM WERT VON 76,30 EUR GRATIS!

KAUFE 8 x PACKUNGEN INITIAL LISI BLOCK

1 x G-CEM ONE UNIVERSAL SYSTEMKIT IM WERT VON 166,70 EUR GRATIS!

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur innerhalb derselben Produktgruppe und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Eine Kombination aus verschiedenen Aktionen ist nicht möglich.

PREISVORTEIL

Initial LiSi Block + G-CEM ONE

355,- EUR
anstatt 429,30 EUR
Preis pro Packung

Zusatzware im Bundlepack bereits inkludiert
Art.-Nr. 10007571 **Initial LiSi Block + G-CEM ONE Starter Kit**
Inhalt: Initial LiSi Block (5 Blöcke A2 LT, 5 Blöcke A2 HT, 5 Blöcke A3 HT), 1 G-CEM ONE Starter Kit A2 (1 Spritze G-CEM ONE A2 (4,6 g), 8 GC Automix Tips Regular, 2 GC Automix Endo Tips, 1 G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml)

**JETZT SYMPRESS
MISCHER GRATIS!**

EXA'lence®

Vinyl PolyEther Silikon Abformmaterial

Mit EXA'lence bringt GC die Abformtechnik auf ein neues Niveau und löst eine ganze Reihe bekannter Problemstellungen im täglichen Umgang von Abformmaterialien – Abformtechniken. EXA'lence fließt im feuchten Milieu detailgenau an die Präparation an und garantiert selbst bei feuchten subgingivalen Präparationen stets blasen- und verzugsfreie Funktions- bzw. Präzisionsabformungen. Das Ergebnis sind jederzeit reproduzierbare und absolut zeichnungsscharfe Modelle.



PREISVORTEIL

6 + 1 160,40 EUR
Preis pro Packung

Erhalte 7 Packungen EXA'lence zum Preis von 6!

EXA'lence Standard Kit, 370 ml Kartusche à 160,40 EUR;
10 Dynamic Mixing Tips, 1 Bayonet Locking Ring;
Art.-Nr. 10001518 Medium Body Regular Set
Art.-Nr. 10001519 Heavy Body Regular Set
Art.-Nr. 10001520 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Nachfüllpackung, 2 x 370 ml Kartusche à 223,10 EUR;
Art.-Nr. 10001507 Medium Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001506 Heavy Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001504 Heavy Body Fast Set

Art.-Nr. 10001512 **EXA'lence Putty 1-1 Packung**
(500 g/278 ml Base, 500 g/278 ml Katalysator, Zubehör);
144,50 EUR

Art.-Nr. 10001514 **EXA'lence Putty 5-5 Klinikpackung**
(5 x 500 g/278 ml Base, 5 x 500 g/278 ml Katalysator, Zubehör);
420,30 EUR

EXA'lence, Klinikpackung, 6 x 370 ml Kartusche à 657,80 EUR;
Art.-Nr. 10001516 Medium Body Regular Set
Art.-Nr. 10001515 Heavy Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001517 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Nachfüllpackung,
2 x 48 ml pro Refillpackung, Mischkanülen à 74,00 EUR;
EXA'lence ExtraLight Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow);
Art.-Nr. 10001524 Regular Set | Art.-Nr. 10001529 Fast Set
EXA'lence Light Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow)
Art.-Nr. 10001525 Regular Set | Art.-Nr. 10001530 Fast Set
EXA'lence Medium Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001531 Regular Set | Art.-Nr. 10001528 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001522 Regular Set | Art.-Nr. 10001526 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Rigid Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001527 Fast Set

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig,
nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Renfert Sympress Mischer
ist keine Handelsmarke von GC.

**ABFORMMATERIAL
AKTION**

**RENFERT SYMPRESS
MISCHER GRATIS!**

Kaufe GC Abformmaterial (EXA'lence) im Wert von 1890,- EUR
und erhalte einen Renfert Sympress Mischer (im Wert von 949,- EUR)
kostenlos!

GC MI BEHANDLUNGSLÖSUNGEN

GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Remineralisierende Zahnschutzcremes
mit Dreifachwirkung: Stärken, Schützen, Regenerieren.

Tooth Mousse oder MI Paste Plus?

Tooth Mousse und MI Paste Plus können für dieselben Indikationen verwendet werden. Tooth Mousse wird bei Kindern unter 6 Jahren empfohlen, um das Fluoroserisiko zu vermeiden. Außerdem eignet sich das Produkt für Fälle, in denen keine Fluorid-Ergänzung erforderlich oder erwünscht ist. Für die Anwendung über Nacht wird Tooth Mousse bis zum Alter von 12 Jahren empfohlen. MI Paste Plus kann ab diesem Alter verwendet werden.

MI Paste Plus & Tooth Mousse

- Die erste und millionenfach bewährte Zahnschutzcreme mit dem patentierten Wirkstoff Recaldent™
- Versorgt die Zähne mit der nötigen Menge an Kalzium, Phosphat und Fluorid
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Wirkt schnell und effektiv
- Zuckerfreier Zahnschutz

MI Paste Plus enthält zusätzlich 900 ppm Fluorid



RECALDENT und das RECALDENT-Logo sind Marken der Mondelez international group und werden unter Lizenz verwendet. RECALDENT™ wird aus Milchkasein gewonnen. Nicht bei Personen mit einer Milchallergie anwenden. Im Falle einer allergischen Reaktion: Anwendung abbrechen, Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.



Back to your roots!
MI treatment solutions
for root caries



PREISVORTEIL

PROMOPACKUNG

5 + 1 103,90 EUR
Preis pro Packung



Art.-Nr. 10003210 **Tooth Mousse Bundlepack**
Inhalt: 5 Tuben Tooth Mousse (je Geschmacksrichtung)
1 Tube Mint, Melone, Vanille, Tutti-Frutti, Erdbeere)
+ 1 Tube Tooth Mousse gratis!
Gratisware ist im Bundlepack bereits inkludiert.

Nur gültig für Tooth Mousse Promopackung



PREISVORTEIL

PROMOPACKUNG

5 + 1 112,40 EUR
Preis pro Packung



Art.-Nr. 10003271 **MI Paste Plus Bundlepack**
Inhalt: 5 Tuben MI Paste Plus (je Geschmacksrichtung)
1 Tube Mint, Melone, Vanille, Tutti-Frutti, Erdbeere)
+ 1 Tube MI Paste Plus gratis!
Gratisware ist im Bundlepack bereits inkludiert.

Nur gültig für MI Paste Plus Promopackung



EPITEX

Kunststoff-Finier- und Polierstreifen

Leichtes Finieren und Polieren von interdentalen Räumen,
geeignet für Glasionomer- und Composite-Füllungen.



- Für sehr geringe interproximale Abstände geeignet
- Praktischer Streifenspender
- Auch als Matrizenband erhältlich
- Sehr langlebig
- Schleifpartikel mit dem Trägermaterial verschleißt
- Extrem dünn und flexibel, besonders reißfest
- Vier Körnungen

PREISVORTEIL

5 + 1! AB 42,- EUR
Preis pro Packung

Erhalte 6 Packungen EPITEX zum Preis von 5!

Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit
und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000117 **EPITEX Starter Kit**; 208,10 EUR
Inhalt: Ständer mit Spender für alle erhältlichen
Körnungen je 10 m (grob-blau, mittel-grün, fein-grau,
X-fein-rot)

Einzelpackungen (Inhalt: 10 m); 42,00 EUR
Art.-Nr. 10000122 **EPITEX Refill, Translucent Matrix**
Art.-Nr. 10000118 **EPITEX Refill, Coarse (grob-blau)**
Art.-Nr. 10000120 **EPITEX Refill, Medium (mittel-grün)**
Art.-Nr. 10000119 **EPITEX Refill, Fine (fein-grau)**
Art.-Nr. 10000121 **EPITEX Refill, X-Fine (x-rein-rosa)**





REFERENT
ZTM Andreas Wunsch

1 KURS WANN
19. April 2024
15.00 – 17.00 Uhr

04. Oktober 2024
14.00 – 16.00 Uhr

ZFP-FORTBILDUNG 3 Punkte

TEILNEHMER max. 16

KURSGEBÜHR
Mitglieder ÖGZMK 120,- EUR
Nichtmitglieder 150,- EUR

2 KURS WANN
20. April 2024
08.30 – 11.30 Uhr

5. Oktober 2024
08.30 – 11.30 Uhr

ZFP-FORTBILDUNG 4 Punkte

TEILNEHMER max. 16

KURSGEBÜHR
Mitglieder ÖGZMK 135,- EUR
Nichtmitglieder 165,- EUR

1 2 KURS ORT
Fortbildungsakademie
ZAHN
Garnisonstraße 7
4010 Linz

1 2 KURS ANMELDUNG
ÖGZMK OÖ
Postfach 603 | 4021 Linz
office@oegzmkoee.at

In Zusammenarbeit mit



A 1

Schnell und effizient zur provisorischen Restauration

Die Herstellung einer temporären Versorgung ist im wesentlichen Bestandteil des Herstellungsprozesses von festsitzendem Zahnersatz. Als zeitlich begrenzte Versorgung erfüllt das Provisorium vielfältige Aufgaben: Es schützt die präparierte Zahnschicht vor thermischen, chemischen, mechanischen und mikrobiellen Reizen. Es dient dem Erhalt von Okklusion und Kaufunktion, stellt Ästhetik und Phonetik wieder her und sichert die Zahnposition.

- Theoretische Grundlagen
- Praktische Abformung des Situationsmodells
- Fertigung einer Einzelkrone und einer dreigliedrigen Brücke
- Die 4 wichtigsten Tipps zur Herstellung provisorischer Kronen und Brücken

REFERENT
ZTM Andreas Wunsch

KURS A
Kurs-Nr. AF-0901
WANN
15. November 2024
9.00 bis 13.00 Uhr

ZFP-FORTBILDUNG 5 Punkte

TEILNEHMER max. 16

KURSGEBÜHR
210,00 EUR Zahnärzt:innen
105,00 EUR Student:innen

KURS B
Kurs-Nr. AF-1106
WANN
15. November 2024
13.30 bis 17.30 Uhr

ZFP-FORTBILDUNG 5 Punkte

TEILNEHMER max. 16

KURSGEBÜHR
200,00 EUR Zahnärzt:innen
100,00 EUR Student:innen

KURS A B
ORT
Zafi Wien

KURS A B ANMELDUNG
Zahnärztliches Fortbildungsinstitut der Landes Zahnärztekammer für Wien
Gumpendorfer Strasse 83
1060 Wien
Tel. 0043 1 5973357
www.zafi.at

In Zusammenarbeit mit



Reparatur-Workshop

2

Einfach Reparatur schnell und effizient

In diesem Seminar werden kleine Reparaturen, die in der Ordination durchgeführt werden, können theoretisch erläutert und praktisch erprobt.

- Sprung- und Bruchreparaturen
- Kunststoffergänzungen
- Wiederbefestigung von Zähnen

Voraussetzung für ZAss: Positiver Abschluss der Ausbildung in der Zahnärztlichen Assistenz

Hands-on-Kurs
(vom Abdruck bis zum fertigen Werkstück)

B

Tipps und Tricks in der Prothetik

- Kommunikation zwischen Zahnarzt und Zahntechniker
- Die exakte Abformung – worauf muss geachtet werden?
- Analoge vs. Digitale Abformung
- Anschließende Beurteilung des Abdruck
- Unterschiedliche Abdruckmaterialien
- Farbwahl
- Bissnahme – welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung?
- Retraktionsfäden vs. Retraktionspaste
- Werkstoffkunde
- Behind the scene – Was geschieht im Labor? Anfertigung einer Krone im Labor (Step by Step)
- Hands on

Mastering Composites Workshops

Injection Moulding Technique

Kreative Zahnheilkunde, die verblüfft und Spaß macht

- Theorie
- Hands-on
 - 1.2 Veneers Front
 - 2.1 occlusal Veneer
- Anfertigung und Vorbereitung des Übertragungsschlüssels für OK Veneers
- Isolierung des Modells mittels Teflonband
- Injection Moulding der 2 Veneers
- Anfertigung und Vorbereitung des Übertragungsschlüssels für OK 1.6 okklusales Veneer
- Richtige Oberflächenbehandlung



In Zusammenarbeit mit



REFERENT
Dr. Artur Grila

WANN
Freitag, 22. März 2024
14.00 Uhr – 19.00 Uhr

WO
UKH Linz,
Seminarraum 1+2
4010 Linz

ZFP-FORTBILDUNG
6 Punkte

KURSGEBÜHR
Mitglieder ÖGZMK 369,- EUR
Nichtmitglieder 409,- EUR

TEILNEHMER 10

ANMELDUNG
ÖGZMK OÖ
Postfach 603 | 4021 Linz
office@oegzmkoee.at

Get Connected SMILE Program Lernen, teilen, profitieren.

GC Get Connected – alles in einer App!

Nutzen Sie die Chance, sich jeder Zeit über GC und unsere Produkte zu informieren – laden Sie sich die GC Get Connected App auf Ihr Handy. Stöbern Sie online in unserer Bibliothek, sehen Sie Anwendervideos, erfahren Sie mehr zu Fortbildungen oder Events und erhalten Sie Informationen zu unseren Produkten. Sammeln Sie Smiles, indem Sie Artikel teilen, an Umfragen teilnehmen und sich für Fortbildungsveranstaltungen anmelden. Bei GC sind Smiles mehr wert – lernen, teilen, profitieren. Laden Sie sich jetzt das Get Connected Smile Program auf Ihr Handy.



GET THE APP

Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!






Vortrag und Workshop

Handwerk

Innovative Techniken, Trends und Tipps in der konservierenden Zahnheilkunde

In diesem Referat werden mehrere spannende und herausfordernde Patientenfälle vorgestellt. Dabei berücksichtigt man neue innovative Techniken, Materialien und Behandlungsoptionen. Das in diesem Vortrag präsentierte konservierende Behandlungsspektrum erstreckt sich von der Einzelzahnrestauration über die Quadrantensanierung bis zur Versorgung des Abrasionsgebisses, wobei sich der non-invasive oder minimal-invasive Behandlungsansatz wie ein roter Faden durch den gesamten Vortrag zieht.

Im anschließenden Workshop werden verschiedene Restaurationsoptionen von den Kursteilnehmern durchgeführt.

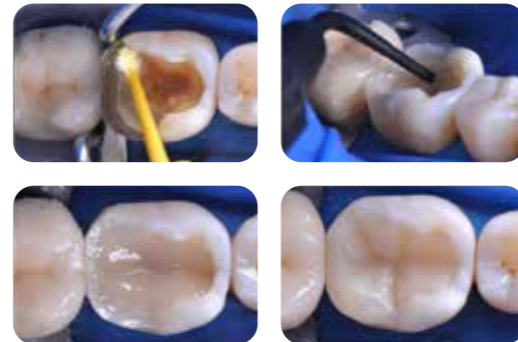

Workshop

Glasfaserverstärkte Composite-Restaurationen

Kreative Zahnheilkunde, die verblüfft und Spaß macht

Ist ein Zahn trotz großem Engagement und Behandlungsaufwand nicht mehr zu erhalten, stellt sich spätestens post extractionem die Frage, wie die entstehende Lücke provisorisch und definitiv zu versorgen ist.

Konventionelle Interimsprothesen bedingen nicht nur eine schlechte Akzeptanz der Patienten, sondern vor allem im Frontzahnbereich einen starken Verlust der natürlichen Weichgewebsarchitektur. Definitive prothetische Lösungen sind invasiv und führen nicht selten, aufgrund einer kritischen Pfeilbewertung, zu weiteren Extraktionen. Implantologische Versorgungen sind meist nicht ad hoc indiziert und erfordern während Ab- und Einheilungszeit vor allem im Frontzahnbereich auch eine sofortige Versorgung.

Wie wäre es, den extrahierten Zahn als Brückenglied direkt post extractionem als Immediatversorgung wieder einzukleben, sodass das Extraktionstrauma für den Patienten wesentlich geringer ist und gleichzeitig für eventuell spätere prothetische oder implantologische Maßnahmen die Weichgewebsarchitektur weitestgehend erhalten bleibt?

Glasfaserverstärkte Composite-Restaurationen eröffnen dem Zahnarzt ganz neue kreative Möglichkeiten bei hoher Erfolgsrate und guter Wirtschaftlichkeit. Viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten dieser bewährten Technologie werden im Vortrag besprochen, so z. B.:

- Herstellung direkter und indirekter Glasfaser-Composite-Brücken im Front- und Seitenzahnbereich/Glasfaser-Marylandbrücken
- Schienung parodontal oder traumatisch geschädigter Zähne
- KFO-Retainer
- Glasfaser-verstärkte Langzeitprovisorien in der Implantologie
- Herstellung individueller Glasfaser-Stiftaufbauten



Praktischer Arbeitskurs

Adhäsivsysteme und Lichtpolymerisationsgeräte optimiert einsetzen

In diesem praktischen Arbeitskurs können die Teilnehmer die verschiedenen Adhäsivsysteme an vorbereiteten Proben die Wirksamkeit der eigenen Anwendung mit Hilfe einer mobilen Scherkraft-Messapparatur prüfen. In praktischen Übungen wird anschaulich demonstriert, wie unsichere Abstützung, Veränderungen des Einfallwinkels und unzureichende Belichtungszeiten die effektiv in der Kavität ankommenden Lichtenergien des eigenen mitgebrachten Lichtgerätes beeinflussen können. Der praktische Übungskurs soll die Möglichkeit geben, die eigene Handhabung bei techniksensiblen Arbeitsschritten direkt zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Kursinhalt

- Haftmechanismen an Zahnhartsubstanz
- Adhäsivsysteme
- Verarbeitungshinweise
- Anwendung der Adhäsivsysteme
 - zur Eingliederung indirekter Restaurationen
 - zur intra-oralen Reparatur von Restaurationen
 - zur Verankerung von Stiftsystemen
- Lichthärtung

Praktische Übungen

- Applizieren von Adhäsiven in Kombination mit der Etch&Rinse-Technik und/oder als selbststützende Adhäsivsysteme an plan geschliffenen extrahierten Zähnen und Überprüfung der eigenen Applikationstechnik an einer mobilen Scherkraft-Messapparatur
- Messung der effektiven Lichtwirkung der eigenen mitgebrachten Lichtgeräte an kalibrierten Messeinheiten eines Phantomkopfes
- Prüfung der eigenen Handhabung von Lichtgeräten am Phantomkopf durch Messung der effektiven Lichtmenge in simulierten Kavitäten

Workshop

MIH – Neuigkeiten und aktualisierte Therapieempfehlungen für betroffene Molaren und Inzisiven

Als Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) werden qualitative und quantitative Veränderungen des Zahnschmelzes charakterisiert, welche als weiße, gelbliche oder bräunliche Opazitäten des Zahnschmelzes imponieren und oft an bleibenden Frontzähnen und/oder Molaren aufgefunden werden. Wenn diese Strukturstörungen eine scharfe Abgrenzung zum gesunden Zahnschmelz aufweisen, können sie dem MIH-Formenkreis zugeordnet werden. Betroffene Frontzähne zeigen in erster Linie Opazitäten unterschiedlicher Farbgebung und Ausweitung. Diese können jedoch das

ästhetische Erscheinungsbild des betroffenen Patienten stören und sogar die Lebensqualität beeinträchtigen. Am Anfang noch als Zufallsbefund abgetan, hat dieses Krankheitsbild mittlerweile große klinische Relevanz erreicht. Der Workshop soll einen kurzen Einblick in die rezente Ätiologie und die Diagnostik sowie die therapeutischen Möglichkeiten anhand des neuen Würzburger Konzeptes geben. Dabei wird es insbesondere um die Versorgung betroffener Molaren gehen. Dazu sind Hands-On Übungen geplant.



REFERENT

Dr. Uwe Blunck

WANN

Samstag, 15. Juni 2024
09.00 – 18.00 Uhr

WO

ZAFI
Gumpendorfer Str. 83/4
1060 Wien

ZFP-FORTBILDUNG 8 Punkte

TEILNEHMER max. 15

KURSBEBÜHR

Zahnärzt:innen 500,- EUR
Student:innen 250,- EUR

ANMELDUNG

Kurs-Nr. AF-0607

Zahnärztliches
Fortbildungsinstitut der
Landeszahnärztekammer
für WienGumpendorfer Straße 83
1060 Wien

Tel. 0043 1 5973357

www.zafi.at



REFERENT

Dr. Stephan Höfer

WANN

Freitag, 12. April 2024
09.00 – 17.00 Uhr

WO

ZAFI
Gumpendorfer Str. 83/4
1060 Wien

ZFP-FORTBILDUNG

8 Punkte

KURSBEBÜHR

Zahnärzt:innen 450,- EUR

ANMELDUNG

KURS-NR. AF-0407

Zahnärztliches
Fortbildungsinstitut der
Landeszahnärztekammer
für WienGumpendorfer Straße 83
1060 Wien

Tel. 0043 1 5973357

www.zafi.at

In Zusammenarbeit mit



REFERENTIN

Prof. Dr. Katrin Bekes

WANN

Mittwoch, 24. April 2024
15.00 – 19.00 Uhr

WO

Henry Schein Dental Austria
GmbH Wien
Schönbrunner Straße 297
1120 Wien

KURSBEBÜHR

249,- EUR zzgl. MwSt.

FORTBILDUNGSPUNKTE

Workshop ist im Rahmen
des ZFP der OZAK mit
FB-Punkten approbiert

KONTAKT/ANMELDUNG

Henry Schein Dental Austria
carola.samwald@henryschein.at

Workshop Kurs-Nr. AT0313



REFERENT

Zahnarzt Georg Benjamin

1 WANN KURS

Kurs-Nr. AF-0313
Freitag, 01. März 2024
09.00 – 17.00 Uhr

2 WANN KURS

KURS-NR. AF-1005
Freitag, 11. Oktober 2024
09.00 – 17.00 Uhr

WO

ZAFI Wien

KURSBEBÜHR

Zahnärzt:innen 500,- EUR
Student:innen 250,- EUR

ZFP-FORTBILDUNG

9 Punkte pro Kurs

ANMELDUNG

Kurs-Nr. AT-0313
Kurs-Nr. AF1005
Zahnärztliches
Fortbildungsinstitut der
Landes Zahnärztekammer
für Wien
Gumpendorfer Straße 83
1060 Wien
Tel. 0043 1 5973357
www.zafi.at

In Zusammenarbeit mit



1 Frontzahnästhetik – das nächste Level

Wir werden uns in diesem Kurs auf Frontzahnrestaurationen fokussieren. Dabei werden verschiedene Herangehensweisen vorgestellt.

Die Patientenzufriedenheit misst sich, insbesondere bei Frontzahnreparaturen, an der Ästhetik. Hierbei spielen neben der Farbwiedergabe eine natürliche Fluoreszenz und langanhaltender Glanz eine wesentliche Rolle. Mithilfe von modernen und hochentwickelten Universal-Compositen erreichen Sie dieses Ziel auch ohne aufwändige Schichttechniken.

Hochästhetische Füllungen lassen sich mit nur wenig Aufwand schichten. G-ænial A'CHORD, das hochentwickelte Universal-Composite mit der Einfachheit des Uni-shade-Systems, bietet dafür die besten Voraussetzungen. Mit nur 5 Core-Farben lassen sich die 16 klassischen Vita-Farben mit Leichtigkeit nachempfinden.

Dieser Kurs vermittelt Tipps und Tricks, wobei besonderen Wert auf die praktische Anwendung

Kursinhalt

- Frontzahnreparatur:
- G-ænial-Composite-Familie effizient mit wenigen Farben einsetzen
 - Wann benötigen wir eine „weiße“ Malfarbe im Frontzahnbereich?
 - Wie wendet man einen Silikon Schlüssel effizient an und wann braucht man ein direktes Mock-up?
 - Composite-Injektions-Technik

Workshop Kurs-Nr. AF1005

2 Composite Workshop Seitenzahn

Wir arbeiten täglich mit Composites, aber wie gelingt es uns gute direkte Seitenzahnrestaurationen zu gestalten. Dieser Kurs vermittelt Tipps und Tricks wobei besonderen Wert auf praktisches Arbeiten gelegt wird, um Ihnen die Umsetzung der gezeigten Techniken in der Praxis zu erleichtern.

Kursinhalt

- Crashkurs Kofferdam
- Matrizenkunde im Seitenzahnbereich
- Mit einfachen Tricks weniger einschleifen
- Direkte postendodontische Versorgung mit Glasfaser-Composite
- Malfarben im Seitenzahnbereich

- Wie erreicht man mit einfachen Mitteln schönere Ergebnisse im Seitenzahnbereich?
- Mit wenig Aufwand hohe Randleisten gestalten
- Composite extrem – die neuen Indikationen erlauben den Ersatz von mehreren Höckern mit Composite. Der Einsatz von injizierbarem Material macht Seitenzahnfüllungen mit Höckerersatz einfacher und spart Zeit
- Direkte postendodontische Versorgung – sind Glasfaserstifte out? Das glasfaserverstärkte everX Flow gibt dem Praktiker ein risshemmendes Material, das den Zahn stabilisiert.
- Wann macht die Benutzung von Composite-Malfarben Sinn

2-Tages-Workshop (Theorie & Hands-on)

Adhäsiv befestigte indirekte Restaurationen: Das No-Finishing-Konzept

TAG 1: Die adhäsive Zahnheilkunde hat unser Fachgebiet grundlegend verändert und buchstäblich umgestaltet, und zwar in Richtung auf wesentlich langlebigere und ästhetischere Zahnrestaurationen. Nicht nur, weil die Restaurationen selbst gut funktionieren, sondern vor allem, weil mehr Zahnsubstanz erhalten werden konnte. Die Philosophie der Bio-Emulationsgruppe lautet: „Beobachten, bewahren und konservieren“. Die Wiederherstellung der anatomischen Form und der optischen Merkmale eines intakten Zahns ist nach wie vor eine mühsame und schwierige Aufgabe, die sowohl im klinischen als auch im zahntechnischen Bereich zuweilen schwer zu bewältigen ist. Einer der Schlüssel zur Langlebigkeit von indirekt adhäsiven Restaurationen ist ihre Fähigkeit, das Anhaften von bakterieller Plaque an ihrer Oberfläche zu verhindern. In diesem Vortrag wird daher ein klinisches Protokoll beschrieben, mit dem sich möglichst glatte prothetische Ränder erzielen lassen, ohne dass auf herkömmliche Finier- und Poliertechniken zurückgegriffen werden muss, die mühsam und zeitaufwändig sind.

Vertikale Präparationen für Kronen: eine 10-Punkte-Übersicht

TAG 2: In den letzten 15 Jahren wurde jedoch eine neue dichte Keramik namens Zirkoniumdioxid für die prothetische Versorgung verwendet. Dabei ermöglicht die Kombination einer peripheren Präparation mit vertikalen Finishing-Linien in Verbindung mit einem stiftfreien, faserverstärkten Composite-Abutment und Zirkonoxid als prothetischem Material eine Verstärkung der zuvor präparierten Zähne. Dieser Ansatz verbessert somit die Langzeitprognose von stark unterminierten Zähnen und ist eine vielversprechende Alternative zu konventionellen Schulter-/Stufenpräparationen und postretinierten Abutments.



REFERENT

Dr. David Gerdolle

WANN

20. und 21. September 2024
09.00 – 18.00 Uhr

WO

Zahnklinik der Sigmund Freud PrivatUniversität
Freudplatz 3
2. Stock | 1020 Wien

KURSBEBÜHR

1590,- EUR inkl. MwSt.

TEILNEHMERANZAHL 16

FORTBILDUNGSPUNKTE

Workshop ist im Rahmen des ZFP der OZAK mit FB-Punkten approbiert und wird separat in Rechnung gestellt.

KONTAKT/ANMELDUNG

T: 03124.54020
info.austria@gc.dental



D. Gerdolle

Simplifying Excellence with Ortho Experts on Stage

Friday, 7th June 2024

10:00 am - Noon Dr. Secchi
Several cases with different Malocclusions & Clinical Situations will be reviewed
Noon - 1:00 pm Businesslunch
1:00 pm - 2:30 pm Dr. Garcia-Baeza
Excellence in Aesthetics and Adult Treatment
2:30 pm - 3:00 pm Coffee break
3:00 pm - 4:30 pm Dr. Liebl
From «hybrid» advice to finishing. The digital workflow from planning to indirect bonding to the «in-house aligner».

Saturday, 8th June 2024

9:30 am - 11:00 am
Dr. Liebl The Transverse:
My most important two Minutes; Dr. Secchi Treating Class II & III; Malocclusions with CCO System Part I; Dr. Garcia-Baeza What I was not Ready for Part I
11:00 am-11:30 am Coffee break
11:30 am-1:00 pm
Dr. Liebl Advanced Diagnostics by digital systems: Andrews Element III, CAC according to Hayes, DVT Dr. Secchi Treating Class II & III Malocclusions with CCO System Part II
Dr. Garcia-Baeza What I was not Ready for Part II



REFERENT

Dr. Antonino Secchi
Dr. Julia Garcia-Baeza
Dr. Oliver Liebl

WANN

07. – 08. Oktober 2024
09.00 – 17.00 Uhr

WO

Arcotel
Alpenstr. 6 | A-5020 Salzburg

Sie haben Interesse an weiteren Workshops? Hier finden Sie alle Informationen!

Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!



Die aktuellen Kurstermine für unsere Workshops finden Sie unter <https://europe.gc.dental/de-AT/education/courses>

Sponsored by



GC Orthodontics
GLOBAL EXPERTS IN ORTHODONTICS





RONALD DÖRFLINGER
Geschäftsführer
GC Austria GmbH
M: +43.664.3085320
ronald.doerflinger@gc.dental

Sehr geehrte Kunden!

Es ist uns ein Anliegen, Sie durch exzellentes Service, hochqualitative Beratung und unserem umfangreichen Fortbildungsprogramm bestens zu unterstützen. Wir sind darauf spezialisiert, mit hochqualitativen Produkten optimale Lösungen, effiziente Workflows mit vorhersagbaren und zuverlässigen Ergebnissen für Ihre täglichen Herausforderungen anzubieten und Ihnen und Ihrem Praxisteam dabei mit unseren hervorragend geschulten und erfahrenen Produktspezialisten zur Seite zu stehen. Unser Portfolio ermöglicht bei vereinfachter Anwendung, Arbeitszeitersparnis und qualitativ hochwertige Ergebnisse.

Kontaktieren Sie Ihren GC Produktspezialisten vor Ort und vereinbaren Sie einen individuellen Beratungs- oder Demotermin, ganz unverbindlich und zu Ihrem bevorzugten Zeitpunkt.

Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu mehr Effizienz und Erfolg begleiten zu dürfen!

GC Fachberater



MARIO PUSCHITZ
Leitung Produktspezialisten
Professional Service
MP Berater
M: +43.664.2218141
mario.puschitz@gc.dental




KARL KAINZ
Produktspezialist
Labor Österreich
MP Berater
M: +43.664.88610076
karl.kainz@gc.dental

für alle Gebiete



JÜRGEN DORNINGER
Produktspezialist
Ordination/Labor
Oberösterreich und
Niederösterreich
MP Berater
M: +43.664.88316617
juergen.dorninger@gc.dental

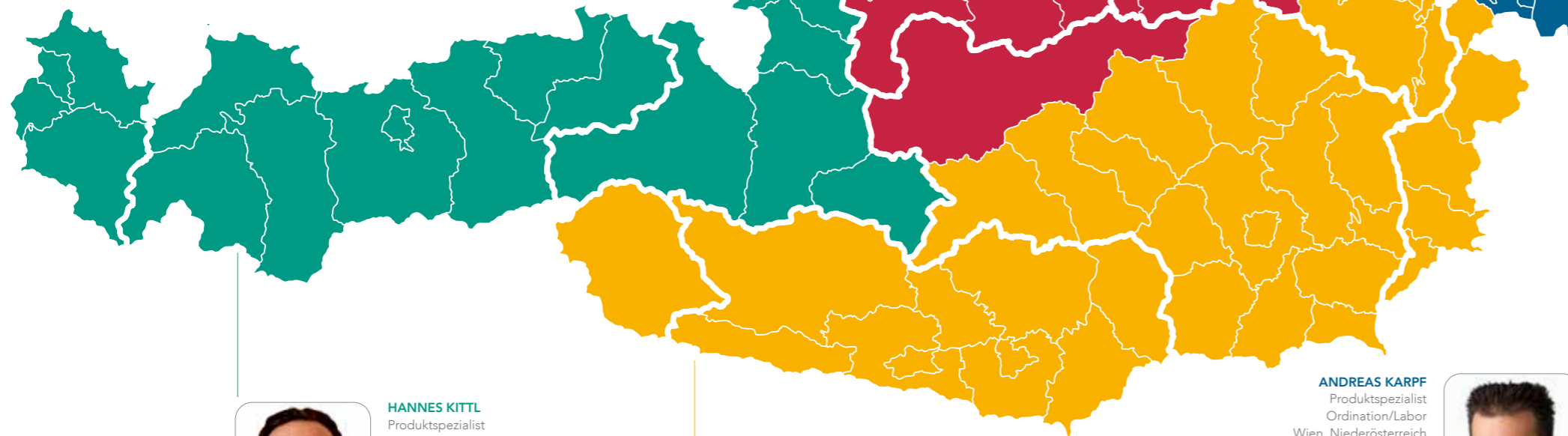

HANNES KITTL
Produktspezialist
Ordination/Labor
Salzburg, Tirol
und Vorarlberg
MP Berater
M: +43.664.3001990
hannes.kittl@gc.dental



RICHARD KOINEGG
Produktspezialist
Ordination/Labor
Steiermark, Burgenland
und Kärnten
MP Berater
M: +43.664.88102715
richard.koinegg@gc.dental



ANDREAS KARPF
Produktspezialist
Ordination/Labor
Wien, Niederösterreich
und Burgenland
MP Berater
M: +43.664.7951388
andreas.karpf@gc.dental

GC Service

Unsere besonderen Serviceleistungen



Praxisgründungsberatung
Nutzen Sie die Gelegenheit unsere Spezialisten für Ihre Praxisgründung und individuelle Beratung anzufordern.

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Praxisgründung mit optimaler, strukturierter und professioneller Produktspezifikation – und dies zu ganz besonderen Konditionen.



Inhouse – Hands-on Workshops

Unsere Produktspezialisten sind jederzeit gerne bereit in Ihrer Praxis/Ihrem Labor Sie und Ihr Team mit verschiedensten Hands-on Workshops zu unterstützen!

Inhouse-Kurse und Workshops sowie Beratung zu individuellen Themen durch unsere GC Produktspezialisten.



Kundenservice

Unser außergewöhnlicher Kundenservice mit dem jeweiligen Produktspezialisten steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Zusätzlich zu unseren bevorzugten persönlichen Kundenbesuchen bieten wir auch die Möglichkeit der Online-Beratung zu Ihrem individuellen Termin.



GC Austria GmbH



Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/gcaustriagmbh



Besuchen Sie unsere Homepage
<https://www.gc.dental/europe/de-AT>



Besuchen Sie uns auf Instagram:
gc_austria



Besuchen Sie uns auf Youtube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts

PATTERN RESIN LS

Schrumpfungsoptimierter Modellierkunststoff

Der bewährte Modellierkunststoff zum modellieren von Teleskop- und Konuskronen, Geschiebearbeiten, Klammern, Klebebrücken, Palatinalbögel, Verbindungsteilen usw. – auch als Kunststoffstumpfmateriale für die Galvanotechnik verwendbar!

- Minimale Schrumpfung: Präzise Modelle und Gussresultate
- Hohe Festigkeit und Stabilität: Sehr dünne Schichtstärken realisierbar
- Brennt rückstandsfrei aus: Glatte, saubere Gussoberfläche
- Leichtes Ausarbeiten: Kann direkt im Mund angewendet werden



PATTERN RESIN LS

METALLSTAND GRATIS!

103,30 EUR

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003198 **PATTERN RESIN LS Stand Promo**
+ Metallstand gratis!

Inhalt: 100 g Pulver, 105 ml Liquid, 2 Mixing cups,
1 Pinsel Nr.4, 1 Pipette

INITIAL CAST NP

CoCr-basierende Aufbrennlegierung für Kronen & Brücken Technik

Die Oxydbildung von Initial CAST NP ist auch nach wiederholten Keramikbränden sehr reduziert und unterstützt somit das ästhetische Ergebnis.



PREISVORTEIL

4 + 1 AB 170,20 EUR

Preis pro Packung

Kaufe 5 Packungen Initial CAST NP zum Preis von 4!

Aktion nach Absprache mit einem GC Fachberater und innerhalb gleicher Verpackungsgröße gültig.

Art.-Nr. 10003558 **Initial CAST NP, 250g**; 170,20 EUR
Art.-Nr. 10003449 **Initial CAST NP, 500g**; 317,90 EUR
Art.-Nr. 10003450 **Initial CAST NP, 1000g**; 612,40 EUR



- Kompatibel mit allen gängigen Keramikmassen WAK 14,1 x 10-6 K-1 (25-500°)
- Hervorragende Gußeigenschaften und optimales Fließverhalten
- Glatte und kompakte Oberfläche nach dem Gießen
- Extra feine Molekularstruktur
- Sehr geringe Oxydbildung
- Optimale Abstimmung mit den GC Produktlinien GC Fujivest Premium & GC Fujivest II/Einbettmassen

GET THE APP

Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!



GC Initial IQ ONE SQIN

1 Effizientes Konzept für monolithische und Cut-Back-Technik

Maximale Ästhetik in einer Mikro-Schicht!

2 „The next step“ Advanced Workshop für Ästhetik in „Rot & Weiß“

NICHT VERPASSEN UND GLEICH ANMELDEN!

Masterworkshop „rot/weiß“ 1,5-Tages-Workshop

Micro-Layering in Perfektion

- Theorie mit Fällen aus der Praxis
- Praktische Umsetzung des Initial IQ ONE SQIN Konzeptes

Die heutigen vollkeramischen Werkstoffe bieten uns herausragende Möglichkeiten, den natürlichen Zahn ohne großen Aufwand lebendig nachzubilden. Besonders Lithium-Disilikat und transluzentes Zirkonoxid sind perfekte Materialien, um Ästhetik und Effizienz ohne Kompromisse zu vereinen.

Der Vortrag wird anhand klinischer Situationen darstellen, wie ästhetische Ergebnisse durch



GC Initial IQ ONE SQIN ist ein in Farbe und Form malbares Micro-Layering-Keramiksysteem. Mit diesem können effizient und einfach hochästhetische Ergebnisse erzielt werden, welche den Vergleich mit konventionell geschichteten Restaurationen ebenbürtig sind, aber mit einem deutlichen Zeitgewinn verarbeitet werden können. Bitte Schicht- bzw. Schleifinstrumente mitbringen.

Ein Tages-Workshop mit dem Ziel eine VITA® Zahnfarbe zu reproduzieren bzw. der Einsatz der entsprechenden GUM Farben für den Zahnfleischanteil! GC Initial IQ ONE SQIN ist ein in Farbe und Form malbares Micro-Layering-Keramiksysteem. Mit diesem können effizient und einfach hochästhetische Ergebnisse erzielt werden, welche den Vergleich mit konventionell geschichteten Restaurationen ebenbürtig sind, aber mit einem deutlichen Zeitgewinn verarbeitet werden können.



REFERENT
ZTM Manfred Rochelt

WANN
1 22.02.2024 | 13 – 17 Uhr
WO
Akademie für Zahntechniker
Baden, Austria

KURS GEBÜHR
249,- EUR inkl. MwSt.

WANN
2 23.02.2024 | 9 – 17 Uhr
WO
Akademie für Zahntechniker
Baden, Austria

KURS GEBÜHR
499,- EUR inkl. MwSt.

ANMELDUNG UND INFORMATION
GC Austria GmbH
info.austria@gc.dental oder
bei Ihrem GC Fachberater



REFERENT
ZTM Stefan Roozen

WANN
04. – 05. Juli 2024

WO
Ratscher Landhaus GmbH
Ehrenhausen, Austria

KURS GEBÜHR
899,- EUR inkl. MwSt.


INFORMATION
Karl Kainz
+43.664.88610076
Karl.Kainz@gc.dental



TOPAKTUELL


CADLOCK™

Das speziell konstruierte und optimierte Geschiebe für den digitalen Workflow!

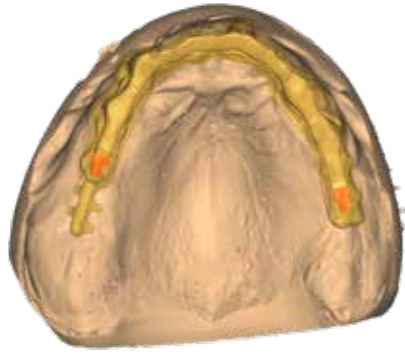

VORTEILE FÜR DAS LABOR <<


Für das CADLOCK werden STL-Datensätze für CAD-Systeme kostenfrei zur Verfügung gestellt – **einfache** und **schnelle** Einbindung in die CAD

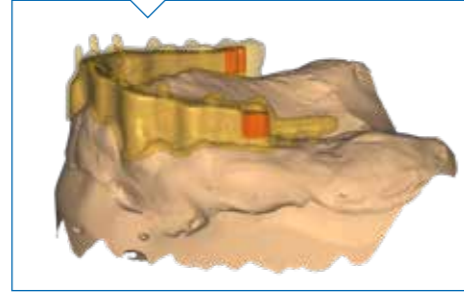


Stufenlose, einfache Einstellung der Friktion, mittels Schraube – **optimaler Halt** selbst nach Jahren, **keine Neuanfertigung**



Jederzeit austauschbares Kunststoff-Insert – **lange Haltbarkeit** und **einfache Wartung**

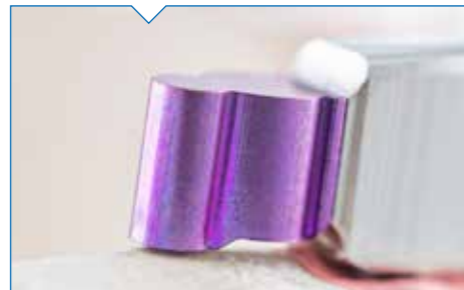

Matrize aus hochwertigem Reintitan – **langlebig, einfach** und **zuverlässig zu verkleben**

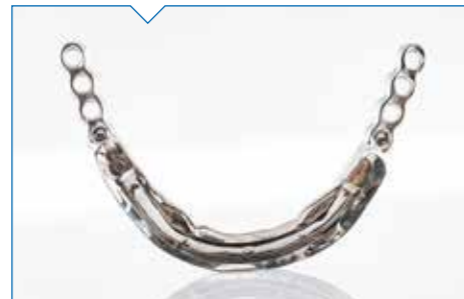

Jetzt Information anfordern!
Einfachste und schnellste
Friktionsaktivierung!

Unübertroffene kleinste Spaltmaße –
minimale Speichelansammlungen
(bakterienarm und geruchsneutral)



Perfekte Passung – kaum Nacharbeit und
Zeitgewinn



Das CADLOCK-System besteht aus **Matrize** (Ti), **Friktionseinsatz** (Kunststoff), **Aktivierschraube** (Ti) und **Patrize** (wird als STL-Datensatz zur Verfügung gestellt)



CADLOCK SET

80,- EUR ~~90,80 EUR~~
Preis pro Set

Bezugsquelle:
Zauchner Dentalprodukte GmbH
info@zauchnerdentalprodukte.at

Aadva™ Lab Scanner 3

Sie sind auf der Suche nach einem einzigartigen und mitreißenden Scan-Erlebnis?



**JETZT
NEU**

Einzigartiger gestengesteuerter Laborscanner

Der Aadva Lab Scanner 3 von GC ist ein Scanner der nächsten Generation mit zahlreichen ausgeklügelten und praktischen Funktionen. Dieser gestengesteuerte Laborscanner vereint ein einzigartiges Benutzererlebnis mit hoher Geschwindigkeit, Präzision, Flexibilität und Sicherheit, die Sie in einem modernen CAD/CAM-Workflow benötigen.

- Überzeugendes Benutzererlebnis durch patentierte Projektionstechnologie
- Schnelligkeit und Präzision vereint durch ein abgewinkeltes Doppelkamera-Set-up und Hochgeschwindigkeitsmotoren
- Einfache Positionierung durch vollautomatische Objekterkennung
- Augensicheres LED-Blaulicht
- Hybrid-Scan für das Arbeiten ohne Sägeschnitt-Modellvorbereitung.
- Smart Occlusion für das Arbeiten ohne vestibulär Scan.

AADVA ALS 3

14.999,- EUR

Aadva™



Sie möchten unseren
ALS 3 testen?



Kontaktieren Sie unseren
Laborspezialisten
Herrn Karl Kainz für
eine unverbindliche
Teststellung unter
karl.kainz@gc.dental
oder telefonisch unter
0664.88610076



Das speziell konstruierte und optimierte Attachment für CAD-Anwendungen! CADLOCK ist ein starres, extracoronales, feinjustierbares Halteelement für die prothetische Versorgung mit Freiend- und Schaltprothesen. Die moderne und langlebige Lösung für Ihre Kombiarbeiten mit softgleitenden Attachments.



ANWENDUNGSBEREICH
Freiend- und Schaltprothesen; ideal für Stege aus Kobalt-Chrom, Titan oder Zirkonoxid



- VORTEILE FÜR DIE PRAXIS**
- Einfache Einstellung der Friktion chairside
 - Keine zusätzlichen Hilfsmittel und Instrumente zur Justierung erforderlich
 - Zufriedene Patienten durch geruchsneutrale und wartungsfreie Konstruktion
 - Einfaches, softgleitendes Eingliedern für den Patienten
 - Höchste Präzision für eine langlebige Versorgung

Art.-Nr. 4331 **Matrize, kpl. mit Patrize (Kst)**
Art.-Nr. 738 **Matrize inkl. Friktionseinsatz und Aktivierschraube**
Art.-Nr. 737 **Friktionseinsatz**
Art.-Nr. 726 **Aktivierschraube**
Art.-Nr. 750 **Parallelhalter**
Art.-Nr. 572 **Schraubinstrument**

GC FUJIVEST® PLATINUM II

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Platinum II ist eine Einbettmasse, die speziell für Edel- und Halbedelmetalllegierungen geschaffen wurde. Mit ihrer langen, komfortablen Verarbeitungszeit und der verbesserten Fließfähigkeit wird das Einbetten bei schwierigen Fällen einfacher als je zuvor. Der erweiterte Ausdehnungsbereich macht diesen Premium-Werkstoff sogar noch vielseitiger. Die extrem glatte Oberfläche von Fujivest Platinum II sorgt jederzeit für hochpräzise Gussstücke. Diese Spitzen-Einbettmasse kann sowohl in Verfahren mit schneller als auch mit schrittweiser Erhitzung eingesetzt werden.

Indikationen

Präzisionseinbettmasse für schnelle und konventionelle, schrittweise Erhitzungsverfahren. Für Edelmetall-, Halbedelmetall und auf Palladium basierende Legierungen.

- Längere Verarbeitungszeit, bessere Fließfähigkeit
- Sorgt für eine perfekte Passung bei schwierigen Fällen, wie Implantat-Suprastrukturen und weit spannende Brücken
- Äußerst glatte Werkstückoberflächen
- Einfach zu steuern und großer Ausdehnungsbereich
- Einfache Entnahme, mit geringerem Risiko, die Gussstücke zu beschädigen

PREISVORTEIL

15 % AB **146,90 EUR**
~~172,90 EUR~~
Preis pro 150 g Packung

Art.-Nr. 10003338 **GC Fujivest Platinum II, Powder**
100 x 60 g Bags | 6 kg; 175,44 EUR anstatt 206,40 EUR

Art.-Nr. 10003339 **GC Fujivest Platinum II, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 172,10 EUR anstatt 202,50 EUR

Art.-Nr. 10003340 **GC Fujivest Platinum II, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 146,90 EUR anstatt 172,90 EUR

Liquid

Art.-Nr. 10003343 **GC Fujivest Platinum II, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml; 34,90 EUR

GC FUJIVEST® SUPER

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Super, eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für den Guss von Edelmetall-, Halbedelmetall- und palladiumbasierten Legierungen, auch für anspruchsvolle Implantatgüsse.

Indikationen

Hohe Genauigkeit für Edel- und Halbedelmetalllegierungen, sogar für weit spannende Restaurationen. Bitte fragen Sie nach unseren besonderen Verarbeitungsanweisungen für den Einsatz bei implantologischen Arbeiten.

- Schnellaufheiz-Methode
- Gesamtexpansion bis zu 2,34 % – spezielle Flüssigkeit für eine hohe Expansion erhältlich
- Cremige Konsistenz mit hoher Fließfähigkeit und hoher Benetzbarkeit für eine exzellente Detailreproduktion
- Kontrolliertes Abbinden und Wärmeausdehnung für hochpräzise Passformen
- Einfache Entnahme
- Genaue Definition für exakte Oberflächenreproduktion und präzisen Guss

PREISVORTEIL

15 % AB **151,50 EUR**
~~178,20 EUR~~
Preis pro 150 g Packung

Art.-Nr. 10001776 **GC Fujivest Super, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 151,50 EUR anstatt 178,20 EUR

Art.-Nr. 10001778 **GC Fujivest Super, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 165,10 EUR anstatt 194,20 EUR

Liquid

Art.-Nr. 10001777 **GC Fujivest Super, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml; 36,10 EUR

Art.-Nr. 10001780 **GC Fujivest Super High Expansion**
900 ml Bottle | 900 ml; 36,10 EUR

GC FUJIVEST® PREMIUM

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Premium ist eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken, geeignet für alle Dentallegierungstypen mit besonderem Schwerpunkt auf NEM-Legierungen. Egal, ob die Erhitzung schnell oder konventionell erfolgt, mit oder ohne Küvette: Die zuverlässige Expansionskontrolle von Fujivest Premium sorgt für konsistent präzise Gussstücke.

Indikationen

Geeignet für alle Dentallegierungen mit speziellem Schwerpunkt auf NEM-Legierungen. Für die Verwendung in schnellen und schrittweisen Erhitzungsverfahren.

- Bietet einen weiten Ausdehnungsbereich von bis zu 3,5 % – Implantat-Suprastrukturen mit NEM-Legierungen sind jetzt sicher und einfach
- Ermöglicht Verfahren ohne Muffeln bei schnellen und schrittweisen Aufheizprozeduren
- Hochpräzise Passformen aufgrund einfacher Expansionssteuerung mit der Anmischflüssigkeit.
- Hohe Fließfähigkeit und glatte Konsistenz
- Robuste Einbettmasse, aber einfache Entnahme

PREISVORTEIL

15 % AB **122,- EUR**
~~143,60 EUR~~
Preis pro 150 g Packung

Art.-Nr. 10003213 **GC Fujivest Premium, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 122,00 EUR anstatt 143,60 EUR

Art.-Nr. 10003214 **GC Fujivest Premium, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 139,30 EUR anstatt 163,90 EUR

Liquid

Art.-Nr. 10003215 **GC Fujivest Premium, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml; 34,90 EUR

GC LISI PRESSVEST

Phosphatgebundene Einbettmasse für Presskeramikverfahren (Typ I) Klasse 2



Einbetten und Pressen: Durch die Verwendung eines Trennmittels im Einbettmassenpulver und des GC LiSi PressVest SR Liquids wird eine „Trennschicht“ erzeugt, so dass eine leicht mit Glanzstrahlperlen abstrahlende Reaktionsschicht gebildet wird.

Indikationen

Speziell für viele Presskeramikverfahren entwickelt:

- Vollkeramische Pressverfahren: Inlays, Verblendungen und Kronen
- Überpress-Verfahren
- Hohe Fließfähigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Konstante Abbindezeit
- Bessere interne Anpassung
- Mehr zeitliche Flexibilität vor dem Brennvorgang
- Zeitersparnis – hervorragend für die Arbeitsabläufe im Labor
- Größerer Ausnutzung der Kapazität beim Anstiften auf den Sockelformer
- Problemloses Entfernen der Reaktionsschicht – keine Flusssäure

PREISVORTEIL

15 % AB **179,80 EUR**
~~211,50 EUR~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 110003664 **GC LiSi PressVest Intro Kit**
6 x 100 g Pulver, 135 ml Flüssigkeit, 30 ml SR Flüssigkeit; 58,70 EUR

Art.-Nr. 10003661 **GC LiSi PressVest**
60 x 100 g; 179,80 EUR anstatt 211,50 EUR

Liquid

Art.-Nr. 10003662 **GC LiSi PressVest Liquid**
900 ml; 42,70 EUR

Art.-Nr. 10003663 **GC LiSi PressVest SR Liquid**
100 ml; 64,60 EUR

Fordern Sie ein Demo-Set

zum Testen an!

GRADIA® PLUS

Modulares Composite-System für indirekte Restaurationen

Ein neuer Standard für natürliche Mischungen und die Reproduktion von Farben

- Innovation trifft Indikation
- Keramikpolymer-Technologie
- Rot & Weiß-Ästhetik
- Indikationsspezifische Konsistenz
- Effizient, modular und ökonomisch
- Lichthärtung: LED-Technologie



Die Familie ist größer geworden

Die neuen Farben von GRADIA PLUS



Light Body
10 zusätzliche Farben
(8 Dentine – 2 Enamels)

LB-DA1	LB-DB3
LB-DA2	LB-DC2
LB-DA3	LB-DD3
LB-DA3.5	LB-EL
LB-DB1	LB-ED

Heavy Body
8 zusätzliche Farben

HB-DA4	HB-DC2
HB-DB2	HB-DC4
HB-DB4	HB-DD3
HB-DC1	HB-DD4

35% PREISVORTEIL

C 1220,64 EUR ~~1877,90 EUR~~

GRADIA PLUS Combi-Set C
Art.-Nr. 10003562 **One Body Set** 596,00 EUR
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 674,70 EUR
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 607,20 EUR

35% PREISVORTEIL

D 847,80 EUR ~~1304,30 EUR~~

GRADIA PLUS Combi-Set D
Art.-Nr. 10003561 **GUM Set** 697,10 EUR
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 607,20 EUR

Die Farben sind auch als Einzelnachfüllpackungen erhältlich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Labolight DUO

Mit der Entwicklung der Labolight DUO bietet GC jetzt ein multifunktionelles Lichthärtegerät für den Techniker, das zwei Härtingsmodi kombiniert.

Vorhärtung – Step Modus | Endhärtung – Vollmodus

Mit der neuesten LED-Technologie

Das Labolight DUO ist mit einer zweiwelligen LED-Technologie ausgestattet, die jedes GC Composite sicher und dauerhaft härtet.

Es verfügt über einen Wellenlängenbereich von 380 nm – 510 nm mit maximalen Spektralbereichen von:

- 465 nm - 485 nm (12 blaue LEDs)
- 390 nm - 400 nm (3 lilafarbene LEDs)

Diese Technologie gewährleistet einerseits eine optimale Härtung von allen lichtgehärteten Dentalwerkstoffen und verkürzt andererseits die Lichthärtungszyklen durch die höhere Leistung.



Automatisches Drehsystem

Die Reflektionsplatte streut das Licht effektiv und belichtet Ihre Werkstoffe von allen Seiten. Auf der Halterung der Härtungslampe werden die Objekte während sämtlicher Lichthärtungszyklen sicher positioniert.



Kompaktes, ergonomisches Design

Die Labolight DUO von GC kann nicht nur den Großteil Ihrer Arbeiten fertigstellen. Es sieht dabei auch noch gut aus. Das preisgekrönte, schlanke, moderne Design mit den glatten Oberflächen lässt sich ganz einfach reinigen und in Ihrem Labor platzsparend aufstellen. Das Design ist zudem auch noch anwenderfreundlich: Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach und intuitiv. Die inneren Komponenten sind dank der breiten Öffnung leicht zugänglich.



Zwischenhärtungs-Modus



Endhärtungs-Modus

SONDERPREIS

DUO-AKTION

AB 2400,- EUR

Art.-Nr. 10001246 **Labolight DUO**
Normalpreis 3125,20 EUR

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL 4+1

Erhalte 5 Pkg. GRADIA PLUS Nachfüllpackungen (Refill) zum Preis von 4! Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

35% PREISVORTEIL

A 1527,57 EUR ~~2350,10 EUR~~

GRADIA PLUS Combi-Set A
Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 1068,20 EUR
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 674,70 EUR
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 607,20 EUR

35% PREISVORTEIL

B 2156,05 EUR ~~3317,00 EUR~~

GRADIA PLUS Combi-Set B
Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 1068,20 EUR
Art.-Nr. 10003652 **Layer Pro Set** 966,90 EUR
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 674,70 EUR
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 607,20 EUR

Jetzt mit neuer Kuvette für die Injectionstechnik.



Kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater für weitere Informationen!



Farbtabelle GRADIA PLUS



Technisches Handbuch GRADIA PLUS



Anwenderberichte GRADIA PLUS

Ein malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksyste für Lithium-Disilikat

Unsere Lithium-Disilikat-Lösungen – für Presskeramik oder CAD/CAM-Technik – überzeugen mit optimalen physikalischen und ästhetischen Eigenschaften



GC Initial LiSi Press
Pressrohling aus Glaskeramik



GC Initial LiSi Block
Lithium-Disilikat CAD/CAM-Block
für Chairside-Lösungen

Wie funktioniert es? Sie haben die Wahl ... What you paint is what you get!



Vestibulär reduziertes
(0,3 mm) Gerüst
(Zr oder LDS)



Lustre Pastes ONE
Auftragen
+ Brennen
Farbe + Fluoreszenz



SQIN
Auftragen + Brennen
Form, Textur + Glanz



FERTIG!



Monolithisches Gerüst
(Zr oder LDS)



Lustre Pastes ONE
Auftragen
+ Brennen
Farbe + Fluoreszenz



FERTIG!

G-CEM ONE

Der EINE klinische Partner für all Ihre Befestigungsindikationen. ...das optimale Befestigungsmaterial für GC Initial LiSi Block – Lithium-Disilikat CAD/CAM-Block und GC Initial LiSi Press!



THE ART OF TEAMWORK



Optimale Verklebung
von Hybrid-Abutments!

G-CEM ONE™

Extraorale Verklebungen
von Hybrid-Abutments

G-CEM ONE ist ein dualhärtendes, selbstadhäsives Befestigungs-Composite zum Verkleben aller Keramiken, Metall und Composite-Restaurationen. Die Eigenschaften und Vorteile gewährleisten zudem auch den optimalen Einsatz beim Verkleben von laborgefertigten Abutments im Labor. Durch die optimierte Dunkelhärtung gewährleistet G-CEM ONE hervorragende Ergebnisse sowie eine sichere Aushärtung - auch in Fällen in denen die Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigt ist. Durch die Verwendung von MDP in G-CEM ONE wird eine hohe und dauerhafte Haftfestigkeit sowohl zu Titan als auch zu Zirkonoxid erzielt, ohne die Vorbehandlung durch zusätzliche Primer. Bei Glaskeramiken wird die Vorbehandlung durch Silan empfohlen. Mit der dünnsten am Markt verfügbaren Filmstärke von nur 5µm gewährleistet es die optimal Passung Ihrer Prothetik.* G-CEM ONE ist in einer Automix-Spritze erhältlich und gewährleistet mit wenigen Komponenten und Arbeitsschritten reproduzierbare Befestigungsergebnisse.

Für die Befestigung wird G-CEM ONE, Farbe AO3 (opak) empfohlen. Die Spritzenöffnungen vor dem Aufsetzen der Automix-Tips überprüfen. Eine geringe Materialmenge herausdrücken und verwerfen bevor Material auf die Klebeflächen aufgetragen wird. Abhängig von Ihren ästhetischen Anforderungen, ist G-CEM ONE auch in der Farbe White Opaque (weiß opak) erhältlich.

*Alle Daten auf Anfrage erhältlich



PREISVORTEIL

4 + 1 65,80 EUR
Preis pro Packung

Erhalte 5 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 4!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Opake Farben — AO3 — Weiß Opak

Art.-Nr. 10006923

G-CEM ONE

Single Refill AO3

Art.-Nr. 10006924

G-CEM ONE

Single Refill Weiß Opak

Inhalt pro Single Refill:

1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),

8 x GC Automix Tips Regular,

2 x GC Automix Endo Tips;

Preis pro Packung 65,80 EUR

Weitere Details siehe Seite 18 im Praxisteil.

Zubehör:

Art.-Nr. 10003289

Automix Tip for Endo

10 Stk. mit Verlängerungstip;

13,00 EUR

Art.-Nr. 10003335

Automix Tip Regular

10 Stk.; 12,00 EUR

Fordern Sie die Verarbeitungsanleitung für extraorale Verklebung von Hybrid-Abutments mit G-CEM ONE an.



Aadva-Abutment mit
Titanbasis mit Schraube



Modell mit Implantatanalog
+ Abutment auf Ti-Basis
+ Gingivamaske
(okklusale Ansicht)



Implantat Analog mit
Gingiva-Maske
(laterale Ansicht)



Implantat Analog
+ Ti-Basis-Abutment
+ Vollkeramik-Krone
(Zirkonoxid-Basis)

Initial Spectrum Stains

Ästhetik durch Farbe mit InitialTM von GC – 2D- und 3D-Lösungen für malbare Keramik



Charakterisierung außen



INITIAL SPECTRUM STAIN SET
924,80 EUR
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003190 Initial Spectrum Stain Set
Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.

Ein breites Anwendungsspektrum

- Malfarben zur Charakterisierung
- Individualisierung der Schichtkeramik
- Breiter WAK-Bereich
- Kompatibel mit allen Arten der Dentalkeramik
- 1 Set für alle Initial Systeme
- 20 Pulverfarben

- SPS-17
- SPS-18
- SPS-19
- SPS-20



Hier geht es zum Technischen Handbuch:



Hier geht es zur Painting Solution Broschüre:



Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die **einzigartige revolutionäre InitialTM Spectrum Stains** beraten und **sichern Sie sich Ihre speziellen Angebote!**

OPTIGLAZE[®] color

Lichthärtende Oberflächenversiegelung zur Individualisierung indirekter Composite-Restaurationen



Zur Charakterisierung aller Composites und PMMA-Kunststoffe

- Direkte & indirekte Composite-Restaurationen
- Prothesen und Konfektionszähne
- Provisorien
- Gefräste Restaurationen mit Composite-Blocken
- Gefräste PMMA-Ronden und -Blöcke

PREISVORTEIL
20%
603,28 EUR
~~754,10 EUR~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001150 **OPTIGLAZE color Set**, 603,28 EUR anstatt 754,10 EUR
Inhalt: 1x OPTIGLAZE color A plus, 1x B plus, 1x C plus, 1x white, 1x ivory white, 1x yellow, 1x orange, 1x pink orange, 1x red brown, 1x olive, 1x grey, 1x blue, 1x lavender, 1x pink, 1x red (pro Farbe 2,6 ml); 1x OPTIGLAZE color clear, 1x clear HV, (pro Farbe 5 ml); 5x disposable pallet, 1x protective cover, 1x brush round 5 Stk. (N°1B), 1x brush flat 5 Stk. (N°1B), 2x brush holder (1 each ivory, white), 1x OPTIGLAZE color IFU, 1x OPTIGLAZE color Technique Card

PREISVORTEIL
4 + 1 AB 62,20 EUR
Preis pro Packung

Auch als Einzelpackungen erhältlich:
OPTIGLAZE[®] color Nachfüllpackung
Art.-Nr. 10001151 **OPTIGLAZE color, A plus**
Art.-Nr. 10001152 **OPTIGLAZE color, B plus**
Art.-Nr. 10001153 **OPTIGLAZE color, C plus**
Art.-Nr. 10001154 **OPTIGLAZE color, White**
Art.-Nr. 10001155 **OPTIGLAZE color, Ivory White**
Art.-Nr. 10001156 **OPTIGLAZE color, Yellow**
Art.-Nr. 10001157 **OPTIGLAZE color, Orange**
Art.-Nr. 10001158 **OPTIGLAZE color, Pink Orange**
Art.-Nr. 10001159 **OPTIGLAZE color, Red Brown**
Art.-Nr. 10001160 **OPTIGLAZE color, Olive**
Art.-Nr. 10001161 **OPTIGLAZE color, Grey**
Art.-Nr. 10001162 **OPTIGLAZE color, Blue**
Art.-Nr. 10001163 **OPTIGLAZE color, Lavender**
Art.-Nr. 10001164 **OPTIGLAZE color, Pink**
Art.-Nr. 10001165 **OPTIGLAZE color, Red**
Preis pro Einzelpackung 62,20 EUR à 2,6 ml

Art.-Nr. 10001166 **OPTIGLAZE color, Clear**
Art.-Nr. 10001167 **OPTIGLAZE color, Clear HV**
Preis pro Einzelpackung 62,20 EUR à 5 ml

GC FUJIROCK[®] EP

Eine bewährte Produktlinie in verschiedenen Versionen für alle Ansprüche und Anwendungen



20% PREISVORTEIL



GC FUJIROCK EP, Classic Line

78,16 EUR für 12 kg anstatt 97,70 EUR
Art.-Nr. 10003220 **Golden Brown**

40,64 EUR für 5 kg anstatt 50,80 EUR
Art.-Nr. 10003218 **Golden Brown**

44,80 EUR für 5 kg anstatt 56,00 EUR
Art.-Nr. 10003219 **Topaz Beige**

GC FUJIROCK EP, Premium Line

79,76 EUR für 11 kg anstatt 99,70 EUR
Art.-Nr. 10003243 **Pastel Yellow**

36,64 EUR für 4 kg anstatt 45,80 EUR
Art.-Nr. 10003242 **Pastel Yellow**
Art.-Nr. 10003244 **Polar White**
Art.-Nr. 10003245 **Inca Brown**
Art.-Nr. 10003246 **Titanium Grey**

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Angeführte Preise gelten pro Packung.

GC FUJIROCK EP Premium

Die GC FUJIROCK EP Premium Line wurde für eine Vielzahl von High-End-Techniken wie zum Beispiel Implantatsuprakonstruktionen und Vollkeramik Indikationen entwickelt.

Ein für anspruchsvolle Fälle aus GC FUJIROCK EP Premium Line gefertigtes Gips/Meistermodell erfüllt alle Anforderungen des Workflows und bewerkstelligt eine perfekte Basis für die Modellation, Zahnfleischmaske, digitales Scannen, Auf- und Anpassen Ihrer zahntechnischen Arbeit sowie das Individualisieren und Polieren.

Verhältnis Pulver/Flüssigkeit	20 ml/100 g
Manuelles Mischen	15 Sek.
Vakuummischen	45 Sek.
Abbindezeit	9-12 Min.
Entformung nach	25-35 Min.
Abbindeexpansion (nach 2 Std.)	≤ 0,09 %
Druckfestigkeit	≈ 60 Mpa



GC FUJIROCK EP Classic

Einer der weltweit beliebtesten Typ 4 Stumpfgipse mit höchster Qualität

GC FUJIROCK EP Classic, der „Klassiker“ eignet sich ideal für alle Arten von prothetischen Arbeiten. Er vereint höchste Präzision, hervorragende Kanten- und Druckfestigkeit. GC FUJIROCK EP Classic ist dünnflüssig und dennoch thixotrop und erlaubt somit beste Handlungseigenschaften und einfaches, luftblasenfreies Ausgießen. Ein wirklich perfekter Allround-Gips.

Verhältnis Pulver/Flüssigkeit	20 ml/100 g
Manuelles Mischen	15 Sek.
Vakuummischen	45 Sek.
Abbindezeit	10-13 Min.
Entformung nach	30-40 Min.
Abbindeexpansion (nach 2 Std.)	≤ 0,09 %
Druckfestigkeit	≈ 53 Mpa



GET THE APP

Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!



Initial LiSi

Verblendkeramik für Lithium-Disilikat
Ein Farbsystem – ein Schichtungssystem



Hier geht's zu den Videos

AKTION
JETZT AB 810,25 EUR
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003184 **Initial LiSi Basic Set** 732,60 EUR
Art.-Nr. 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** 887,90 EUR

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Hervorragende natürliche Ästhetik
- Niedrige Brenntemperatur und exakt aufeinander abgestimmter WAK-Wert mit sehr hoher Brennstabilität
- Umfassendes Farb- und Schichtungssystem – Initial-Konzept
- Einfache Handhabung und effiziente Verarbeitung
- Schnelle, ästhetische und wirtschaftliche Ergebnisse

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Umsteigerpaket an!

INITIAL MC
INITIAL ZR-FS
INITIAL LISI

PINSEL-SET
GRATIS

10 x Initial 20 g Refill (Initial MC, Zr-FS, LiSi)
+ 1 Pinselset gratis!
4 x Initial 50 g Refill (Initial MC, Zr-FS, LiSi)
+ 1 Pinselset gratis!

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater, innerhalb gleicher Verpackungseinheit. Farbmix möglich.

INITIAL MC
INITIAL ZR-FS
INITIAL LISI

GLAS-ANMISCHPLATTE
GRATIS

10 x Initial 20 g Refill (Initial MC, Zr-FS, LiSi)
+ 1 Glasanmischplatte gratis!
4 x Initial 50 g Refill (Initial MC, Zr-FS, LiSi)
+ 1 Glasanmischplatte gratis!

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater, innerhalb gleicher Verpackungseinheit. Farbmix möglich.

Initial Zr-FS Multiindikatives Vollkeramik-System

AKTION

JETZT AB 1898,90 EUR

Initial Zr-FS Basic + Advanced Set

Art.-Nr. 10003119 **Basic Set**; 1898,90 EUR
Art.-Nr. 10003120 **Advanced Set**; 1898,90 EUR

Art.-Nr. 10003168 **Bleach Set**; 350,90 EUR
Art.-Nr. 10003172 **Gum Shades Set**; 317,50 EUR

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Initial MC Metall-Keramik

AKTION

JETZT AB 2039,65 EUR

Initial MC Basic + Basic Plus + Advanced Set

Art.-Nr. 10003150 **Basic Set mit Pulver-Opaquer**; 1667,40 EUR
Art.-Nr. 10003111 **Basic Set mit Pasten-Opaquer**; 1508,40 EUR
Art.-Nr. 10003151 **Basic Plus Set mit Pulver-Opaquer**; 1658,80 EUR
Art.-Nr. 10003112 **Basic Plus Set mit Pasten-Opaquer**; 1551,50 EUR
Art.-Nr. 10003113 **Advanced Set**; 1019,40 EUR

Art.-Nr. 10003170 **Gum Shade Set (Pulver-Opaquer)**; 279,60 EUR
Art.-Nr. 10003171 **Gum Shade Set (Pasten-Opaquer)**; 249,10 EUR
Art.-Nr. 10003165 **Bleach Set**; 343,20 EUR
Art.-Nr. 10003181 **Initial MC Classic Line Paste Opaquer Set**; 575,10 EUR

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Initial LiSi Press

Die innovative Press-Keramik kombiniert beeindruckende Stärke mit hervorragender Ästhetik



Hier geht's zu den Videos

Das werden Sie an Initial LiSi Press lieben:

- Sehr hohe Biegefestigkeit
- Hervorragende Ästhetik
- Deutliche Zeitersparnis
- Nahezu keine Reaktionsschicht beim Ausbetten
- Schont die Antagonisten und ist abrasionsstabil

Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die einzigartige revolutionäre Initial LiSi Press Keramik beraten und holen Sie sich Ihre speziellen Angebote bei Ihrem GC-Fachberater ab.

PREISVORTEIL


4 + 1 AB 94,10 EUR
Preis pro Packung

Erhalte 5 Initial LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g) zum Preis von 4!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater




High Translucency (HT)

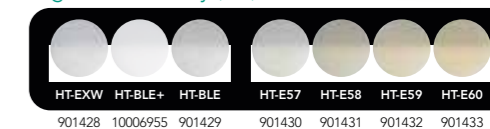


Color-Charts

Medium Translucency (MT)

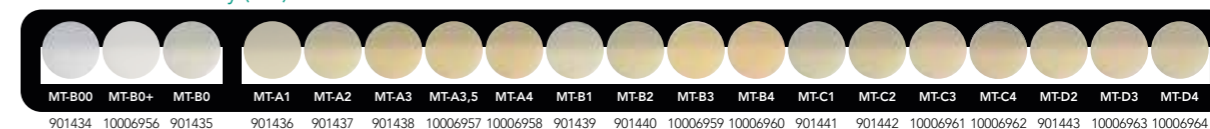


Low Translucency (LT)

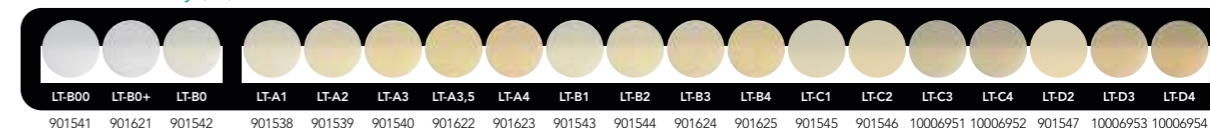

Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Medium Opacity (MO)

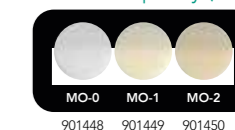

Diese Tabelle ist nur als Orientierungshilfe gedacht.

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Kalibrieraset an!

Initial™ IQ ONE SQIN

Malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksysteem

90% aller Restaurationen werden in einer Farbschlüsselfarbe bestellt ...

Seit einiger Zeit ist es möglich, Seitenzahnrestaurationen aus einem einzigen keramischen Material herzustellen, z. B. aus Lithium-Disilikat oder Zirkonoxid. Diese Werkstoffe können ohne arbeitsaufwendige Schichttechniken ausreichend ästhetisch sein. Diese Art der monolithischen Restaurationen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Mit GC Initial IQ ONE SQIN – dem malbaren Farb- und MicroLayering-Keramik-system – lassen sich auf einfache Weise ästhetisch ansprechende Restaurationen für den Frontzahnbereich herstellen. Das System basiert auf der GC Initial „IQ-Philosophie“ und besteht aus verschiedenen perfekt aufeinander abgestimmten Keramikmaterialien. Wer sie gezielt kombiniert, kann monolithische und vestibulär reduzierte Verblendgerüste effizient sowie ästhetisch überzeugend vollenden.

Wie funktioniert es? Sie haben die Wahl.

Micro-Layering-Technik (vestibulär minimal reduzierte Verblendgerüste)



What you paint is what you get!

Maltechnik (monolithische Restaurationen)



ONE SQIN-Technik – für alle Restaurationen aus Zirkonoxid und Lithium-Disilikat

- Erarbeiten der Form sowie feinsten Texturdetails im nassen Zustand – keine Veränderung durch den Brennvorgang.
- Selbstglasierende Eigenschaften – für ein schönes, glänzendes Finish nach nur einem Brand.
- Optimal eingestellte Fluoreszenz – für einen natürlichen Look in jedem Licht.
- Maximale Ästhetik in einer minimalen Schicht.

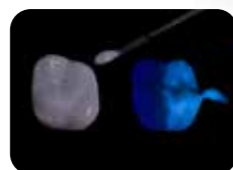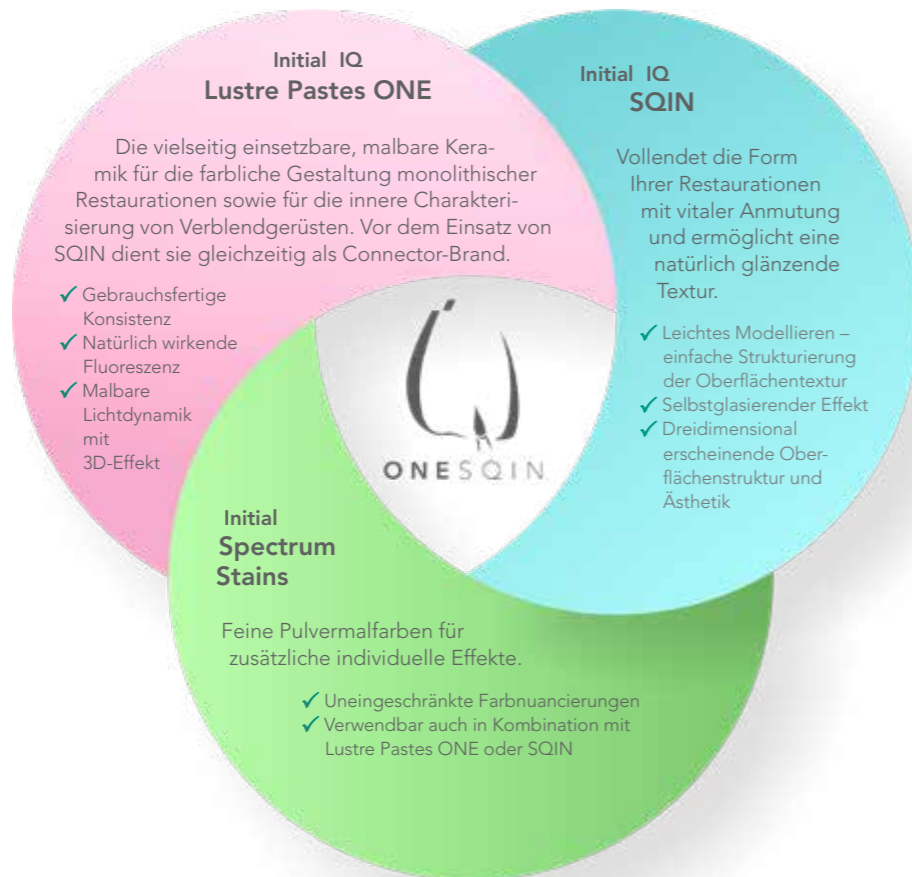

© ZTM Stefan M. Roozen

© ZTM Michael Brüsich




Verpassen Sie nicht unsere INITIAL IQ ONE SQIN Workshops!

Weitere Details entnehmen Sie bitte auf Seite 17.



INKLUSIVE HALBTAGESKURS
im Wert von 249,- EUR

Kursinformation Seite 17 oder fragen Sie Ihren persönlichen GC Fachberater.

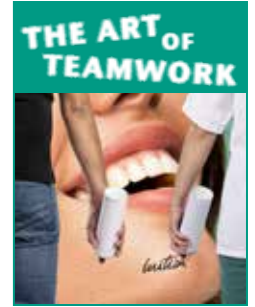

RISK-FREE EINFÜHRUNGSAKTION

1016,90 EUR ~~1412,30 EUR~~

- Art.-Nr. 10006991
Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET
10 x SPS Stain (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18/19/20), 3g
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g
1 x SPS Glaze Liquid, 25ml
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N/L-NFL), 4g;
4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A/B/C/D), 4g;
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3/6/8/9/10/OP), 4g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml
1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8ml
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml
1 x IQ LP ONE Mixing Dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00
1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Plastic Cover
1 x IQ ONE SQIN Technical Manual;
1 x IQ LP ONE Colour Chart; 1 x SPS Colour Chart

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

INITIAL IQ SQIN SHADES SET

577,80 EUR

- Art.-Nr. 10006990
Initial IQ SQIN SHADES SET
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml
1 x IQ SQIN; Technical Manual



INITIAL IQ ONE BODY LP NF GUM SHADES SET

450,- EUR


- Art.-Nr. 10003186
Initial IQ One Body LP NF Gum Shades Set
5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4 g);
4x Stain Modifier (LP-M1,M2,M3,M4)
(3g); 1 x IQ LP NF Diluting Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml);
1 x IQ LP NF mixing dish;
1 x IQ LP NF Brush A; 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml; 1 x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8ml; 1 x IQ LP ONE Mixing dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00; 1 x IQ LP ONE Colour Chart;

INITIAL IQ LUSTRE PASTES ONE


813,60 EUR

- Art.-Nr. 10007017
Initial IQ Lustre Pastes ONE – V-Shades Set
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g; 4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g; 10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4g; 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml; 1 x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8ml; 1 x IQ LP ONE Mixing dish; 1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Colour Chart

Initial™ IQ Lustre Pastes ONE V-Farben

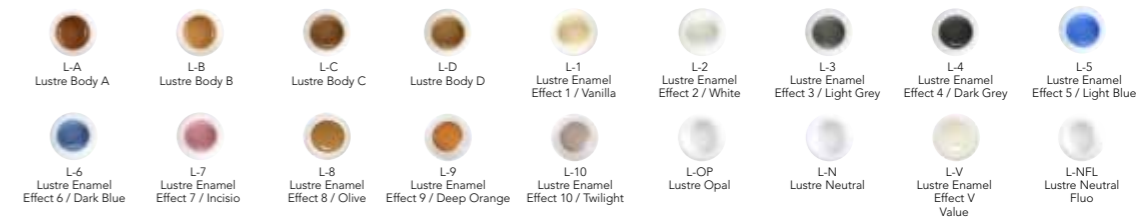

Lustre Pastes NF Gum Farben

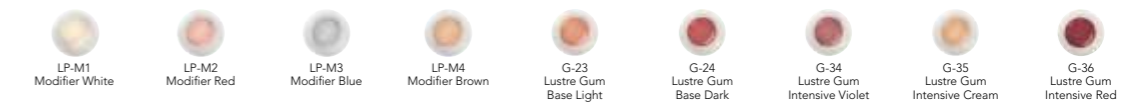

PREIS VORTEIL

4 + 1

AB 66,70 EUR

Preis pro Packung

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

GC AUSTRIA NEWS & HIGHLIGHTS

JANUAR BIS JUNI 2024

LABOR



Since 1921
100 years of Quality in Dental

