

€ 79⁰⁰





Plandent

Amber Mill Glass Ceramik Block, 450 MPa

 Freiheit und Effizienz – eines der einzigartigen Merkmale ist, dass die Transluzenz von Amber Mill nicht voreingestellt ist. Diese wird durch die Wärmebehandlung nach dem Fräsen eingestellt.

Ein Beispiel für den Farbton A1: Bestellen Sie einfach A1, dann können Sie jede Transluzenz zwischen HT-MO auswählen. Die Transluzenz ändert sich linear durch die Veränderung der Brenntemperatur.

- 2) Einfache Lagerhaltung die Freiheit der Transluzenz gibt Ihnen einen weiteren großen Vorteil, da Sie durch diese Ihren Lagerbestand minimieren können. Sie müssen nicht jeden Rohling in HT/MT/LT/MO bestellen. Lagern Sie einfach jeden Farbton und wählen Sie dann die jeweilige Brenntemperatur zur Einstellung der Transluzenz aus, welche Sie benötigen.
- 3) Wiederauswahl der Transluzenz die Transluzenz kann nachträglich von Ihnen verändern werden, indem Sie nach der Einprobe erneut Brennen. Es ist nur von hoher zu niedriger Transluzenz (HT->MT->LT->MO) änderbar und nicht umgekehrt möglich.
- 4) Breite Kompatibilität mit verschiedenen Verblendmaterialien für die Cutback-Technik können Sie jede Lithium-Disilikat-Schichtkeramik auf dem Markt verwenden. CTE (Wärmeausdehnungskoeffizient) kleiner oder gleich 10,0 × 10–6/°C sind kompatibel. Alle handelsüblichen Lithium-Disilikat Keramiken mit einer Brenntemperatur unter 850 °C sind verwendbar.
- 5) Färbung / Verglasung Co-Firing Amber wird bereits in der finalen Farbe geliefert. So können Sie leicht die Färbung und die Verglasung zugleich anwenden, um Zeit zu sparen.
- 6) Vorpolieren vor dem endgültigen Kristallisationsbrand ermöglicht das Vorpolieren den Benutzern vorhersehbare Ergebnisse, um einen natürlichen Glanz auf der Oberfläche der Restaurationen zu erhalten. Die feine Kristallgröße von Lithiumdisilikat erhöht den Glanz nach der endgültigen Kristallisation.

1 Packung, 5 Stück	ArtNr.	Preis
C14/A1	278453	€79,00
C14/A2	278454	€79,00
C14/A3	278455	€79,00
C14/A3.5	278456	€79.00







Panavia™ V5 Opaque

Für jede Befestigung.

Acrylatbasierender Zement in der Automixspritze. Als Universalzement ist PANAVIA V5 zur Befestigung aller Werkstoffe von Metall über Keramik bis zu Kompositen geeignet. Und wenn Sie in einem Labor arbeiten, dann ist es die sicherste Methode, Ihre Implantat-Abutments zu befestigen.

Clearfil™ Ceramic Primer Plus

Der neu entwickelte CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS ist ein universaler Primer für fast alle Oberflächen. Er haftet dauerhaft an Keramik (Lithiumdisilikat, Zirkonoxid), Hybridkeramik (z.B. ESTENIA™ C&B), Komposit und Metall. Das Original-MDP-Monomer gewährleistet eine sichere Haftung an Metall und Metalloxid wie z.B. Zirkonoxid.

1 Packung	ArtNr.	Preis
Farbe opaque, Spritze, 4,6 ml	244303	€ 127,50
Clearfil Ceramic Primer Plus, 4ml	244312	€98,60



Aktion: Beim Kauf von 5 Packungen Panavia™ V5 Opaque, erhalten Sie 1 weitere Packung ohne Berechnung!

ab € 125⁰⁰



kuraray Noritake

KATANA™ Zirconia Block

Der mehrschichtige KATANA™ Zirconia Block ist aus vier Zirkon-Schichten in verlaufenden Farbtönen aufgebaut. Ein zeitraubender und komplizierter Prozess der Färbung der Restauration wird damit ausgeschlossen. Dank des Zusammenspiels zwischen der herausragenden Materialtechnologie von Kuraray Noritake Dental und CEREC SpeedFire von Dentsply Sirona ist es jetzt möglich, Vollzirkon-Restaurationen innerhalb von 15 Minuten zu fräsen und 18 Minuten zu sintern.

1 Packung	ArtNr.	Preis
12Z, 5 Stück	*	€ 125,00
14Z, 5 Stück	*	€ 130,00
14Z L, 3 Stück	*	€213,00



Aktion: Beim Kauf von 5 Packungen Zirconia Blocks einer Sorte, erhalten Sie1 weitere Packung ohne Berechnung!

ab € 11310



,'GC,'

Cerasmart[™] 270

Kraftabsorbierende Hybridkeramik CAD/CAM-Block

Natürliche Passform und Flexibilität

Präzision, Stärke und Flexibilität kombiniert mit einer leicht anzuwendenden, lichthärtenden Oberflächenversiegelung

- Flexibilität für die Absorption von Stoßbelastungen
- Abrasionsstabilität für langlebige Restaurationen
- Extrem passgenaue Ränder für nahtlose Übergänge
- Hervorragende Polierbarkeit und Glanzbeständigkeit
- Optimale Fluoreszenz und Transluzenz
- · Implantatgestützte Krone
- Ersatz einer großen Composite-Restauration mit parapulpären Stiften
- Restauration eines zweiten Molaren
- · Restauration eines Quadranten

Verfügbare Farben: BL, A1, A2, A3, A3.5, B1

1 Packung, 5 Stück	ArtNr.	Preis
LT/HT 12	*	€ 113,10
LT/HT 14	*	€ 123,50
LT/HT 14L	*	€ 133,95



Aktion: Beim Kauf von 4 Packungen CERASMART™ 270 erhalten Sie 1 weitere Packung derselben Größe ohne Berechnung!

€ 71⁰⁵





Initial™ LRF BLOCK

Der leuzitverstärkter Feldspat-CAD/CAM-Block für indirekte Restaurationen

Einfach schleifen, polieren, befestigen - kein Glanzbrand!

Vorteile:

- Stark & kompakt
- Höhere Festigkeit gegenüber konventioneller Feldspat Keramikblöcken
- Kein Chipping
- Präzise Ränder

• Sehr glatte Oberflächen bereits nach dem Schleifen

Glanz & Ästhetik:


- Einfach und schnell zu polieren
- · Chameleon-Effekt

 1 Packung, 5 Stück
 Art.-Nr.
 Preis

 12, 14 u. 14L in HT oder LT
 * €71,05



Aktion: Beim Kauf von 4 Packungen Initial™ LRF BLOCKS erhalten Sie eine weitere Packung ohne Berechnung!

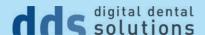



ab 9900

One4all Multi Layered Zirconia® Disc

Isostatisch gepresste Blanks aus 100% Tosoh Material

dds zirconia® one4all multi-layered - next generation dental zirconia

Das erste multi-layered Zirkonoxid für alle Indikationen – setzt mit herausragenden Materialeigenschaften neue Maßstäbe.

Die außergewöhnlich hohe biaxiale Biegefestigkeit von bis zu 1300 MPa ermöglicht die Herstellung aller Indikationen, von der Einzelzahnkrone bis zur 14-gliedrigen Brücke mit zwei Brückengliedern in Folge. Maximale Sicherheit ist auch bei implantatgetragene Konstruktionen gewährleistet, von der Hybrid-Einzelkrone bis zur All-On-X Versorgung. Industriell mit Farbpigmenten eingefärbte Blanks in 16 VITA classical® Farben (A1-D4) gewährleisten die sichere Reproduzierbarkeit der gewünschten Zahnfarbe und sind in 7 Höhen bestellbar.

1 Stück	ArtNr.	Preis
12 mm	*	€99,00
14 mm	*	€ 119,00
16 mm	*	€ 135,00
18 mm	*	€ 139,00
20 mm	*	€149,00
22 mm	*	€ 165,00
25 mm	*	€ 179,00

ab 11900 dds zirconia* ht-multi-layered high-translucent dental zirconia dds zirconia* bt-multi-layered high-translucent dental zirconia dds zirconia * bt-multi-layered high-translucent dental zi

Zirkon für höchste Ansprüche und High-End Ästhetik mit hoher Festigkeit – exklusiv bei Plandent.

- dds zirconia® ht-multi-layered Ronden Ø98mm, mit Stufe
- Fließender, natürlicher Farbverlauf durch 6 voreingefärbte Schichten
- Biegefestigkeit 1200Mpa

1 Stück	ArtNr.	Preis
12 mm	*	€ 119,00
14 mm	*	€ 139,00
16 mm	*	€ 159,00
18 mm	*	€ 179,00
20 mm	*	€ 199,00
22 mm	*	€219,00
25 mm	*	€249,00



Aktion: Beim Kauf von 3 dds Zirconia Ronden einer Sorte, erhalten Sie 1 weitere Ronde ohne Berechnung!

ab 15900



dds Zirconia® ut-multi-layered

- dds zirconia® ut-multi-layered Ronden Ø98mm, mit Stufe
- Fließend verlaufende Transluzenz wie bei einem natürlichen Zahn, 39%
 Transluzenz im cervikalen Layer und sehr hoher Transluzenz von 53% im incisalen Layer für ein Maximum an Ästhetik mit natürlichen Lichteffekten
- Abgestufte Biegefestigkeit von 1000MPa im cervikalen und 690MPa im incisalen Layer für monolithische, teilverblendete und vollverblendete Kronen und Brücken mit hoher Bruchfestigkeit und einzigartiger Antagonisten-Schonung durch reduzierte Festigkeit im okklusalen Bereich

1 Stück	ArtNr.	Preis
12 mm	*	€ 159,00
14 mm	*	€ 179,00
16 mm	*	€ 199,00
18 mm	*	€219,00
20 mm	*	€239,00
22 mm	*	€ 259,00
25 mm	*	€299,00



Aktion: Beim Kauf von 3 dds Zirconia Ronden einer Sorte, erhalten Sie 1 weitere Ronde ohne Berechnung!


€ 1.700⁰⁰

DENTAL SOFTWORKS

DS CAM V4


Der nächste logische Schritt den Arbeitsablauf im Labor zu optimieren und die Qualität zu steigern.

Dentalsoftworks hat mit ihrer neuen CAM Software CAM V4 einen Meilenstein in der digitalen Welt der Zahnmedizin gesetzt. Diese Weiterentwicklung besticht durch ihre Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Mit der schnellsten Berechnungsgeschwindigkeit und simultanem Nesting auf mehreren Fräsronden gleichzeitig steigt die Wirtschaftlichkeit in den zahntechnischen Laboren. Material und Fräser sind perfekt auf die Software und ihre Fräsmaschinen abgestimmt. Die Fräsronden werden mit dem Logo des jeweiligen Herstellers und der Rondenhöhe in der Materialbibliothek dargestellt. Somit entfällt jegliche Verwechslungsgefahr der Blanks. Mit der CAM V4 können Anwender bis zu 63 Maschinen ansteuern. Automatische Updates geben Sicherheit in der Anwendung und tragen zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Fräsergebnisse bei.

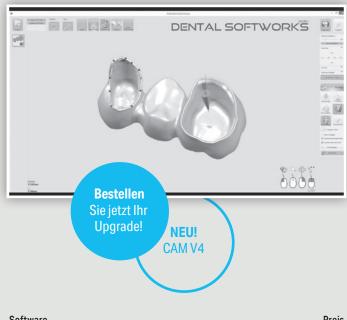

Software Preis Dental Softworks UpgradeV4 € 1.700,00*

*zusätzliche Maschinenlizenz € 1.050

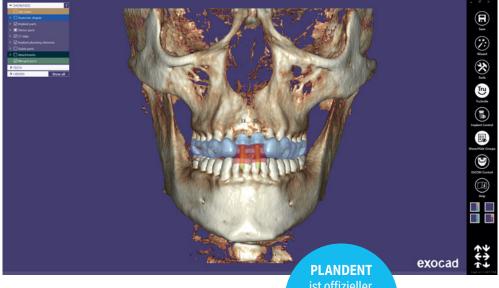



ist offizieller Vertriebspartner von exocad Darmstadt

exocad

€ 3.45000

exoplan

Ein Guter Plan

Für noch mehr Nutzen und zur idealen Ergänzung ihres digitalen Workflows! Erstellen Sie Implantatplanung und Bohrschablonendesign effizient und innovativ um anschließend im 3D Drucker oder Frässystem zu produzieren. Mit dem Guide Creator by exocad gestalten sie einfach das Design fertigen selbst oder versenden die offenen STL-Daten.

Software	ArtNr.	Preis
Bundle exoplan und Guide Creator	278674	€3.450,00





Medit T500

Dental 3D Scanner

Das Topmodell der neuen MEDIT Scanner Generation. Mit maximaler Produktivität durch ultrakurze Scan- und Berechnungszeiten, kompromissloser Präzision und zahlreichen innovativen Funktionen und Optionen setzt der MEDIT T500 neue Maßstähe

- Messgenauigkeit < 7 µm nach DIN ISO 12836
- · Modellscan in nur 12 Sekunden
- Artikulatorscan in nur 10 Sekunden. Die T-Serie ist so konstruiert, dass jeder auf dem Markt verfügbare Artikulator passt.
- Digitalisierung von Approximalräumen und hinterschnittigen Bereichen mit hoher Detailauflösung und enormer Kantenschärfe, zusätzliche Scans zum Schließen von Scanlöchern sind nicht erforderlich
- Integration von Implantatbibliotheken
- Implantatmodelle mit Gingivamaske benötigen nur 2 Scanprozesse
- Das Modul Texture Scan ermöglicht Markierungen auf dem Modell in der CAD-Software zu visualisieren
- Die Kopie von vorhandenem Zahnersatz ermöglicht die neue Funktion Replica Denture
- Keine Folgekosten für Software-Updates
- · 4 Jahre Herstellergarantie

Gerät	ArtNr.	Preis
Medit T500	279944	€7.990,00

*jährlich ab dem 2. Jahr € 910,00

Fragen
Sie Ihren Ansprechpartner nach weiteren
attraktiven BundleAngeboten.

€ 7.99000



STARTER AKTION

Medit T500 & exocad im Paket inkl. exocad Flex Lizenz Basic Dongle € 9.900,00*

exocad

Plandent ist autorisierter exocad Vertriebspartner Germany

Volle exocad Integration und offener STL-Export

ab € 12.95000



exocad

Plandent ist autorisierter exocad Vertriebspartner Germany



Aadva Lab Scan 2

Einfach, präzise, produktiv.

Einführung einfacher und einfacher Workflows mit dem Aadva Lab Scan 2 von GC. Die Kombination aus einzigartigen Scan-Funktionen und robuster Scan-Hardware erleichtert Ihre Arbeitsabläufe.

Hybrid-Scan: Dieser ermöglicht, die gesamte Modellvorbereitung zu überspringen. Scannen Sie einfach den Abdruck sowie das Gipsmodell ohne Sägeschnitt und Stumpfpräparation und die Software kombiniert beides miteinander, um Ihnen ein detailliertes, digitales Arbeitsmodell zu liefern.

Smart-Scan: Diese Funktion erstellt eine genaue Scanstrategie, um die Notwendigkeit von Neuscans zu reduzieren oder sogar auszuschließen.

Okklusions-Scan: Dank dieser Funktion erübrigt sich die Notwendigkeit eines kompletten Biss-Scans, indem einfach eine Reihe von Referenzpunkten auf den Gipsmodellen gescannt werden.

- Messfeld $80 \times 60 \times 85 \text{ mm} (X \times Y \times Z)$
- 5-MP-Kamera
- 4 µm Genauigkeit nach ISO 12836
- Sensortechnologie
- Streifenlicht-Triangulation
- Blaulicht-LED
- Monochromer Textur-Scan
- Farbtextur-Scan
- Touchscreen
- Vollautomatische Z-Achse
- Artikulator Scan
- TripleTRay Scan
- Abdruck Scan

Gerät	ArtNr.	Preis
Aadva Lab Scan 2	*	ab € 12.950,00



€ 303⁹⁰

NextDent Denture 3D+

NextDent Denture 3D+ ist ein biokompatibler Werkstoff der Klasse Ila, der zum Drucken aller Arten von herausnehmbaren Prothesenbasen geeignet ist. Dieser Werkstoff weist im Vergleich zu Standardwerkstoffen für Prothesenbasen aus PMMA eine deutlich geringere Schrumpfung auf, sodass eine hervorragende Passung der Prothesenbasis erzielt wird. Dieser Werkstoff besitzt ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und ist mit herkömmlichen Materialien für Prothesenbasen vergleichbar.

1 Liter	ArtNr.	Preis
Opaque Pink	280419	€303,90



NextDent™ 5100

Der NextDent 5100 3D-Drucker hat Zahnlabore und Zahnkliniken als Zielgruppe.

Er ermöglicht die Fertigung von Zahnmodellen für Prothesen oder kieferorthopädische Instrumente. Die Herstellung erfolgt dabei viermal so schnell wie bei vergleichbaren Systemen. Die rasche Produktion ermöglicht eine schnellere Versorgung der Patienten, während das Labor neben Zeit auch Kosten spart. Beim 3D-Druck von Prothesen soll sich die Zeitersparnis auf 70 bis 80 Prozent belaufen. Produzieren Sie präzise Dentalprothesen mit zahlreichen Details. Präzise Arbeitsmodelle, Bohrschablonen und Kieferorthopädische Thermoformmodelle in weniger Zeit, günstiger und mit höherer Qualität.

Der neue 3D Systems Dental-3D-Drucker arbeitet mit der Figure 4 Technologie, die mit den Branchenstandards für Intra-Oral-Scanner und -Software kompatibel ist. Anwender profi tieren von durchgängigen Arbeitsprozessen. Insgesamt bietet das NextDent-Portfolio mittlerweile 30 verschiedene Resine, die in unterschiedlichen Farben verfügbar sind. Die Dentalmaterialien besitzen eine Biokompatibilität und sind CF zertifiziert

Spezifikation	Werte
Spannung	110V 100-240VAC, 50-60HZ, 4.0A
Sicherung	T5A/250V
Abmessungen	W 70 × L 68 × H 135 cm
Gewicht	35 Kg/54 Kg mit Ständer

Gerät	ArtNr.	Preis
NextDent 5100 3D-Drucker	275152	€8.990,00



Aktion: Beim Kauf eines NextDent 5100, erhalten Sie 1 zweites Tray Kit und 1 Liter Model 2.0 Druckmaterial ohne Berechnung!





€ 7.650⁰⁰



PLANMECA

Creo™ C5

Einzigartige Kapseldosierung – hohe Geschwindigkeit- einfache Anwendung

Der außergewöhnlich schnelle 3D-Drucker für die Fertigung am Patientenstuhl zur Herstellung von Dental Modellen und Bohrschablonen innerhalb eines einzigen Patientenbesuchs. Planmeca bietet einen einzigartigen vollständigen Arbeitsablauf zur Herstellung von Implantatschablonen. Verwenden Sie ein beliebiges DVT-Gerät von Planmeca, um ein Bild des Aufnahmebereichs zu erhalten und nehmen Sie einen digitalen Abdruck mit einem Planmeca-Intraoral-Scanner auf. Entwerfen Sie die Bohrschablone mit der Planmeca Romexis®-Software. Drucken Sie unmittelbar danach die Bohrschablone mit dem Planmeca Creo™ C5. Fertig.

Verfügbare Materialien:

Fotodent model: hochwertiges Harz für den Druck von Zahn-und Studienmodellen

Fotodent setup: Schnelldruckharz für Aligner-Sockel zur Verwendung bei der Thermoformung

Fotodent guide: Biokompatibles Harz der Klasse 1 für den Druck von Bohrschablonen

ArtNr.	
269874	€ 7.650,00
30018296	€ 141,20
30018353	€ 141,20
30018288	€ 199,00
	30018288

Rundum-sorglos-Paket Inklusive 20 Zirconia Discs & Wartung/Service für 5 Jahre

Das 5-Achs-Fräs Komplettpaket

- 5-Achs-Fräsmaschine, cara mill 2.5/imes-icore 250i
- Software CAM V4, Dental Softworks
- CAM Absaugung, Renfert SILENT compact
- 20 dds zirconia Discs
- LC-3D Print Box, 3D Sytems
- LC-3D Mixer, 3D Systems
- Installation und Einschulung
- Wartung für 5 Jahre

ab 60× € 997,73*

€ 46.985,50



*Alle Informationen zu den einzelnen Produkten und dem damit verbundenen Angebot finden Sie hier:





Entdecken Sie die neuen MiYO Massen ...





Neu im MiYO Sortiment

Trans Sunflower

Transluzente Colormasse, um die Basis Colormassen A, B, C, D mit einem gelblichen Grundton zu versehen.


High Temperature Structure Window

Hochtemperatur Strukturmaterial, das zusätzliche Flexibilität beim Brennen bietet. Einfärbung wie

- · HT Structure Window transparent
- HT Structure Enamel Schneide 59.

1 Stück, 4g	ArtNr.	Preis
HT Structure Window	281052	€48,00
HT Structure Enamel	281053	€48,00
Trans Sunflower	281049	€43,00

ab € 4300

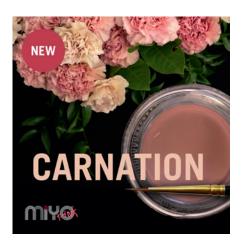





Neu im MiYO pink Sortiment

Trans Carnation

Transluzente Gingiva Colormasse, um mehr Tiefe und Kontrast in den Gingiva Anteilen einer Restauration zu generieren.

Venule

Pulverförmige Colormasse, um Venen in den Gingiva Anteilen einer Restauration nachzuahmen.

Glaze Paste - No Fluor

Glasurpaste ohne Fluoreszenz für Gingiva Anteile einer Restauration.

1 Stück, 4g	ArtNr.	Preis	
Carnation	281051	€43,00	
Venule	281050	€39,00	
Glaze Paste – No Fluor	281054	€39,00	

ab € 3900

Sie interessieren sich für die fantastischen Möglichkeiten von MiYO?

Besuchen Sie einen unserer Herbst-Workshops und lernen Sie die Welt des MiYO Liquid Ceramic Systems kennen.

Grundkurs

25.-26. September 2020
Dental Innovation Neubauer & Brandl
Graz

Grundkurs

23. Oktober 2020 Akademie f. österr. Zahntechnik Baden

Aufbaukurs für Fortgeschrittene

21. November 2020 Akademie f. österr. Zahntechnik,



Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf: www.plandent.at



Das Verblendsystem Signum composite eignet sich optimal für das Verblenden von Metallgerüsten. Für langlebige Restaurationen und vorbildlichen Kaukomfort. Die flüssigen Dentine Signum composite flow lassen sich vielseitig verarbeiten und kombinieren. So verblenden Sie herausnehmbaren Zahnersatz noch schneller und flexibler.

Spritze, 1 Stück	ArtNr.	Preis	
Signum composite, dentine 4 g	*	€39,60	
Signum composite flow, dentine 4 g	*	€36,90	
Signum opaque F 3 g	*	€33,80	



Aktion: Beim Kauf von 4 Signum Spritzen einer Sorte, erhalten Sie 1 weitere Spritze ohne Berechnung!



PalaXtreme

ab € 9380

Das neue High-impact Kaltpolimerisat

Stark und schonend – außergewöhnlich flexibler und belastbarer, kaltpolymerisierender Prothesenkunststoff.

Die neue Core-Shell-Technologie von Kulzer reduziert das Risiko von Brüchen, insbesondere bei implantatgetragenen Prothesen. Der bruchfeste, kaltpolymersierende Prothesenkunststoff bietet Laboren große Flexibilität und ist mindestens genauso verarbeitungsfreundlich wie herkömmliche Kaltpolymerisate. Der Kunststoff ist zudem allergiefreundlicher für Anwender und Patienten und beweist damit, dass er zugleich stark und schonend ist.

Pulver,1 kg	ArtNr. Preis		
PalaXtreme rosa	277188	€ 151,00	
PalaXtreme pink live	277193	€ 151,00	
PalaXtreme farblos	277192	€ 151,00	
Flüssigkeit, 500 ml	ArtNr.	Preis	
PalaXtreme Liquid	277194	€93,80	



Aktion: Beim Kauf von 1 kg PalaXtreme & 500 ml PalaXtreme Flüssigkeit erhalten Sie zum Testen: 1× PalaXtreme, 80 ml & 1× PalaXtreme Pulver, 100 g in der Farbe pink live, rosa oder farblos.

Bei Nichtgefallen senden Sie das ungeöffnete Produkt einfach zurück!





Gesundheits-schonende
AEROSOL-ABSAUGUNG

€ 1.065⁰⁰

Steamy MINI

Die REITEL Dampfstrahlgeräte eignen sich hervorragend zum Reinigen sämtlicher zahntechnischer Arbeiten und anderer Werkstücke.

Verschmutzungen, die im Laboralltag anfallen, wie z. B. Fette, Wachse oder auch hartnäckige Verklebungen, lassen sich ohne Zusatz von chemischen Stoffen mühelos entfernen. Eine innerhalb des Tanks (3,5 Liter) verbaute Heizung erreicht innerhalb kürzester Zeit das passende Temperatur- und Drucklevel (4,5 Bar), so dass Sie schnell und effektiv abdampfen können.

Die robusten Geräte sind mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, so dass Sie lange Freude an einem zuverlässigen Gerät haben werden. Für dauerhaft angenehmes Arbeiten sorgt die ergonomisch geformte Dampfpistole.

Ideal für kleine Labore und Mehrplatzanwendungen, schneller Temperatur- und Druckaufbau durch im Tank integrierte Heizung, isolierte & ergonomisch geformte Dampfpistole, optionale Dampfdüsen und Bürsten erhältlich.

Gerät	ArtNr.	Preis	
Steamy MINI	034494	€ 1.065,00	

Abdampfcenter BIOSTEAM

Schluss mit der typischen "Schmutzecke"!

Mit dem BIOSTEAM CENTER sorgen Sie für eine saubere und hygienische Arbeitsumgebung in Ihrem Dentallabor und schonen gleichzeitig Ihre Gesundheit.

Denn das Abdampfcenter von REITEL saugt mittels einer integrierten Absaugung störenden Dampfnebel beim Abdampfen von zahntechnischen Werkstücken ab. Entstehende Schmutzpartikel werden in einem speziellen Kondensationsfilter gebunden. Der Tank im Gerät sammelt das Wasser und ermöglicht ein flexibles Aufstellen im Zahnlabor – unabhängig vom Waschbecken.

Sie atmen keine Aerosole oder Schmutz ein, die entstehende Feuchtigkeit wird direkt abgesaugt und Sie haben eine freie Sicht beim Abdampfen. Die Schmutzpartikel werden in einem speziellen, dreifachen Filtersystem gebunden.

Gerät	ArtNr.	Preis
Abdampfcenter BIOSTEAM	144920	€ 1.730,00





ROTOGRIND MINI

Dieser kompakte Trimmer für Zahnlabore ist ein kleines Kraftpaket!

Mit 3.000 Umdrehungen pro Minute erhalten Ihre Modelle ein präzises Schliffbild mit hoher Oberflächengüte.

Der leistungsstarke Motor im ROTOGRIND MINI ist bürstenfrei und somit wesentlich effizienter als herkömmliche Motoren. Durch den nahezu verschleißfreien Antrieb ist eine lange Laufzeit gewährleistet.

Der technische Teil ist verpackt in einem stabilen Edelstahl-Gehäuse. Dadurch hat das Gerät immer einen ruhigen und sicheren Stand sowie eine hygienische Oberfläche.

Perfekt für Labore mit geringen Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen, robustes Edelstahl-Gehäuse für einen vibrationsfreien Lauf, verstellbarer Auflagetisch, einfach abnehmbare Gerätefront für schnellen Scheibenwechsel und Reinigung, kohlebürstenfreier und durchzugsstarker Motor.

ab € 1.26500

Gerät	ArtNr.	Preis
mit Silizium Carbid Scheibe	279714	€ 1.265,00
mit Teildiamantierter Scheibe	228889	€ 1.570,00



Aktion: Beim Kauf eines Rotogrind Mini Trimmers mit Silicium Carbidoder teildiamantierten Schleifscheibe erhalten Sie 1 Scheibe derselben Bauart ohne Berechnung!

€ 1.220⁰⁰









Basic quattro Feinstrahlgerät

Professionelles Feinstrahlgerät mit 2-4 Strahltanks.

Vorteile:

- Wirtschaftliches Arbeiten mit der speziellen Mischkammertechnik (Venturi-
- Einfache Hand- und Objektreinigung durch integrierte Ausblasdüse.
- Hohe Bewegungsfreiheit in der großvolumigen Strahlkammer (20 I).

- Präzises Abstrahlen durch optimale Ausleuchtung der Strahlkammer mittels LED-Technik
- Langanhaltend gute Sicht auf die Objekte durch silikonisierte Glasscheibe

Gerat	ArtNr.	Preis
2 Strahldüsen, Netzkabel, Fußschalter, Anschlussset,		
LED-Leuchte und Strahlmittel-Musterbeutel.		
2-Tank-Version/25-70 μm/70-250 μm	217379	€ 1.220,00
Zusatztank 25-70 µm	217379	€196,00



Aktion: Beim Kauf eines Zusatztanks, erhalten Sie einen weiteren Tank ohne Berechnung!

€ 1.19000

Twister evolution Vakuumanmischgerät

Vakuumanmischgerät mit hohem Drehmoment, Membranpumpe für das Vakuum und acht programmierbaren Rührfunktionen.

- Zuverlässige Verarbeitung von großen Mengen durch hohes Drehmoment.
- Programmierung von 99 Mischprogrammen über ein großes, leuchtstarkes Display.
- Reduzierung von Siedebläschen durch regulierbares Vakuum von 70% bis 100%.

Gerät	ArtNr.	Preis
inkl. 500-ml-Becher und Rührwerk	210653	€ 1.190,00

€ 5.570°°





e.ON Sinter+

Sinterofen für Zirkonoxid

UGIN DENTAIRE präsentiert die neueste technische Entwicklung, fortschrittliche elektronischen Komponenten, robuste Bauweise und ergonomisches Design.

Die Hochtemperatur-Ofenmuffel mit sechs feuerfesten Metallstangen und aus hochreinem Aluminiumfasermaterial hergestellt, bietet hervorragende Isoliereigenschaften und geringe thermische Trägheit.

Das Control Interface ist ein großer High Definition Color Touch Screen mit guter Grafik und einfacher Bedienbarkeit.

Die fortschrittliche intelligente Temperaturregelung sorgt für eine hohe Temperaturgenauigkeit und zuverlässige Ergebnisse aller Zirkon Material Typen

Ihre Vorteile

- 7" Farb display mit Touchscreen
- Microsoft Windows Navigation
- · Aluminiumfasern-Muffel
- Graphische Anzeige des aktiven Zyklus
- 40 freie Programme (je 40 Stufen programmierbar)
- 6 Heizelemente (MoSi2 Stäbe)

•	3 Sinterscha	len	inkl.	Perl	en	für
	60 Einheiten					

- Temperatursensor Pt/Rh (Platinium Rhodium)
- 1730°C max. Temperatur
- Temperaturkontrolle durch PID
- 74 kg, 420 × 600 × 830 mm (B×T×H)

Gerät	ArtNr.	Preis
e.ON Sinter+	271284	€5.570,00




Ultimate XL Series

Leistungsstark und komfortabel

- sanftes Anlaufen mit dem 180°-Vektor-Kontrollsystem
- starkes und stabiles Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich
- neue ergonomische Formgebung
- der leichte und kompakte Körper verringert die Ermüdung der Hand und verbessert das Gleichgewicht
- · einzigartiger Staubschutzmechanismus
- vibrations- und geräuscharm

Gerät	ArtNr.	Preis
UMXL DT Torque, Fußsteuerung	037145	€952,00*
UMXL-DC Compact, Fußsteuerung	229786	€790,00*
UMXL-KT Torque, Kniesteuerung	205711	€952,00*
UMXL-KC Compact, Kniesteuerung	211363	€790,00*
*Preis nur gültig bei Rückgabe eines Altgerätes		

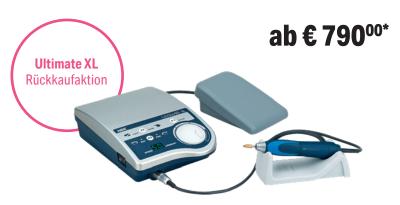



Aktion: Beim Kauf **einer Ultimate XL** und gleichzeitiger Rückgabe eines beliebigen Altgerätes erhalten Sie:

- 150 € Rückkaufwert* bei Kauf eines Gerätes mit Torque-Handstück
- 100€ Rückkaufwert* bei Kauf eines Gerätes mit Compact-Handstück

*Preisempfehlung vom LV

So erreichen Sie uns:

Graz

E-Mail:

NEUE Adresse

Hauptstr.131, 8141 Premstätten Telefon: +43 (0) 316 / 225883 Fax: +43 (0) 316 / 225884-15

team.graz@plandent.at

Wals

Pannzaunweg 1b, 5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 / 857700
Fax: +43 (0) 662 / 857700-4
E-Mail: team.salzburg@plandent.at

Wien

Scheringgasse 2, 1140 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 6620272
Fax: +43 (0) 1 / 6620272-20
E-Mail: team.wien@plandent.at

Bestell-Hotline: 0800 / 808032, Bestellfax: 0800 / 808036, Technik-Hotline: 0800 / 070550

www.plandent.at