

ORBIS

# Katalog 2020

Praxis  
Labor



Gültig bis 31.12.2020

# ORBIS GREEN

500 Stück  
36,95 €

Die nachhaltige Alternative  
in Ihrem dentalen Alltag.



50 Stück  
2,20 €

## Flosser Maisstärke

Zahnreinigungssticks mit 2in1-Funktion:  
Zahnseide und Zahnstocher

- Griff aus 40% Maisstärke und 60% PP-Materialien
- Doppelte Zahnseidefäden für effektive Zahnreinigung
- Ergonomische Form für eine leichte Handhabung
- Verpackt in umweltfreundlicher Papiertüte
- Mit frischem Minzgeschmack



## Mundspülbecher

Plastikfreie Mundspülbecher aus Hartpapier  
mit PLA-Beschichtung

- Ohne PE-Beschichtung – komplett plastikfrei
- Biokunststoffbeschichtung aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Biologisch abbaubar

## Zahnbürste Bambus

Nachhaltige Zahnbürste mit  
Bambusgriff

- Ergonomisch geformte Griffe
- Einzel, gebrauchsfertig in recyceltem Karton verpackt
- In 4 Farben sortiert
- Mittelweiche, abgerundete Borsten

20 Stück

22,95 €



# Unsere Neuheiten!



20,90

20 ×



34,90

## ORBI-HiFil supremeX Spritzen

A1, Spritze 4 g	275909	20,90
A2, Spritze 4 g	275910	20,90
A3, Spritze 4 g	275911	20,90
A3,5, Spritze 4 g	275912	20,90
B2, Spritze 4 g	275913	20,90
C3, Spritze 4 g	275914	20,90

## ORBI-HiFil supremeX PLT

A1, PLT 20 × 0,25 g	275915	34,90
A2, PLT 20 × 0,25 g	275916	34,90
A3, PLT 20 × 0,25 g	275917	34,90
A3,5, PLT 20 × 0,25 g	275918	34,90
B2, PLT 20 × 0,25 g	275958	34,90
C3, PLT 20 × 0,25 g	275959	34,90

### Lichthärtendes Nanohybrid-Composite für anteriore und posteriore Restaurationen

Das neue Material basiert auf Bis-GMA-Harzen und anorganischen Füllstoffen von 0,05 bis 3 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 80 Gew.-% und 69 Vol.-%. Das Composite-Material erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049.

Durch die hervorragende Konsistenz ist ORBI-HiFil supremeX einfach anzuwenden, leicht modellierbar und klebt nicht am Instrument. Es ist geeignet für alle Kavitäten. Schichtbar bis zu 2 mm. In 20 bis 30 Sekunden ausgehärtet (bei Wellenlänge von 400 bis 500 nm und Lichtintensität von mind. 1.000 mW/cm<sup>2</sup>).

*NEU!  
Jetzt noch besser!*



24,80

20 ×



**NEU**  
im Sortiment

34,90

## ORBI-FlowX Spritzen

A1, Spritze 2 × 2 g	275924	24,80
A2, Spritze 2 × 2 g	275925	24,80
A3, Spritze 2 × 2 g	275926	24,80
A3,5, Spritze 2 × 2 g	275927	24,80

## ORBI-FlowX PLT

A1, PLT 20 × 0,25 g	275928	34,90
A2, PLT 20 × 0,25 g	275929	34,90
A3, PLT 20 × 0,25 g	275930	34,90
A3,5, PLT 20 × 0,25 g	275931	34,90

### Lichthärtendes und leichtfließendes Microhybrid-Composite für anteriore und begrenzt posteriore Restaurationen sowie für die Versiegelung von Zähnen

Das neue Material basiert auf Methacrylharzen und anorganischen Füllstoffen mit einer Partikelgröße von 0,05 bis 1 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 62 Gew.-% und 47 Vol.-%. Das Composite-Material erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049. Es ist geeignet für Restaurationen der Klassen III, IV und V, kleine Füllungen

der Klassen I und II, Unterfüllung von Kavitäten und Versiegelungen. Schichtbar bis zu 1 mm. In 20 bis 30 Sekunden ausgehärtet (bei Wellenlänge 400 bis 500 nm und Lichtintensität von mind. 1.000 mW/cm<sup>2</sup>).



ab **0,60**

**ORBIS Zahnbürste**

ORBIS Zahnbürste Baby 0-3 Jahre, Stück	267253	0,60
ORBIS Zahnbürste Kid 3-6 Jahre, Stück	267254	0,60
ORBIS Zahnbürste Junior 7-10 Jahre, Stück	267255	0,70
ORBIS Zahnbürste Adult, Stück	267256	0,80

Hinweis: weitere Zahnbürsten ab Seite 50



**1,10**

**ORBIS Interdentalbrush**

ORBIS Interdentalbrush 0,4 pink, 8 Stück	266574	1,10
ORBIS Interdentalbrush 0,45 orange, 8 Stück	266575	1,10
ORBIS Interdentalbrush 0,5 rot, 8 Stück	266576	1,10
ORBIS Interdentalbrush 0,6 blau, 8 Stück	266577	1,10
ORBIS Interdentalbrush 0,7 gelb, 8 Stück	266578	1,10
ORBIS Interdentalbrush 0,8 grün, 8 Stück	266579	1,10

Hinweis: weitere Interdentalbürsten auf Seite 53



**1,10**

**ORBIS Interdental Soft Pick**

ORBIS Interdental Soft Pick Regular, 20 Stück	266580	1,10
---	--------	------



ab **5,80**

**ORBI-CHX alkoholfrei**

250 ml	268835	5,80
5.000 ml	268839	23,80



**1,20**

**ORBIS Flosser**

ORBIS Flosser, 32 Stück	267264	1,20
-------------------------	--------	------

Hinweis: weitere Zahnseide auf Seite 54



**1,55**

**ORBIS Dappenbehälter**

ORBIS Dappenbehälter Kunststoff cedro, 50 Stück	275073	1,55
ORBIS Dappenbehälter Kunststoff lila, 50 Stück	275074	1,55
ORBIS Dappenbehälter Kunststoff pink, 50 Stück	275178	1,55

Hinweis: weitere Dappenbehälter auf Seite 74



**49,95**

**Mundspülbecher, recyclingfähig**

Mundspülbecher recyclingfähig 180 ml orange, 3000 Stück	7055	49,95
Mundspülbecher recyclingfähig 180 ml weinrot, 3000 Stück	7353	49,95

## A

Abfallbeutel.....	74
Abformlöffel Ehrlicke, perforiert.....	8
<b>Abformung.....</b>	<b>1–9</b>
Absauganlagendesinfektion.....	12
Absaugfilter.....	103
Absaugkanüle.....	71
Absaugkanüle chirurgisch.....	71
Adhäsiv-Liquids.....	8
Alginat Blue.....	1
Alginat Color.....	1
Alginat Plus.....	1
Amalgam.....	27
Anmischblocks aus Hartfolie.....	9
Anmischblocks aus Papier.....	9
Anmischplatten aus Glas.....	9
Anmischspatel.....	7
Artikulationspinzette.....	36
A-Silikon classic.....	2
A-Silikon dynamic.....	3
Aspirationsspritze.....	49
Ätzel (Phosphorsäure).....	27
Ausblasdüsen.....	87

## B

Beutel.....	103
Big Brush.....	99
Bissnehmewachs.....	7
Bisswäule, vorgeformt.....	7
Bohrerbad.....	13
Bohrerbadbehälter 3-teilig.....	22
Bohrerreinigungsbürste.....	45
Bonding.....	27
Brenngutträgerpinzette.....	90

## C

Chemikalienschutzhandschuh.....	62
Chirurgische Absaugkanülen.....	71
Columbia Küretten.....	34
Composite.....	29–30
C-Silikon.....	3

## D

Dappenbehälter.....	74
<b>Desinfektion / Sterilisation.....</b>	<b>12–26</b>
Desinfektionstücher fruit.....	18
Desinfektionstücher, getränkt.....	17–18
Desinfektionstücher, ungetränkt.....	19, 22
Desinfektionswanne.....	22
Dial Caliper N.....	100
Diamantpolierpaste.....	97
Diamantscheibe, flexibel.....	91, 92
Diamantscheibe HT, flexibel.....	91
Diamantstreifen.....	46
Dowel-Pins.....	81
Dowel-Pins, Bogenpin-Technik.....	81

Dowel-Pins, mit Steckstift.....	81
Druckverschlussbeutel.....	92
Dry Pads.....	73
<b>Dublieren / Härten.....</b>	<b>84</b>
Dubliergeßel.....	84
Dubliergeßkuvette.....	84
Dubliersilikon.....	83

## E

Easy Composite.....	29
<b>Einbetten / Gießen / Löten.....</b>	<b>88</b>
<b>Einmalartikel / Sonstiges.....</b>	<b>61–74</b>
<b>Einmalartikel / Sonstiges.....</b>	<b>75–104</b>
Einmalhandschuhe.....	61–62
Einmalhandtücher, aus Zellstoff.....	64
Einmalhandtücher, Designprägung.....	64
Einmalhandtücher, grün.....	64
Einmalhandtücher, recycelt.....	64
Einmalkanülen.....	49
Einmalzahnbürsten plus.....	50
Elektrolyt.....	87
Endo.....	43–45
Endo-Box black.....	45

## F

Flächendesinfektion.....	15–16
Flaschenzubehör, Leerflaschen.....	21
Flusssäure.....	31
<b>Füllungsmaterialien.....</b>	<b>29–33</b>

## G

Gipslöser.....	79
Gipsmesser.....	79
Gipsschneidezange.....	101
Gipsschütte.....	79
Gipsspatel.....	79
Glasanmischplatten.....	9
Gracey Scaler.....	34
Gummipolierer.....	94
Gussskuvetten.....	87
Gusstrichterformer für Gussschleudern.....	88
Gusstrichterformer für Vakuum-Druck-Gießgeräte.....	88
Gusswachsplatten.....	86
Guttaperchaspitzen.....	44

## H

Halteklemme, nach Mosquito.....	102
Halter für Interdentalbürsten.....	53
Händedesinfektion.....	10
Handschuhe.....	61–62
Handtuchspender, aus Edelstahl.....	64
Hedstroem-Feilen.....	43
Hohlmeißelzange.....	36

**Instrumentarium, Praxis ..... 33–42****Instrumente, Labor ..... 97–102**

Instrumentendesinfektion .....	13
Instrumentenhalter .....	42
Interdentalbürsten, für Halter (IDBH).....	53
Interdentalbürsten, mit integriertem Griff (IDBG) .....	54
Interdentalbürsten, ohne Griff (IDB) .....	54
Interdentalkeile .....	33
Intraoral-Tips .....	7
<b>Isoliermittel / Knetmassen .....</b>	<b>89</b>

**K**

Kälte-Pack Dentalkompresse .....	49
Kältespray .....	45
Kanisterzubehör .....	22
Kanülen .....	27, 31, 49
K-Bohrer .....	43
Keile .....	33
Keramik-Ätzel (Flusssäure) .....	31
Keramikinstrumente .....	99
Keramikpinsel, synthetisch.....	100
Keramogrip .....	101
K-Feilen .....	43
Kombipinsel.....	99
Kondensierspatel .....	99
Kopfbandlupe .....	31
Korrekturmasse C-Silikon .....	4
Korundleinen .....	93
Korundpapier .....	94
Kronenscheren .....	36
Kronen- und Brückenmaterial .....	26, 60
Kugelstopfer .....	38
<b>Kunststofftechnik.....</b>	<b>90</b>
Küretten .....	34
Küvette.....	89
Küvettenbügel Nirosta .....	90

**L**

Latexhandschuhe .....	62
Leerdose Alginat.....	2
Leerdose Tücher.....	18
Löffelplatten.....	89
Lötpinzette .....	101
Lupe.....	31

**M**

Magnetbohrerständer .....	91
Magnetbohrerständer mit Topf.....	91
Magnet-Split-System .....	83
Mandrells.....	94
Matrix-Strips .....	32
Matrizenband.....	32
Messbecher Orbis .....	22
Messbechersatz I .....	1
Messbechersatz II .....	2
Mischbecher aus Silikon .....	74

Mischbecher, flexibel .....	2
Mischkanülen .....	6
Mischpistole .....	7
Mixing Tips.....	6
<b>Modellherstellung.....</b>	<b>77–79</b>
Modellierbesteck .....	97
Modellierbesteck Thomas .....	98
Modellierbesteck Thomas Color .....	98
<b>Modellieren .....</b>	<b>85–87</b>
Modellierinstrumente .....	98
Modellierwachs .....	86
Modellsägen .....	82
Muffelringeinlage .....	88
Muffelzange.....	88
Mulltupfer .....	72
Mundschutz mit Bändern .....	65
Mundschutz mit Gummizug .....	65
Mundspiegel, frontbeschichtet.....	38
Mundspiegelgriff .....	39
Mundspiegel RS .....	38
Mundspiegel RS hauchfrei .....	38
Mundspülbecher .....	65
Mundspülbeckenreiniger .....	12
Mundspülglas.....	67

**N**

Nadelhalter, nach Mathieu.....	36
Nasskreppservietten.....	67
Nasskreppservietten premium .....	67
Nitrilhandschuhe .....	61
Normtrays, aus Edelstahl .....	42
Normtrays gelocht, aus Aluminium .....	41
Normtrays ungelocht, aus Aluminium .....	41

**O****Oberflächenbearbeitung ..... 93–97**

Occlu Artikulationsgips .....	77
Oclubaster .....	77
Oclublast.....	97
Occludur .....	78
Occlumedanit .....	77
Occluroc .....	77
Occlusionsspray Plus.....	63
Occlu Sockelgips.....	78
Occlustone Premium .....	78
Occlu-Superstone .....	78
ORBI-Applikationskanülen .....	31
orbibite .....	5
ORBI-BITEBOX .....	57
orbibite granit .....	5
orbibite green .....	5
orbibite scan.....	5
orbibite transpa .....	5
ORBI-Bond SE one .....	27
ORBI-Brush .....	28
ORBI-Clean Orange .....	20
ORBI-FlowX.....	30
ORBI-FRESH alkoholfrei.....	50
ORBI-HiFil easy .....	29
ORBI-HiFil supremeX .....	30
ORBI-HiSilber Amalgam.....	27

Orbirect Kanülen .....	49
Orbilock Abformlöffel .....	8
OrbiMedanit S .....	77
ORBI-Orthobox .....	58
ORBI-Pastenhärter universal .....	89
ORBI-Pins für Zeiser-System .....	81
ORBIpol alloy-F .....	47
ORBIpol ceram-P .....	47
ORBIpol discs .....	46
ORBIpol micro-P .....	47
ORBIpol tec .....	48
ORBIpol universal .....	48
ORBI-Prophylaxe Polierer .....	55
ORBI-Prophy Paste .....	55
ORBI-Prophy Paste Vario Polish .....	56
ORBI-Prophy Powder Soft & Perio .....	56
ORBI PROtray LC .....	89
Orbis Absaugfilter .....	105
ORBI-Scan Stone .....	78
ORBI-Sept Abformdesinfektion .....	21
ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion .....	12
ORBI-Sept Bohrerbad .....	13
ORBI-Sept Flächendesinfektion .....	15–16
ORBI-Sept Flächendesinfektion – alkoholfrei .....	15
ORBI-Sept Flächendesinfektion konz. ....	16
ORBI-Sept Flächendesinfektion plus .....	16
ORBI-Sept Flächendesinfektion sensitive .....	16
ORBI-Sept Instrumentendesinfektion .....	13
ORBI-Sept Spendereimer .....	20
ORBI-Sept Wet Wipes .....	17
ORBI-Sept Wet Wipes alkoholfrei .....	18
ORBI-Serviettenhalter .....	68
ORBI-Sil Scan .....	2
ORBI-Steel Heidemannspatel .....	35
ORBI-Steel Pinzette College .....	35
ORBI-Steel Teleskopkronenzange .....	35
ORBI-Steel Zahnsonde .....	34
ORBI-Steel Zementspatel .....	35
ORBI-Strips .....	46
ORBI-Tec Knetmasse A85 blau .....	81
ORBI-Temp K&B .....	26
ORBI-Tips .....	28
ORBI-Touch eco plus .....	61
ORBI-Touch Handcreme .....	11
ORBI-Touch Händedesinfektionsgel .....	10
ORBI-Touch Handgel bakterizid .....	11
ORBI-Touch Hand- und Nagelbalsam .....	12
ORBI-Touch Handwaschlotion .....	11
ORBI-Touch nitril color .....	61
ORBI-Touch nitril soft white .....	62
ORBI-Touch protect Händedesinfektion .....	10
ORBI-Touch protect Händedesinfektion Biozid .....	10
ORBI-Touch protect Hautschutzcreme .....	11
ORBI-Touch Spender 1000 .....	23
ORBI-Touch Supreme .....	61
ORBI-Touch Vinyl PF .....	62
ORBI-Touch works .....	62
ORBI-Wipes .....	19
ORBI-Wipes Box .....	19
ORBI-Wipes Mikrovliestücher, ungetränkt .....	19
ORBI-Wipes Wischtücher, ungetränkt .....	20

## P

PA-Instrumente .....	34
Panoramafilmtaschen .....	59
Papierspitzen, color .....	44
Papierspitzen, weiß .....	44
Parodontalsonde WHO .....	33
Patientenumhänge .....	69
Persönliche Labornotizen/Informationen .....	76
Pinself .....	28, 99–100
Pinselfansätze .....	28
Pinselfbürsten .....	95
Pinselfset .....	99
Pinzette College RS .....	39
Planstopfer .....	39
Polierbürsten, Holzkern .....	95
Polierbürsten, Kunststoffkern .....	95
Polierbürsten, schmal .....	96
Polierscheiben .....	46
Polycarbonatkronen .....	60
Präparatespender .....	23
<b>Präparate und Injektion .....</b>	<b>49</b>
<b>Prophylaxe .....</b>	<b>50–58</b>
Prophylaxepulver .....	56
PROtect finish .....	63, 89
Prothesenzahnbürste .....	52
Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial .....	26, 60

## R

Radbürsten, montiert .....	96
Radbürsten, unmontiert .....	96
Retentionsringe .....	81
<b>Röntgen .....</b>	<b>59</b>
Röntgen-Chemikalienset .....	59
Röntgenfilmtaschen, endlos .....	59
Rotmarderpinsel .....	100

## S

Sägeblätter für Modellsägen .....	82
Scaler .....	34
Schaumstoffeinsätze .....	45
Schaumstoffpellets .....	45
Schleifkörper .....	93
Schutzhandschuhe .....	62
Schutzhüllen .....	59
Schutzservietten Premium .....	70
Sekundenkleber .....	82
Serviettenhalter, farbig .....	68
Serviettenkettchen .....	68
Silberdrahtbürsten .....	96
Silikon-Gussmanschette .....	83
Silikon-Knetmasse Technik .....	89
Silikonspray .....	87
Silikon- und Wachsentspanner .....	88
Skalpelloff Nr. 3 .....	39
Sockelformer .....	83
Sockelformer Split-Cast .....	83
Spatel, nach Heidemann .....	36
Spatel, universal .....	29

Speichelsauger.....	72
Spender für Mundspülbecher.....	67
Split-Cast Orbis Basisplatte.....	82
Spritze.....	49
Sprühdesinfektion fruit.....	17
Stereo-Kopfbandlupe LED.....	31
Sterilisationsfolien.....	25
Sterilisationsindikator.....	25
Sterilisationstüten.....	25
Strahlkorund.....	97
Streifen.....	46
Strips.....	32
Stumpflack.....	82

## T

Tasterzirkel, nach Iwanson.....	101
Teleskopkronenzange.....	39, 101
Tiefziehfolien.....	63
Tip-Halter.....	28
Tofflemire-Matrizen.....	32
Tofflemire-Matrizenspanner.....	32
T-Ölspray.....	21
Tray-Cleaner.....	20
Traypapier für Normtrays.....	69
Traypapier für Schwebetische.....	70
Trennscheiben.....	92
Trennscheiben Fiber-Disk.....	92
Tubenentleerer.....	9

## U

Universal Silikonhärter.....	4
Universal-Spray.....	21
Unterfütterungsgerät 3S.....	90
Untersuchungshandschuhe.....	61–62
Unterziehfolien.....	63

## V

<b>Versorgung, temporär.....</b>	<b>26, 60</b>
Vorbereitungswachs.....	85

## W

Wabenbrenngutträger.....	90
Wabenbrenngutträger mit Keramikstiften, rund.....	91
Wachsdraht.....	84
Wachsmesser, nach Antkoviak.....	99
Wachsmesser, nach Ermert.....	99
Wachsmesser, nach Fahnenstock (Holz).....	98
Wachsmesser, nach Fahnenstock (Kunststoff).....	98
Wachspinsel.....	87
Wachsprofilstäbe.....	85
Wachsretentionen.....	85
Wachsschablonen.....	85
Wangenabhalter Hilger.....	36
Wattekügelchen.....	72
Watterollen.....	73
Watterollenspende.....	73
Wurzelheber, nach Bein.....	39

## Z

Zahnbürsten für Erwachsene.....	52
Zahnbürsten für Kinder.....	51
Zahnbürste Orbis 2-K.....	52
Zahnfleischscheren.....	40
Zahnfleischschere, nach Goldman-Fox.....	40
Zahnreinigungs- und Polierbürstchen.....	55
Zahnseide, gewachst.....	54
Zahnsonden.....	40
Zahn- und Wurzelzangen.....	37
Zangen für die Zahntechnik.....	102
Zellstofftupfer.....	74
Zelltuchservietten.....	67
Zementspatel, doppelendig.....	40
Zylinderampullenspritze.....	49





## Alginat Blue

Staubfreies, schnell abbindendes Präzisionsalginat zur totalen und partiellen Abformung. Mundverweildauer 40 Sek. und Gesamtabbindezeit 2 Min.

- Pfefferminzgeschmack
- Frei von Blei und Cadmium
- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit bei Abdrucknahme
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Kompatibel mit allen üblichen Modellgipsen

### Information:

- Für ein optimales Mischungsverhältnis empfehlen wir den Messbechersatz I REF 131959.
- Für eine optimale Aufbewahrung und Lagerung empfehlen wir unsere Leerdose REF 157283.

Nachfüllbeutel 453 g	<b>222111</b>	<b>7,40</b>
ab 24 Beuteln		<b>5,40</b>



## Alginat Color

Innovatives, schnell abbindendes Alginat mit Farbindikator. Der Abbindezyklus wird durch 3-Phasen-Farbindikator angezeigt. Anmischphase, Mundphase (ca. 40 Sek) und Zeitpunkt der Aushärtung (ca. 2 Min nach Mischbeginn) werden durch Farbwechsel angezeigt. Zur Herstellung von Studienmodellen, Gegenbissmodellen, Arbeitsmodell- en, zur Herstellung orthodontischer Arbeiten, von herausnehmbarem Zahnersatz und Provisorien. Mit Vanillegeschmack, hellblau. Desinfizierbar, sollte unmittelbar nach Entnahme aus der Desinfektionslösung ausgegossen werden. Kompatibel zu allen üblichen Modellgipsen.

- Hellblau
- Vanillegeschmack

### Information:

- Für ein optimales Mischungsverhältnis empfehlen wir den Messbechersatz I REF 131959.
- Für eine optimale Aufbewahrung und Lagerung empfehlen wir unsere Leerdose REF 157283.

Nachfüllbeutel 453 g	<b>263625</b>	<b>7,25</b>
ab 24 Beuteln		<b>5,45</b>



## Alginat Plus

Alginateabformmaterial zur Herstellung von Studienmodellen, Gegenbissmodellen, Arbeitsmodellen, zur Herstellung orthodontischer Arbeiten, von herausnehmbarem Zahnersatz und Provisorien. Anmischzeit 30 Sek., Verarbeitungszeit (bei 23 °C) von Mischbeginn bis zur Aushärtung ca. 2,5 Min., Abbindezeit im Mund ca. 1 Min. Kompatibel mit allen üblichen Modellgipsen.

- Hellblau
- Pfefferminzgeschmack
- Bis 48 Stunden dimensionsstabil
- Leicht anmischbar

### Information:

- Für eine optimale Aufbewahrung und Lagerung empfehlen wir unsere Leerdose REF 157283.

Nachfüllbeutel 500 g	<b>288881</b>	<b>7,25</b>
ab 20 Beuteln		<b>6,75</b>



## Messbechersatz I

Messbechersatz für ein optimales Mischungsverhältnis von Alginat und Wasser

- Geeignet für ORBIS Alginat Blue REF 222111 und ORBIS Alginat Color REF 138163

Stück	<b>131959</b>	<b>1,70</b>
-------	---------------	-------------



## Messbechersatz II

Messbechersatz für ein optimales Mischungsverhältnis von Alginat und Wasser

- Geeignet für ORBIS Alginat Plus REF 288881

Stück	<b>220152</b>	<b>1,70</b>
-------	---------------	-------------

## Leerdose

Hochwertige Leerdose zur sicheren und luftdichten Aufbewahrung von Alginat und anderen zur Aufnahme von Feuchtigkeit neigenden Pulvern

Stück	<b>157283</b>	<b>4,45</b>
-------	---------------	-------------



## Mischbecher, flexibel

Vielfach bewährter Mischbecher für den sparsamen Ansatz von Dentalmaterialien. Aus speziellem, flexiblem Kunststoff, der ein restloses Entleeren des fertig gemischten Materials erlaubt. Überschüssiges Material lässt sich nach Aushärten sehr leicht entfernen.

klein, Ø 11,5 cm, Inhalt: ca. 300 ml, Stück	<b>142664</b>	<b>4,20</b>
mittel, Ø 12,5 cm, Inhalt: ca. 500 ml, Stück	<b>142667</b>	<b>4,70</b>
groß, Ø 14,0 cm, Inhalt: ca. 900 ml, Stück	<b>142671</b>	<b>6,30</b>
x-groß, Ø 16,5 cm, Inhalt: ca. 1.800 ml, Stück	<b>142681</b>	<b>10,20</b>



## ORBISil Scan

ORBISil Scan ist ein scanbares, additionsvernetzendes Präzisionsabformmaterial für die klassische Abformung und Digitalisierung.

Abformungen mit ORBISil Scan sind ohne Zusatz von Sprays oder Puder scanbar.

putty soft, 2 x 300 ml (Basis + Katalysator)	<b>242297</b>	<b>54,95</b>
putty soft, 2 x 380 ml (Kartusche 5:1)	<b>242298</b>	<b>119,90</b>
heavy, 2 x 380 ml (Kartusche 5:1)	<b>242299</b>	<b>119,90</b>
heavy, 2 x 50 ml (Kartusche + 6 Mixing Tips)	<b>242300</b>	<b>37,35</b>
light, 2 x 50 ml (Kartusche + 12 Mixing Tips)	<b>242302</b>	<b>37,35</b>



## A-Silikon classic

Klassisches Präzisionsabformsystem auf A-Silikonbasis. Für alle Abformungen, bei denen es auf maximale Genauigkeit ankommt. Das Puttymaterial überrascht durch ein besonders geschmeidiges, klebefreies Mischverhalten und sichert mit einer Endhärte von 70 Shore A eine ausreichende Stempelwirkung bei der Korrekturabformung.

Extrem hohes Rückstellvermögen, Verarbeitungszeit variabel bis 2 Min. Mundverweildauer 2 Min. Die präzise abgestimmten Korrekturmaterialien in Doppelkartuschen sind ausgeprägt thixotrop, sehr hydrophil sowie ausgezeichnet dimensionsgenau. Hohe Reißfestigkeit und klare Farben sorgen für stets zufriedenstellende Abformresultate.

- Für alle Abformtechniken
- Hohe Präzision

### Information:

- Geeignete Mischkanülen: Gelb REF 169173 / Rosa REF 169174, siehe Rubrik Mischkanülen

Putty, je 300 ml Basis und Katalysator	<b>149745</b>	<b>37,65</b>
Korrekturmaterial, leichtfließend, Farbe: rosa/pink, 2 x 50 ml Kartusche, 12 Mischkanülen gelb	<b>149748</b>	<b>27,50</b>
Korrekturmaterial, mittelfließend, Farbe: violett, 2 x 50 ml Kartusche, 12 Mischkanülen rosa	<b>149753</b>	<b>27,50</b>



## A-Silikon dynamic

Preisgünstiges, vollautomatisch anmischbares Präzisionsabformsystem auf A-Silikonbasis in 5:1-Hartkartuschen, für alle Indikationen und Abformtechniken. Die modernen 5:1-Hartkartuschen passen in die gebräuchlichen Mischgeräte. 2 Konsistenzen stehen zur Wahl:

**Typ A:** ein hochpräzises Monophasenmaterial. Schwerfließend, hochpräzise, ausgeprägt thixotrop und zeichnungsscharf, optimale Hydrophilie. Hohe Elastizität, dadurch eine leichte Entnahme aus dem Mund, ideal für Implantatabformung.

- Endhärte: 60 Shore A
- Farbe: gelb
- Leichter Vanillegeschmack
- Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit 2 Min. 30 Sek.
- Mundverweildauer 2 Min. 30 Sek.

**Typ B:** ein universell einsetzbares, additionsvernetzendes Vorabformmaterial, mit puttyähnlicher Konsistenz (schwerfließend). Es ist kombinierbar mit fast allen handelsüblichen A-Silikon-Korrekturmaterialien, mit guter Elastizität, hohem Rückstellvermögen und hoher Dimensionsstabilität.

- Endhärte: 70 Shore A
- Farbe: hellgrün
- Leichter Minzgeschmack
- Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit 2 Min. 30 Sek.
- Mundverweildauer 2 Min. 30 Sek.

### Information:

Mischkanülen separat bestellen

Typ A Monophase, 2 x 380 ml (Kartusche 5:1), Verriegelungsring	<b>177348</b>	<b>99,95</b>
Typ B Vorabformung, 2 x 380 ml (Kartusche 5:1), Verriegelungsring	<b>177351</b>	<b>99,95</b>
Dynamische Mixing Tips 5:1, für Typ A + B, Packung 40 Stück	<b>177349</b>	<b>31,90</b>
Verriegelungsringe für Mixing Tips 5:1, Packung 2 Stück	<b>177350</b>	<b>7,50</b>

## C-Silikon

Preisgünstiges Abformsystem auf C-Silikonbasis, für alle Indikationen und Abformtechniken. Wählen Sie aus 2 sehr dimensionsstabilen Puttymaterialien (Knetmassen) mit optimierten Füllkörpern für leichteres Anmischen und perfekte Homogenität. Für beide Materialien gilt eine Verarbeitungszeit von 2 Min., Mundverweildauer 4 Min. Dazu passend stehen 3 optimal abgestimmte Korrekturmassen zur Wahl.

### Knetmasse soft

Endhärte 60 Shore A. Für alle Abformtechniken, mit höherer Schonung bei parodontal vorgeschädigtem Gebiss.

### Knetmasse hart (zäh-plastisch)

Endhärte 70 Shore A. Für alle Abformtechniken und zahntechnische Anwendungen wie Vorwälle, Herstellung von Provisorien etc.

### Information:

Härter nicht vergessen! Universal Pastenhärter REF 266845, Universal Flüssighärter REF 211376.

### Mischtechnik:

1 Dosierlöffel Silikon-Knetmasse mit 2,5 cm Pastenhärter oder 10 Tropfen Flüssighärter manuell mischen.

Knetmasse soft, Dose 900 ml ab 4 Dosen	<b>143203</b>	<b>23,40</b> <b>21,90</b>
Knetmasse hart, Dose 900 ml ab 4 Dosen	<b>143204</b>	<b>23,40</b> <b>21,90</b>
Knetmasse soft, Eimer 10 kg	<b>147441</b>	<b>99,90</b>
Knetmasse hart, Eimer 10 kg	<b>147442</b>	<b>99,95</b>
Dosierlöffel für Knetmassen	<b>158138</b>	<b>0,65</b>



## Korrekturmasse C-Silikon

Korrekturmasse, **schwerfließend**, heavy body, Typ 1: schwerfließendes Universalmaterial, hohe Konsistenz, mit ausgezeichneter Thixotropie. Das Material fließt nur unter Druck. Geeignet für Funktionsabformungen, Unterfütterungen, Basismaterial für die Doppelmischtechnik. Farbe: grün.

Korrekturmasse, **mittelfließend**, medium body, Typ 2: mittelfließendes Korrekturmateriale mit höchster Präzision und hoher Standfestigkeit. Geeignet für Doppelmischtechnik, Korrekturabformung. Farbe: blau.

Korrekturmasse, **leichtfließend**, light body, Typ 3: leichtfließendes Korrekturmateriale, sehr niedrige Konsistenz, mit ausgeprägter Thixotropie, für die exakte Wiedergabe besonders graziler Mundsituationen und Präparationen, hydrophil. Geeignet für Korrekturabformung (2-step) und Doppelmischtechnik (1-step). Farbe: dunkelblau.

Korrekturmasse schwerfließend, Typ 1, grün, Tube 150 ml	<b>189363</b>	<b>12,20</b>
Korrekturmasse mittelfließend, Typ 2, blau, Tube 150 ml	<b>142824</b>	<b>12,20</b>
Korrekturmasse leichtfließend, Typ 3, dunkelblau, Tube 150 ml	<b>189354</b>	<b>12,20</b>



## Universal Silikonhärter

Universalhärter für Silikon-Abformmassen

Flüssighärter, rosa, Flasche 50 ml	<b>211376</b>	<b>11,20</b>
Pastenhärter, rot, Tube 60 ml	<b>266845</b>	<b>9,65</b>





## orbibite

Bissregistriermaterialien auf A-Silikonbasis, im Kartuschensystem. Für dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistrare und zur Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraten. Schnelle, einfache und sichere Anwendung. Orbibite ist standfest, thixotrop, sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar, dimensionsstabil. Verarbeitungszeit 30 Sek., Mundverweildauer 60 Sek.

- Endhärte: 85 Shore A
- Farbe: gelb
- Minzgeschmack

2 x 50 ml, 12 Mischkanülen grün	<b>149646</b>	<b>29,95</b>
Mischkanülen grün, Packung 50 Stück	<b>169175</b>	<b>27,35</b>



## orbibite granit

Bissregistriermaterialien auf A-Silikonbasis, im Kartuschensystem. Für dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistrare und zur Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraten. Schnelle, einfache und sichere Anwendung. Orbibite granit ist standfest, thixotrop, sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar, dimensionsstabil, sehr kurze Aushärtezeit. Das bedeutet Entlastung des Patienten und Vermeidung von verzerrten Bissregistraten. Verarbeitungszeit 30 Sek., Mundverweildauer 30 Sek.

- Endhärte: 45 Shore D
- Farbe: türkis
- Minzgeschmack

2 x 50 ml, 12 Mischkanülen grün	<b>149649</b>	<b>33,40</b>
Mischkanülen grün, Packung 50 Stück	<b>169175</b>	<b>27,35</b>



## orbibite green

Additionsvernetzendes Bissregistriermaterial im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit 30 Sek., Mundverweildauer 45 Sek., Gesamtabbindezeit 1 Min. 30 Sek. Indikation: dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistrare, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraten.

- Endhärte: 95 Shore A
- Farbe: grün
- Apfelgeschmack

2 x 50 ml, 12 Mischkanülen grün	<b>216641</b>	<b>34,60</b>
---------------------------------	---------------	--------------



## orbibite scan

Additionsvernetzendes, scanbares Bissregistriermaterial mit hoher Thixotropie, ausgezeichneter Dimensionsstabilität, feiner Zeichnungsschärfe und exakter Detailwiedergabe. Das Material lässt sich sehr gut beschneiden und fräsen. orbibite scan ist speziell für die Anwendung in CAD/CAM-Systemen entwickelt worden. Die neuartige, spezielle Zusammensetzung bewirkt eine hervorragende Wiedergabe von 3D-erfassten Daten, z. B. Okklusionsflächen, Antagonisten, Präparationen. Zusätzlicher Einsatz von Puder entfällt. Verarbeitungszeit 30 Sek., Mundverweildauer 30 Sek.

- Endhärte: 45 Shore D
- Farbe: gelb
- Minzgeschmack

2 x 50 ml, 12 Mischkanülen grün	<b>216640</b>	<b>37,40</b>
---------------------------------	---------------	--------------



## orbibite transpa

Transparentes, additionsvernetzendes Silikon zur Reproduktion von Zahnoberflächen und Kauflächen aus lichtpolymerisierendem ästhetischem Komposit. Bei Verwendung als Bissregistriermaterial ist eine direkte, sichtbare Kontrolle des korrekten Bisses dank der sehr hohen Transparenz möglich. Verarbeitungszeit 30 Sek., Mundverweildauer 60 Sek. Weitere Indikationen: Kauflächenstempel bei lichterhärtenden Kompositrestaurierungen, Transfermatrix zur Befestigung von Brackets.

- Endhärte: 70 Shore A
- Farbe: transparent
- Minzgeschmack

2 x 50 ml, 12 Mischkanülen grün	<b>216639</b>	<b>35,80</b>
---------------------------------	---------------	--------------

## Mischkanülen

ORBIS Mischkanülen sind kombinierbar mit einer Vielzahl von Materialien der Originalhersteller. Passende Intraoral-Tips gelb und weiß siehe: Zubehör für Abformung.

	<b>blau/weiß, kurz, Packung 50 Stück</b> , Mischverhältnis: 1:1		
	Kombinierbar mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cool Temp (Coltène/Whaledent)</li> <li>• Tempofit (DETAX)</li> <li>• PermaCem, TempoCem (DMG)</li> <li>• Mucopren Soft (Kettenbach)</li> <li>• Structur 2 SC (VOCO)</li> </ul>	<b>169171</b>	<b>27,35</b>
	<b>blau/weiß, lang, Packung 50 Stück</b> , Mischverhältnis: 1:1		
	Kombinierbar mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cool Temp (Coltène/Whaledent)</li> <li>• Tempofit (DETAX)</li> <li>• Tempphase (Kerr Hawe)</li> </ul>	<b>169172</b>	<b>27,35</b>
	<b>gelb/weiß, Packung 50 Stück</b> , Mischverhältnis: 1:1		
	Kombinierbar mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• A-Silikon leichtfließend (ORBIS)</li> <li>• Affinis light body und regular body (Coltène/Whaledent)</li> <li>• Aquasil LV/ULV (Dentsply)</li> <li>• Detaseal hydroflow</li> <li>• Honigum Automix Light und Light Fast, LuxaCore (DMG)</li> <li>• Dimension Garant L und L Quick, Imprint 4 Garant Light Body / Regular Body, Imprint II Quick Step Light Body / Regular Body (3M ESPE)</li> <li>• Flexitime Correct Flow, Provil novo (Heraeus Kulzer)</li> <li>• Panasil Contact Plus (Kettenbach)</li> <li>• Betasil Vario (Müller Dental)</li> <li>• Provil novo light, medium</li> <li>• Rebuilda SC (VOCO)</li> </ul>	<b>169173</b>	<b>27,35</b>
	<b>rosa/weiß, Packung 50 Stück</b> , Mischverhältnis: 1:1		
	Kombinierbar mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• A-Silikon mittelfließend, orbibite, orbibite granit (ORBIS)</li> <li>• Detaseal Quick und Light, Detaseal bite, Onetime perfect (DETAX)</li> <li>• Examix NDS, Exafast NDS (GC)</li> <li>• Betasil Vario (Müller Dental)</li> <li>• Jet Bite</li> <li>• Soft reliner (Tokuyama)</li> <li>• Registrado X-tra, Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC (VOCO)</li> </ul>	<b>169174</b>	<b>27,35</b>
	<b>grün/weiß, Packung 50 Stück</b> , Mischverhältnis: 1:1		
	Kombinierbar mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• orbibite: orbite, granit, transpa, scan, green (ORBIS)</li> <li>• Affinis heavy body (Coltène/Whaledent)</li> <li>• Exabite II</li> <li>• Greenbite Apple (DETAX)</li> <li>• Honigum Automix Mono (DMG)</li> <li>• Imprint Bite, Imprint II Garant Monophase, Imprint II Quick Step Heavy, Imprint SBR (3M ESPE), Imprint 4 Bite</li> <li>• Flexitime Monophase, Flexitime Heavy Tray, Memosil 2, Memoreg 2, Provil novo (Heraeus Kulzer)</li> <li>• Futar D occlusion, Futur System 50, Futar D System 50, Monopren transfer, Mucopren Soft, Mucopren transfer, Panasil Contact two in one (Kettenbach)</li> <li>• Registrado X-tra</li> </ul>	<b>169175</b>	<b>27,35</b>
	<b>violett/weiß, Packung 50 Stück</b> , Mischverhältnis: 1:1		
	Kombinierbar mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquasil Monophase und Heavy Body F/S (Dentsply)</li> <li>• Detaseal Mono (DETAX)</li> </ul>	<b>169176</b>	<b>29,95</b>
	<b>weiß/weiß, Packung 50 Stück</b> , Mischverhältnis: 1:1		
	Kombinierbar mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impregum Garant L Duosoft, Permadyne Garant 2:1 (3M ESPE)</li> </ul>	<b>169177</b>	<b>29,95</b>
	<b>blau/orange, Packung 50 Stück</b> , Mischverhältnis: 4:1/10:1		
	Kombinierbar mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• ORBI-Temp K&amp;B (ORBIS)</li> <li>• Luxatemp (DMG)</li> <li>• Protemp 3 Garant (3M ESPE)</li> <li>• Prevision CB (Heraeus Kulzer)</li> <li>• Omnitemp KB (Omnident)</li> <li>• System c &amp; b (Ivoclar Vivadent clinical)</li> </ul>	<b>169178</b>	<b>29,95</b>
	<b>gelb/blau, Packung 50 Stück</b> , Mischverhältnis: 4:1/10:1		
	Kombinierbar mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silasoft Direct/Express (DETAX)</li> <li>• Xantopren Comfort (Heraeus Kulzer)</li> </ul>	<b>169179</b>	<b>29,95</b>
	<b>gelb/orange, Packung 50 Stück</b> , Mischverhältnis: 10:1		
	Kombinierbar mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• LuxaBite (DMG)</li> </ul>	<b>169182</b>	<b>29,95</b>



## Bissnehmewachs

Bissnehmewachs in Stangen ist geeignet zur Herstellung von totalen und partiellen Bisschablonen sowie zum Aufsetzen auf Modellgussstäbchen. Es ist erwärmt so zäh wie Bienenwachs und abgekühlt absolut formfest. Somit ist eine exakte Bissregulierung möglich.

- Größe: 10 x 10 x 100 mm

gelb, weich, Packung 490 g	<b>141110</b>	<b>12,95</b>
rosa, hart, Packung 490 g	<b>141145</b>	<b>12,95</b>
gelb, weich, Packung 1.850 g	<b>141067</b>	<b>42,95</b>
rosa, hart, Packung 1.850 g	<b>141088</b>	<b>42,95</b>



## Bisswälle, vorgeformt

Hervorragend geeignet zur Herstellung von totalen Prothesen. Zeitersparnis, da die Arbeit des Umformens entfällt. Im labialen Bereich sind die Bisswälle etwas verjüngt, bleiben aber im buccalen Bereich bei Seitwärtsbewegungen in flächigem Kontakt. Die Bissbestimmung wird dadurch vereinfacht.

rot, hart, Packung 100 Stück	<b>140090</b>	<b>25,45</b>
grün, mittel, Packung 100 Stück	<b>140094</b>	<b>25,45</b>
orange, mittel, Packung 100 Stück	<b>140110</b>	<b>25,45</b>
gelb, weich, Packung 100 Stück	<b>140113</b>	<b>25,45</b>



## Mischpistole

Zubehör für die Abformung und Bissregistrierung  
Für Kartuschensysteme 1:1 und 2:1

Mischpistole 1:1 / 2:1, Stück	<b>149713</b>	<b>44,50</b>
-------------------------------	---------------	--------------



## Intraoral-Tips

Zubehör für die Abformung und Bissregistrierung

**Intraoral-Tips gelb**, verwendbar für folgende Mischkanülen:

- Mischkanüle gelb/weiß
- Mischkanüle gelb/blau
- Mischkanüle gelb/orange

**Intraoral-Tips weiß**, verwendbar für folgende Mischkanülen:

- Mischkanüle grün/weiß
- Mischkanüle rosa/weiß
- Mischkanüle weiß/weiß

Intraoral-Tips gelb, Packung 96 Stück	<b>149712</b>	<b>20,60</b>
Intraoral-Tips weiß, Packung 96 Stück	<b>141331</b>	<b>20,60</b>



## Anmischspatel

Aus flexiblem Kunststoff

- Farbe: hellblau
- Länge 190 mm

Stück	<b>289800</b>	<b>1,50</b>
-------	---------------	-------------



## Orbilock Abformlöffel

Aus 18/8-Edelstahl mit Rand und Innenbördelung. Durch die Bördelung wird das Abformmaterial auch ohne Haftmittel festgehalten. Sehr hohe Lebensdauer, ohne Wasserkühlung.

- Korrosionsbeständig
- Geeignet für Thermodesinfektionen, Autoklavieren und Ultraschallreinigung (Richtlinien des Herstellers beachten)

U5/x-klein, Stück	<b>141161</b>	<b>8,95</b>
U4/klein, Stück	<b>141162</b>	<b>8,95</b>
U3/mittel, Stück	<b>141163</b>	<b>8,95</b>
U2/groß, Stück	<b>141164</b>	<b>8,95</b>
U1/x-groß, Stück	<b>141165</b>	<b>8,95</b>
L 5/x-klein, Stück	<b>141166</b>	<b>8,95</b>
L 4/klein, Stück	<b>141167</b>	<b>8,95</b>
L 3/mittel, Stück	<b>141168</b>	<b>8,95</b>
L 2/groß, Stück	<b>141169</b>	<b>8,95</b>
L 1/x-groß, Stück	<b>141170</b>	<b>8,95</b>



## Abformlöffel Ehricke, perforiert

Abformlöffel aus Edelstahl mit gerundeten Kanten. Perforation für guten Halt des Abdruckmaterials.

- Korrosionsbeständig
- Geeignet für Thermodesinfektionen, Autoklavieren und Ultraschallreinigung (Richtlinien des Herstellers beachten)

BO/0, Stück	<b>289703</b>	<b>9,40</b>
BO/1, Stück	<b>289704</b>	<b>9,40</b>
BO/2, Stück	<b>289705</b>	<b>9,40</b>
BO/3, Stück	<b>289706</b>	<b>9,40</b>
BO/4, Stück	<b>289707</b>	<b>9,40</b>
BU/0, Stück	<b>289708</b>	<b>9,40</b>
BU/1, Stück	<b>289709</b>	<b>9,40</b>
BU/2, Stück	<b>289710</b>	<b>9,40</b>
BU/3, Stück	<b>289711</b>	<b>9,40</b>
BU/4, Stück	<b>289712</b>	<b>9,40</b>



## Adhäsiv-Liquids

Die Lösungen erzeugen eine starke, sehr dünne und permanente Klebeschicht und halten das Abformmaterial sicher im Abformlöffel fest.

Alginat, Flasche 30 ml	<b>193075</b>	<b>5,95</b>
Polyether, Flasche 30 ml	<b>193081</b>	<b>5,95</b>
Silikon, Flasche 10 ml	<b>193079</b>	<b>5,95</b>





## Tubenentleerer

Praktisches Hilfsmittel zum leichten Entleeren aller Tuben in der Praxis und zu Hause. Die stabilen Zahnwalzen pressen das allerletzte Gramm aus jeder Tube. Wertvolles Material kann dadurch komplett genutzt werden.

- Geeignet für alle Tuben bis 70 mm Falzbreite

Stück	<b>13879</b>	<b>6,90</b>
-------	--------------	-------------




## Anmischplatten aus Glas

Glasblock zum Anmischen von Zement, allseitig geschliffen und poliert, Kanten abgeschrägt. Große Anmischfläche. Die Glasblocks können auch gekühlt eingesetzt werden. Die Stärke des Glases verhindert dann eine Erwärmung und somit das vorzeitige Abbinden des Zements.

- Rutschfest
- Leicht zu reinigen
- Einseitig mattiert

Größe 70 x 95 x 6 mm, Packung mit 10 Stück	<b>140123</b>	<b>18,50</b>
--	---------------	--------------

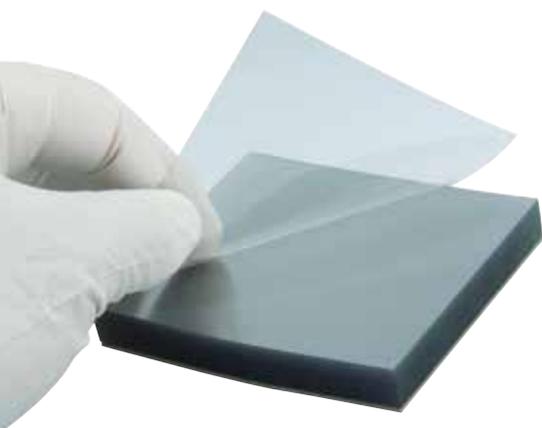


## Anmischblocks aus Hartfolie

ORBIS Anmischfolienblocks werden aus neutraler, transparenter Hartfolie hergestellt und sind besonders für Zemente geeignet. Kantensauberes Abtrennen des einzelnen Blattes. Die patentierte rutschfeste Unterseite ermöglicht ein verbessertes Handling beim Anmischen, da durch die Vollbeschichtung ein ausreichender Haftkontakt auf allen handelsüblichen Arbeitsplatten erzielt wird.

- Rutschfest
- 2-seitig geblockt

Größe 50 x 64 mm, 35 Blatt (z. B. für Ledermix)	<b>147684</b>	<b>3,30</b>
Größe 70 x 80 mm, Antirutsch, Block mit 100 Blatt	<b>147685</b>	<b>5,45</b>

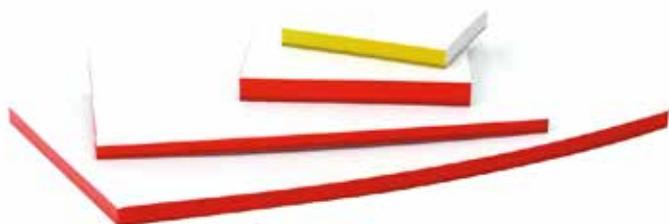

## Anmischblocks aus Papier

ORBIS Anmischblocks werden aus einem speziellen, 2-seitig beschichteten, abriebfesten hochweißen Papier bzw. reinem Pergament hergestellt und je nach Größe des Blocks 2- oder 3-seitig geblockt. Die als rutschfest ausgelobten Varianten besitzen eine patentierte rutschfeste Unterseite. Das ermöglicht ein verbessertes Handling beim Anmischen, da durch die Vollbeschichtung ein ausreichender Haftkontakt auf allen handelsüblichen Arbeitsplatten erzielt wird.

- Rutschfest
- Spezialpapier

Papier, Größe 35 x 45 mm, 12 x 40 Blatt (z. B. für Dycal)	<b>185969</b>	<b>18,80</b>
Pergamentpapier, Größe 40 x 40 mm, 5 x 50 Blatt (z. B. für Life)	<b>209927</b>	<b>11,95</b>
Antirutsch, Papier, Größe 60 x 75 mm, Block mit 40 Blatt	<b>147667</b>	<b>2,60</b>
Antirutsch, Papier, Größe 70 x 95 mm, Block mit 50 Blatt	<b>144114</b>	<b>3,25</b>
Antirutsch, Papier, Größe 125 x 180 mm, Block mit 25 Blatt	<b>144115</b>	<b>3,75</b>
Antirutsch, Papier, Größe 150 x 240 mm, Block mit 35 Blatt	<b>185744</b>	<b>6,45</b>



VAB/DGHM



aldehydfrei



phenolfrei

## ORBI-Touch protect Händedesinfektion

### Art der Anwendung:

Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen

### Stoff- oder Indikationsgruppe:

Desinfektionsmittel

### Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge

### Gegenanzeigen:

Das Händedesinfektionsmittel ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt

### Nebenwirkungen:

Bei Hauteinreibungen mit der Händedesinfektion können Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten.

### Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 62,8 g 2-Propanol, gereinigtes Wasser

### Hinweis:

Dicht verschlossen aufbewahren. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Zur Desinfektion im Gesundheitswesen. Zugelassen nach AMG in Deutschland. Zul.-Nr. 1599.98.99.

Euroflasche 500 ml	<b>10499</b>	<b>5,45</b>
Euroflasche 1 l	<b>10500</b>	<b>8,45</b>
Kanister 5 l	<b>10502</b>	<b>35,40</b>



*Einfach clever!*



## ORBI-Touch protect Händedesinfektion Biozid

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische Händedesinfektion. Zur Bekämpfung von Schadorganismen. Geeignet für Kühlumschläge.

### Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 62,8 g 2-Propanol, gereinigtes Wasser

### Hinweis:

Bitte das Anwendungsgebiet für Biozidprodukte beachten!

Euroflasche 500 ml, passend für Spender	<b>241127</b>	<b>5,45</b>
Euroflasche 1 l	<b>241128</b>	<b>8,45</b>
Kanister 5 l	<b>241129</b>	<b>35,40</b>



## ORBI-Touch Händedesinfektionsgel

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische Händedesinfektion. Die Gelformel lässt sich leicht auftragen und verteilen. Zur Bekämpfung von Schadorganismen. Geeignet für Kühlumschläge.

- Duftnote: neutral

### Hinweis:

Bitte das Anwendungsgebiet für Biozidprodukte beachten!

Spenderdosierflasche 500 ml	<b>264834</b>	<b>5,25</b>
-----------------------------	---------------	-------------



## ORBI-Touch Handgel bakterizid

Antibakterielles Gel zum Reinigen und Dekontaminieren der Hände

- Anwendung ohne Wasser
- Cool fresh
- Feuchtigkeitsspendend
- Hohe Reinigungsleistung
- Auf antibakterielle Wirksamkeit und dermatologische Verträglichkeit getestet

Spenderdosierflasche 500 ml	<b>161971</b>	<b>10,45</b>
-----------------------------	---------------	--------------



## ORBI-Touch Handwaschlotion

Milde Waschlotion zur gründlichen und schonenden Reinigung von Haut und Händen. Die Wirksubstanzen sind hautfreundlich und zugleich rückfettend, sodass auch bei häufigem Waschen Haut und Hände nicht austrocknen.

- Mit Vitaminen
- Dermatologisch getestet
- pH-Wert 6,5

Spenderdosierflasche 500 ml	<b>148239</b>	<b>4,95</b>
Euroflasche 500 ml, passend für Spender	<b>182408</b>	<b>4,95</b>
Euroflasche 1 l	<b>239971</b>	<b>9,40</b>
Kanister 10 l	<b>148238</b>	<b>37,55</b>



**Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaften! (TRBA 250)**

## ORBI-Touch protect Hautschutzcreme

ORBI-Touch protect Hautschutzcreme ist speziell zum Schutz der Hände des Personals im Arbeitsalltag entwickelt worden. Als Wasser-in-Öl-Emulsion bildet sie auf der Haut einen Schutzfilm, der hilft, diese insbesondere bei Feuchtarbeiten vor Schäden zu bewahren.

- Nachgewiesene Schutzwirkung
- Schützt die Haut vor wasserlöslichen Stoffen
- Hautpflegend mit Vitamin E, Glycerin und Bienenwachs
- Rezeptur dermatologisch getestet
- pH-Wert 4,5

### Anwendung:

ORBI-Touch protect Hautschutzcreme wird eingesetzt, um die Haut bei Feuchtarbeiten und auch beim Tragen von Handschuhen zu schützen. Zusätzlich zur Schutzfunktion pflegt die Creme vor allem rissige und spröde Haut.

### Hinweis:

Eine Schutzcreme ist ein Kosmetikum, haltbar nach Öffnung, das Anbruchdatum vermerken!

Tube 100 ml	<b>254852</b>	<b>5,25</b>
-------------	---------------	-------------



## ORBI-Touch Handcreme

Handcreme für anspruchsvolle Haut mit Vitaminen und wertvollen Hautschutzkomplexen. Für ein geschmeidiges und glattes Hautgefühl, lang anhaltenden Schutz und wohltuende Pflege. Besonders geeignet zur Pflege bei häufigem Händewaschen und beim Tragen von Handschuhen.

- Sehr angenehme Konsistenz
- Zieht schnell ein
- Mit neutralem, sehr angenehmem Duft
- Nicht fettend
- Öl-in-Wasser-Emulsion
- pH-Wert: ca. 6,0

### Hinweis:

Eine Pflegecreme ist ein Kosmetikum, haltbar nach Öffnung, das Anbruchdatum vermerken!

Tube 150 ml	<b>46444</b>	<b>5,25</b>
Euroflasche 500 ml	<b>226451</b>	<b>12,45</b>
Pumpkopf passend für die Spenderflasche 500 ml	<b>227165</b>	<b>4,20</b>



## ORBIS-Touch Hand- und Nagelbalsam

Der ORBI-Touch Hand- und Nagelbalsam ist eine sehr hochwertige und reichhaltige Wirkstofflösung für alle Haut- und Nageltypen. Sie wirkt rückfettend und beugt spröden Nägeln vor.

- Schützt und pflegt strapazierte Haut
- Stärkt die Fingernägel nachhaltig
- Zieht schnell ein
- Dezent parfümiert
- Öl-in-Wasser-Emulsion
- ph-Wert: ca. 6,0

**Hinweis:**

Eine Pflegecreme ist ein Kosmetikum, haltbar nach Öffnung, das Anbruchdatum vermerken!

Spender 100 ml	<b>227388</b>	<b>6,25</b>
----------------	---------------	-------------



## ORBIS-Sept Absauganlagendesinfektion

Hochwirksames Konzentrat zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von dentalen Absauganlagen. Es ist aldehydfrei und schäumt nicht. Dank der hohen Reinigungskraft werden auch hartnäckigere Ablagerungen entfernt. Breites Wirkungsspektrum, hohe Materialverträglichkeit, auch in Anlagen mit Amalgamabscheidern einsetzbar. Die regelmäßige Anwendung hilft, unangenehme Gerüche zu vermeiden.

- SIRONA-Freigabe

**Wirkungsspektrum:**

Bakterizid nach VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561. Levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562. Begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren, z. B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV.

**Einwirkzeiten:**

Bakterien und Candida albicans nach VAH/DGHM als Instrumentendesinfektion (hohe Belastung):

2,0 % 5 Min. / 1,0 % 60 Min.

Bakterien nach EN 13727 und EN 14561 (hohe Belastung):

3,0 % 2 Min.

Candida albicans nach EN 13624 und EN 14562 (hohe Belastung):

3,0 % 2 Min.

Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV (mit Belastung):

2,0 % 2 Min.

**In 100 g sind enthalten:**

7,5 g Dimethyldioctylammoniumchlorid

0,6 g Benzyltrimethyldecylammoniumchlorid

Flasche 2,5 l	<b>260252</b>	<b>20,95</b>
ab 4 Flaschen		<b>19,95</b>



## Mundspülbeckenreiniger

Gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Pflege von Mundspülbecken in der Zahnarztpraxis.

Das Präparat besitzt eine desinfizierende Wirkung und ist ebenfalls geeignet zur Anwendung in Waschbecken und auf Fliesen. Entfernt Rückstände von Blut, Kalk, Plaquefärbetabellen und Abformmaterialien. Das Präparat hinterlässt nach der Anwendung eine Antischmutzbeschichtung auf der Oberfläche, die das Anhaften neuer Verschmutzungen reduziert.

**Wirkungsspektrum:**

Bakterizid und levurozid (Candida albicans) nach DIN EN 13697, tuberkulozid nach DIN EN 14348

**Einwirkzeiten:**

Bakterien und Candida albicans nach EN 13697:

Unverdünnt: 1 Min. (niedrige Belastung)

Tuberkulose-Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348:

Unverdünnt: 5 Min. (niedrige Belastung)

**In 100 g sind enthalten:**

25 g Ethanol

1,0 g Bis(3-Aminopropyl)dodecylamin



Flasche 750 ml	<b>193084</b>	<b>9,95</b>
----------------	---------------	-------------



VAH/DGHH



aldehydfrei



phenolfrei

## ORBI-Sept Bohrerbad

Zur Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von zahnärztlichen Bohrern und rotierenden Instrumenten. Auch geeignet für den Einsatz im Ultraschall.

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 13727, EN 14561, VAH  
 Levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH  
 Tuberkulozid (M. terrae) nach EN 14348, EN 14563  
 Begrenzt viruzid (behüllte Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI

### Einwirkzeiten:

Bakterien (EN 13727, EN 14561, VAH, hohe Belastung), Candida albicans (EN 13624, EN 14562, VAH, hohe Belastung), TbB (M. terrae) nach EN 14348, EN 14563, niedrige Belastung, behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI (hohe Belastung):  
 Konz.: 5 Min.

### In 100 g sind enthalten:

0,396 g Didecyldimethylammoniumchlorid  
 0,2475 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Flasche 2,5 l	<b>263561</b>	<b>15,55</b>
ab 4 Flaschen		<b>12,45</b>



VAH/DGHH



aldehydfrei



phenolfrei

## ORBI-Sept Instrumentendesinfektion

Konzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Desinfektionslösung zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauchbadverfahren.  
 Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

### Einwirkzeiten: Bakterien nach EN 13727, EN 14561, VAH mit hoher Belastung:

1,5 % 15 Min. / 1,0 % 60 Min.  
 Candida albicans nach EN 13624, EN 14562 VAH mit hoher Belastung:  
 1,5 % 15 Min. / 1,0 % in 60 Min.  
 Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI mit hoher Belastung:  
 1,5 % 15 Min. / 1,0 % 60 Min.  
 TbB (M. terrae) nach EN 14348, EN 14563, niedrige Belastung:  
 4,0 % 15 Min. / 2,0% 60 Min.

### In 100 g sind enthalten:

4,4 g Didecyldimethylammoniumchlorid; 2,75 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin VO 648/2004/EG; 5–15 % nichtionische Tenside, < 5 % kationische Tenside, < 5 % EDTA-Salze, Duftstoffe

Flasche 2,5 l	<b>262557</b>	<b>26,95</b>
ab 4 Flaschen		<b>24,95</b>



# Mit Sicherheit sauber!

Desinfektionslinie mit verbesserter Rezeptur

- ✓ **Made in Germany**
- ✓ **4-Felder-Test (DIN EN 16615)**
- ✓ **VAH-gelistet**
- ✓ **Alkoholfreie Tücher / Lösung sogar vollviruzid**

- Duftnoten: neutral, coolfresh
- Tuchqualitäten:

**Soft/Flow:** 50 g/m<sup>2</sup>,  
aus Polyester-Viskose-Mischmaterial,  
fusselfrei

**Premium:** 60 g/m<sup>2</sup>,  
sehr hochwertiges Vliesmaterial,  
fusselfrei





## ORBI-Sept Flächendesinfektion – alkoholfrei

**Gemäß MPG:** Alkoholfreie Flächendesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten.

**Gemäß Biozid-Richtlinie:** Alkoholfreie Flächendesinfektion zur Desinfektion von Flächen.

Besonders geeignet zur Anwendung auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas.

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach VAH, EN 13727, EN 13697, EN 1276, EN 16615; levurozid (Candida albicans) nach VAH, EN 13624, EN 13697, EN 1650, EN 16615; begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), Rotaviren nach RKI/DVV, Noroviren nach EN 14476

### Einwirkzeiten der Tränkflüssigkeit:

Bakterien nach EN 13727, EN 1276 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 Min.  
Candida albicans nach EN 13624, EN 1650 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 Min.  
Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) gemäß RKI/DVV mit hoher Belastung: Konz. 1 Min.  
Rotaviren nach DVV mit Belastung: Konz. 1 Min.  
Noroviren nach EN 14476 (niedrige Belastung): Konz. 30 Sek.

### Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans nach VAH mit Mechanik und EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 2 Min.

Bakterien und Candida albicans: Eintrag in VAH-Liste: Konz. 5 Min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste)

### In 100 g sind enthalten:

0,24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid  
0,24 g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid  
0,24 g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid

**VO 648/2004/EG:** Enthält < 5 % kationische Tenside, Duftstoffe

Flasche 2,5 l	<b>258134</b>	<b>17,90</b>
ab 4 Flaschen		<b>16,50</b>



## ORBI-Sept Flächendesinfektion

**Gemäß MPG:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

**Gemäß Biozid-Verordnung:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

- Duftnoten: neutral, cool fresh

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 13727, EN 13697, VAH, EN 16615; levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 13697, VAH, EN 16615; tuberkulozid (M. terrae) nach EN 14348; begrenzt viruzid (behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) nach DVV; begrenzt viruzid PLUS (behüllten Viren und Adeno-, Rota- und Noroviren) nach DVV und EN 14476

### Einwirkzeiten:

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung), Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung), TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348 (hohe Belastung), behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) gemäß DVV/2012 im Flächentest mit hoher Belastung, Adenoviren (EN 14476, hohe Belastung), Noroviren nach EN 14476 (hohe Belastung), Rotaviren nach EN 14476 (hohe Belastung): Konz. 1 Min.

### Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans (VAH, Stand: 02.04.2015; EN 16615, hohe Belastung): Konz. 2 Min.

### In 100 g sind enthalten:

43,0 g Ethanol; 8,0 g 1-Propanol; 0,055 g Didecyldimethylammoniumchlorid

### Hinweis:

- Nicht geeignet zur terminalen Aufbereitung invasiver Medizinprodukte
- Desinfektionslösung darf zum Tränken nur mit Tuchmaterialien und Einwirkzeiten, die nach EN 16615 kompatibel sind, verwendet werden.

cool fresh, Flasche 2,5 l	<b>258143</b>	<b>16,65</b>
ab 4 Flaschen		<b>15,45</b>
neutral, Flasche 2,5 l	<b>258144</b>	<b>16,65</b>
ab 4 Flaschen		<b>15,45</b>





## ORBI-Sept Flächendesinfektion sensitive

**Gemäß MPG:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten im medizinischen Bereich. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. **Gemäß Biozid-Verordnung:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

### Einwirkzeiten (bezogen auf die Tränkflüssigkeit):

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 Min. • Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 Min. • TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae) nach DGHM (hohe Belastung): Konz. 1 Min. • Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) gemäß RKI/DVV mit hoher Belastung: Konz. 1 Min. • Adenoviren (EN 14476, niedrige Belastung): Konz. 1 Min. • Noroviren (EN 14476, niedrige Belastung): Konz. 1 Min. • Rotaviren (EN 14476, niedrige Belastung): Konz. 1 Min.

### Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans nach VAH und EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 5 Min. Bakterien und Candida albicans: Eintrag in VAH-Liste: Konz. 5 Min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste)

**In 100 g sind enthalten:** 39,0 g Ethanol; 0,056 g Didecylidimethylammoniumchlorid

Flasche 2,5 l	<b>262559</b>	<b>16,60</b>
ab 4 Flaschen		<b>14,60</b>



## ORBI-Sept Flächendesinfektion plus

**Gemäß MPG:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten im medizinischen Bereich. **Gemäß Biozid-Verordnung:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

### Einwirkzeiten:

Bakterien und Candida albicans (VAH, ohne Mechanik): Konz. 30 Sek. (niedrige Belastung) / Konz. 1 Min. (hohe Belastung) • Bakterien und Candida albicans nach EN 13624, EN 13727 (hohe Belastung): Konz. 30 Sek. • Bakterien und Candida albicans nach EN 1276, EN 1650 (hohe Belastung): Konz. 1 Min. • TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (nach DGHM), EN 14348: Konz. 30 Sek. (niedrige Belastung) / Konz. 1 Min. (hohe Belastung, EN 14348) • Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV mit Belastung: Konz. 30 Sek. • Adenoviren (EN 14476): Konz. 30 Sek. (hohe Belastung) • Noroviren (EN 14476): Konz. 1 Min. (niedrige Belastung); • Rotaviren (EN 14476): Konz. 30 Sek. (hohe Belastung) • Begrenzt viruzid plus : Konz. 1 Min. • Vaccinia-, Adeno- und Noroviren im Carriertest nach DVV 2012: Konz. 2 Min. (niedrige Belastung)

### Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans nach EN 16615, VAH (mit Mechanik) unter hoher Belastung: Konz. 1 Min.

**In 100 g sind enthalten:** 37,0 g 1-Propanol; 24,0 g Ethanol; VO 648/2004/EG: enthält Duftstoffe

**Hinweis:** Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Flasche 2,5 l	<b>262560</b>	<b>15,45</b>
ab 4 Flaschen		<b>14,35</b>



## ORBI-Sept Flächendesinfektion konz.

**Gemäß Biozid-Verordnung:** Aldehydfreies Flächenkonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen. **Gemäß MPG:** Flächendesinfektionsmittel zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten.

### Einwirkzeiten (bezogen auf die Tränkflüssigkeit):

Bakterien und Candida albicans nach EN 13727, EN 13624, EN 13697 (hohe Belastung): 0,5 % 15 Min. • Bakterien und Candida albicans nach VAH, EN 16615 (hohe Belastung): 3,0 % 15 Min. / 1,0 % 60 Min. • Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI (hohe Belastung): 2,0 % 5 Min. / 1,0 % 60 Min. • TbB (M. terrae) nach EN 14348 (niedrige Belastung): 1,0 % 60 Min.

**Kennzeichnung gemäß VO 648/2004/EG:** < 5 % nichtionische Tenside, 5–15 % kationische Tenside

**In 100 g sind enthalten:** 5,6 g Didecylidimethylammoniumchlorid  
3,1 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin

### Hinweis:

Bitte die Regeln zum Ansetzen von Desinfektionslösungen mit Konzentraten beachten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Flasche 2,5 l	<b>262556</b>	<b>22,40</b>
---------------	---------------	--------------



(1-l Flasche nicht mehr verfügbar)



## Sprühdesinfektion fruit

Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten

- Wirksam gegenüber MRSA
- Duftnote: fruit

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid, virusinaktivierend (inkl. HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-, Influenzaviren (H1N1))

### Einwirkzeiten gemäß VAH/DGHM-Richtlinien:

Bakterizid, levurozid: 1 Min.  
Inaktivierung von behüllten Viren wie Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV (begrenzt viruzid): 30 Sek.  
Tuberkulosebakterien: 1 Min.

### Hinweis:

Nicht für die Verwendung bei Acrylglas, empfindlichen Oberflächen und mit farbigen Tüchern geeignet. Wir empfehlen hier die Verwendung der alkoholfreien Flächendesinfektion REF 258134 oder von alkoholfreien Desinfektionstüchern REF 256449.

Kanister 5 l	<b>279995</b>	<b>29,95</b>
Kanister 10 l	<b>279996</b>	<b>52,25</b>



**Jetzt verbesserte  
Tuchqualität**



## ORBI-Sept Wet Wipes

**Gemäß MPG:** Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

**Gemäß Biozid-Verordnung:** Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen.

**Duftnote:** neutral, cool fresh

### Tuchqualitäten:

- Standard – 24 g/m<sup>2</sup>, 12 x 20 cm Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei
- Soft M – 50 g/m<sup>2</sup>, 15 x 23 cm Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei
- Soft L – 50 g/m<sup>2</sup>, 28 x 30 cm Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei
- Premium – 60 g/m<sup>2</sup>, 28 x 30 cm hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar zu Mikrofaserqualität), fusselfrei

### Wirkungsspektrum:

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697; Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697; TbB(Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348; behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) gemäß DVV/2012 (im Flächentest); Adenoviren (EN 14476, hohe Belastung); Noroviren nach EN 14476 (hohe Belastung)

### Einwirkzeiten (bezogen auf die getränkten Tücher):

Wirksamkeit der getränkten Tücher nach EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 2 Min.  
Bakterien und Candida albicans (nach VAH, Stand: 02.04.2015, hohe Belastung): Konz. 2 Min.

Bakterien und Candida albicans (Tränkflüssigkeit, Eintrag in VAH-/DGHM-Liste): Konz. 5 Min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-/DGHM-Liste)

### In 100 g Tränkflüssigkeit sind enthalten:

43,0 g Ethanol; 8,0 g 1-Propanol; 0,055 g Didecyldimethylammoniumchlorid

### Information:

Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 (Größe S mit REF 184926)

### Hinweis:

Alle Tücher erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test). Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. Nicht für die Verwendung bei Acrylglas, empfindlichen Oberflächen und mit farbigen Tüchern geeignet. Wir empfehlen hier die Verwendung der alkoholfreien Flächendesinfektion REF 258134 oder von alkoholfreien Desinfektionstüchern REF 256449.

Standard, S, 12 x 20 cm, cool fresh, 6 Beutel à 100 Tücher	<b>261127</b>	<b>20,35</b>
Soft, M, 15 x 23 cm, neutral, Beutel à 240 Stück	<b>273791</b>	<b>18,80</b>
Soft, M, 15 x 23 cm, cool fresh, Beutel à 240 Stück	<b>273792</b>	<b>18,80</b>
Soft, L, 28 x 30 cm, neutral, Beutel à 90 Stück	<b>258139</b>	<b>18,25</b>
Soft, L, 28 x 30 cm, cool fresh, Beutel à 90 Stück	<b>258140</b>	<b>18,25</b>
Premium, L, 28 x 30 cm, neutral, Beutel à 75 Stück	<b>258141</b>	<b>18,25</b>
Premium, L, 28 x 30 cm, cool fresh, Beutel à 75 Stück	<b>258142</b>	<b>18,25</b>



## ORBI-Sept Wet Wipes alkoholfrei

Alkoholfreie Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von invasiven und nichtinvasiven Medizinprodukten sowie zur Desinfektion von Oberflächen

**Duftnote:** neutral

**Tuchqualität:** 50g/m<sup>2</sup>, 20 x 30 cm

**Wirkungsspektrum:**

Bakterizid (inkl. MRSA)  
 Levurozid (Candida albicans)  
 Tuberkulozid (M. terrae)  
 Wirksam gegenüber behüllten und unbehüllten Viren

**Einwirkzeiten:**

Wirksamkeit der getränkten Tücher nach EN 16615: Konz. 2 Min.  
 Bakterien und Candida albicans (gem. den Anforderungen des VAH, Stand: 02.04.2015): Konz. 2 Min.

**Hinweis:**

Tücher erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test).

Flow, L, 20 x 30 cm, neutral, Flowpack à 80 Tücher	<b>256449</b>	<b>10,95</b>
--	---------------	--------------



## Desinfektionstücher fruit

Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten

- Duftnote: fruit
- Wirksam gegenüber MRSA
- Vliesqualität: 18 g/m<sup>2</sup>

**Wirkungsspektrum:**

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, virusinaktivierend (inkl. HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-, Influenzaviren (H1N1))

**Einwirkzeiten der Tränkflüssigkeit:**

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid: Konz. 1 Min.  
 Inaktivierung von behüllten Viren wie Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV (begrenzt viruzid): Konz. 30 Sek.  
 Tuberkulosebakterien: Konz. 1 Min.

**Hinweis:**

Nicht für die Verwendung bei Acrylglas, empfindlichen Oberflächen und mit farbigen Tüchern geeignet. Wir empfehlen hier die Verwendung der alkoholfreien Flächendesinfektion REF 258134 oder von alkoholfreien Desinfektionstüchern REF 256449.

Nachfüllpackung, 6 x 100 Tücher	<b>279997</b>	<b>20,90</b>
Leerdose, Stück	<b>184926</b>	<b>2,80</b>

## Leerdose

Zur sicheren Aufbewahrung von Desinfektionstüchern

**Hinweis:**

Die aktuellen Hygienerichtlinien zur Aufbereitung von Desinfektionsbehältern beachten.

Stück	<b>184926</b>	<b>2,80</b>
-------	---------------	-------------





**Jetzt verbesserte  
Tuchqualität**



## ORBI-Wipes

Ungetränkte Vliestücher – geeignet für die Herstellung von Desinfektionstüchern in Tuchspendersystemen

Tuchqualitäten:

- **Soft M – 50 g/m<sup>2</sup>**, 15 x 23 cm Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei, gleichmäßig mit 1.400 ml Desinfektionslösung übergießen, mind. 30 Min. einwirken lassen
- **Soft L – 50 g/m<sup>2</sup>**, 28 x 30 cm Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei, gleichmäßig mit 1.600 ml Desinfektionslösung übergießen, mind. 30 Min. einwirken lassen
- **Premium – 60 g/m<sup>2</sup>**, 28 x 28 cm sehr hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar zu Mikrofasergüte) gleichmäßig mit 1.200 ml Desinfektionslösung übergießen, mind. 30 Min. einwirken lassen

### Hinweis:

Die Tücher sind geeignet, um mit der ORBI-Sept Flächendesinfektion (REF 258143, 258144 und 258134) die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test) zu erfüllen.

### Information:

- Verwendbar mit Spendereimer REF 46122

Soft M, 15 x 23 cm, 2 Rollen à 240 Blatt	<b>273793</b>	<b>25,50</b>
Soft L, 28 x 30 cm, 2 Rollen à 90 Blatt	<b>258302</b>	<b>22,45</b>
Premium, 28 x 28 cm, 2 Rollen à 75 Blatt	<b>46121</b>	<b>26,85</b>

## ORBI-Wipes Box

ORBI-Wipes Box inkl. 50 ungetränkter Mikrovliestücher

- Flache Spenderbox für ungetränkte Wischtücher
- Maße: 35 x 25 x 6,5 cm
- Für die Schublade geeignet
- Gleichmäßig mit 1.500 ml Desinfektionslösung vorsichtig mittig aufgießen – mind. 30 Min. einwirken lassen

ORBI-Wipes Box, gefüllt mit 50 Tüchern, Stück	<b>279991</b>	<b>16,45</b>
Nachfüllpackung, 3 Lagen à 50 Blatt, Stück	<b>279992</b>	<b>20,85</b>

## ORBI-Wipes Mikrovliestücher, ungetränkt

Feinstes Mikrovlies aus einem fusselfreien, softigen Viskose-Polyester-Gemisch zur Tränkung mit ORBIS Flächendesinfektionsmitteln.

Die softige Struktur des Mikrovliestuches gewährleistet eine hervorragende Abgabe der Desinfektionslösung sowie eine einheitliche Benetzung der zu desinfizierenden Oberflächen.

- Größe 30 x 27 cm
- Hohe Reißfestigkeit
- Optimales Saug- und Wiederabgabevermögen
- Mikrovliesqualität: 50 g/m<sup>2</sup>

### Information:

- Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 und Leeretikett REF 25350
- Perfekte Ergänzung zur ORBIS Sprüh- und Wischdesinfektion

Ungetränkte Wischtücher, Ø 28 mm, Höhe 300 mm, 2 Mikrovliesrollen à 80 Blatt	<b>279993</b>	<b>21,85</b>
--	---------------	--------------



**Jetzt verbesserte  
Tuchqualität**

## ORBI-Wipes Wischtücher, ungetränkt

Extragroße Wischtücher, aus hochwertigem, besonders abriebfestem Vliesmaterial. Entscheiden Sie selbst, welche Wirkstofflösung Sie einsetzen möchten. Die Rolle mit den trockenen Wischtüchern in den Spendereimer einsetzen und mit 1.400 ml eines für die Wischdesinfektion zugelassenen Präparats Ihrer Wahl begießen, Eimer schließen, korrekt etikettieren – und fertig! Nach wenigen Minuten haben die hochsaugfähigen Tücher die Lösung in sich aufgenommen und stehen zum Verbrauch bereit!

- Größe 20 x 30 cm
- Spezialvlies
- Vliesqualität: 50 g/m<sup>2</sup>

### Information:

- Verwendbar mit Spendereimer REF 16218 und Leeretikett REF 25350
- Perfekte Ergänzung zur ORBIS Sprüh- und Wischdesinfektion

Extragroße Wischtücher, Beutel mit 150 Stück	<b>273790</b>	<b>12,30</b>
ab 6 Packungen		<b>10,30</b>



## ORBI-Sept Spendereimer

Spendereimer, für ORBI-Sept Wet Wipes (getränkte) und ORBI-Wipes (ungetränkte) Tücher zu verwenden

### Größe:

Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 200 mm

### Hinweis:

Eine maschinelle chemo-thermische Aufbereitung bei max. 60 °C ist möglich.

Stück	<b>46122</b>	<b>5,50</b>
Leeretikett, selbstklebend, Stück	<b>25350</b>	<b>0,32</b>



## Tray-Cleaner

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Der Spezialreiniger löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphatzementen sowie thermoplastischen Abformmassen und Wachsen. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

### Anwendung:

- Konzentration 5–10 % max.
- Je nach Verschmutzungsgrad mind. 45 Min. einwirken lassen
- Für Ultraschallbad geeignet

### Hinweis:

Produkte aus Chrom, Nickel und Aluminium sollten nicht gemeinsam gereinigt werden. Es besteht Korrosionsgefahr!

Dosierflasche 1 l	<b>193082</b>	<b>17,80</b>
Kanister 5 l	<b>193083</b>	<b>70,90</b>



## ORBI-Clean Orange

Gebrauchsfertige Lösung zur schonenden Intensivreinigung von Flächen und Instrumenten. ORBI-Clean Orange entfernt kraftvoll Alginat- und Zementreste, Zink-Eugenol-Pasten und Reste von Abformmassen, Adhäsiven ohne Zerkratzen der Oberflächen.

- Reinigt hervorragend Edelstahlfächen
- Angenehmer Orangenduft

### Hinweis:

ORBI-Clean Orange ist nicht zur Bearbeitung von Kunststoffoberflächen geeignet.

Flasche 500 ml	<b>275962</b>	<b>10,45</b>
----------------	---------------	--------------



## ORBI-Sept Abformdesinfektion

Zur Desinfektion aller dentalen Abformmaterialien

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 13727, EN 14561, VAH; levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH; tuberkulozid (M. terrae) im DGHM-Suspensionstest; begrenzt viruzid (behüllte Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI

### Einwirkzeiten:

Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH, EN 13727, EN 14561 (hohe Belastung): Konz. 1 Min.  
Candida albicans nach VAH, EN 13624, EN 14562 (hohe Belastung): Konz. 1 Min.  
Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV: Konz. 1 Min. (mit Belastung)  
TbB (M. terrae im Suspensionstest, niedrige Belastung): Konz. 15 Min.  
Noroviren nach EN 14476 (niedrige Belastung): Konz. 30 Min.  
Rotaviren nach BGA/DVV (niedrige Belastung): Konz. 1 Min.

### In 100 g sind enthalten:

0,24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid  
0,24 g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid  
0,24 g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid  
0,35 g Chlorhexidingluconat

VO 648/2004/EG: enthält < 5 % kationische Tenside, Parfüm

Flasche 2,5 l	<b>262558</b>	<b>21,50</b>
---------------	---------------	--------------



## T-Ölspray

Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken, Köpfen und Turbinen sowie Luftmotoren. Täglich 2-mal für ca. 2–3 Sek. durchsprühen, insbesondere vor jeder Sterilisation. Dose bei Gebrauch senkrecht halten und mit entsprechendem Adapter verwenden.

- Lange Haltbarkeit
- Öl ist geeignet für die Sterilisation im Autoklav (134 °C)
- Nur für Sirona Hand- und Winkelstücke

Dose 250 ml	<b>177943</b>	<b>15,80</b>
-------------	---------------	--------------



## Universal-Spray

Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken, Köpfen und Turbinen sowie Luftmotoren. Instrumente täglich 2-mal für ca. 2–3 Sek. durchsprühen, insbesondere vor jeder Sterilisation. Dose bei Gebrauch senkrecht halten und mit vorhandenem Adapter verwenden.

- Lange Haltbarkeit
- Öl ist geeignet für die Sterilisation im Autoklav (134 °C)

Dose 500 ml	<b>177942</b>	<b>14,95</b>
ab 6 Dosen		<b>13,95</b>



## Flaschenzubehör, Leerflaschen

Die Zubehöreile für unsere Hygienepräparate in Flaschen unterstützen Sie beim sicheren Umgang mit unseren hochwirksamen Hygienepräparaten.

Dosierflasche leer, Volumen 1 l, Stück	<b>148093</b>	<b>4,25</b>
Sprühflasche leer, Volumen 1 l, Stück	<b>148155</b>	<b>4,35</b>
Sprühkopf für 1-l-Flasche, Stück	<b>148156</b>	<b>3,20</b>
Weithalsflasche 200 ml, mit Schaumkopf (Foamer), extrem handlich, Stück	<b>46466</b>	<b>4,40</b>
Weithalsflasche 750 ml, geköpft, für Mundspülbeckenreiniger, Stück	<b>16158</b>	<b>2,20</b>
Pumpkopf passend für die Spenderflasche 500/1.000 ml, Stück	<b>227165</b>	<b>4,20</b>
Neutrales Etikett, selbstklebend, wiederbeschreibbar, Stück	<b>25350</b>	<b>0,32</b>



## Kanisterzubehör

Die Zubehörteile für unsere Hygienepräparate in Kanistern unterstützen Sie beim sicheren Umgang mit unseren hochwirksamen Hygienepräparaten. Geeignet für 2,5-l-, 5-l- und 10-l-Gebinde.

Kanisterpumpe, 30 ml/Hub, passend für 2,5 l, 5 l, 10 l, Stück	<b>148116</b>	<b>9,65</b>
Kanisterhahn, Stück	<b>148122</b>	<b>7,45</b>
Kanisterschlüssel, Stück	<b>148149</b>	<b>4,25</b>
Kanisterpumpe für 2,5-l-Kanister, Stück	<b>266208</b>	<b>8,25</b>



## Messbecher Orbis

Messbecher zum einfachen Ansetzen einer Desinfektionslösung für die Orbis Tuchspender-Systeme

2.000 ml, Stück	<b>241494</b>	<b>8,20</b>
-----------------	---------------	-------------



## Desinfektionswanne

Für alle Desinfektionsmittel geeignet, Inhalt ca. 3 l. Die Wanne besteht aus 4 Einzelteilen: Hauptwanne, Siebeinsatz, Abdeckung für Sieb und Wannendeckel. Der Siebeinsatz kann der Wanne entnommen werden und zum erleichterten Abtropfen der Lösung schräg auf die Wanne aufgesetzt werden. Die Wanne ist temperaturbeständig bis 75 °C.

### Hinweis:

Die Wanne nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln desinfizieren.

- Außenmaße (L x B x H): 320 x 215 x 135 mm
- Innenmaße (L x B x H): 245 x 155 x 100 mm
- Aus weißem Kunststoff

Stück	<b>187827</b>	<b>44,95</b>
-------	---------------	--------------



## Bohrerbadbehälter 3-teilig

- Aus weißem Kunststoff
- Außenmaße: Ø 9,5 cm, Höhe: 6,4 cm
- Innenmaße: Ø 8,4 cm

Stück	<b>265449</b>	<b>11,30</b>
-------	---------------	--------------



## ORBI-Touch Spender 1000

Formschöner Universal-Armhebelspender

- Geeignet für Händedesinfektionen und Handwaschlotionen
- Passend für Spenderflaschen 500 oder 1.000 ml
- Auswechselbare Pumpe
- Flexible Dosiermengeneinstellung
- Adapter für 500-ml-Spenderflaschen inkl.
- 1.000-ml-Leerflasche inkl.
- Wandhalterung inkl.
- Maße: H 330 (bzw. Bügel 350) x B 105 x T 222 mm (mit Tropfschale)
- Maße: H 308 (bzw. Bügel 325) x B 105 x T 222 mm (ohne Tropfschale)

### Hinweis:

- Wandhalter des Präparatespenders REF 182211 kann weiter verwendet werden, neue Bohrungen entfallen.
- Oberfläche beständig gegen alkoholische Desinfektionsmittel
- Optimiert für ORBI-Touch Handwaschlotion und ORBI-Touch Händedesinfektion

Spender 1000, weiß, Stück	<b>246928</b>	<b>46,95</b>
---------------------------	---------------	--------------

Spender 1000, silber, Stück	<b>246929</b>	<b>62,90</b>
-----------------------------	---------------	--------------

Abtropfschale, weiß, Stück	<b>246930</b>	<b>7,30</b>
----------------------------	---------------	-------------

Abtropfschale, silber, Stück	<b>246931</b>	<b>11,50</b>
------------------------------	---------------	--------------

Pumpe für Spender, Stück	<b>246932</b>	<b>5,25</b>
--------------------------	---------------	-------------

Ersatzschlauch für Pumpe, Stück	<b>256141</b>	<b>0,85</b>
---------------------------------	---------------	-------------

Schlüssel für Verschlussplatte, Stück	<b>246933</b>	<b>2,10</b>
---------------------------------------	---------------	-------------

## Präparatespender

Wandspender für die Entnahme von Präparaten. Er kann wahlweise mit Händedesinfektionsmittel, Seife oder Pflege lotion bestückt werden.

- Edelstahlgehäuse
- Mit stabilem Bedienungshebel aus Metall
- Dosiermenge ca. 2 ml je Hub
- Für 500-ml-Flaschen
- Größe (B x H x T): 95 x 260 x 75 bzw. mit Armhebel: 170 mm
- Leicht zu montieren
- Rostfrei

Stück	<b>182211</b>	<b>70,90</b>
-------	---------------	--------------



# Hygienisch rein

... dank ORBIS Präparatespender

## Orbi-Touch Spender 1000

- Hygienischer Design-Armhebelspender
- In elegantem Weiß oder cooler Edelstahloptik
- Wahlweise für 500-ml- oder 1.000-ml-Eurospenderflaschen
- Wandhalterung inklusive, Abtropfschale ist separat erhältlich
- Verschiedene Dosiermengen einstellbar

**Erleben Sie Hygiene in attraktivem Design!**





## Sterilisationsfolien

Stabile Papier-/Folienschläuche zur Sterilgutverpackung, verschließbar mit dem Folienschweißgerät

- Deutlich sichtbarer Indikator für Dampf- und Gassterilisation
- Optimale Beibehaltung der Sterilität über einen relativ langen Zeitraum
- Lieferbar in unterschiedlichen Breiten
- Ohne Seitenfalten
- 3-fache Seitenverschweißung
- Doppelschichtfolie aus Polypropylen/Polyester
- Siegeltemperatur 170–200 °C

### Angewandte Normen:

Richtlinie 93/42/EWG  
EN 868, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2

Breite 100 mm, Rolle mit 200 m ab 4 Rollen	<b>142944</b>	<b>29,95</b> <b>28,95</b>
Breite 75 mm, Rolle mit 200 m ab 5 Rollen	<b>142943</b>	<b>22,95</b> <b>21,95</b>
Breite 50 mm, Rolle mit 200 m ab 8 Rollen	<b>142942</b>	<b>19,45</b> <b>18,45</b>
Breite 150 mm, Rolle mit 200 m	<b>142954</b>	<b>49,95</b>
Breite 200 mm, Rolle mit 200 m	<b>142955</b>	<b>59,95</b>
Breite 250 mm, Rolle mit 200 m	<b>142957</b>	<b>72,45</b>



## Sterilisationstüten

Stabile Papier-/Folienbeutel zur Sterilgutverpackung, verschließbar mit dem Folienschweißgerät. Zusätzlich zu der 3-fachen Verschweißung sind die Beutel an einem Ende mit einer 4. Sicherheitsverschweißung versehen.

- Einfache Bestückung der Beutel durch Ausschnitt an der Öffnungsseite
- Deutlich sichtbarer Indikator für Dampf- und Gassterilisation
- Nicht selbstklebend

Format 50 x 250 mm, 500 Stück	<b>260325</b>	<b>15,25</b>
Format 75 x 250 mm, 500 Stück	<b>260326</b>	<b>20,90</b>
Format 100 x 250 mm, 500 Stück	<b>260327</b>	<b>26,90</b>



## Sterilisationsindikator

Klebeband für die Dampfsterilisation (inkl. Indikator)

Das Klebeband ist für die Verwendung von Weichverpackungen nach DIN EN 868-2 und ISO 11607-1 vorgesehen.

Bei erfolgreicher Dampfsterilisation erfolgt ein deutlicher Farbumschlag.

- Breite 19 mm

Rolle 50 m, Stück	<b>141219</b>	<b>8,35</b>
-------------------	---------------	-------------



## ORBI-Temp K&B

Selbst anmischbares pastöses 4:1-Kompositmaterial in Kartuschen zur Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken, Onlays und Veneers direkt am Patienten. Das Material ist wegen seiner hohen Endhärte bei großer Elastizität für die Herstellung von großen Brücken besonders geeignet. Die hohe Stabilität zeigt sich besonders an dünnen Kronenrändern. Das Material ist daher zur Verwendung für ausgedehnte Brücken sehr gut geeignet. Es zeichnet sich weiterhin aus durch eine gute Ästhetik, durch optimale Polierbarkeit, hohe Farbstabilität und Fluoreszenz.

- Methylmethacrylatfrei
- Enthält kein Bisphenol A
- Aushärtungstemperatur liegt unter 40 °C
- Sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte
- Geringe Polymerisationsschrumpfung
- Äußerste Passgenauigkeit
- Röntgensichtbar

ORBI-Temp K&B Provisorien können im Falle eines Bruchs leicht repariert werden, da bereits abgedunenes Material sich mit frisch angemischtem Material oder mit lichthärtenden Composites chemisch verbindet.

ORBI-Temp K&B, Farbe A2, Kartusche 50 ml, 6 Mischkanülen	<b>266819</b>	<b>55,35</b>
ORBI-Temp K&B, Farbe A3, Kartusche 50 ml, 6 Mischkanülen	<b>224924</b>	<b>55,35</b>
ORBI-Temp K&B, Farbe A3,5, Kartusche 50 ml, 6 Mischkanülen	<b>266820</b>	<b>55,35</b>
Mischkanülen (blau/orange), Packung 50 Stück	<b>169178</b>	<b>29,95</b>





## ORBI-HiSilber Amalgam

Klassisches Amalgam, hoch silberhaltig. Einfach zu verarbeiten, gut stopfbar und formstabil. Für Füllungen der Klassen I und II.

- Non-Gamma-2-frei
- Korrosionsresistent
- Hoher Oberflächenglanz
- Erfüllt den ISO-Standard 1559 und die ADA-Spezifikation Nr. 1
- Normalhärtend
- Ohne Zink

**Zusammensetzung:** 70 % Silber, 18 % Zinn, 12 % Kupfer  
**Mischzeit:** 3.500 UpM ca. 11–12 Sek., 4.500 UpM ca. 9–10 Sek.  
**Verarbeitungszeit:** ca. 4 Min.  
**Druckfestigkeit:** nach 1 h = 190 MPa, nach 24 h = 510 MPa

Größe 1 (400 mg Legierung, 400 mg Hg), 50 Sicherheitskapseln (gelb)	<b>168573</b>	<b>45,95</b>
Größe 2 (600 mg Legierung, 590 mg Hg), 50 Sicherheitskapseln (rot)	<b>168703</b>	<b>61,75</b>
Größe 3 (800 mg Legierung, 800 mg Hg), 50 Sicherheitskapseln (blau)	<b>168705</b>	<b>77,35</b>



## Ätzel (Phosphorsäure)

Ätzel auf Basis 37%iger Phosphorsäure. Es dient zum Ätzen von Zahnschmelz und Dentin im Rahmen der Schmelz-Ätz-Technik und Total-Etch-Technik. Das blaugrün gefärbte Ätzel ist sehr gut sichtbar und besitzt ein optimales thixotropes Fließverhalten.

**Nur für zahnmedizinische Zwecke.**

**Information:**  
 Geeignete Orbi-Applikationskanülen REF 243488, 243489, 243490, 243491

2 x 1,4-ml-Spritze Ätzel, 3 Applikationskanülen	<b>149486</b>	<b>9,95</b>
9 x 1,4-ml-Spritze Ätzel, 25 Applikationskanülen	<b>149485</b>	<b>32,90</b>
Refill, 50 ml Ätzel, 10 Applikationsspritzen, 50 Applikationskanülen	<b>149487</b>	<b>52,50</b>
Applikationskanülen, Ø 0,7 mm, 25 Stück	<b>149511</b>	<b>7,45</b>



## ORBI-Bond SE one

Selbststärzendes, lichthärtendes Einkomponentenadhäsiv für direkte lichthärtende Restaurationen. Das Bonding ist lösemittelfrei und daher immer von gleichbleibender Qualität. Mit nur einer Schicht wird ein dauerhafter Verbund zum Zahn erzielt. Dank der optimierten Zusammensetzung wird eine extrem gute Haftung auf Schmelz und Dentin erreicht. Auf bearbeitetem Dentin wird die anhaftende Schmierschicht modifiziert und so Teil der aus Kollagen und Adhäsiv bestehenden Hybridschicht.

- Schnell: nur 30 Sek. für Ätzen und Bonden
- Extrem gute Haftwerte > 20 MPa auf Dentin und Schmelz
- Universell: für alle lichthärtenden Compositematerialien geeignet

Flasche, 5 ml	<b>260698</b>	<b>52,15</b>
---------------	---------------	--------------


Jetzt Traumpartner finden:  
[www.orbis-dental.de/vertriebspartner](http://www.orbis-dental.de/vertriebspartner)

## ORBI-Tips

Beflockte Miniaturapplikatoren in bester Qualität mit separatem Halter für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten

**Information:** Zur Verwendung mit dem Tip-Halter REF 155056

Box mit je 100 Stück ORBI-Tips in Rot, Gelb, Grün, Blau und 2 Haltern, Stück	<b>188767</b>	<b>21,85</b>
Nachfüllpackung, rot, 100 Stück	<b>188770</b>	<b>4,95</b>
Nachfüllpackung, gelb, 100 Stück	<b>188769</b>	<b>4,95</b>
Nachfüllpackung, grün, 100 Stück	<b>188768</b>	<b>4,95</b>
Nachfüllpackung, blau, 100 Stück	<b>188766</b>	<b>4,95</b>

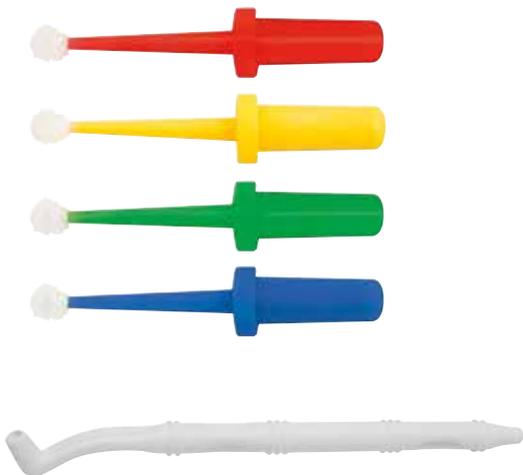

## Tip-Halter

Halter für eine einfache und optimale Nutzung der ORBI-Tips

**Hinweis:** Halter ist nicht für die Sterilisation geeignet. Reinigung mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel, wie z. B. ORBI-Sept Flächendesinfektion (REF 258143, 258144, 258134).

weiß, Packung 10 Stück	<b>155056</b>	<b>3,30</b>
------------------------	---------------	-------------

## ORBI-Brush

Die biegbaren Mikroapplikatoren wurden speziell entwickelt für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Das winzige Faserbündel an der Spitze der Applikatoren nimmt eine minimale Flüssigkeitsmenge auf und gibt diese dann gleichmäßig an die zu benetzende Oberfläche ab.

- Länge 85 mm
- Kopfdurchmesser 3 mm

blau, Packung 100 Stück	<b>170020</b>	<b>5,30</b>
grün, Packung 100 Stück	<b>170021</b>	<b>5,30</b>
silber, Packung 100 Stück	<b>170022</b>	<b>5,30</b>
violett, Packung 100 Stück	<b>170023</b>	<b>5,30</b>



## Pinselansätze

Nylonhaarpinsel für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten

Farbe: rot, Borste: weiß, Stärke: fein, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>185872</b>	<b>8,85</b> <b>8,30</b>
Farbe: rot, Borste: schwarz, Stärke: fein, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>140448</b>	<b>8,85</b> <b>8,30</b>
Farbe: transparent, Borste: weiß, Stärke: fein, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>185871</b>	<b>8,85</b> <b>8,30</b>
Farbe: transparent, Borste: schwarz, Stärke: mittel, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>179962</b>	<b>8,85</b> <b>8,30</b>
Farbe: transparent, Borste: schwarz, Stärke: fein, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>140449</b>	<b>8,85</b> <b>8,30</b>
Farbe: transparent, Borste: weiß, Stärke: fein, Packung 50 Stück ab 10 Packungen	<b>196535</b>	<b>4,55</b> <b>4,25</b>
Pinselhalter, Stück	<b>144834</b>	<b>1,40</b>





## Spatel, universal

Doppelendige Einmalspatel zum Anmischen von zahnärztlichen Werkstoffen wie Zemente oder Composites

Packung 50 Stück

**141254** **4,20**

## ORBI-HiFil easy

ORBI-HiFil easy ist ein lichthärtendes Universal-Komposit für Anterior-Posterior-Restaurationen. Es basiert auf Methacrylatharzen und anorganischen Füllstoffen mit einer Partikelgröße von 0,05 bis 1,5 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 81 Gew.-% und 65 Vol.-%

- Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049

### Information:

ORBI-Bond SE one (REF 260698) ist eine optimale Ergänzung.



A2, Spritze 4,5 g

**260701** **17,45**



A3, Spritze 4,5 g

**260702** **17,45**



A3,5, Spritze 4,5 g

**260703** **17,45**





## ORBI-HiFil supremeX

ORBI-HiFil supremeX ist ein lichthärtbares Nano Hybrid-Composite für Anterior- und Posterior-Restaurationen. Es basiert auf BIS-GMA-Harzen und anorganischen Füllstoffen von 0,05 bis 3 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 80 Gew.-% und 69 Vol.-%. Das Compositematerial erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049.

Durch die tolle Konsistenz ist ORBI-HiFil supremeX einfach anzuwenden, leicht modellierbar und klebt nicht am Instrument. Es ist ein universales Composite mit guten mechanischen Eigenschaften – geeignet für alle Kavitäten. Schichtbar bis zu 2 mm. In 20 bis 30 Sek. ausgehärtet (bei Wellenlänge 400 – 500 nm und Lichtintensität von mind. 1000 mW/cm<sup>2</sup>).

- Optimiertes Handling
- Herausragende physikalische Eigenschaften
- Für alle Kavitäten
- Optimale Fluoreszenz
- Black-Klassen I bis V

### Tipp:

Nach der Polymerisation lässt sich ORBI-HiFil supremeX sehr schnell auf Hochglanz polieren. Wir empfehlen dazu unsere ORBIpol-Polierer.

ORBI-HiFil supremeX A1 1 x 4 g	<b>275909</b>	<b>20,90</b>
ORBI-HiFil supremeX A2 1 x 4 g	<b>275910</b>	<b>20,90</b>
ORBI-HiFil supremeX A3 1 x 4 g	<b>275911</b>	<b>20,90</b>
ORBI-HiFil supremeX A3,5 1 x 4 g	<b>275912</b>	<b>20,90</b>
ORBI-HiFil supremeX B2 1 x 4 g	<b>275913</b>	<b>20,90</b>
ORBI-HiFil supremeX C3 1 x 4 g	<b>275914</b>	<b>20,90</b>
ORBI-HiFil supremeX A1 PLT 20 x 0,25 g	<b>275915</b>	<b>34,90</b>
ORBI-HiFil supremeX A2 PLT 20 x 0,25 g	<b>275916</b>	<b>34,90</b>
ORBI-HiFil supremeX A3 PLT 20 x 0,25 g	<b>275917</b>	<b>34,90</b>
ORBI-HiFil supremeX A3,5 PLT 20 x 0,25 g	<b>275918</b>	<b>34,90</b>
ORBI-HiFil supremeX B2 PLT 20 x 0,25 g	<b>275958</b>	<b>34,90</b>
ORBI-HiFil supremeX C3 PLT 20 x 0,25 g	<b>275959</b>	<b>34,90</b>

## ORBI-FlowX

ORBI-FlowX ist ein lichthärtendes, leicht fließendes Microhybrid Composite für Anterior- und begrenzt Posterior-Restaurationen sowie für Versiegelung von Zähnen. Es basiert auf Methacrylat-Harzen und anorganischen Füllstoffen mit einer Partikelgröße von 0,05 bis 1 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 62 Gew.-% und 47 Vol.-%. Das Compositematerial erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049.

Das Compositematerial in 4 VITA-Farben ist geeignet für Restaurationen der Klassen III, IV und V, kleine Füllungen der Klassen I und II, Unterfüllung von Kavitäten und Versiegelungen. Schichtbar bis zu 1 mm. In 20 bis 30 Sek. ausgehärtet (bei Wellenlänge 400-500 nm und Lichtintensität von mind. 1000 mW/cm<sup>2</sup>).

- Leichtfließend
- Ideal auf die Verarbeitung in kleinen und flachen Kavitäten abgestimmt
- Einfache Anwendung durch verbesserte Konsistenz
- Exzellente Farbbeständigkeit und Abriebfestigkeit
- Röntgenopak
- Hochglanzpolierbar

### Information:

Geeignete Orbi-Applikationskanülen REF 243491 und 243492

ORBI-FlowX A1 2 x 2 g	<b>275924</b>	<b>24,80</b>
ORBI-FlowX A2 2 x 2 g	<b>275925</b>	<b>24,80</b>
ORBI-FlowX A3 2 x 2 g	<b>275926</b>	<b>24,80</b>
ORBI-FlowX A3,5 2 x 2 g	<b>275927</b>	<b>24,80</b>
ORBI-FlowX A1 PLT 20x0,25g	<b>275928</b>	<b>34,90</b>
ORBI-FlowX A2 PLT 20x0,25g	<b>275929</b>	<b>34,90</b>
ORBI-FlowX A3 PLT 20x0,25g	<b>275930</b>	<b>34,90</b>
ORBI-FlowX A3,5 PLT 20x0,25g	<b>275931</b>	<b>34,90</b>



## ORBI-Applikationskanülen

Kanülen mit stumpfer Edelstahlspitze werden für die präzise Applikation von leicht fließenden (lichthärtenden) Materialien verwendet. Die vorgebogene Metallnadel (30° oder 45°) ermöglicht dabei einen optimalen Zugang zur Kavität.

- Zum Applizieren von handelsüblichen Ätzelgelen, Fissurenversiegeln und Composites
- Passend für alle gängigen Luer-Lock-Spritzen
- Vorgebogen 30° bzw. 45°
- Unsteril
- Hochwertiges Kanülenrohr aus Edelstahl

25 G, Ø 0,5 x 13 mm, 45°, Packung 100 Stück **243488** **12,20**

23 G, Ø 0,6 x 13 mm, 45°, Packung 100 Stück **243489** **12,20**

20 G, Ø 0,9 x 10 mm, 45°, Packung 100 Stück **243490** **12,20**

20 G, Ø 0,9 x 13 mm, 45°, Packung 100 Stück **243491** **12,20**

19 G, Ø 1,1 x 13 mm, 30°, Packung 100 Stück **243492** **12,20**

22 G, Ø 0,7 mm, 45°, Packung 25 Stück **149511** **7,45**

## Keramik-Ätzelgel (Flusssäure)

Ätzelgel auf Basis von Flusssäure (5 Gew.-% HF). Es dient zur Erzeugung einer retentiven Oberfläche auf keramischen Werkstücken, wie Inlays, Onlays, Veneers oder Kronen. Die Haftung zwischen der Keramikoberfläche und Befestigungskompositen wird dadurch deutlich erhöht. Die rote Einfärbung garantiert eine gute Erkennung und Abgrenzung auf der Keramik.

### Hinweis:

Keramik-Ätzelgel ist nur zur extraoralen Anwendung vorgesehen!

Flasche 6 ml **177941** **31,70**

## Stereo-Kopfbandlupe LED

Superleichte Lupe für Zahnärzte und Zahntechniker mit 4 verschiedenen Stereolupenteilen. Die Auswahl von 4 Vergrößerungen ermöglicht jedem Anwender eine für ihn optimale Einstellung der Sichtverhältnisse bei entsprechendem Arbeitsabstand. Mit heller, stromsparender LED-Leuchte. Das Lampenteil mit dem Batteriefach ist abnehmbar. Benötigt werden 3 Batterien, Typ AAA.

- 1,2-fache Vergrößerung, Abstand: 520–620 mm
- 1,8-fache Vergrößerung, Abstand: 230–320 mm
- 2,5-fache Vergrößerung, Abstand: 150–230 mm
- 3,5-fache Vergrößerung, Abstand: 80–120 mm

Stereo-Kopfbandlupe, komplett mit je 1 Linse, Stück **176962** **62,80**

Ersatzlinsen, 1,2-fache Vergrößerung, Abstand: 520–620 mm, Satz **188748** **6,60**

Ersatzlinsen, 1,8-fache Vergrößerung, Abstand: 230–320 mm, Satz **172991** **6,60**

Ersatzlinsen, 2,5-fache Vergrößerung, Abstand: 150–230 mm, Satz **187050** **6,60**

Ersatzlinsen, 3,5-fache Vergrößerung, Abstand: 80–120 mm, Satz **187058** **6,60**



### Tofflemire-Matrizenspanner

Die sichere Fixierung von geraden oder gebogenen Kunststoff- oder Metallmatrizen erfolgt mittels Schraubvorrichtung.


- Sterilisierbar bis 180 °C

Modell Universal, Stück	<b>144329</b>	<b>12,95</b>
Modell Senior, Stück	<b>144328</b>	<b>12,95</b>
Modell Junior, Stück	<b>144327</b>	<b>12,95</b>

### Tofflemire-Matrizen

Extradünne Matrizen aus rostfreiem Stahl, für Amalgam- und chemisch härtende Füllungen. Zur Erzielung eines möglichst engen Kontaktpunktes.

- 2 Stärken: 0,038 mm (x-dünn), 0,05 mm (dünn)
- Rostfrei
- Zum einmaligen Gebrauch

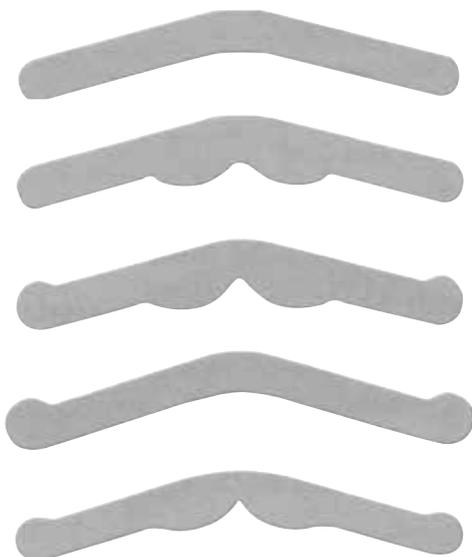

Form 1, Stärke 0,035 mm, Breite 6,5 mm, Packung 30 Stück	<b>147678</b>	<b>4,45</b>
Form 1, Stärke 0,05 mm, Breite 6,5 mm, Packung 30 Stück	<b>147526</b>	<b>4,45</b>
Form 2, Stärke 0,035 mm, Breite 8 mm, Packung 30 Stück	<b>147683</b>	<b>4,45</b>
Form 2, Stärke 0,05 mm, Breite 8 mm, Packung 30 Stück	<b>147527</b>	<b>4,45</b>
Form 3, Stärke 0,035 mm, Breite 7 mm, Packung 30 Stück	<b>147713</b>	<b>4,45</b>
Form 3, Stärke 0,05 mm, Breite 7 mm, Packung 30 Stück	<b>147528</b>	<b>4,45</b>
Form 13, Stärke 0,035 mm, Breite 5 mm, Packung 30 Stück	<b>147717</b>	<b>4,45</b>
Form 13, Stärke 0,05 mm, Breite 5 mm, Packung 30 Stück	<b>147530</b>	<b>4,45</b>
Form 15, Stärke 0,035 mm, Breite 5 mm, Packung 30 Stück	<b>147718</b>	<b>4,45</b>
Form 15, Stärke 0,05 mm, Breite 5 mm, Packung 30 Stück	<b>147673</b>	<b>4,45</b>



### Matrizenband

Matrizenbänder aus Stahl auf Rolle, 10 m lang und 0,05 mm stark

5 mm breit, Stück	<b>289700</b>	<b>14,30</b>
6 mm breit, Stück	<b>289701</b>	<b>14,30</b>
7 mm breit, Stück	<b>289702</b>	<b>14,30</b>

### Matrix-Strips

Extradünne Universalstreifen aus transparentem, reißfestem Polyester material, gerade. Einsetzbar bei der Verarbeitung von licht- und chemisch härtenden Kunststoffen sowie Zementen. Als Matrizenhalter wird vorzugsweise eine Stripklemme eingesetzt.

- Größe 120 x 8,5 x 0,05 mm
- Reißfest

Packung 1.000 Stück	<b>143274</b>	<b>32,90</b>
---------------------	---------------	--------------





## Interdentalkeile

Für die optimale Gestaltung der Füllung durch anatomisch geformte Interdentalkeile aus Ahornholz

Die konkav gestalteten Seitenflächen passen sich ideal der interdentalen Morphologie (Struktur und Form) an. Das rechteckige Ende ermöglicht ein sicheres Halten des Keiles, die aufgebogene Spitze verhindert ein Verletzen der Papillen. Die Interdentalkeile sind aus splitterfreiem Ahornholz gefertigt, das Stabilität und Komprimierbarkeit und damit eine optimale Anpassung an den Zahn gewährleistet.

- Nur zum einmaligen Gebrauch

orange, Nr. 10, Packung 1.000 Stück

**257288 61,80**

weiß, Nr. 20, Packung 1.000 Stück

**257284 61,80**

grün, Nr. 30, Packung 1.000 Stück

**257287 61,80**

gelb, Nr. 40, Packung 1.000 Stück

**257283 61,80**



## Parodontalsonde WHO

Parodontalsonde/Furkationssonde (mit Kugelspitze) mit rundem Griff. Geeignet zum Erstellen des PS-Index.

- Abstufung: 3,5 / 5,5 / 8,5 / 11,5
- Spezielle biokompatible Farbbeschichtung, die nicht verblasst
- Autoklavierbar
- Korrosionsbeständiger Edelstahl, superhart, perfekter Schliff für lang anhaltende Schärfe
- Nickelfrei

**Made in Germany!**

Stück

**256488 12,40**



## PA-Instrumente

ORBI-Scaler nach Gracey sind für subgingivale Konkremete (unterhalb des Zahnfleischsaumes gelegener Zahnstein) für die verschiedenen Quadranten angepasst und ermöglichen so ein exaktes Arbeiten.

ORBI-Küretten nach Columbia sind für supragingivale Konkremete (oberhalb des Zahnfleischsaumes gelegener Zahnstein) für den Frontzahnbereich und für den posterioren Bereich angepasst und ermöglichen so ein exaktes Arbeiten.

Hohlgriff 8 mm • Korrosionsbeständiger Edelstahl, superhart, perfekter Schliff für lang anhaltende Schärfe • Nickelfrei • Arbeitsenden aufschleifbar • Thermodesinfizierbar • Autoklavierbar



Typ 1-2, für alle Wurzelflächen im Frontzahnbereich, OK + UK, leichte Abwinkelung, Stück	<b>252052</b>	<b>17,80</b>
Typ 3-4, für alle Wurzelflächen im Frontzahnbereich, OK + UK, mittlere Abwinkelung, Stück	<b>252053</b>	<b>17,80</b>
Typ 5-6, für alle Wurzelflächen an den Prämolaren und Frontzähnen, OK + UK, leichte Abwinkelung, Stück	<b>252054</b>	<b>17,80</b>
Typ 7-8, für bukkale, linguale sowie palatinale Flächen der Prämolaren und Molaren, OK + UK, mittlere Abwinkelung, Stück	<b>252056</b>	<b>17,80</b>
Typ 9-10, für bukkale, linguale sowie palatinale Flächen der Prämolaren und Molaren, OK + UK, starke Abwinkelung, Stück	<b>252057</b>	<b>17,80</b>
Typ 11-12, für mesiale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren, OK + UK, mittlere Abwinkelung, Stück	<b>252058</b>	<b>17,80</b>
Typ 13-14, für distale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren, OK + UK, Stück	<b>252059</b>	<b>17,80</b>
für den Frontzahnbereich, Typ 2R/2L, Universalkürette für den OK + UK, Stück	<b>256486</b>	<b>17,80</b>
für den posterioren Bereich, Typ 4R/4L, Universalkürette für den OK + UK, Stück	<b>256487</b>	<b>17,80</b>
Typ 204s, Spezialscaler für die Interdentalräume des Seitenzahnbereiches, Stück	<b>252061</b>	<b>17,45</b>
Typ 204sd, Spezialscaler für die Interdentalräume des Front- und Seitenzahnbereiches, Stück	<b>256485</b>	<b>17,45</b>
Typ H6/H7, Universalscaler für den Front- und Seitenzahnbereich, Stück	<b>252060</b>	<b>17,45</b>



## ORBI-Steel Zahnsonde

ORBI-Steel – die Premiuminstrumente werden für die Feststellung von Karies und das Ertasten der Konkremete sowie das Erkennen der Merkmale von Zahnfleischtaschen, Furkationen und Füllungen verwendet.

Thermodesinfizierbar • Autoklavierbar • 8-Kant-Griff, geriffelt • Hochwertiger, elektro-polierter, medizinischer Edelstahl

### Made in Germany!

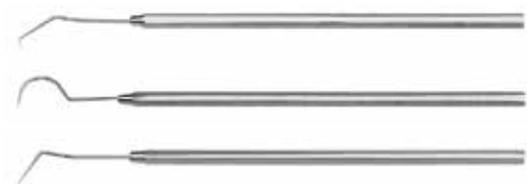


Fig. 17, Stück	<b>258233</b>	<b>3,70</b>
Fig. 23, Stück	<b>258234</b>	<b>3,70</b>
Fig. 9, Stück	<b>258232</b>	<b>3,70</b>



## ORBI-Steel Pinzette College


ORBI-Steel – Premiuminstrumente für die tägliche Untersuchung

- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar
- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl

**Made in Germany!**

kurze Spitze, Stück	<b>258235</b>	<b>6,20</b>
---------------------	---------------	-------------

lange Spitze, Stück	<b>258236</b>	<b>6,20</b>
---------------------	---------------	-------------

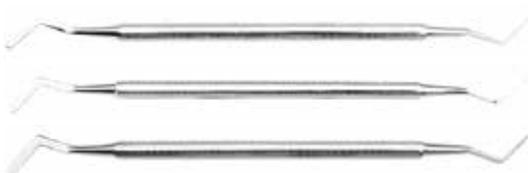

## ORBI-Steel Heidemannspatel

ORBI-Steel – Premiuminstrumente für die tägliche Untersuchung


- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar
- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl

**Made in Germany!**

schmal, 2,0 mm, Stück	<b>258224</b>	<b>8,95</b>
-----------------------	---------------	-------------

mittel, 2,5 mm, Stück	<b>258226</b>	<b>8,95</b>
-----------------------	---------------	-------------

breit, 3,0 mm, Stück	<b>258227</b>	<b>8,95</b>
----------------------	---------------	-------------

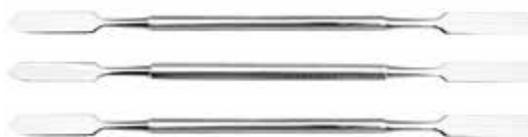

## ORBI-Steel Zementspatel

ORBI-Steel – Premiuminstrumente für die tägliche Untersuchung

- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar
- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl

**Made in Germany!**

schmal, 5,2 mm, Stück	<b>258228</b>	<b>7,20</b>
-----------------------	---------------	-------------

mittel, 6,0 mm, Stück	<b>258229</b>	<b>7,20</b>
-----------------------	---------------	-------------

breit, 7,5 mm, Stück	<b>258230</b>	<b>7,20</b>
----------------------	---------------	-------------



## ORBI-Steel Teleskopkronenzange

ORBI-Steel – Premiuminstrumente für die tägliche Untersuchung

- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar
- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl

**Made in Germany!**

mini, diamantierte Spitzen, Länge 12,5 cm, Stück	<b>258237</b>	<b>88,90</b>
--	---------------	--------------

normal, diamantierte Spitzen, Länge 15 cm, Stück	<b>258238</b>	<b>94,50</b>
--	---------------	--------------



## Wangenabhalter Hilger

Wangenabhalter nach Hilger aus Edelstahl. Das Instrument passt auf die handelsüblichen Mundspiegelgriffe.

Stück	<b>141270</b>	<b>10,50</b>
-------	---------------	--------------




## Artikulationspinzette

Gerades Halteinstrument für Okklusionsprüffolie, Artikulationsseide und Artikulationspapier

- Aus rostfreiem Stahl

Stück	<b>145814</b>	<b>8,90</b>
-------	---------------	-------------

**Informationen zur  
Aufbereitung unter  
info@orbis-dental.de**

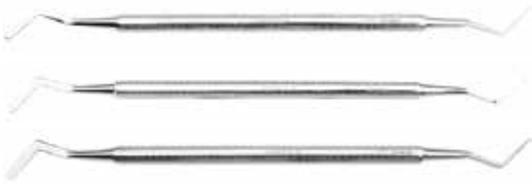

## Spatel, nach Heidemann

Leichte und robuste Standardspatel

- 8-Kant-Griff
- Aus rostfreiem Stahl

schmal, 2,0 mm, Stück	<b>141357</b>	<b>7,95</b>
-----------------------	---------------	-------------

mittel, 2,5 mm, Stück	<b>141360</b>	<b>7,95</b>
-----------------------	---------------	-------------

breit, 3,0 mm, Stück	<b>141363</b>	<b>7,95</b>
----------------------	---------------	-------------




## Nadelhalter, nach Mathieu

Stabiler Nadelhalter mit Hartmetalleinlagen für besonders sicheren Halt

- Aus rostfreiem Stahl

Länge 140 mm, Stück	<b>143311</b>	<b>65,50</b>
---------------------	---------------	--------------

Länge 170 mm, Stück	<b>143312</b>	<b>69,50</b>
---------------------	---------------	--------------

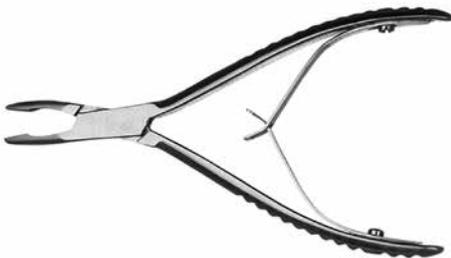

## Hohlmeißelzange

Universal-Hohlmeißelzange nach Mead

- Aus rostfreiem Stahl

Standard, Länge ca. 140 mm, Stück	<b>146971</b>	<b>52,70</b>
-----------------------------------	---------------	--------------

Mini, Länge ca. 120 mm, Stück	<b>146972</b>	<b>52,70</b>
-------------------------------	---------------	--------------



## Kronenscheren

Stabile Kronenscheren. Spitz-spitze, kräftige Schneiden, einseitig gezahnt.

- Aus rostfreiem Stahl
- Einseitig gezahnt
- Länge 115 mm

gebogen, Stück	<b>143246</b>	<b>6,25</b>
----------------	---------------	-------------

gerade, Stück	<b>143247</b>	<b>6,25</b>
---------------	---------------	-------------



## Zahn- und Wurzelzangen

Stabile Ausführung, gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil, ergonomisch korrekter Karogriff

- Aus Edelstahl



Zahnzange, Figur 1, OK-Frontzähne, Stück

**187304 45,95**



Zahnzange, Figur 7, OK-Prämolaren, Stück

**187305 45,95**



Zahnzange, Figur 17, OK-Molaren rechts, Stück

**187300 45,95**



Zahnzange, Figur 18, OK-Molaren links, Stück

**187301 45,95**



Zahnzange, Figur 13, UK-Prämolaren, Stück

**187303 45,95**



Zahnzange, Figur 22, UK-Molaren, Stück

**187302 45,95**



Zahnzange, Figur 67A, OK-Molaren Weisheitszähne, Stück

**187307 45,95**



Zahnzange, Figur 79, UK-Weisheitszähne, Stück

**187308 45,95**



Wurzelzange, Figur 33A, UK-Wurzel, Stück

**187306 45,95**

Wurzelzange, Figur 51A, OK-Wurzel, Stück

**187309 45,95**

## Kugelstopfer

Standardkugelstopfer mit präzisen, steifen Arbeitsenden. Mit leichtem 8-Kant-Griff, geriffelt.

- Aus rostfreiem Stahl



Ø 1,0/1,3 mm, Stück	<b>141083</b>	<b>7,60</b>
Ø 1,4/1,8 mm, Stück	<b>141085</b>	<b>7,60</b>
Ø 1,9/2,3 mm, Stück	<b>141087</b>	<b>7,60</b>
Ø 2,5/3,0 mm, Stück	<b>141185</b>	<b>7,60</b>

## Mundspiegel, frontbeschichtet

Qualitätsmundspiegel, mit hochwertiger Frontbeschichtung. Extrem hoher Reflexionsgrad, dadurch besonders helle und scharfe Abbildung in natürlichen Farben. Verzerrungsfrei, für ein entspanntes Arbeiten.

- Aus Edelstahl gefertigt
- Nickelfrei
- Geeignet für alle gebräuchlichen Aufbereitungsverfahren
- Normgewinde, passend für alle handelsüblichen Griffe



Größe 3, Ø 20 mm, plan, Packung 12 Stück	<b>277784</b>	<b>18,45</b>
Größe 4, Ø 22 mm, plan, Packung 12 Stück	<b>277783</b>	<b>18,45</b>
Größe 5, Ø 24 mm, plan, Packung 12 Stück	<b>277782</b>	<b>18,45</b>

## Mundspiegel RS

Qualitätsmundspiegel mit hohem Reflexionsgrad und angenehm hellem Bild

- Aus Edelstahl gefertigt
- Nickelfrei
- Geeignet für alle gebräuchlichen Aufbereitungsverfahren
- Normgewinde, passend für alle handelsüblichen Griffe



Größe 4, Ø 22 mm, hohl, Packung 12 Stück	<b>277787</b>	<b>12,05</b>
Größe 5, Ø 24 mm, hohl, Packung 12 Stück	<b>277786</b>	<b>12,05</b>
Größe 3, Ø 20 mm, plan, Packung 12 Stück	<b>277781</b>	<b>10,80</b>
Größe 4, Ø 22 mm, plan, Packung 12 Stück	<b>277780</b>	<b>10,80</b>
Größe 5, Ø 24 mm, plan, Packung 12 Stück	<b>277779</b>	<b>10,80</b>

## Mundspiegel RS hauchfrei

Qualitätsmundspiegel, mit sehr hohem Reflexionsgrad und besonders hellem Bild. Ein spezielles Verfahren bewirkt, dass der leicht angewärmte Spiegel im Mund des Patienten über längere Zeit hinweg nicht beschlägt.

- Aus Edelstahl gefertigt
- Nickelfrei
- Geeignet für alle gebräuchlichen Aufbereitungsverfahren
- Normgewinde, passend für alle handelsüblichen Griffe



Größe 4, Ø 22 mm, plan, Packung 12 Stück	<b>143062</b>	<b>25,25</b>
Größe 5, Ø 24 mm, plan, Packung 12 Stück	<b>143064</b>	<b>25,25</b>



## Mundspiegelgriff

Leichter, hohler Mundspiegelgriff mit Normgewinde

- Aus rostfreiem Stahl
- 6-Kant-Griff

Stück	<b>143077</b>	<b>4,40</b>
-------	---------------	-------------



## Pinzette College RS

Standardpinzette, mit feinen, innen gerieften Arbeitsspitzen

- Aus rostfreiem Stahl

Kurze Spitze, Stück	<b>143082</b>	<b>5,20</b>
ab 12 Stück		<b>4,80</b>

Lange Spitze, Stück	<b>143083</b>	<b>5,20</b>
ab 12 Stück		<b>4,80</b>



## Planstopfer

Standardplanstopfer, mit präzisen, steifen Arbeitsenden. Mit leichtem 8-Kant-Griff, geriffelt.

- Aus rostfreiem Stahl

Ø 1,0/1,2 mm, Stück	<b>141232</b>	<b>6,85</b>
---------------------	---------------	-------------

Ø 1,2/1,5 mm, Stück	<b>141242</b>	<b>6,85</b>
---------------------	---------------	-------------

Ø 1,8/2,0 mm, Stück	<b>141307</b>	<b>6,85</b>
---------------------	---------------	-------------



## Skalpellgriff Nr. 3

Stabiler Skalpellgriff mit präzisiertem Aufnahmeclip. Mit Griffriellen für sicheren Halt, auch bei feuchten Handschuhen.

- Aus rostfreiem Stahl
- Geeignet für Skalpellklingen Figur: 11, 12, 12B, 13, 15, 40, 42

Stück	<b>143519</b>	<b>4,40</b>
-------	---------------	-------------



## Wurzelheber, nach Bein

Stabile Wurzelheber, gerade Arbeitsenden, ergonomisch geformter Handgriff

- Aus rostfreiem Stahl

breit, 4 mm, Stück	<b>141496</b>	<b>18,70</b>
--------------------	---------------	--------------

mittel, 3 mm, Stück	<b>141556</b>	<b>18,70</b>
---------------------	---------------	--------------

schmal, 2 mm, Stück	<b>141598</b>	<b>18,70</b>
---------------------	---------------	--------------

## Mosquitoklemmen s. Seite 102



### Zahnfleischscheren

Filigrane Standardzahnfleischscheren. Spitz-spitze Schneiden.

- Aus rostfreiem Stahl
- Länge 110 mm

gerade, Stück	<b>140082</b>	<b>8,40</b>
---------------	---------------	-------------

gebogen, Stück	<b>140083</b>	<b>8,80</b>
----------------	---------------	-------------

### Zahnfleischscheren, nach Goldman-Fox

Filigrane Zahnfleischscheren. Spitz-spitze Schneiden, eine davon leicht gezahnt. Auch als Fadenscheren einsetzbar.

- Aus rostfreiem Stahl
- Länge 130 mm

Stück	<b>140417</b>	<b>13,60</b>
-------	---------------	--------------

### Zahnsonden

Standardsonden mit feinen Arbeitsspitzen. Mit leichtem 8-Kant-Griff, geriffelt.

- Aus rostfreiem Stahl

Figur 8, Stück	<b>143123</b>	<b>3,35</b>
ab 12 Stück		<b>2,95</b>

Figur 9, Stück	<b>143124</b>	<b>3,35</b>
ab 12 Stück		<b>2,95</b>

Figur 17, Stück	<b>143125</b>	<b>3,35</b>
ab 12 Stück		<b>2,95</b>

Figur 23, Stück	<b>143126</b>	<b>3,35</b>
ab 12 Stück		<b>2,95</b>

### Zementspatel, doppelendig


Standardzementspatel, mit feinen, steifen Arbeitsblättern. Mit leichtem 8-Kant-Griff, geriffelt.

- Aus rostfreiem Stahl

schmal, 5 mm, Stück	<b>141280</b>	<b>6,50</b>
---------------------	---------------	-------------

mittel, 6 mm, Stück	<b>141281</b>	<b>6,50</b>
---------------------	---------------	-------------

breit, 7 mm, Stück	<b>141282</b>	<b>6,50</b>
--------------------	---------------	-------------

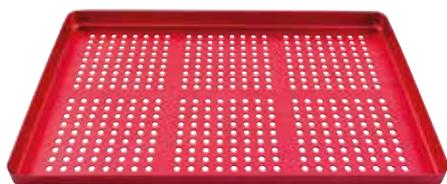

## Normtrays gelocht, aus Aluminium

Aluminium, eloxiert. Nicht geeignet für den Thermodesinfektor, auch empfindlich gegenüber manchen Desinfektionsmitteln, z. B. solche auf Basis von Wasserstoffperoxid.

- Oberteile: 288 x 190 x 24 mm
- Unterteile: 284 x 183 x 17 mm

Boden gelocht, silber, Stück **183347** **10,45**

Boden gelocht, blau, Stück **183120** **10,45**

Boden gelocht, gold, Stück **183121** **10,45**

Boden gelocht, grün, Stück **183125** **10,45**

Boden gelocht, rot, Stück **183346** **10,45**

Deckel gelocht, silber, Stück **183790** **10,45**



## Normtrays ungelocht, aus Aluminium

Aluminium, eloxiert. Nicht geeignet für den Thermodesinfektor, auch empfindlich gegenüber manchen Desinfektionsmitteln, z. B. solche auf Basis von Wasserstoffperoxid.

- Oberteile: 288 x 190 x 24 mm
- Unterteile: 284 x 183 x 17 mm

Boden ungelocht, silber, Stück **183744** **10,45**

Boden ungelocht, blau, Stück **183350** **10,45**

Boden ungelocht, gold, Stück **183443** **10,45**

Boden ungelocht, grün, Stück **183566** **10,45**

Boden ungelocht, rot, Stück **183740** **10,45**

Deckel ungelocht, silber, Stück **183803** **10,45**



## Normtrays, aus Edelstahl

Edelstahl, sterilisierbar

- Oberteile: 284 x 183 x 39 mm
- Unterteile: 284 x 183 x 17 mm

Boden ungelocht, Stück	<b>185158</b>	<b>19,90</b>
Deckel ungelocht, Stück	<b>185157</b>	<b>19,90</b>
Boden gelocht, Stück	<b>185154</b>	<b>22,95</b>
Deckel gelocht, Stück	<b>185153</b>	<b>22,95</b>

## Instrumentenhalter

Instrumentenhalter für Normtrays

Auf den Instrumentenhaltern können bis zu 11 Instrumente abgelegt werden.


### Hinweis:

- Instrumentenhalter aus Aluminium dürfen nicht thermodesinfiziert werden.
- Instrumentenhalter nur sortenrein bestücken (Edelstahl/Edelstahl – Aluminium/Aluminium)



Aluminium, Stück **183858** **7,20**

Edelstahl, Stück **185152** **9,55**

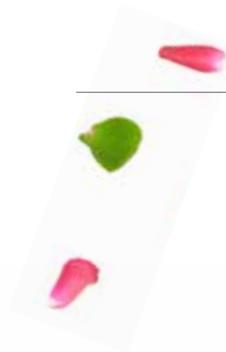



Ab 5 Packungen  
**5,79 €**



Ab 5 Packungen  
**5,79 €**



Ab 5 Packungen  
**5,79 €**

## Hedstroem-Feilen

Stahlinstrumente, mit ergonomischem Kunststoffgriff, ISO-farbcodiert am Griff. Maßge-nau nach ISO 3630, bruchstark und mit hervorragender Schneidleistung. Sterilisierbar bis 200 °C.

- Länge 25 mm
- Codierung: Kreis

sortiert ISO 015–040, 25 mm, 6 Stück	<b>149535</b>	<b>6,30</b>
ISO 010, 25 mm, 6 Stück	<b>149598</b>	<b>6,30</b>
ISO 015, 25 mm, 6 Stück	<b>149599</b>	<b>6,30</b>
ISO 020, 25 mm, 6 Stück	<b>149600</b>	<b>6,30</b>
ISO 025, 25 mm, 6 Stück	<b>149601</b>	<b>6,30</b>
ISO 030, 25 mm, 6 Stück	<b>149602</b>	<b>6,30</b>
ISO 035, 25 mm, 6 Stück	<b>149604</b>	<b>6,30</b>
ISO 040, 25 mm, 6 Stück	<b>149605</b>	<b>6,30</b>
ISO 045, 25 mm, 6 Stück	<b>149606</b>	<b>6,30</b>
ISO 050, 25 mm, 6 Stück	<b>149607</b>	<b>6,30</b>

## K-Bohrer

Stahlinstrumente, mit ergonomischem Kunststoffgriff, ISO-farbcodiert am Griff. Maßge-nau nach ISO 3630, bruchstark und mit hervorragender Schneidleistung. Sterilisierbar bis 200 °C.

- Länge 25 mm
- Codierung: Dreieck

sortiert ISO 015–040, 25 mm, 6 Stück	<b>149534</b>	<b>6,25</b>
ISO 010, 25 mm, 6 Stück	<b>149575</b>	<b>6,25</b>
ISO 015, 25 mm, 6 Stück	<b>149576</b>	<b>6,25</b>
ISO 020, 25 mm, 6 Stück	<b>149577</b>	<b>6,25</b>
ISO 025, 25 mm, 6 Stück	<b>149578</b>	<b>6,25</b>
ISO 030, 25 mm, 6 Stück	<b>149579</b>	<b>6,25</b>
ISO 035, 25 mm, 6 Stück	<b>149580</b>	<b>6,25</b>
ISO 040, 25 mm, 6 Stück	<b>149581</b>	<b>6,25</b>
ISO 045, 25 mm, 6 Stück	<b>149582</b>	<b>6,25</b>
ISO 050, 25 mm, 6 Stück	<b>149583</b>	<b>6,25</b>

## K-Feilen

Stahlinstrumente, mit ergonomischem Kunststoffgriff, ISO-farbcodiert am Griff. Maßge-nau nach ISO 3630, bruchstark und mit hervorragender Schneidleistung. Sterilisierbar bis 200 °C.

- Länge 25 mm
- Codierung: Quadrat

sortiert ISO 015–040, 25 mm, 6 Stück	<b>149533</b>	<b>6,25</b>
ISO 010, 25 mm, 6 Stück	<b>149584</b>	<b>6,25</b>
ISO 015, 25 mm, 6 Stück	<b>149588</b>	<b>6,25</b>
ISO 020, 25 mm, 6 Stück	<b>149589</b>	<b>6,25</b>
ISO 025, 25 mm, 6 Stück	<b>149592</b>	<b>6,25</b>
ISO 030, 25 mm, 6 Stück	<b>149593</b>	<b>6,25</b>
ISO 035, 25 mm, 6 Stück	<b>149594</b>	<b>6,25</b>
ISO 040, 25 mm, 6 Stück	<b>149595</b>	<b>6,25</b>
ISO 045, 25 mm, 6 Stück	<b>149596</b>	<b>6,25</b>
ISO 050, 25 mm, 6 Stück	<b>149597</b>	<b>6,25</b>



## Guttaperchaspitzen

Guttaperchaspitzen, aus homogener, biokompatibler und volumenbeständiger Naturguttapercha. Die stabilen Stifte ermöglichen eine dichte, wandständige Füllung und sind für jede Kondensationstechnik (lateral und vertikal) geeignet. Leichtes Handling und hygienische Aufbewahrung durch Schiebeshachtel mit Stiftsicherung. Die Farbcodierung der Guttaperchaspitzen verhindert die Verwechslung verschiedener Größen und vereinfacht die Zuordnung zu ISO-aufbereiteten Wurzelkanälen. Enthalten kein Hydrochinon. • Röntgensichtbar • Länge 28 mm • Farbige

farbig, sortiert ISO 015–040, 28 mm, 120 Stück	<b>142749</b>	<b>6,80</b>
farbig, sortiert ISO 045–080, 28 mm, 120 Stück	<b>142750</b>	<b>6,80</b>
ISO 015, 28 mm, 120 Stück	<b>140139</b>	<b>6,80</b>
ISO 020, 28 mm, 120 Stück	<b>140140</b>	<b>6,80</b>
ISO 025, 28 mm, 120 Stück	<b>140141</b>	<b>6,80</b>
ISO 030, 28 mm, 120 Stück	<b>140142</b>	<b>6,80</b>
ISO 035, 28 mm, 120 Stück	<b>140143</b>	<b>6,80</b>
ISO 040, 28 mm, 120 Stück	<b>140144</b>	<b>6,80</b>
ISO 045, 28 mm, 120 Stück	<b>140145</b>	<b>6,80</b>
ISO 050, 28 mm, 120 Stück	<b>140146</b>	<b>6,80</b>
ISO 055, 28 mm, 120 Stück	<b>140147</b>	<b>6,80</b>
ISO 060, 28 mm, 120 Stück	<b>140148</b>	<b>6,80</b>
ISO 070, 28 mm, 120 Stück	<b>140149</b>	<b>6,80</b>
ISO 080, 28 mm, 120 Stück	<b>140150</b>	<b>6,80</b>



## Papierspitzen, weiß

Die Papierspitzen werden aus extrem saugstarkem Papier ohne chemische Zusätze und Bindemittel hergestellt. Zur optimalen Trocknung des Wurzelkanals nach exakter Vorbereitung mit genormten WKZ-Instrumenten. • Sterilisiert • Absolut maßhaltig nach ISO-Norm • Hohe gleichbleibende Flexibilität • Länge 25 mm • Farbe: weiß

sortiert ISO 015–040, 25 mm, 300 Stück	<b>140744</b>	<b>6,75</b>
sortiert ISO 045–080, 25 mm, 300 Stück	<b>140745</b>	<b>6,75</b>
ISO 015, 25 mm, 300 Stück	<b>140729</b>	<b>6,75</b>
ISO 020, 25 mm, 300 Stück	<b>140730</b>	<b>6,75</b>
ISO 025, 25 mm, 300 Stück	<b>140731</b>	<b>6,75</b>
ISO 030, 25 mm, 300 Stück	<b>140732</b>	<b>6,75</b>
ISO 035, 25 mm, 300 Stück	<b>140733</b>	<b>6,75</b>
ISO 040, 25 mm, 300 Stück	<b>140734</b>	<b>6,75</b>
ISO 045, 25 mm, 300 Stück	<b>140735</b>	<b>6,75</b>
ISO 050, 25 mm, 300 Stück	<b>140736</b>	<b>6,75</b>
ISO 055, 25 mm, 300 Stück	<b>140737</b>	<b>6,75</b>
ISO 060, 25 mm, 300 Stück	<b>140738</b>	<b>6,75</b>
ISO 070, 25 mm, 300 Stück	<b>140739</b>	<b>6,75</b>
ISO 080, 25 mm, 300 Stück	<b>140740</b>	<b>6,75</b>



## Papierspitzen, color

Die Papierspitzen werden aus extrem saugstarkem Papier ohne chemische Zusätze und Bindemittel hergestellt. Zur optimalen Trocknung des Wurzelkanals nach exakter Vorbereitung mit genormten WKZ-Instrumenten. • Sterilisiert • Absolut maßhaltig nach ISO-Norm • Hohe gleichbleibende Flexibilität • Länge 28 mm • Farbcodiert

sortiert ISO 015–040, 28 mm, 200 Stück	<b>260101</b>	<b>4,85</b>
sortiert ISO 045–080, 28 mm, 120 Stück	<b>260108</b>	<b>4,85</b>
ISO 015, 28 mm, 200 Stück	<b>260100</b>	<b>4,85</b>
ISO 020, 28 mm, 200 Stück	<b>260102</b>	<b>4,85</b>
ISO 025, 28 mm, 200 Stück	<b>260103</b>	<b>4,85</b>
ISO 030, 28 mm, 200 Stück	<b>260104</b>	<b>4,85</b>
ISO 035, 28 mm, 200 Stück	<b>260105</b>	<b>4,85</b>
ISO 040, 28 mm, 200 Stück	<b>260106</b>	<b>4,85</b>
ISO 045, 28 mm, 120 Stück	<b>260107</b>	<b>4,85</b>
ISO 050, 28 mm, 120 Stück	<b>260109</b>	<b>4,85</b>
ISO 055, 28 mm, 120 Stück	<b>260110</b>	<b>4,85</b>
ISO 060, 28 mm, 120 Stück	<b>260111</b>	<b>4,85</b>
ISO 070, 28 mm, 120 Stück	<b>260112</b>	<b>4,85</b>
ISO 080, 28 mm, 120 Stück	<b>260113</b>	<b>4,85</b>



## Endo-Box black

Zur einfachen Zwischenablage und -reinigung von Wurzelkanalinstrumenten

- Autoklavierbar
- Farbe: Schwarz

### Information:

Mit Orbis Schaumstoffeinsätzen REF 190501 kompatibel

Stück	<b>266930</b>	<b>12,40</b>
-------	---------------	--------------



## Schaumstoffeinsätze

Diese Einsätze aus feinporigem Schaumstoff passen perfekt zu den am meisten verbreiteten Zwischenablagen für Wurzelkanalinstrumente, wie ORBIS Endo-Box, Clean Stand, Interim Stand, Twin Bloc etc.

Schaumstoffeinsätze, Höhe 1 cm / Ø 5 cm, z. B. für Clean Stand, 25 Stück	<b>190500</b>	<b>6,60</b>
Schaumstoffeinsätze, Höhe 0,5 cm / Ø 5 cm, z. B. für ORBIS Endo-Box und Interim Stand, 50 Stück	<b>190501</b>	<b>6,60</b>
Schaumstoffeinsätze, Höhe 1 cm / Ø 6,5 cm, z. B. für Twin Bloc, 25 Stück	<b>190504</b>	<b>6,60</b>



## Bohrerreinigungsbürste

Zum groben Vorreinigen von Bohrern

- Aus Messing oder Nylon
- Länge 55 mm, Breite 25 mm

### Hinweis:

- Der gewellte Messingdraht greift die Oberflächen der Bohrer nicht an.
- Bohrerreinigungsbürsten aus Nylon sind auch für die Vorreinigung im Zuge der Aufbereitung von Instrumenten aller Art geeignet.

Messingdraht, Stück	<b>141384</b>	<b>1,90</b>
Nylon, weiß, Stück	<b>230095</b>	<b>2,95</b>



## Kältespray

Kältespray in medizinischer Qualität, kühlt bis -45 °C und verdampft sofort und rückstandsfrei. Es ist hervorragend zum Vereisen von Schaumstoffpellets und Watterollen sowie zur Vitalitätsüberprüfung am Zahn geeignet und kann auch zum raschen Abkühlen von Abformmaterialien oder Tiefziehfolien verwendet werden. Ein Applikationsröhrchen dient zum gezielten Aufbringen.

- FCKW-frei
- Weiße Kappe: Mintgeschmack
- Orange Kappe: Orangengeschmack

Mintgeschmack, Dose 200 ml ab 12 Dosen	<b>143174</b>	<b>5,30</b> <b>4,95</b>
Orangengeschmack, Dose 200 ml ab 12 Dosen	<b>160080</b>	<b>5,30</b> <b>4,95</b>



## Schaumstoffpellets


Zur drucklosen Applikation flüssiger und pastöser Präparate. Auch als Träger von Kältemitteln zur Vitalitätsprüfung geeignet.

Ø 4 mm, Größe 1, Dose 3.000 Stück	<b>180011</b>	<b>11,95</b>
Ø 5 mm, Größe 2, Dose 1.000 Stück	<b>180012</b>	<b>11,95</b>
Ø 8 mm, Größe 3, Dose 500 Stück	<b>180013</b>	<b>11,95</b>
6 x 8 mm, Keilform, Größe 4, Dose 500 Stück	<b>180014</b>	<b>11,95</b>

## ORBI-Strips

Zur approximalen Füllungsgestaltung bei Kompositen, Kunststoffen, Glas-Ionomer-Zementen und Amalgamfüllungen

- Wiederverwendbar
- Einseitig belegt
- Perforiert
- Höhere Flexibilität
- Geringere Wärmeentwicklung
- Autoklavierbar

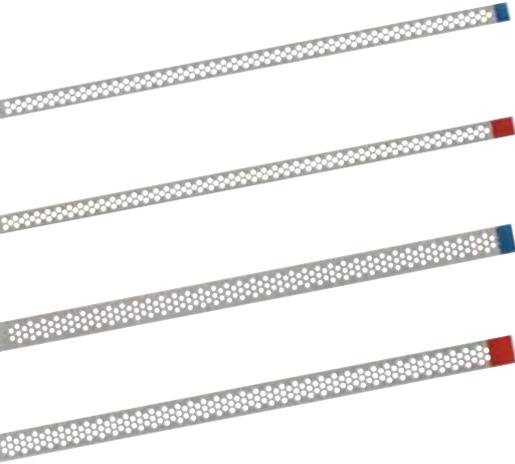

blau-medium, 2,5 mm, Packung 10 Stück	<b>265457</b>	<b>30,90</b>
---------------------------------------	---------------	--------------

rot-fine, 2,5 mm, Packung 10 Stück	<b>265458</b>	<b>30,90</b>
------------------------------------	---------------	--------------

blau-medium, 3,75 mm, Packung 10 Stück	<b>265459</b>	<b>32,90</b>
--	---------------	--------------

rot-fine, 3,75 mm, Packung 10 Stück	<b>265460</b>	<b>32,90</b>
-------------------------------------	---------------	--------------

## ORBIpol discs

ORBIpol discs Polierscheiben sind aus besonders dünnem und flexiblem Material und für schwer zugängliche Bereiche geeignet.

- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid
- Für Komposite, Gold und Amalgam
- In 2 Größen: Ø 10 mm und Ø 14 mm
- 4 unterschiedliche Körnungen: grob (coarse), medium, fein (fine), superfein (x-fine)
- Drehzahl: 7.000–10.000 UpM, max. 20.000 UpM
- Autoklavierbar

### Hinweis:

Pop-On kompatibel mit **Sof-Lex Pop-On Mandrell (1983RA)** REF 81844

coarse-small, Ø 10 mm, Packung 100 Stück	<b>265461</b>	<b>30,90</b>
--	---------------	--------------

medium-small, Ø 10 mm, Packung 100 Stück	<b>265462</b>	<b>30,90</b>
--	---------------	--------------

fine-small, Ø 10 mm, Packung 100 Stück	<b>265463</b>	<b>30,90</b>
--	---------------	--------------

x-fine-small, Ø 10 mm, Packung 100 Stück	<b>265464</b>	<b>30,90</b>
--	---------------	--------------

coarse-large, Ø 14 mm, Packung 100 Stück	<b>265465</b>	<b>30,90</b>
--	---------------	--------------

medium-large, Ø 14 mm, Packung 100 Stück	<b>265466</b>	<b>30,90</b>
--	---------------	--------------

fine-large, Ø 14 mm, Packung 100 Stück	<b>265467</b>	<b>30,90</b>
--	---------------	--------------

x-fine-large, Ø 14 mm, Packung 100 Stück	<b>265468</b>	<b>30,90</b>
--	---------------	--------------

<b>NEU!</b> Starter Set, Ø 14 mm, mit je 25 Stück der Scheiben coarse, medium, fine und extra-fine sowie einem Mandrell	<b>271117</b>	<b>30,90</b>
---	---------------	--------------

<b>NEU!</b> Starter Set, Ø 10 mm, mit je 25 Stück der Scheiben coarse, medium, fine und extra-fine sowie einem Mandrell	<b>271118</b>	<b>30,90</b>
---	---------------	--------------

<b>NEU!</b> Mandrell, WI, 3 Stück	<b>271119</b>	<b>20,90</b>
-----------------------------------	---------------	--------------





## ORBIpol alloy-F

Instrument zum konturierenden Abtragen von Amalgam, ohne das Risiko, beim Einsatz des Instruments den natürlichen Zahnschmelz zu beschädigen. So kann auch am Füllungsrand gearbeitet werden, was dazu beiträgt, Randspalten zu vermeiden. Zum abschließenden Finieren und Hochglanzpolieren empfehlen wir unsere „ORBIpol universal“-Instrumente.

- Empfohlene Drehzahl: 5.000 UpM
- Montiert für Winkelstück
- Autoklavierbar bei 134 °C / 2,1 bar / 5 Min.

---

ORBIpol alloy-F, dunkelgrau, Spitze, 12 Stück	<b>34006</b>	<b>17,50</b>
---	--------------	--------------

---

ORBIpol alloy-F, dunkelgrau, Minispitze, 12 Stück	<b>34007</b>	<b>17,50</b>
---	--------------	--------------

---

ORBIpol alloy-F, dunkelgrau, Kelch, 12 Stück	<b>34008</b>	<b>17,50</b>
--	--------------	--------------

---

## ORBIpol ceram-P

High-End-Polierer für alle keramischen Füllungen sowie keramische Teil- bzw. Vollkronen. Die mit Naturdiamant angereicherten Polierkörper bewirken eine echte Hochglanzpolitur in nur einer Polierstufe und machen so eine Wiederholung des Glanzbrandes nach eventuellen Korrekturen überflüssig. Einfache Anwendung – maximale Zeitersparnis!

- Empfohlene Drehzahl: 10.000 UpM
- Montiert für Winkelstück
- Autoklavierbar bei 134 °C / 2,1 bar / 5 Min.




---

ORBIpol ceram-P, grau, Spitze, 6 Stück	<b>34282</b>	<b>21,60</b>
--	--------------	--------------

---

ORBIpol ceram-P, grau, Minispitze, 6 Stück	<b>34283</b>	<b>21,60</b>
--	--------------	--------------

---


ORBIpol ceram-P, grau, Kelch, 6 Stück	<b>34284</b>	<b>21,60</b>
---------------------------------------	--------------	--------------

---

## ORBIpol micro-P

Hochwertige Composite-Polierer für seidigen und lang anhaltenden Oberflächenglanz, geeignet für Composite-Materialien mit Microfüller. Hohe Standzeit, gute Ergebnisse in nur einer Polierstufe!

- Empfohlene Drehzahl: 5.000 UpM
- Montiert für Winkelstück
- Autoklavierbar bei 134 °C / 2,1 bar / 5 Min.

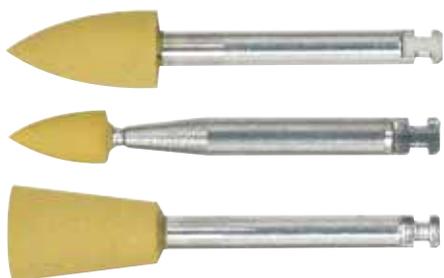


---

ORBIpol micro-P, gelb, Spitze, 12 Stück	<b>34354</b>	<b>17,50</b>
---	--------------	--------------

---

ORBIpol micro-P, gelb, Minispitze, 12 Stück	<b>34355</b>	<b>17,50</b>
---	--------------	--------------

---

ORBIpol micro-P, gelb, Kelch, 12 Stück	<b>34356</b>	<b>17,50</b>
--	--------------	--------------

---

## ORBIpol tec

3-stufiges Poliersystem für prothetische und kieferorthopädische Werkstoffe. Mit dem grünen ORBIpol tec-K Instrument wird ein schneller Materialabtrag erzielt. Kratzer verschwinden, die Oberflächen werden geglättet. Das graue ORBIpol tec-F Instrument erlaubt eine feinere Glättung der Oberflächen bis hin zu einem leichten Glanz. Mit dem gelben ORBIpol tec-P Instrument entsteht eine Hochglanzpolitur. Der Einsatz einer Polierpaste ist dazu nicht erforderlich.

- Empfohlene Drehzahl für tec-K (grün), tec-F (grau): 10.000–15.000 UpM
- Empfohlene Drehzahl für tec-P (gelb): 5.000–7.000 UpM
- Montiert für Handstück

### Tipp:

Für ein perfektes Finish empfehlen wir den Einsatz von ORBIS PROTECT finish.




ORBIpol tec-K, grün, Torpedo, 6 Stück	<b>34369</b>	<b>14,90</b>
ORBIpol tec-F, grau, Torpedo, 6 Stück	<b>34370</b>	<b>14,90</b>
ORBIpol tec-P, gelb, Torpedo, 6 Stück	<b>34371</b>	<b>14,90</b>

## ORBIpol universal

2-stufiges Finier- und Poliersystem für perfekte Oberflächen ohne das Risiko, beim intraoralen Einsatz den natürlichen Zahnschmelz zu beschädigen. Geeignet für Gold, EMR-Legierungen, (Hybrid-)Composite und Amalgam. Wir empfehlen, unter Spraykühlung mit geringem Anpressdruck und der empfohlenen Drehzahl zu arbeiten. Die braunen ORBIpol universal-F dienen der pastenfreien Vorpolitur (Finieren), mit den grünen ORBIpol universal-P erreicht man – ebenfalls ohne zusätzliche Polierpasten – einen makellosen Hochglanz.

- Empfohlene Drehzahl: 7.000 UpM
- Montiert für Winkelstück
- Autoklavierbar bei 134 °C / 2,1 bar / 5 Min.

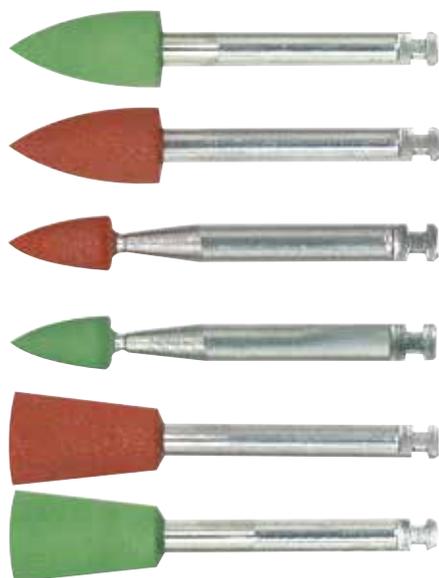

ORBIpol universal-F, braun, Spitze, 12 Stück	<b>34228</b>	<b>17,50</b>
ORBIpol universal-P, grün, Spitze, 12 Stück	<b>33943</b>	<b>17,50</b>
ORBIpol universal-F, braun, Minispitze, 12 Stück	<b>34229</b>	<b>17,50</b>
ORBIpol universal-P, grün, Minispitze, 12 Stück	<b>33944</b>	<b>17,50</b>
ORBIpol universal-F, braun, Kelch, 12 Stück	<b>34230</b>	<b>17,50</b>
ORBIpol universal-P, grün, Kelch, 12 Stück	<b>33945</b>	<b>17,50</b>

Glänzend  
gespart!





## Zylinderampullenspritze

Hochwertige Zylinderampullenspritze aus verchromtem Metall. Mit 3 Aspirationshäkchen.

- Aspirieren ohne Umgreifen
- Autoklavierbar

Stück	<b>144602</b>	<b>39,95</b>
-------	---------------	--------------

## Orbject Kanülen

Injektionskanülen, passend für alle gängigen Zylinderampullenspritzen, mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. 3-Kant-Lanzettenschliff, silikonisiert für schmerzarmen Einstich. Die Kanülen G30 0,3 x 13 und G30 0,3 x 23 mm haben einen kurzen Anschliff, speziell für die intraligamentäre Anästhesie.

Mit Kunststoffansatz • Silikonisiert • Schmerzarmen Einstich

Jede Kanüle trägt ein Sterilitätssiegel, Chargen-Nr. und Verfallsdatum. Sterilisiert mit Ethylenoxid. Die Kanülen sind zertifiziert und entsprechen der europäischen Norm DIN EN ISO 7885.



0,3 x 10 mm G30, grün, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>144742</b>	<b>9,30</b> <b>8,80</b>
---	---------------	----------------------------



0,3 x 13 mm G30, grün, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>144741</b>	<b>9,30</b> <b>8,80</b>
---	---------------	----------------------------



0,3 x 23 mm G30, grün, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>144740</b>	<b>9,30</b> <b>8,80</b>
---	---------------	----------------------------



0,4 x 23 mm G27, gelb, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>144739</b>	<b>9,30</b> <b>8,80</b>
---	---------------	----------------------------



0,4 x 37 mm G27, gelb, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>144738</b>	<b>9,30</b> <b>8,80</b>
---	---------------	----------------------------

0,4 x 42 mm G27, gelb, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>144735</b>	<b>9,30</b> <b>8,80</b>
---	---------------	----------------------------

0,5 x 25 mm G25, rot, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>144734</b>	<b>9,30</b> <b>8,80</b>
--	---------------	----------------------------

0,5 x 37 mm G25, rot, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>144719</b>	<b>9,30</b> <b>8,80</b>
--	---------------	----------------------------

0,5 x 42 mm G25, rot, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>144712</b>	<b>9,30</b> <b>8,80</b>
--	---------------	----------------------------

## Kalt-Sofort-Kompresse

Kalt-Sofort Kompresse mit Selbstaktivierungseffekt. Das Produkt besteht aus 2 Inhaltsstoffen, die bis zu ihrer Aktivierung getrennt sind. Das Platzen des mit Wasser gefüllten Innenbeutels setzt eine endotherme Reaktion in Gang. Sie bewirkt eine sofortige Kühlung des Beutels.

Das Produkt ist nur für den äußeren Gebrauch und Einmalgebrauch bestimmt. Nach Verwendung des Produktes dieses gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgen.

- Kühltemperatur ca. 10 °C
- Entsorgung: Kompresse im Hausmüll (Restmüll), Kartonverpackung im Altpapier

Karton, 10 Beutel	<b>146745</b>	<b>10,50</b>
-------------------	---------------	--------------



## ORBI-FRESH alkoholfrei

Die Mundspüllösung dient der professionellen Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. Sie erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Reinigungswirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu erhalten.

- 0,1 % Benzalkoniumchlorid
- 0,05 % Natriumfluorid
- Alkoholfrei
- Gebrauchsfertige Lösung

Flasche 100 ml	<b>239100</b>	<b>2,40</b>
Patientenflasche 300 ml	<b>239115</b>	<b>5,95</b>
Praxisflasche 5.000 ml	<b>239120</b>	<b>23,95</b>
Dosierpumpe	<b>28342</b>	<b>9,90</b>

## Einmalzahnbürsten plus

Geben Sie Ihren Patienten die Möglichkeit, sich mit einer wertvollen Einmalzahnbürste unmittelbar vor der Behandlung noch einmal die Zähne zu putzen.

- Mit Zahnpasta (fluoridfrei) imprägniert
- Einzeln, hygienisch gebrauchsfertig verpackt
- Gute Zugänglichkeit des schlanken Bürstenkopfes
- Weiche abgerundete Borsten
- Kein Anfeuchten notwendig
- Circa 16,5 cm lang
- In 4 Farben lieferbar



blau, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>204782</b>	<b>11,95</b> <b>10,65</b>
orange, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>203000</b>	<b>11,95</b> <b>10,60</b>
gelb, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>203001</b>	<b>11,95</b> <b>10,65</b>
grün, Packung 100 Stück ab 10 Packungen	<b>203002</b>	<b>11,95</b> <b>10,65</b>

**weitere Zahnbürsten  
und Mundspüllösungen  
s. Neuprodukteseite  
vorne**





## Zahnbürsten für Kinder

### 2-Komponenten-Kinderlernzahnbürste:

- Kurzkopf mit großer Softkante
- Extraweiche Borsten
- Kinderhandgerechter Griff mit Tiermotiv
- Für Kinder im Alter von **0 bis 3 Jahren** geeignet

### Kinderzahnbürste:

- 3-reihiger konischer Kopf
- Weiche PE-Borsten mit 26 Bündeln
- Kinderhandgerechter Griff in leuchtenden Farben
- Für Kinder im Alter von **0 bis 4 Jahren** geeignet

### 2-Komponenten-Juniorzahnbürste crossX:

- Tynex-Borste weich
- Kindergerechter Griff mit Griffmulden und Daumenauflage
- Umgummierter Bürstenkopf zum noch besseren Schutz des kindlichen Zahnfleisches
- Schräge Massageborsten
- Für Kinder im Alter von **4 bis 7 Jahren** geeignet

### 2-Komponenten-Juniorzahnbürste:

- Tynex-Borste weich
- Kindergerechter Griff mit Tiermotiv als Griffelement und Daumenauflage
- Für Kinder im Alter von **4 bis 7 Jahren** geeignet

### 3-Komponenten-Kinder- und -Juniorzahnbürste crossX:

- Kurzkopf mit großer Softkante und extraweichen Borsten
- Schräg stehende verlängerte Massageborsten
- Der Hand angepasster rutschfester Faustgriff
- Für Kinder im Alter von **7 bis 10 Jahren** geeignet



2-Komponenten-Kinderlernzahnbürste, Stück	<b>266918</b>	<b>0,95</b>
ab 100 Stück		<b>0,80</b>

Kinderzahnbürste, Stück	<b>150123</b>	<b>0,75</b>
ab 100 Stück		<b>0,60</b>

2-Komponenten-Juniorzahnbürste crossX, Stück	<b>194952</b>	<b>1,20</b>
ab 100 Stück		<b>0,95</b>

2-Komponenten-Juniorzahnbürste, Stück	<b>194953</b>	<b>0,95</b>
ab 100 Stück		<b>0,80</b>

3-Komponenten-Kinder- und -Juniorzahnbürste crossX, Stück	<b>266919</b>	<b>1,20</b>
ab 100 Stück		<b>0,95</b>



weitere Zahnbürsten  
finden Sie in der  
Neuproduktvorstellung  
vorne im Katalog



## Zahnbürste Orbis 2-K.

2-Komponenten-Zahnbürsten in 3 verschiedenen Ausführungen

**2-Komponenten-Zahnbürste de luxe:**

- Multifunktionskopf mit Konturschnitt und Massagewings
- Griffende gepolstert
- Elegant geformter Griff mit Daumenauflage
- De-luxe-Ausführung: transparenter Griff

**2-Komponenten-Zahnbürste Multikopf:**

- Multifunktionskopf mit Konturschnitt und Massagewings
- Griffende gepolstert
- Elegant geformter Griff mit Daumenauflage

**2-Komponenten-Zahnbürste Flexogriff:**

- X-Putzfeld und Zahnpinsel
- Griffende gepolstert
- Ergonomisch geformter Flexogriff
- Zungenreiniger und seitliche Massageelemente
- Kippfreie Auflage

Zahnbürste de luxe, Stück ab 100 Stück	<b>216625</b>	<b>1,20</b> <b>0,90</b>
Zahnbürste Flexogriff, Stück ab 100 Stück	<b>266920</b>	<b>1,20</b> <b>0,90</b>
Zahnbürste Multikopf, Stück ab 100 Stück	<b>216624</b>	<b>0,85</b> <b>0,70</b>

## Zahnbürsten für Erwachsene

Hochwertige Zahnbürsten „Made in Germany“

**Multituft-Zahnbürste:**

- Konischer Kopf
- Vorn 3-, hinten 4-reihig
- PE-Borsten mit 40 Bündeln
- Weiß, mittel, gerade Borstenstellung. **Zur Reinigung von Brackets geeignet.**

**2-Komponenten-Zahnbürste:**

- Flexibler Bürstenkopf
- PE-Borsten im Wellenschnitt
- Mittlere Härte
- Rutschhemmender Griff

**Information:**

Alle Zahnbürsten werden in gemischten Farben geliefert.


Multituft-Zahnbürste, Stück ab 100 Stück	<b>150127</b>	<b>0,95</b> <b>0,80</b>
2-Komponenten-Zahnbürste, Stück ab 100 Stück	<b>150128</b>	<b>1,20</b> <b>0,90</b>

## Prothesenzahnbürste

2-Komponenten-Prothesenzahnbürste

- Kräftiger Stiel mit Griffmulden zur sicheren Handhabung
- Dichtes, durch speziellen Hoch-/Tiefschnitt unterschiedlich hartes Borstenfeld
- Zahnpinsel zur Reinigung der Zahnzwischenräume und prothetischen Vertiefungen

Prothesenzahnbürste, Stück	<b>266922</b>	<b>1,80</b>
----------------------------	---------------	-------------

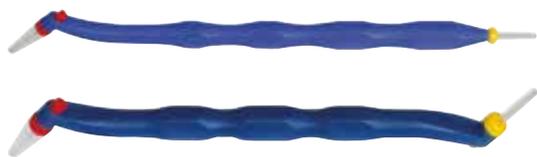

**weitere Interdentalsbürsten  
finden Sie vorne  
im Katalog**



## Halter für Interdentalsbürsten

HB, der Standardhalter, doppelendig:  
Die Bürsten können wahlweise frontal oder abgewinkelt auf den Halter gesteckt werden.

HM, der ergonomische Multihalter, doppelendig:  
Durch seine Flexibilität und Drehbarkeit besonders bequem in der Anwendung. Schwer erreichbare Zähne sowie Implantate, Kronen etc. lassen sich so „rundum“ gründlich reinigen.

Interdentalsbürsten für Halter (IDBH) werden einfach mit Fingerdruck auf die 3 erhältlichen Halter aufgesteckt, und zwar für frontale oder gewinkelte Anwendung, je nach Bedarf. Zum Wechseln werden sie mit Fingerdruck aus dem Halter gezogen. Umständliches Einfädeln oder Montieren entfällt.

Standardhalter HB, doppelendig, Länge 135 mm, Stück	<b>266690</b>	<b>1,60</b>
---	---------------	-------------

Multihalter HM, doppelendig, Länge 105 mm, Stück	<b>266691</b>	<b>1,60</b>
--	---------------	-------------

## Interdentalsbürsten, für Halter (IDBH)

Die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume ist nicht nur bei einem Gebiss mit ausschließlich gesunden Zähnen sinnvoll, sondern vor allem bei Situationen mit Füllungen, Kronen, Implantaten und Zahnsparungen. Durch eine regelmäßige Reinigung wird das Risiko eines schädigenden Entzündungsprozesses, z. B. Parodontose, minimiert. ORBIS bietet für jeden Fall die ideale Interdentalsbürste an.

Interdentalsbürsten für den Halter (IDBH) werden einfach mit Fingerdruck auf die 3 erhältlichen Halter aufgesteckt, und zwar für frontale oder gewinkelte Anwendung, je nach Bedarf. Zum Wechseln werden sie mit Fingerdruck aus dem Halter gezogen. Umständliches Einfädeln oder Montieren entfällt.

- Bürsten in hygienischen Einzelverpackungen
- Die praktische Klemmvorrichtung an der Packung ist ideal für die Bemusterung in der Praxis oder im Prophylaxeshop

IDBH-T, türkis, Ø 2,2 mm, > 0,55 mm, 5 Stück	<b>266676</b>	<b>3,10</b>
--	---------------	-------------

IDBH-T, türkis, Ø 2,2 mm, > 0,55 mm, 50 Stück	<b>266677</b>	<b>26,80</b>
---	---------------	--------------

IDBH-X, grau, Ø 1,7 mm, > 0,80 mm, 5 Stück	<b>266678</b>	<b>3,10</b>
--	---------------	-------------

IDBH-X, grau, Ø 1,7 mm, > 0,80 mm, 50 Stück	<b>266679</b>	<b>26,80</b>
---	---------------	--------------

IDBH-O, orange, Ø 2,0 mm, > 0,90 mm, 5 Stück	<b>266680</b>	<b>3,10</b>
--	---------------	-------------

IDBH-O, orange, Ø 2,0 mm, > 0,90 mm, 50 Stück	<b>266681</b>	<b>26,80</b>
---	---------------	--------------

IDBH-W, weiß, Ø 2,2 mm, > 1,0 mm, 5 Stück	<b>266682</b>	<b>3,10</b>
---	---------------	-------------

IDBH-W, weiß, Ø 2,2 mm, > 1,0 mm, 50 Stück	<b>266683</b>	<b>26,80</b>
--	---------------	--------------

IDBH-GE, gelb, Ø 2,5 mm, > 1,1 mm, 5 Stück	<b>266684</b>	<b>3,10</b>
--	---------------	-------------

IDBH-GE, gelb, Ø 2,5 mm, > 1,1 mm, 50 Stück	<b>266685</b>	<b>26,80</b>
---	---------------	--------------

IDBH-GK, grün, konisch, Ø 2,3–4,3 mm, > 1,2 mm, 5 Stück	<b>266686</b>	<b>3,10</b>
---	---------------	-------------

IDBH-GK, grün, konisch, Ø 2,3–4,3 mm, > 1,2 mm, 50 Stück	<b>266687</b>	<b>26,80</b>
--	---------------	--------------

IDBH-RK, rot, konisch, Ø 3,0–6,0 mm, > 1,6 mm, 5 Stück	<b>266688</b>	<b>3,10</b>
--	---------------	-------------

IDBH-RK, rot, konisch, Ø 3,0–6,0 mm, > 1,6 mm, 50 Stück	<b>266689</b>	<b>26,80</b>
---	---------------	--------------

## Interdentalbürsten, mit integriertem Griff (IDBG)

Die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume ist nicht nur bei einem Gebiss mit ausschließlich gesunden Zähnen sinnvoll, sondern vor allem bei Situationen mit Füllungen, Kronen, Implantaten und Zahnspangen. Durch eine regelmäßige Reinigung wird das Risiko eines schädigenden Entzündungsprozesses, z. B. Parodontose, minimiert. ORBIS bietet für jeden Fall die ideale Interdentalbürste an.

- Ermöglicht einen sicheren Griff und kann gerade oder abgewinkelt benutzt werden
- Mit plastifiziertem Drahtkern
- Hygienische Einzelverpackungen
- Die praktische Klemmvorrichtung an der Packung ist ideal für die Bemusterung in der Praxis oder im Prophylaxeshop




IDBG-W, weiß, Ø 2,8 mm, 5 Stück	<b>266671</b>	<b>3,50</b>
IDBG-G, grün, Ø 3,0 mm, 5 Stück	<b>266672</b>	<b>3,50</b>
IDBG-B, blau, Ø 5,0 mm, 5 Stück	<b>266674</b>	<b>3,50</b>
IDBG-GK, grün, konisch, Ø 3,0–6,5 mm, 5 Stück	<b>266673</b>	<b>3,50</b>
IDBG-VK, violett, konisch, Ø 4,0–7,5 mm, 5 Stück	<b>266675</b>	<b>3,50</b>

## Interdentalbürsten, ohne Griff (IDB)

Die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume ist nicht nur bei einem Gebiss mit ausschließlich gesunden Zähnen sinnvoll, sondern vor allem bei Situationen mit Füllungen, Kronen, Implantaten und Zahnspangen. Durch eine regelmäßige Reinigung wird das Risiko eines schädigenden Entzündungsprozesses, z. B. Parodontose, minimiert. ORBIS bietet für jeden Fall die ideale Interdentalbürste an.

- Ermöglicht eine bequeme Nutzung ohne Halter
- Der Drahtkern kann leicht in die gewünschte Position gebogen werden
- Mit farbig codiertem, plastifiziertem Drahtkern

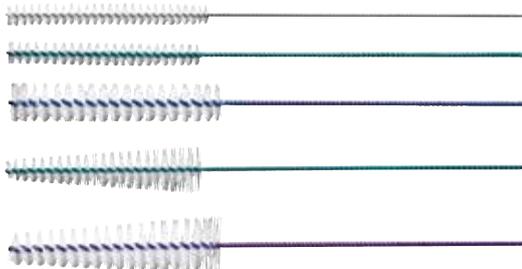

IDB-W, weiß, Ø 2,8 mm, Packung 10 Stück	<b>266666</b>	<b>4,20</b>
IDB-G, grün, Ø 3,0 mm, Packung 10 Stück	<b>266667</b>	<b>4,20</b>
IDB-B, blau, Ø 5,0 mm, Packung 10 Stück	<b>266669</b>	<b>4,20</b>
IDB-GK, grün, konisch, Ø 3,0–6,5 mm, Packung 10 Stück	<b>266668</b>	<b>4,20</b>
IDB-VK, violett, konisch, Ø 4,0–7,5 mm, Packung 10 Stück	<b>266670</b>	<b>4,20</b>

**Flosser finden Sie ganz vorne im Katalog**



## Zahnseide, gewachst

- 50 m gewachste Zahnseide aus Polyamid 6.6
- Mintgeschmack
- 2-Komponenten-Hygienebox mit integrierter Klinge und Softgriff

Zahnseide, Stück	<b>266921</b>	<b>2,20</b>
------------------	---------------	-------------



## ORBI-Prophylaxe Polierer

Rotierende Gummipolierer zur professionellen Reinigung für die Prophylaxebehandlung, Winkelstückschäft, fertig montiert

- Zur einmaligen Anwendung
- Latexfrei
- Mit Lamellen
- Blau (soft): zum Entfernen von Zahnbelag und Polieren, dies insbesondere in Sulcusnähe zur Schonung der Weichgewebe
- Gelb (fest): zum Entfernen von starkem Zahnbelag
- Empfohlene Drehzahl: max. 10.000 UpM

blau, Packung 24 Stück	<b>245661</b>	<b>11,95</b>
gelb, Packung 24 Stück	<b>245662</b>	<b>11,95</b>

## Zahnreinigungs- und Polierbürstchen

Rotierende Bürstchen zur professionellen Reinigung und Politur der Zahnoberfläche, mit Winkelstückschäft, fertig montiert

- Zur einmaligen Anwendung
- 100 % latexfreie Nylonborsten
- Weiß (Nylon): ideal für die Reinigung und Politur der Zahnoberflächen
- Rosa (soft): ideal für empfindliche Zahnhälse und den Einsatz bei Kindern
- Geeignet zum Reinigen von Brackets
- Kelchform
- Empfohlene Drehzahl: max. 5.000 UpM

Nylonborsten, normal, Packung 100 Stück	<b>193090</b>	<b>51,90</b>
Nylonborsten, rosa, soft, Packung 100 Stück	<b>243106</b>	<b>51,90</b>

## ORBI-Prophy Paste

Polierpasten für die professionelle Zahnreinigung

- Enthält 0,2% Natriumfluorid
- Geschmacksrichtung: Minze
- Enthält kein Kolophonium

### Hinweis:

- Zu verwenden mit ORBI Zahnreinigungs- und Polierbürstchen REF 193090 und REF 243106 sowie ORBI-Prophylaxe Polierer REF 245661 und REF 245662.



RDA 250, blau, Tube 95 g	<b>245485</b>	<b>9,20</b>
--------------------------	---------------	-------------

RDA 170, grün, Tube 95 g	<b>245484</b>	<b>9,20</b>
--------------------------	---------------	-------------

RDA 120, rosa, Tube 95 g	<b>245483</b>	<b>9,20</b>
--------------------------	---------------	-------------

RDA 40, gelb, Tube 95 g	<b>245481</b>	<b>9,20</b>
-------------------------	---------------	-------------



## ORBI-Prophy Paste Vario Polish

Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung mit Multi-Kontur-Partikeln, die die Abrasion und den Poliereffekt zugleich ermöglichen. Das Natriumfluorid ist zur Förderung der Remineralisation und für die Stärkung des Zahnschmelzes zuständig.

- Enthält 2% Natriumfluorid
- Geschmacksrichtung: Minze
- Amorphes Siliciumdioxid

### Hinweis:

Zu verwenden mit Orbis Zahnreinigungs- und Polierbürstchen REF 193090 und REF 243106 sowie ORBI-Prophylaxe Polierer REF 245661 und REF 245662.

Tube 95 g

**245466 9,20**



## ORBI-Prophy Powder

**ORBI-Prophy Powder classic** besteht aus Natriumbicarbonat und wird für supragingivale Behandlungen verwendet.

Korngröße ca. 65 µm • Nicht abrasiv • Glutenfrei

**ORBI-Prophy Powder soft** auf Glycin-Basis wird für supragingivale Behandlungen verwendet.

Korngröße ca. 65 µm • Nicht abrasiv • Glutenfrei • Nicht hygroskopisch

**ORBI-Prophy Powder perio** auf Glycin-Basis wird für supra- und subgingivale Behandlungen verwendet.

Korngröße ca. 25 µm • Nicht abrasiv • Glutenfrei • Nicht hygroskopisch

Pulver nur für den professionellen Einsatz in der Zahnheilkunde vorgesehen!

### Information:

Vor Anwendung unbedingt die Gebrauchsinformationen beachten.



soft, neutral, Flasche 200 g	<b>264338</b>	<b>27,90</b>
perio, neutral, Flasche 100 g	<b>264337</b>	<b>18,60</b>
classic, cassis, Flasche 300 g	<b>264341</b>	<b>21,70</b>
classic, cherry, Flasche 300 g	<b>264342</b>	<b>21,70</b>
classic, lemon, Flasche 300 g	<b>264343</b>	<b>21,70</b>
classic, mint, Flasche 300 g	<b>264348</b>	<b>21,70</b>
classic, tropic, Flasche 300 g	<b>264364</b>	<b>21,70</b>

**Fruchtig  
frisch!**



## ORBI-BITEBOX

Transport- und Aufbewahrungsbox aus stabilem Kunststoff

- Geeignet für Klammern und Knirscherschienen
- Mit Belüftungslöchern
- Verschiedene Farben erhältlich
- Breite 80 mm, Tiefe 75 mm, Höhe 28 mm
- Höhe innen ca. 23 mm
- Glänzend



Gr. 1, weiß, Packung 10 Stück

**239225** **7,25**

Gr. 1, pink, Packung 10 Stück

**245450** **7,25**

Gr. 1, hellblau, Packung 10 Stück

**245452** **7,25**

Gr. 1, grün, Packung 10 Stück

**255361** **7,25**

Gr. 1, hellgrün, Packung 10 Stück

**255362** **7,25**



## ORBI-Orthobox

Transport- und Aufbewahrungsbox aus stabilem Kunststoff

- Geeignet für Prothesen und kieferorthopädische Geräte
- Für Mundschutz ebenfalls geeignet
- Mit Belüftungslöchern
- Verschiedene Farben erhältlich
- Breite 85 mm, Tiefe 85 mm, Höhe 40 mm
- Höhe innen ca. 30 mm
- Matt



Gr. 2, weiß, Packung 10 Stück **239226** **11,25**



Gr. 2, pink, Packung 10 Stück **245451** **11,25**



Gr. 2, hellblau, Packung 10 Stück **245453** **11,25**



Gr. 2, grün, Packung 10 Stück **255359** **11,25**



Gr. 2, hellgrün, Packung 10 Stück **255360** **11,25**





## Röntgen-Chemikalienset

Entwickler- und Fixierkonzentrat, einteilig: Jede Komponente einfach auf die Endmenge von 5 l verdünnen – fertig. Ansatzfehler werden sicher vermieden. Perfekte Filmverarbeitung durch ausgewogene Abstimmung auf alle marktrelevanten Dentalfilme. Sparsamer Verbrauch. Verlässliche Entwicklungsergebnisse über die gesamte Standzeit.

- Für 2 Ansätze

Geeignet für z. B.:

- Philips Rollomat 810, 820
- Dürr CA 245, XR 24, XR 24II, XR 25, XR 24 Pro, XR 24 Nova

Konzentrat: 2 x 1,5 l Entwickler und 2 x 1,5 l Fixierer, Karton	<b>195925</b>	<b>41,90</b>
---	---------------	--------------



## Schutzhüllen

Exakt passende Schutzhüllen für digitale Röntgensensoren und rahmenlose Speicherfolien. Die Folie ist speziell für diesen Einsatzzweck optimiert und hat keinerlei negativen Einfluss auf die Bildqualität.

- Passend zu allen marktüblichen Speicherfolien
- Hohe Passgenauigkeit
- Weiche, patientenfreundliche Folie
- Leichte Handhabung
- Einfaches Öffnen
- Selbstklebend

Schutzhüllen für digitale Röntgensensoren

- In 2 verschiedenen Größen

Speicherfolie, Größe 0, 22 x 35 mm, Packung 300 Stück	<b>15889</b>	<b>41,90</b>
Speicherfolie, Größe 1, 24 x 40 mm, Packung 300 Stück	<b>15936</b>	<b>41,90</b>
Speicherfolie, Größe 2, 31 x 41 mm, Packung 300 Stück	<b>15956</b>	<b>41,90</b>
Röntgensensor, mittel, Größe 1, für Sensor 1, 2 x 3 cm, Packung 500 Stück	<b>15957</b>	<b>19,90</b>
Röntgensensor, groß, Größe 2, für Sensor 2, 3 x 4 cm, Packung 500 Stück	<b>15958</b>	<b>19,90</b>



## Röntgenfilmtaschen, endlos

- Abreißbar
- Aus transparentem Kunststoff

Geeignet für Filme der Formate:

- 2 x 3 cm
- 3 x 4 cm
- 4 x 5 cm

Packung 200 Stück	<b>143086</b>	<b>7,60</b>
-------------------	---------------	-------------



## Panoramafilmtaschen

Weichmacherfreie PVC-Hartfolie, glasklar, mit Beschriftungsfeld und Lochrand

Format 13,4 x 30 cm, Packung 50 Stück	<b>143088</b>	<b>31,60</b>
Format 15 x 30 cm, Packung 50 Stück	<b>143090</b>	<b>31,60</b>
Beschriftungsstreifen (Name, Ort, Befund), Packung 100 Stück	<b>143182</b>	<b>5,20</b>

## Polycarbonatkronen

Temporäre Kronen für den Front- und Seitenzahnbereich



Je 3 Kronen aller angegebenen Größen, Sortiment 180 Stück	<b>170127</b>	<b>66,85</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 14, 10,0 x 7,5, Packung 5 Stück	<b>170024</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 13, 10,5 x 7,7, Packung 5 Stück	<b>170019</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 12, 11,0 x 8,0, Packung 5 Stück	<b>170018</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 11, 11,5 x 8,5, Packung 5 Stück	<b>170017</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 10, 12,5 x 9,0, Packung 5 Stück	<b>170016</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 101, 13,0 x 9,5, Packung 5 Stück	<b>170015</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 100, 14,0 x 10,0, Packung 5 Stück	<b>170014</b>	<b>2,99</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 15, 10,0 x 7,5, Packung 5 Stück	<b>170038</b>	<b>2,99</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 16, 10,5 x 7,7, Packung 5 Stück	<b>170037</b>	<b>2,99</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 17, 11,0 x 8,0, Packung 5 Stück	<b>170035</b>	<b>2,99</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 18, 11,5 x 8,5, Packung 5 Stück	<b>170034</b>	<b>2,99</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 19, 12,5 x 9,0, Packung 5 Stück	<b>170033</b>	<b>2,99</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 102, 13,0 x 9,5, Packung 5 Stück	<b>170032</b>	<b>2,99</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 103, 14,0 x 10,0, Packung 5 Stück	<b>170031</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 300, 13,0 x 9,0, Packung 5 Stück	<b>170065</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 301, 12,5 x 8,5, Packung 5 Stück	<b>170066</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 30, 12,0 x 8,2, Packung 5 Stück	<b>170069</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 31, 11,0 x 8,0, Packung 5 Stück	<b>170070</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 32, 10,5 x 7,8, Packung 5 Stück	<b>170073</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 33, 10,0 x 7,5, Packung 5 Stück	<b>170076</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 34, 9,8 x 7,2, Packung 5 Stück	<b>170077</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 35, 9,8 x 7,2, Packung 5 Stück	<b>170094</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 36, 10,0 x 7,5, Packung 5 Stück	<b>170093</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 37, 10,5 x 7,8, Packung 5 Stück	<b>170090</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 38, 11,0 x 8,0, Packung 5 Stück	<b>170089</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 39, 12,5 x 8,2, Packung 5 Stück	<b>170088</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 302, 12,5 x 8,5, Packung 5 Stück	<b>170087</b>	<b>2,99</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 303, 13,0 x 9,0, Packung 5 Stück	<b>170086</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 24, 8,5 x 5,7, Packung 5 Stück	<b>170055</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 23, 9,0 x 6,2, Packung 5 Stück	<b>170054</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 22, 9,5 x 6,5, Packung 5 Stück	<b>170053</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 21, 10,0 x 6,8, Packung 5 Stück	<b>170050</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 20, 10,5 x 7,0, Packung 5 Stück	<b>170049</b>	<b>2,99</b>
OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 2, 11,0 x 7,3, Packung 5 Stück	<b>170044</b>	<b>2,99</b>
OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 200, 11,5 x 7,3, Packung 5 Stück	<b>170056</b>	<b>2,99</b>
OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 29, 10,5 x 7,0, Packung 5 Stück	<b>170057</b>	<b>2,99</b>
OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 28, 10,0 x 6,8, Packung 5 Stück	<b>170058</b>	<b>2,99</b>
OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 27, 9,5 x 6,5, Packung 5 Stück	<b>170059</b>	<b>2,99</b>
OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 26, 9,0 x 6,2, Packung 5 Stück	<b>170062</b>	<b>2,99</b>
OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 25, 8,5 x 5,7, Packung 5 Stück	<b>170063</b>	<b>2,99</b>
UK, Schneidezähne, lang, Nr. 60, 12,0 x 6,2, Packung 5 Stück	<b>170080</b>	<b>2,99</b>
UK, Schneidezähne, lang, Nr. 61, 11,5 x 5,9, Packung 5 Stück	<b>170081</b>	<b>2,99</b>
UK, Schneidezähne, lang, Nr. 62, 11,0 x 5,6, Packung 5 Stück	<b>170083</b>	<b>2,99</b>
UK, Schneidezähne, lang, Nr. 63, 10,5 x 5,3, Packung 5 Stück	<b>170084</b>	<b>2,99</b>
UK, Schneidezähne, lang, Nr. 64, 10,0 x 5,0, Packung 5 Stück	<b>170085</b>	<b>2,99</b>
UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 65, 8,0 x 5,0, Packung 5 Stück	<b>170102</b>	<b>2,99</b>
UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 66, 8,5 x 5,1, Packung 5 Stück	<b>170101</b>	<b>2,99</b>
UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 67, 9,2 x 5,3, Packung 5 Stück	<b>170100</b>	<b>2,99</b>
UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 68, 10,0 x 5,6, Packung 5 Stück	<b>170098</b>	<b>2,99</b>
UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 69, 10,5 x 6,0, Packung 5 Stück	<b>170095</b>	<b>2,99</b>
Erster Prämolare, Nr. 40, 10,0 x 7,4, Packung 5 Stück	<b>170025</b>	<b>2,99</b>
Erster Prämolare, Nr. 41, 9,5 x 7,0, Packung 5 Stück	<b>170026</b>	<b>2,99</b>
Erster Prämolare, Nr. 42, 9,0 x 6,8, Packung 5 Stück	<b>170027</b>	<b>2,99</b>
Erster Prämolare, Nr. 45, 8,5 x 6,5, Packung 5 Stück	<b>170028</b>	<b>2,99</b>
Erster Prämolare, Nr. 44, 8,0 x 6,2, Packung 5 Stück	<b>170029</b>	<b>2,99</b>
Zweiter Prämolare, Nr. 50, 10,2 x 7,5, Packung 5 Stück	<b>170039</b>	<b>2,99</b>
Zweiter Prämolare, Nr. 51, 10,0 x 7,0, Packung 5 Stück	<b>170040</b>	<b>2,99</b>
Zweiter Prämolare, Nr. 52, 9,3 x 6,8, Packung 5 Stück	<b>170041</b>	<b>2,99</b>
Zweiter Prämolare, Nr. 53, 9,0 x 6,6, Packung 5 Stück	<b>170042</b>	<b>2,99</b>
Zweiter Prämolare, Nr. 54, 8,5 x 6,2, Packung 5 Stück	<b>170043</b>	<b>2,99</b>





Ab 10 Packungen  
**7,25 €**

Ab 30 Packungen  
nur **6,95 €**



Ab 10 Packungen  
**7,65 €**

Ab 30 Packungen  
nur **6,95 €**



Ab 10 Packungen  
**7,45 €**

Ab 30 Packungen  
nur **6,95 €**



## ORBI-Touch eco plus

Unsteriler Einmaluntersuchungshandschuh aus reinem Naturlatex, puderfrei – mit hautfreundlicher, synthetischer Innenbeschichtung und praktischem Rollrand. Der naturweiße Handschuh ist besonders reißfest, besitzt eine ausgezeichnete Passform und lässt sich sehr leicht anziehen.

- Tastsensibel
- Texturiert, griffig
- Puderfrei
- AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3 / EN 374-2, 3

Größe XS, Packung 100 Stück	<b>205004</b>	<b>7,95</b>
Größe S, Packung 100 Stück	<b>205002</b>	<b>7,95</b>
Größe M, Packung 100 Stück	<b>205001</b>	<b>7,95</b>
Größe L, Packung 100 Stück	<b>205000</b>	<b>7,95</b>
Größe XL, Packung 100 Stück	<b>205003</b>	<b>7,95</b>

## ORBI-Touch Supreme

Unsteriler Einmaluntersuchungshandschuh aus hochwertigem Naturlatex, puderfrei mit Rollrand. Der Handschuh mit seiner natürlichen Passform hat ein ausgezeichnetes Tastempfinden.

- Ausgezeichnetes Tastempfinden
- Puderfrei
- AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3

Größe XS, Packung 100 Stück	<b>266661</b>	<b>8,25</b>
Größe S, Packung 100 Stück	<b>266662</b>	<b>8,25</b>
Größe M, Packung 100 Stück	<b>266663</b>	<b>8,25</b>
Größe L, Packung 100 Stück	<b>266664</b>	<b>8,25</b>
Größe XL, Packung 100 Stück	<b>266665</b>	<b>8,25</b>

## ORBI-Touch nitril color

Latexfreier Einmaluntersuchungshandschuh aus Nitril. Der Handschuh ist puderfrei, enthält keine Naturlatexproteine und ist auch für Allergiker geeignet. Das elastische Material bietet höchsten Tragekomfort und maximales Tastgefühl.

- Farbe: lavendelblau
- Tastsensibel
- Puderfrei
- AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3 / EN 374-2, 3

Größe S, Packung 100 Stück	<b>206002</b>	<b>7,95</b>
Größe M, Packung 100 Stück	<b>206001</b>	<b>7,95</b>
Größe L, Packung 100 Stück	<b>206000</b>	<b>7,95</b>
Größe XL, Packung 100 Stück	<b>206003</b>	<b>7,95</b>



## ORBI-Touch nitril soft white

Latexfreier, unsteriler Einmaluntersuchungshandschuh, puder- und proteinfrei. Der weiße Handschuh aus Nitril besitzt eine natürliche Passform und ist besonders bei Latexunverträglichkeit geeignet.

- Latexfrei
- Ausgezeichnetes Tastempfinden
- Puder- und proteinfrei
- AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3

Größe XS, Packung 100 Stück	<b>266849</b>	<b>7,95</b>
Größe S, Packung 100 Stück	<b>266850</b>	<b>7,95</b>
Größe M, Packung 100 Stück	<b>266851</b>	<b>7,95</b>
Größe L, Packung 100 Stück	<b>266852</b>	<b>7,95</b>
Größe XL, Packung 100 Stück	<b>266853</b>	<b>7,95</b>

Ab 10 Packungen  
**7,45 €**

Ab 30 Packungen  
nur **6,95 €**



## ORBI-Touch Vinyl PF

Unsteriler Einmaluntersuchungshandschuh aus Vinyl, puderfrei mit Rollrand. Der Handschuh ist besonders bei Latexunverträglichkeit geeignet.

- Latexfrei
- Puderfrei
- AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3

Größe S, Packung 100 Stück	<b>229000</b>	<b>6,15</b>
Größe M, Packung 100 Stück	<b>229001</b>	<b>6,15</b>
Größe L, Packung 100 Stück	<b>229002</b>	<b>6,15</b>
Größe XL, Packung 100 Stück	<b>229003</b>	<b>6,15</b>

Ab 10 Packungen  
**5,65 €**



## ORBI-Touch works

Unsteriler blauer Arbeitshandschuh aus Naturlatex, besonders geeignet in Risikobereichen wie Instrumentenaufbereitung, Reinigen von Behandlungsräumen und OPs. Beidhändig passend mit Rollrand.

- Niedrige Proteinwerte
- Materialstärke: Finger: 0,39 mm | Handfläche: 0,32 mm | Schaft: 0,19 mm
- Länge 290 mm
- AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3 / EN 374-2,3
- PSA-Richtlinie 89/686/EWG

Größe S, Packung 50 Stück	<b>231261</b>	<b>13,35</b>
Größe M, Packung 50 Stück	<b>231262</b>	<b>13,35</b>
Größe L, Packung 50 Stück	<b>231263</b>	<b>13,35</b>

Ab 10 Packungen  
**12,35 €**



## Chemikalienschutzhandschuh

Vollbeschichteter Chemikalienschutzhandschuh aus Nylon mit Beschichtung aus PVC. Der Handschuh ist mit einer konischen Stulpe ausgestattet, welche das Tragen über weiterer Schutzkleidung ermöglicht. Für eine perfekte Griffsicherheit ist der Handflächenbereich angeraut. Der ORBIS Chemikalienschutzhandschuh hat eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber vielen unterschiedlichen Chemikalien.

EN 388 (4141X)  
EN 374-1 (JKLMPT)  
EN 374-2  
EN 420

PSA Kategorie III gemäß PSA-Richtlinie 89/686/EWG (EU 2016/425)

Größe 8, Paar	<b>263772</b>	<b>5,70</b>
Größe 9, Paar	<b>263773</b>	<b>5,70</b>
Größe 10, Paar	<b>263774</b>	<b>5,70</b>



Ab 10 Dosen  
**8,90 €**

## Occlusionsspray Plus

Mikropulverisiertes Markierungsspray zum Erkennen von Kontaktpunkten und -flächen im Dentalbereich. Es ist zum gezielten Aufsprühen mit 2 speziellen Sprühdüsen ausgestattet: eine zum punktgenauen Sprühen – kombiniert mit dünnem Sprühfilm. Eine zweite zum Besprühen größerer Flächen mit etwas dickerem Sprühfilm. Das Occlusionsspray ist durch seine lebensmittelechten Inhaltsstoffe völlig unschädlich und auch für den intraoralen Gebrauch einsetzbar. Haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff. Es flockt nicht aus und lässt sich leicht von versiegelten Gipsoberflächen abwaschen.

- Dose vor Gebrauch gut schütteln

grün, Spraydose 75 ml	<b>143263</b>	<b>9,95</b>
rot, Spraydose 75 ml	<b>46399</b>	<b>9,95</b>



## PROtect finish

PROtect finish findet im zahntechnischen Labor, in der allgemeinen Zahnarztpraxis sowie beim Kieferorthopäden Verwendung. Mit PROtect finish behandelte Arbeiten weisen an der Oberfläche einen geringeren Restmonomergehalt auf als unbehandelte Arbeiten. Dazu kommt ein höherer Vernetzungsgrad innerhalb der Arbeit, wodurch sich die mechanischen Eigenschaften des Werkstücks weiter verbessern.

**Zahntechnik:** PROtect finish verleiht prothetischen Arbeiten und kieferorthopädischen Apparaten einen feinen Hochglanz. Im Verlauf des Herstellungsprozesses entstandene, unschöne Schleifspuren treten optisch zurück.

**Zahnarztpraxis:** PROtect finish maskiert den zunächst unangenehmen Geschmack einer neuen Prothese, regt den Speichelfluss des Patienten bei der Eingliederung an und sorgt so für gute Haftung und ein sofortiges angenehmes Tragegefühl. Wir empfehlen daher, auch laborseitig vorbehandelte Prothesen und Apparate kurz vor dem ersten Einsetzen nochmals mit PROtect finish zu behandeln.

- PROtect finish wirkt zusätzlich bakterizid innerhalb 1 Min. (gem. EN 1040)
- Geschmacksrichtung: Minze

Spraydose 75 ml	<b>19166</b>	<b>10,35</b>
-----------------	--------------	--------------



## Tiefziehfolien

Käppchenfolie

- Weiches, elastisches Material, rückstandslos verbrennbar
- Verbindet sich nicht mit Acrylat
- Für sämtliche Gussformteile, z. B. Kronen, Kappen

0,6 x 42 mm, klar, Packung 100 Stück	<b>143003</b>	<b>8,50</b>
--------------------------------------	---------------	-------------

## Unterziehfolien

Platzhalterfolie

- Dünne, gut tiefziehbare Folie
- Schrumpfausgleichende Unterziehfolie bei der Herstellung von Gussformteilchen (Käppchen)

0,1 x 42 mm, klar, Packung 100 Stück	<b>143002</b>	<b>10,40</b>
--------------------------------------	---------------	--------------



*Einfach clever!*



## Einmalhandtücher, aus Zellstoff

Hochsaugfähige Handtücher, umweltverträglich hergestellt aus hochweißem Zellstoff-Tissue. Die Tücher haben einen angenehm weichen Grip, sind sehr saugfest und sparsam in der Verwendung.

- 100 % Zellstoff-Tissue
- Interfold-Falzung/V-Form-Falzung

3-lagig, hochweiß, Größe 22 x 32 cm, Karton 2.300 Stück	<b>204986</b>	<b>49,95</b>
2-lagig, hochweiß, Größe 25 x 21 cm, Karton 3.200 Stück	<b>199300</b>	<b>35,95</b>



## Einmalhandtücher, Designprägung

Hochsaugfähige Einmalhandtücher mit farbiger Designprägung

- 100 % Zellstoff
- Größe 23 x 21 cm
- ZZ-Falzung

2-lagig, weiß, mit lila Designprägung, Karton 3.200 Stück	<b>233449</b>	<b>33,95</b>
2-lagig, weiß, mit grüner Designprägung, Karton 3.200 Stück	<b>233450</b>	<b>33,95</b>




## Einmalhandtücher, grün

Saugfähige Papierhandtücher, umweltverträglich hergestellt aus reinem Recyclingmaterial. Die Tücher haben einen angenehmen Grip, sind saugfest und angenehm in der Verwendung.

- 100 % Recyclingmaterial
- Größe 24 x 23 cm
- ZZ-Falzung

2-lagig, grün, Karton 3.750 Stück	<b>239224</b>	<b>38,55</b>
-----------------------------------	---------------	--------------

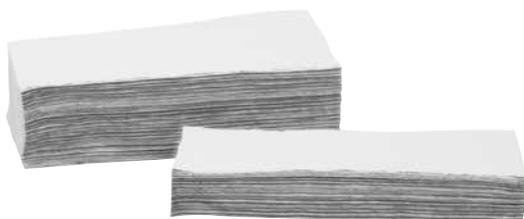


## Einmalhandtücher, recycelt

Hochsaugfähige Papierhandtücher, umweltverträglich hergestellt aus reinem Recyclingmaterial. Die Tücher haben einen angenehmen Grip, sind sehr saugfest und angenehm in der Verwendung. Wählen Sie zwischen unseren Qualitäten!

- 100 % Recyclingmaterial
- Größe 25 x 21 cm
- ZZ-Falzung

1-lagig, ungebleicht-naturweiß, Karton 5.000 Stück	<b>199299</b>	<b>24,85</b>
1-lagig, hochweiß, Karton 5.000 Stück	<b>46395</b>	<b>32,95</b>

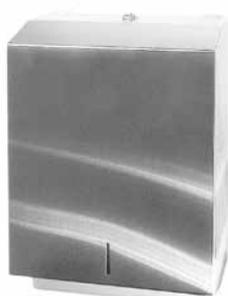

## Handtuchspender, aus Edelstahl

Formschöner Wandspender aus gebürstetem Edelstahl, für alle gängigen Papierhandtücher. Leichte und sichere Einzeltuchentnahme. Große Kapazität, je nach Handtuchqualität bis zu 600 Tücher!

- Leicht zu montieren
- Mit Schloss
- Sichtfenster für Füllstandskontrolle
- Größe (B x H x T): 250 x 330 x 130 mm

Handtuchspender, Stück	<b>182227</b>	<b>70,90</b>
Handtuchspenderschlüssel, Stück	<b>215013</b>	<b>6,40</b>



Ab 20 Packungen  
**6,25 €**



### Mundschutz mit Bändern

Hochwirksamer Mundschutz, hypoallergen dank ausgesuchter Rohmaterialien. Der extralange Nasenbügel erlaubt eine optimale Anpassung der Maske an die Gesichtskontur. Geringer Atemwiderstand, daher auch für Brillenträger geeignet.

- Stabile Bänder
- Filterleistung 99 % (Melt-Blown-Filter)
- Rundum ultraschallvernäht, sehr hoher Tragekomfort
- Frei von Latex, Glasfasern, Kupfer und Nickel
- Gemäß EN 14683:2005

**Information:**

Der Mundschutz ist ein Einmalartikel, der nach der Verwendung vorschriftsgemäß entsorgt werden muss. Dies ist wichtig, um Kreuzkontaminationen zu verhindern, die auftreten könnten, wenn der gleiche Mundschutz von verschiedenen Personen getragen wird.

blau, Packung 50 Stück	<b>145978</b>	<b>7,25</b>
grün, Packung 50 Stück	<b>145878</b>	<b>7,25</b>
weiß, Packung 50 Stück	<b>145893</b>	<b>7,25</b>



Ab 20 Packungen  
**6,25 €**



### Mundschutz mit Gummizug

Hochwirksamer Mundschutz, hypoallergen dank ausgesuchter Rohmaterialien. Der extralange Nasenbügel erlaubt eine optimale Anpassung der Maske an die Gesichtskontur. Geringer Atemwiderstand, daher auch für Brillenträger geeignet.

- Stabile, mit Baumwolle ummantelte Gummizüge
- Filterleistung 99 % (Melt-Blown-Filter)
- Rundum ultraschallvernäht, sehr hoher Tragekomfort
- Frei von Latex, Glasfasern, Kupfer und Nickel
- Gemäß EN 14683:2005

**Information:**

Der Mundschutz ist ein Einmalartikel, der nach der Verwendung vorschriftsgemäß entsorgt werden muss. Dies ist wichtig, um Kreuzkontaminationen zu verhindern, die auftreten könnten, wenn der gleiche Mundschutz von verschiedenen Personen getragen wird.

blau, Packung 50 Stück	<b>145981</b>	<b>7,25</b>
grün, Packung 50 Stück	<b>145982</b>	<b>7,25</b>
weiß, Packung 50 Stück	<b>145983</b>	<b>7,25</b>



### Mundspülbecher

Einwegmundspülbecher aus umweltfreundlichem Kunststoff, vollständig recyclingfähig. Griffstabil und standfest, Lebensmittelverpackungsqualität.

Weiße Ausführung: Höhe 73 mm, Ø oben 70 mm, Ø unten 47 mm

Farbige Ausführungen: Höhe 83 mm, Ø oben 70 mm, Ø unten 47 mm

Beide Bechertypen passen in die handelsüblichen Becherspender!

weiß, 150 ml, Karton 3.000 Stück	<b>148562</b>	<b>49,95</b>
blau, 180 ml, Karton 3.000 Stück	<b>190020</b>	<b>49,95</b>
hellblau, 180 ml, Karton 3.000 Stück	<b>190024</b>	<b>49,95</b>
gelb, 180 ml, Karton 3.000 Stück	<b>190022</b>	<b>49,95</b>
rot, 180 ml, Karton 3.000 Stück	<b>190023</b>	<b>49,95</b>
grün, 180 ml, Karton 3.000 Stück	<b>190021</b>	<b>49,95</b>
rosa, 180 ml, Karton 3.000 Stück	<b>190025</b>	<b>49,95</b>
lila, 180 ml, Karton 3.000 Stück	<b>250800</b>	<b>49,95</b>
cedro, 180 ml, Karton 3.000 Stück	<b>250801</b>	<b>49,95</b>
<b>NEU!</b> orange, 180 ml, Karton 3.000 Stück	<b>7055</b>	<b>49,95</b>
<b>NEU!</b> weinrot, 180 ml, Karton 3.000 Stück	<b>7353</b>	<b>49,95</b>
<b>farbig sortiert</b> , 180 ml, Karton 3.000 Stück	<b>190019</b>	<b>49,95</b>



# Bringen Sie Farbe in Ihre Praxis!

Viele ORBIS Produkte in frischen Farben!





## Spender für Mundspülbecher

Mundspülbecher – immer zur Hand: Hygienisch einwandfreie Vorratshaltung direkt in der Nähe des Behandlungsplatzes. Wahlweise aus durchscheinendem Kunststoff oder aus Edelstahl mit Füllstandsanzeige. Mit Zubehör zur einfachen Wandmontage.

Größe (H x B x T):  
Kunststoffspender: 320 x 100 x 110 mm  
Edelstahl: 360 x 85 x 85 mm

Kunststoff, Stück	<b>167494</b>	<b>26,95</b>
Ersatzringe für Spender, Satz	<b>288800</b>	<b>7,20</b>
Edelstahl, Stück	<b>170866</b>	<b>47,50</b>



## Mundspülglass

Ökologisch einwandfreie Mundspügläser aus Klarglas, geeignet für den Thermodesinfektor. Sie verringern das Müllvolumen Ihrer Praxis.

### Ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz!

- Stapelfähig, sehr platzsparend
- Max. Reinigungstemperatur: 120 °C
- 150 ml Inhalt

### Hinweis:

Mundspügläser sind nicht zur Sterilisation geeignet.

Karton 6 Stück	<b>189368</b>	<b>7,95</b>
----------------	---------------	-------------



## Nasskreppservietten

Stabiler, weicher Krepp, schützt Patienten gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung und verfügt über eine hohe Nass- und Reißfestigkeit

- Weiß
- Papiergewicht 24 g/m<sup>2</sup>
- Format 34 x 38 cm

Packung 1.000 Stück	<b>144591</b>	<b>19,95</b>
ab 3 Packungen		<b>17,95</b>



## Nasskreppservietten premium

Hochweißer, stabiler und weicher Krepp aus 100 % reinem Zellstoff, extrastarke Qualität dank hoher Kreppstruktur

- Schützt Patienten gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung
- Verfügt über eine hohe Nass- und Reißfestigkeit
- Papiergewicht 25 g/m<sup>2</sup>
- Format 34 x 38 cm

Packung 1.000 Stück	<b>277777</b>	<b>22,95</b>
---------------------	---------------	--------------



## Zelltuchservietten

Weiche, besonders saugfähige Servietten, hergestellt aus sauerstoffgebleichter Zellulose

- Superweich
- Größe 40 x 40 cm
- 2-lagig oder 4-lagig

2-lagig, Packung 50 Stück	<b>146537</b>	<b>2,20</b>
2-lagig, Karton 1.000 Stück	<b>147897</b>	<b>31,80</b>
4-lagig, Packung 25 Stück	<b>146538</b>	<b>2,10</b>
4-lagig, Karton 800 Stück	<b>147898</b>	<b>44,50</b>



## Serviettenkettchen

Serviettenhalter aus verchromter Perlenkette, in der Länge verstellbar. Die Servietten werden von den Klemmen sicher fixiert.

- Autoklavierbar
- Länge 45 cm

Stück	<b>147889</b>	<b>5,60</b>
-------	---------------	-------------



## ORBI-Serviettenhalter

Hygienische Einwegserviettenhalter

- Unkompliziertes Anbringen durch 2 Klebestreifen
- Hoher Tragekomfort durch weiches Krepppapier
- One Size
- Perfekte Sicherheit in der Hygienekette

Packung 250 Stück	<b>230606</b>	<b>13,95</b>
-------------------	---------------	--------------

## Serviettenhalter, farbig

Serviettenhalter aus thermoplastischem Kunststoff

- Latexfrei
- Autoklavierbar
- Länge 48 cm

### Hinweis:

Nicht für die Aufbereitung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten geeignet!

gelb, Stück	<b>248323</b>	<b>4,70</b>
gelb, Packung 5 Stück	<b>241036</b>	<b>15,90</b>

grün, Stück	<b>248324</b>	<b>4,70</b>
grün, Packung 5 Stück	<b>241037</b>	<b>15,90</b>

pink, Stück	<b>248327</b>	<b>4,70</b>
pink, Packung 5 Stück	<b>241038</b>	<b>15,90</b>

weiß, Stück	<b>248328</b>	<b>4,70</b>
weiß, Packung 5 Stück	<b>241158</b>	<b>15,90</b>

lila, Stück	<b>248329</b>	<b>4,70</b>
lila, Packung 5 Stück	<b>241159</b>	<b>15,90</b>

rot, Stück	<b>248330</b>	<b>4,70</b>
rot, Packung 5 Stück	<b>241160</b>	<b>15,90</b>

hellblau, Stück	<b>248331</b>	<b>4,70</b>
hellblau, Packung 5 Stück	<b>241161</b>	<b>15,90</b>


neongelb, cedro, Stück	<b>248332</b>	<b>4,70</b>
neongelb, cedro, Packung 5 Stück	<b>241162</b>	<b>15,90</b>

orange, Stück	<b>248333</b>	<b>4,70</b>
orange, Packung 5 Stück	<b>241163</b>	<b>15,90</b>

blau, Stück	<b>248334</b>	<b>4,70</b>
blau, Packung 5 Stück	<b>266931</b>	<b>15,90</b>


Serviettenhalter Ersatz-Kunststoffklemme	<b>255474</b>	<b>2,10</b>
--	---------------	-------------



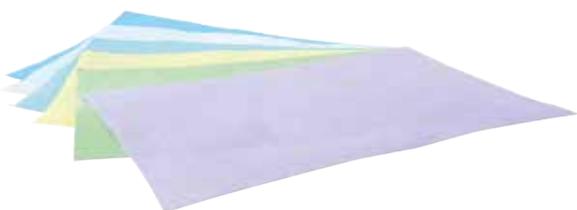

Ab 10 Packungen  
**3,95 €**

Ab 30 Packungen  
nur **3,75 €**

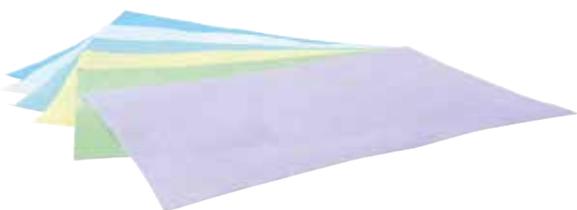

Ab 5 Packungen  
**8,60 €**

Ab 10 Packungen  
nur **7,95 €**

## Patientenumhänge

Diese Patientenumhänge bieten maximalen Schutz für den Patienten. Mit bequemem Halsausschnitt und ausreichend langen Bändern zum Binden.

Wählen Sie zwischen 2 Varianten:

- Die saugfähigen, aus PE-Folie mit einer zusätzlichen Zellstoffauflage, die Flüssigkeiten schnell und zuverlässig aufnehmen können. Größe 61 x 53 cm, 80 Stück je Rolle
- Die preisgünstigen, aus hochwertiger PE-Folie. Größe 75,3 x 53 cm, 200 Stück je Rolle

Beachten Sie auch den praktischen Tischspender für diese Patientenumhänge, der auch für andere Rollen geeignet ist.

blau, Papier/Folie, Rolle 80 Stück	<b>126628</b>	<b>12,95</b>
grün, Papier/Folie, Rolle 80 Stück	<b>143410</b>	<b>12,95</b>
weiß, Papier/Folie, Rolle 80 Stück	<b>143409</b>	<b>12,95</b>
blau, Folie, Rolle 200 Stück	<b>143408</b>	<b>14,95</b>
grün, Folie, Rolle 200 Stück	<b>143407</b>	<b>14,95</b>
weiß, Folie, Rolle 200 Stück	<b>137168</b>	<b>14,95</b>
Tischspender, weiß, Stück	<b>144142</b>	<b>19,90</b>

## Traypapier für Normtrays

Unsere Trayeinlagen werden aus hochwertigem Filterkrepppapier hergestellt. Das verwendete Papier wird in einem umweltschonenden Verfahren ohne Chlorbleiche produziert. Es ist holzfrei und enthält keine optischen Aufheller, dabei ist es hochsaugfähig und hochnassfest und für den Einsatz im Autoklav geeignet.

- Keine Entfärbung während der Dampfsterilisation
- In verschiedenen Farben
- Zellstoff mit der Dichte von 55 g/m<sup>2</sup>
- Maße: **28 x 18 cm**

für Normtrays, weiß, Packung 250 Blatt	<b>143130</b>	<b>4,60</b>
für Normtrays, blau, Packung 250 Blatt	<b>145988</b>	<b>4,60</b>
für Normtrays, gelb, Packung 250 Blatt	<b>143150</b>	<b>4,60</b>
für Normtrays, grün, Packung 250 Blatt	<b>145992</b>	<b>4,60</b>
für Normtrays, lila, Packung 250 Blatt	<b>250798</b>	<b>4,60</b>
für Normtrays, cedro, Packung 250 Blatt	<b>250799</b>	<b>4,60</b>

## Traypapier für Schwebetische

Unsere Schwebetischauflagen werden aus hochwertigem Filterkrepppapier hergestellt. Das verwendete Papier wird in einem umweltschonenden Verfahren ohne Chlorbleiche produziert. Es ist holzfrei und enthält keine optischen Aufheller, dabei ist es hochsaugfähig und hochnassfest und für den Einsatz im Autoklav geeignet.

- Keine Entfärbung während der Dampfsterilisation
- In verschiedenen Farben
- Zellstoff mit der Dichte von 55 g/m<sup>2</sup>
- Maße: **28 x 36 cm**

für Schwebetisch, weiß, Packung 250 Blatt	<b>140056</b>	<b>9,40</b>
für Schwebetisch, blau, Packung 250 Blatt	<b>186392</b>	<b>9,40</b>
für Schwebetisch, gelb, Packung 250 Blatt	<b>186394</b>	<b>9,40</b>
für Schwebetisch, grün, Packung 250 Blatt	<b>186393</b>	<b>9,40</b>



## Schutzservietten Premium

Rechteckige, mehrlagig aufgebaute Schutzserviette. Die hochwertige PE-Folie verhindert das Durchnässen der Serviette, die spezielle Zellulose mit erhöhter Grammatur nimmt besonders viel Flüssigkeit auf.

- In verschiedenen Farben
- Optimaler Schutz und Komfort für den Patienten
- Sehr hohe Saugleistung
- Feuchtigkeitsundurchlässig
- Papier 28 g/m<sup>2</sup>
- Folie 8 µm

Beachten Sie auch die praktische Spenderbox REF 126116 (Tischspender) für diese Servietten.

dunkelblau, Größe 33 x 45 cm, Packung 500 Stück	<b>185374</b>	<b>20,90</b>
hellblau, Größe 33 x 45 cm, Packung 500 Stück	<b>185373</b>	<b>20,90</b>
grün, Größe 33 x 45 cm, Packung 500 Stück	<b>185372</b>	<b>20,90</b>
weiß, Größe 33 x 45 cm, Packung 500 Stück	<b>185371</b>	<b>20,90</b>
lila, Größe 33 x 45 cm, Packung 500 Stück	<b>250796</b>	<b>20,90</b>
cedro, Größe 33 x 45 cm, Packung 500 Stück	<b>250797</b>	<b>20,90</b>
Spenderbox, aus Kunststoff, für 50 Servietten, Stück	<b>126116</b>	<b>31,60</b>

*Ganz nah dran:  
[www.orbis-dental.de/vertriebspartner](http://www.orbis-dental.de/vertriebspartner)*

*Gut  
 wie das  
 Leben*





## Absaugkanüle

Universalkanülen aus farbechtem Kunststoff zur Absaugung von Speichel, Blut, Sekret und kleineren Feststoffen jeglicher Art. Abgerundete Ecken und Kanten.

- Länge 140 mm
- Ansatz Ø 16 mm
- Ergonomische, fließende Form
- Geräuscharm
- Autoklavierbar bei 134 °C
- Ohne Weichmacher (Phthalate)

grau, Packung 10 Stück

**255578** **9,40**

blau, Packung 10 Stück

**255579** **9,40**

lila, Packung 10 Stück

**255580** **9,40**

cedro, Packung 10 Stück

**255581** **9,40**

## Absaugkanüle chirurgisch

Die chirurgischen Absaugkanülen von ORBIS sind bewährte Helfer, um das orale Behandlungsfeld bei minimalinvasiven Eingriffen zu trocknen und Partikel abzusaugen. Die Absaugkanülen kommen bei chirurgischen Eingriffen zum Einsatz, bei denen eine größere Saugleistung erforderlich ist.


- Präzises Absaugen
- Schlanke Form, mit konischer Spitze
- Hygienisch und zeitsparend
- Steril und einzeln verpackt
- Ansaugdurchmesser 2,5 mm
- Graue Spitze

Packung 100 Stück

**265446** **99,95**



Ab 10 Packungen  
**2,55 €**

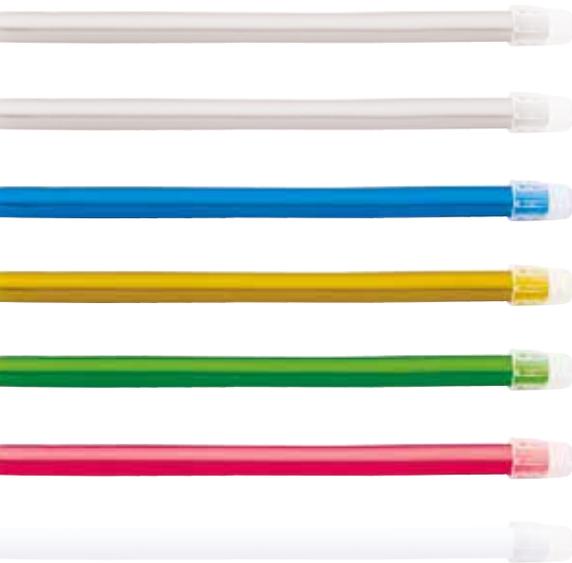

## Speichelsauger

Flexibler Speichelsauger aus transparentem Kunststoff, mit stabil in der Röhrenwand eingelassenem Metalldraht. Lässt sich leicht in die gewünschte Form bringen, ohne dabei abzuknicken. Die neu gestaltete Kappe ist sehr klein, mit stark abgerundeten Ecken. Die so herbeigeführte Zwangsbelüftung verhindert das Ansaugen an der Mundschleimhaut des Patienten.

- Leicht zu biegen, danach formstabil
- Kein Hervorstehen des Metalldrahtes
- Größe Ø 6,5 mm, Länge 125 mm
- Phthalatfrei

mit fest verschweißter Kappe, transparent, Packung 100 Stück	<b>170668</b>	<b>2,95</b>
mit abnehmbarer Kappe, transparent, Packung 100 Stück	<b>144601</b>	<b>2,95</b>
mit abnehmbarer Kappe, blau transparent, Packung 100 Stück	<b>170630</b>	<b>2,95</b>
mit abnehmbarer Kappe, gelb transparent, Packung 100 Stück	<b>170631</b>	<b>2,95</b>
mit abnehmbarer Kappe, grün transparent, Packung 100 Stück	<b>170632</b>	<b>2,95</b>
mit abnehmbarer Kappe, rot transparent, Packung 100 Stück	<b>170633</b>	<b>2,95</b>
mit abnehmbarer Kappe, weiß opak, Packung 100 Stück	<b>141206</b>	<b>2,95</b>

## Mulltupfer

Sterile Mulltupfer, aus reiner Baumwolle. Ideal geeignet zum Aufnehmen von Sekret und Flüssigkeiten in der Mundhöhle sowie während der Behandlung und nach Extraktionen.

Typ Erbse, ca. 6 x 1,8 cm, Packung 500 Stück	<b>138894</b>	<b>15,65</b>
Typ Haselnuss, ca. 1,8 x 2,5 cm, Packung 500 Stück	<b>139990</b>	<b>16,95</b>
Typ Walnuss, ca. 3,0 x 3,5 cm, Packung 500 Stück	<b>140421</b>	<b>20,85</b>
Typ Pflaume, ca. 3,4 x 4,4 cm, Packung 400 Stück	<b>139991</b>	<b>31,40</b>



## Wattekügelchen

Saugstarke, fusselfreie Wattekügelchen zum Trocknen und Applizieren von Medikamenten. Weich, formbeständig.

- Chlorfrei gebleicht
- In Schraubdeckeldose

Ø 3,0 mm, Dose 2,5 g	<b>245456</b>	<b>9,35</b>
Ø 4,0 mm, Dose 4 g	<b>17440</b>	<b>10,95</b>
Ø 5,5 mm, Dose 4 g	<b>17439</b>	<b>7,95</b>
Ø 7,0 mm, Dose 10 g	<b>17438</b>	<b>8,95</b>



## Dry Pads

Dry Pads erleichtern die Arbeit im hinteren Teil der Mundhöhle, da sie den Behandlungsbereich trocken und sauber halten.

- Flexibel und hochsaugfähig
- Gute Haftung auf der Mundschleimhaut
- Applikation direkt auf die Parotisdrüse
- Leichte Entfernung durch Wasserspray

Large, Packung 100 Stück	<b>265448</b>	<b>20,20</b>
Small, Packung 100 Stück	<b>265447</b>	<b>20,20</b>



## Watterollen

Aufsaugen, Abhalten, Polstern – diese Funktionen werden von unseren Watterollen perfekt erfüllt. Eine ausgewogene Mischung aus hochreinem Zellstoff und natürlicher Baumwolle gewährleistet lang anhaltende Saugleistung, verbunden mit Formstabilität und Polsterwirkung. Der Folienbeutel schützt vor Staub und Feuchtigkeit.

- Passen in die handelsüblichen Watterollenspender
- Fusselfrei mit hohem Absorbierungsvermögen

Größe 1, Ø 8 mm, Länge 38 mm, Packung 300 g ab 10 Packungen	<b>276238</b>	<b>4,45</b> <b>4,15</b>
Größe 2, Ø 10 mm, Länge 38 mm, Packung 300 g ab 10 Packungen	<b>276239</b>	<b>4,45</b> <b>4,15</b>
Größe 3, Ø 12 mm, Länge 38 mm, Packung 300 g ab 10 Packungen	<b>276240</b>	<b>4,45</b> <b>4,15</b>
Größe 4, Ø 14 mm, Länge 38 mm, Packung 300 g ab 10 Packungen	<b>276241</b>	<b>4,45</b> <b>4,15</b>



## Watterollenspender

Spender aus Kunststoff, zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen. Bei Betätigung des Spenders werden 2–3 Watterollen freigegeben, die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Spender fasst Watterollen der Größen 1, 2, 3 und 4.

Aus hochwertigem Acrylglas, nicht autoklavierbar.

- Fasst ca. 30 Rollen der Größe 3
- Außenmaße (B x T x H): 5 x 11 x 11 cm

Stück	<b>183830</b>	<b>13,40</b>
-------	---------------	--------------



### Abfallbeutel

Abfallbeutel aus stabiler Kunststoffolie zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Praxisabfällen. Mit Seitenfalte, passend für jeden Standardabfalleimer.

- Umweltfreundliches Polyethylen (PE-LD)
- Inhalt ca. 25 l
- Format (B x H): 30 x 50 cm

Packung 100 Stück	<b>143001</b>	<b>7,25</b>
ab 10 Packungen		<b>6,20</b>



### Zellstofftupfer

Vorgestanzte, unsterile Zellstofftupfer aus hochgebleichtem Verbandzellstoff. Gebrauchsfertig, formstabil, abriebfest.

- Größe 4 x 5 cm

2 Rollen à 500 Tupfer	<b>138654</b>	<b>4,10</b>
-----------------------	---------------	-------------



### Mischbecher aus Silikon

Widerstandsfähige Mischbecher aus dauerelastischem, klarem Silikon

- Ideal zum Anmischen von Kunststoffen (ohne Ausgießtülle)

klein, Inhalt ca. 5 ml, Packung 4 Stück	<b>184544</b>	<b>11,50</b>
mittel, Inhalt ca. 15 ml, Packung 2 Stück	<b>184545</b>	<b>10,40</b>
groß, Inhalt ca. 52 ml, Packung 1 Stück	<b>184546</b>	<b>8,95</b>

### Dappenbehälter

Dappenbehälter für den Einmalbereich zum Portionieren und Anmischen von Dentalmaterialien

- Material: Polypropylen (nicht sterilisierbar)
- Farben: blau / rot / gelb / weiß
- Maße: Durchmesser oben: ca. 32 mm / Höhe: ca. 24 mm
- Gewicht: 1,6 g ± 5 %



blau, Beutel 50 Stück	<b>260762</b>	<b>1,55</b>
ab 20 Beuteln		<b>1,29</b>
gelb, Beutel 50 Stück	<b>260763</b>	<b>1,55</b>
ab 20 Beuteln		<b>1,29</b>
rot, Beutel 50 Stück	<b>260764</b>	<b>1,55</b>
ab 20 Beuteln		<b>1,29</b>
weiß, Beutel 50 Stück	<b>260765</b>	<b>1,55</b>
ab 20 Beuteln		<b>1,29</b>
<b>NEU!</b> cedro, Beutel 50 Stück	<b>275073</b>	<b>1,55</b>
ab 20 Beuteln		<b>1,29</b>
<b>NEU!</b> lila, Beutel 50 Stück	<b>275074</b>	<b>1,55</b>
ab 20 Beuteln		<b>1,29</b>
<b>NEU!</b> pink, Beutel 50 Stück	<b>275178</b>	<b>1,55</b>
ab 20 Beuteln		<b>1,29</b>



Physikalische Daten	Occlu Artikulationsgips	Occlubaster	Occlume-danit	Orbi-Medanit S	Occluroc	Occlu-Superstone	Occludur	Occlu Sockelgips	ORBI-Scan Stone	Occlustone Premium
Gipstyp (N=Natur / S=Synthetischer)	S 2	N 2	N 3	S 3	N 3	S 4	S 4	S 4	N 4	N 4
Gips-Wasser-Verhältnis	30 ml: 100 g	50 ml: 100 g	30 ml: 100 g	30 ml: 100 g	27 ml: 100 g	23 ml: 100 g	20 ml: 100 g	25 ml: 100 g	20 ml: 100 g	20 ml: 100 g
Verarbeitungszeit/Min.	2	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	3-4	4-5	6-7
Abbindezeit/Min.	ca. 4	10-14	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	6-8	9-11	12-14
Druckfestigkeit nach 1 h	20 MPa	12 MPa	24 MPa	23 MPa	40 MPa	45 MPa	60 MPa	40 MPa	60 MPa	60 MPa
Druckfestigkeit, trocken	30 MPa	17 MPa	50 MPa	60 MPa	70 MPa	75 MPa	85 MPa	65 MPa	90 MPa	90 MPa
Abbindeexpansion in % nach 2 h	0,04	0,18	0,14	0,14	0,14	0,10	0,10	0,06	0,06	0,09
Farbe	superweiß	naturweiß	weiß, gelb, blau	superweiß, gelb, blau	blau	superweiß	gelbbraun	weiß	elfenbein	goldbraun

Anwendungsgebiete	Occlu Artikulationsgips	Occlubaster	Occlume-danit	Orbi-Medanit S	Occluroc	Occlu-Superstone	Occludur	Occlu Sockelgips	ORBI-Scan Stone	Occlustone Premium
Stumpf- bzw. Meistermodelle in der EM-/NEM-/VKM-Technik										
Einzelstümpfe, Zahnkränze und Kontrollmodelle										
Sockel für Meistermodelle bei Verwendung von Pin-Systemen und Dowel-Pins										
Frässockel, Vorwälle, Bissregistrierungen und Übertragungssockel										
Ausgießen von Hydrocolloidabdrücken										
Gegenbiss- und Arbeitsmodelle, Kunststofftechnik/KFO										
Fixieren von Situationsmodellen und Einokkludierung in der KFO-Technik										
Kunststoffprothetik: Bruchreparaturen, Unterfütterungen und Erweiterungen										
Situationsmodelle										
Artikulation										
scanfähig										

## Persönliche Labornotizen/Informationen

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



## Occlu Artikulationsgips

Synthetischer Spezial-Artikulationsgips zur Einartikulation der Modelle, zum Fixieren von KFO-Modellen für Bissregistrierung, Vorwölle und Frässockel

Hergestellt und geprüft nach DIN EN ISO 6873 • Mischverhältnis: 30 ml Wasser auf 100 g Gips • Verarbeitungszeit: 2 Min. • Abbindezeit: 3,5 Min. • Druckfestigkeit nach 1 h: 20 MPa • Druckfestigkeit, trocken: 30 MPa • Abbindeexpansion nach 2 h: 0,04 %

superweiß, Karton 20 kg	<b>141656</b>	<b>55,70</b>
-------------------------	---------------	--------------



## Occlubaster

Alabastergips (Naturgips) der Klasse 2 mit Hartgipszusatz zur Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten

Hergestellt und geprüft nach DIN EN ISO 6873 • Mischverhältnis: 50 ml Wasser auf 100 g Gips • Verarbeitungszeit: 5–6 Min. • Abbindezeit: 10–12 Min. • Druckfestigkeit nach 1 h: 12 MPa • Druckfestigkeit, trocken: 17 MPa • Abbindeexpansion nach 2 h: 0,18 %

naturweiß, Eimer 10 kg	<b>131800</b>	<b>12,60</b>
naturweiß, Sack 25 kg	<b>143336</b>	<b>22,50</b>



## Occlumedanit

Modellgips (Naturgips) mittlerer Härte der Klasse 3 mit gutem Fließvermögen

Hergestellt und geprüft nach DIN EN ISO 6873 • Mischverhältnis: 30 ml Wasser auf 100 g Gips • Verarbeitungszeit: 5–6 Min. • Abbindezeit: 10–12 Min. • Druckfestigkeit nach 1 h: 24 MPa • Druckfestigkeit, trocken: 50 MPa • Abbindeexpansion nach 2 h: 0,14 %

gelb, Eimer 10 kg	<b>131808</b>	<b>21,40</b>
weiß, Eimer 10 kg	<b>131809</b>	<b>21,40</b>
blau, Eimer 10 kg	<b>131807</b>	<b>21,40</b>
gelb, Sack 25 kg	<b>143337</b>	<b>35,90</b>
weiß, Sack 25 kg	<b>143338</b>	<b>35,90</b>
blau, Sack 25 kg	<b>143339</b>	<b>35,90</b>



## OrbiMedanit S

Ein Modellhartgips (Naturgips), besonders geeignet für den Bereich der Prothetik und Kieferorthopädie. Durch seine superweiße Farbe ist OrbiMedanit S besonders für KFO-Schaumodelle geeignet. Typ Klasse 3.

Hergestellt und geprüft nach DIN EN ISO 6873 • Mischverhältnis: 30 ml Wasser auf 100 g Gips • Verarbeitungszeit: 5–6 Min. • Abbindezeit: 10–12 Min. • Druckfestigkeit nach 1 h: 23 MPa • Druckfestigkeit, trocken: 60 MPa • Abbindeexpansion nach 2 h: 0,14 %

blau, Eimer 10 kg	<b>240903</b>	<b>16,50</b>
gelb, Eimer 10 kg	<b>240904</b>	<b>16,50</b>
superweiß, Eimer 10 kg	<b>240901</b>	<b>16,50</b>
blau, Sack 25 kg	<b>266838</b>	<b>28,20</b>
gelb, Sack 25 kg	<b>266839</b>	<b>28,20</b>
superweiß, Sack 25 kg	<b>266840</b>	<b>28,20</b>



## Occluroc

Natur-Spezialhartgips der Klasse 3 mit großer Härte und sehr guter Oberflächenwiedergabe

Hergestellt und geprüft nach DIN EN ISO 6873 • Mischverhältnis: 27 ml Wasser auf 100 g Gips • Verarbeitungszeit: 5–6 Min. • Abbindezeit: 10–12 Min. • Druckfestigkeit nach 1 h: 40 MPa • Druckfestigkeit, trocken: 70 MPa • Abbindeexpansion nach 2 h: 0,14 %

blau, Sack 25 kg	<b>143341</b>	<b>46,50</b>
------------------	---------------	--------------



### Occlu-Superstone

Synthetischer Superhartgips für die Präzisionstechnik. Zur Herstellung aller Meister- und Arbeitsmodelle, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen.

Hergestellt und geprüft nach DIN EN ISO 6873 • Mischverhältnis: 23 ml Wasser auf 100 g Gips • Verarbeitungszeit: 5–6 Min. • Abbindezeit: 10–12 Min. • Druckfestigkeit nach 1 h: 45 MPa • Druckfestigkeit, trocken: 75 MPa • Abbindeexpansion nach 2 h: 0,10 %

superweiß, Karton 25 kg **143349 92,45**



### Occludur

Synthetischer Superhartgips zur Herstellung von Stümpfen und Zahnkränzen für Sägemodelle

Hergestellt und geprüft nach DIN EN ISO 6873 • Mischverhältnis: 20 ml Wasser auf 100 g Gips • Verarbeitungszeit: 5–6 Min. • Abbindezeit: 10–12 Min. • Druckfestigkeit nach 1 h: 60 MPa • Druckfestigkeit, trocken: 85 MPa • Abbindeexpansion nach 2 h: 0,10 %

gelbbraun, Karton 20 kg **143254 83,50**



### Occlu Sockelgips

Synthetischer Superhart-Sockelgips nach EN ISO 6873-4. Speziell zum Sockeln von Zahnkränzen (z. B. für Pindex-Modelle).

Hergestellt und geprüft nach DIN EN ISO 6873 • Mischverhältnis: 25 ml Wasser auf 100 g Gips • Verarbeitungszeit: 3–4 Min. • Abbindezeit: 6–8 Min. • Druckfestigkeit nach 1 h: 40 MPa • Druckfestigkeit, trocken: 65 MPa • Abbindeexpansion nach 2 h: 0,06 %

weiß, Karton 20 kg **141657 59,50**



### ORBI-Scan Stone

ORBI-Scan Stone macht das Pudern der Gipsmodelle überflüssig. Dieser Spezialgips ist für die optoelektronische Abtastung entwickelt worden. Er verhindert störende Reflexionen in den definierten Wellenbereichen. Kurze Abbindezeit. Aufgrund seiner geringen Expansionswerte, hohen Druckfestigkeit und Kantenstabilität ist ORBI-Scan Stone auch für andere anspruchsvolle Modellarbeiten (Meistermodelle, Implantate) einsetzbar.

Hergestellt und geprüft nach DIN EN ISO 6873 • Mischverhältnis: 20 ml Wasser auf 100 g Gips • Verarbeitungszeit: 4–5 Min. • Abbindezeit: 9–11 Min. • Druckfestigkeit nach 1 h: 60 MPa • Druckfestigkeit, trocken: 60 MPa • Abbindeexpansion nach 2 h: 0,06 %

elfenbein, Eimer 5 kg **266841 27,85**



### Occlustone Premium

Goldbrauner Natur-Superhartgips der Klasse 4 zur Herstellung von außergewöhnlich harten und glatten Stumpf- und Arbeitsmodellen

Hergestellt und geprüft nach DIN EN ISO 6873 • Mischverhältnis: 20 ml Wasser auf 100 g Gips • Verarbeitungszeit: 6–7 Min. • Abbindezeit: 12–14 Min. • Druckfestigkeit nach 1 h: 60 MPa • Druckfestigkeit, trocken: 90 MPa • Abbindeexpansion nach 2 h: 0,09 %

goldbraun, Karton 25 kg **262348 91,50**



## Gipslöser

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger mit Aktivindikator, kurze Einwirkzeiten. Entfernt Gipse und gipsgebundene Einbettmassen von Prothesen, Abdrucklöffeln, Vakuum-Mischbechern, Küvetten sowie Gusswerkstücken, auch an schwer zugänglichen Stellen. Kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden.

- pH-neutral

Kanister, 2 l	<b>261991</b>	<b>26,50</b>
---------------	---------------	--------------



## Gipsspatel

Ergonomisch einwandfreie Spatel, zum leichten und zügigen Anmischen von Gipsen

- Rostfreier Stahl

Lichtenstein, gerade, 170 mm, Stück	<b>145400</b>	<b>5,50</b>
-------------------------------------	---------------	-------------

Roghe, S-förmig gebogen, abgerundet, 200 mm, Stück	<b>145570</b>	<b>7,70</b>
--	---------------	-------------



## Gipsmesser

Rostfreie Gipsmesser, mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet. Beim Gipsmesser nach Grittman ist im Griff noch ein praktischer Küvettenöffner integriert.

- Rostfrei

Nr. 6R, mit spitz zulaufender Klinge, Länge 14,5 cm, Stück	<b>143243</b>	<b>6,85</b>
--	---------------	-------------

Nr. 7R, mit gerader Klinge, Länge 14,5 cm, Stück	<b>143244</b>	<b>6,85</b>
--	---------------	-------------

Grittman, mit gerader Klinge und Küvettenöffner, Länge 16,5 cm, Stück	<b>143245</b>	<b>6,85</b>
---	---------------	-------------



## Gipsschütte

Gipsschaufel aus Leichtmetall

Gesamtlänge 18,5 cm, Inhalt 90 g, Stück	<b>184561</b>	<b>3,25</b>
---	---------------	-------------

Gesamtlänge 21 cm, Inhalt 160 g, Stück	<b>184560</b>	<b>4,40</b>
--	---------------	-------------



# Einfach und exakt ...

vermischen und fertig!

## ORBI-Tec Knetmasse

Zusammen unschlagbar zum attraktiven Preis:

- Sehr weiche, knetbare Konsistenz
- Dauerhaft dimensionsstabil
- Sehr hohe Präzision
- Klebefrei
- Kochfest
- Einfaches Vermischen
- Duft- und geschmacksneutral
- Farbe: violettblau
- Endhärte: 80 Shore A
- Indikation:  
Vorwall, Modelle, Fixationen
- 2 x 420 ml oder 2 x 5 kg





## ORBI-Tec Knetmasse A85 blau

Für elastomere Präzisionsabformung auf Polyvinylsiloxan-Basis, additionsvernetzend. Nur zur ausschließlichen Anwendungen für zahntechnische Zwecke.

Für folgende Indikationen: Vorwall, Modelle, Fixationen  
Verarbeitungszeit: 1,5 Min.  
Gesamtabbindezeit: 6–7 Min.

- 80 Shore A
- Farbe: violettblau
- Einfaches Anmischen
- Sehr weiche, knetbare Konsistenz
- Sehr hohe Präzision
- Dauerhaft dimensionsstabil
- Duft- und geschmacksneutral
- Klebefrei
- Kochfest

2 Dosen, je 420 ml (ca. 1,6 kg) Base und Katalysator	<b>253457</b>	<b>40,90</b>
Eimer, je 5 kg Base und Katalysator	<b>256365</b>	<b>166,25</b>



## Retentionsringe

Außengezahnte Metallringe, vernickelt. Zum Verankern der Gipspartien zwischen und neben den herausnehmbaren Stümpfen des Sägeschnittmodells.

- Vernickelt

Packung 1.000 Stück	<b>143197</b>	<b>10,95</b>
---------------------	---------------	--------------

## ORBI-Pins für Zeiser-System

Pins für das bewährte System zur dimensionsgetreuen Modellherstellung

Länge 14,0 mm, Kopflänge 6,4 mm, Ø 1,95 mm, Packung 1.000 Stück	<b>266828</b>	<b>33,50</b>
--	---------------	--------------



## Dowel-Pins

Polierte Dowel-Pins aus Messing ohne Steckstift.  
Die Stifte der Größe 2 passen auch für das Pindex-System.

Größe 1, Länge 20 mm, Ø 2,5 mm, Packung 100 Stück	<b>143189</b>	<b>4,20</b>
Größe 2, Länge 22 mm, Ø 3,2 mm, Packung 100 Stück	<b>143190</b>	<b>4,20</b>
Größe 3, Länge 25 mm, Ø 4,0 mm, Packung 100 Stück	<b>143191</b>	<b>4,95</b>



## Dowel-Pins, mit Steckstift

Polierte Modellstifte aus Messing mit feinem Steckstift

Größe 1, Ø 2,5 mm, Länge 28 mm, Packung 100 Stück	<b>143192</b>	<b>6,25</b>
Größe 2, Ø 3,25 mm, Länge 28 mm, Packung 100 Stück	<b>143193</b>	<b>5,20</b>
Größe 3, Ø 4 mm, Länge 31 mm, Packung 100 Stück	<b>143194</b>	<b>8,20</b>



## Dowel-Pins, Bogenpin-Technik

Polierte Modellstifte aus Messing mit feinem Steckstift für die Bogenpin-Technik

Größe 2, Packung 100 Stück	<b>143290</b>	<b>13,20</b>
----------------------------	---------------	--------------



## Modellsägen

Stabile Modellsägen, mit Kunststoffummantelung, für Sägeblätter von 70 mm Länge

Länge 175 mm, Blattlänge 70 mm, abgewinkelt, Stück **143200** **8,95**

Länge 195 mm, Blattlänge 70 mm, gerade, Stück **143199** **8,65**

## Sägeblätter für Modellsägen

Typ 179 (Gips), 0,12 x 3,0 x 70 mm, Packung 12 Stück **143255** **7,30**

Typ 174 (Gips), 0,12 x 5,0 x 70 mm, Packung 12 Stück **143185** **7,30**

Typ 172 (Kunststoff), 0,25 x 3,0 x 70 mm, Packung 12 Stück **143184** **7,30**

Typ 175 (Gips), 0,25 x 5,0 x 70 mm, Packung 12 Stück **143186** **7,30**



## Sekundenkleber

Cyanoacrylat-Kleber mittlerer Viskosität, klebt nassen und trockenen Gips spaltfrei. Sehr gut geeignet zur Reparatur von angebrochenen Zähnen, von gebrochenen Gips- und Einbettmassenmodellen sowie für Metall, Glas und Keramik geeignet. Verklebt z. B. Bügel im Modellguss, außerdem zur Fixierung von Ofenlötungen verwendbar.

- Kühl lagern!
- Haut- und Augenkontakt vermeiden!

10 ml, Flasche **143309** **3,10**

ab 6 Flaschen **2,80**

5 x 2 g, Pipetten **185947** **9,95**



## Stumpflack

Präziser Stumpflack, kratzfest, schnell trocknend, sehr abdampfesistent. Die farbigen Varianten sind auf allen gängigen Gipsen sehr gut erkennbar. Der Verdünner dient zum Wiederherstellen der ursprünglichen Konsistenz. Nur tropfenweise zugeben. Der Hardener dient zur Härtung von Gipsstümpfen und Kanten sowie als Basisgrundierung für den Stumpflack zur Erhöhung der Haftung.

transparent, 3–5 µm, Flasche 20 ml **150102** **8,20**

rot, 8 µm, Flasche 20 ml **150104** **8,20**

blau, 10 µm, Flasche 20 ml **150103** **8,20**

silber, 13 µm, Flasche 20 ml **150101** **8,20**

Verdünner, Flasche 20 ml **150100** **7,50**

Hardener, Flasche 20 ml **161969** **9,80**



## Split-Cast Orbis Basisplatte

- Mit Gummiring

gelb 9 cm, Stück **266823** **15,40**

blau 8 cm, Stück **266822** **15,40**

rot 7 cm, Stück **266821** **15,40**



## Magnet-Split-System

Das System besteht aus leistungsstarken Dauermagneten, Magnettöpfen aus verzinktem Metall und Haftscheiben mit zirkulär verlaufender Retentionsrinne. Passend für alle gängigen Split-Cast-Systeme.

Rundmagnete, Ø 20 x 6 mm, Packung 10 Stück	<b>180456</b>	<b>4,30</b>
Rundmagnete, Ø 20 x 6 mm, Packung 100 Stück	<b>147070</b>	<b>30,30</b>
Magnettöpfe, Außen-Ø 25 mm, Packung 10 Stück	<b>180464</b>	<b>6,40</b>
Magnettöpfe, Außen-Ø 25 mm, Packung 100 Stück	<b>147073</b>	<b>44,90</b>
Haftscheiben, Ø 25 mm, gerändelt, Packung 10 Stück	<b>180526</b>	<b>5,20</b>
Haftscheiben, Ø 25 mm, gerändelt, Packung 100 Stück	<b>147074</b>	<b>40,65</b>



## Sockelformer

Elastischer Sockelformer für die saubere und schnelle Modellherstellung. Der Sockelformer gewährleistet eine leichte Entformung der Modelle. Das Material ist robust und pflegeleicht.

- Form 1, klein: Innenmaß 75 x 56 x 14 mm
- Form 1, groß: Innenmaß 80 x 60 x 13 mm

Form 1, klein, Stück	<b>100512</b>	<b>5,20</b>
Form 1, groß, Stück	<b>187588</b>	<b>5,20</b>



## Sockelformer Split-Cast

Elastischer Sockelformer für die saubere und schnelle Modellherstellung, speziell für die einfache Split-Cast-Technik. Aus elastischem Gummi, robust und pflegeleicht.

- Form 2, Oberkiefer: Innenmaß 85 x 63 x 18 mm
- Form 2, Unterkiefer: Innenmaß 85 x 63 x 17 mm

Form 2: Oberkiefer, Stück	<b>105450</b>	<b>5,60</b>
Form 2: Unterkiefer, Stück	<b>187584</b>	<b>5,60</b>



## Silikon-Gussmanschette

Für die ringlose Einbettung in der Kronen- und Brückentechnik mit freier Expansionssteuerung. Durch die konische Form lässt sich die Manschette leicht entfernen.

- 3 x: Ø innen 5 cm, Ø außen 6,5 cm
- 6 x: Ø innen 6,8 cm, Ø außen 8 cm
- 9 x: Ø innen 8 cm, Ø außen 9,5 cm
- Alle Gussmanschetten haben, inkl. Sockel, eine Höhe von 6,7 cm

Größe 3 x, Stück	<b>266835</b>	<b>15,20</b>
Größe 6 x, Stück	<b>266836</b>	<b>19,30</b>
Größe 9 x, Stück	<b>266837</b>	<b>23,80</b>



## Dubliersilikon

Additionsvernetzendes, äußerst präzises Vinyl-Polysiloxan mit mittlerer Endhärte für Dublierungen aller Art. Ergibt stabile Dublierformen z. B. bei Geschiebe- und Fräsarbeiten. Mit ORBIS Dubliersilikon kann nahezu jedes Material dubliert werden, z. B. Gipsmodelle, Metalle. Das Meistermodell darf nicht gewässert werden, sondern sollte trocken und von allen Isoliermitteln etc. gereinigt sein. Die Anmisch- und Verarbeitungszeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

- Standard: Anmischzeit 45 Sek., Verarbeitungszeit 6 Min., Entformbarkeit 25 Min.
- Speed: Anmischzeit 30 Sek., Verarbeitungszeit 2 Min., Entformbarkeit 10 Min.
- Hervorragende Detailwiedergabe
- Mischverhältnis 1:1
- Endhärte: 20 Shore A

Standard, A + B, Weiß/Grün, Flaschen 2 x 1 kg	<b>181883</b>	<b>53,85</b>
Standard, A + B, Weiß/Grün, Kanister 2 x 6 kg	<b>181894</b>	<b>283,50</b>
Speed, A + B, Weiß/Orange, Flaschen 2 x 1 kg	<b>14745</b>	<b>54,95</b>
Speed, A + B, Weiß/Orange, Kanister 2 x 6 kg	<b>14768</b>	<b>305,45</b>



## Dubliergel

Reversible Dubliermasse. Exakte Abformung bis in kleinste Details für anspruchsvolle Modellgussarbeiten. Ergibt eine reißfeste, hochelastische Dublierform, die auch bei Unterschnitten keine Probleme bereitet. Modell vor dem Dublieren 15–20 Min. in lauwarmes Wasser legen.

Nicht für Gips geeignet.

- Verarbeitungstemperatur: 47–48 °C
- Abbindezeit bei Raumtemperatur ca. 1 Stunde

transparent, Eimer 6 kg

**143011 66,95**



## Dublierküvette

4-teilige Küvette aus robustem Kunststoff für die Silikonublierung. Durch die konische Passung vom Ersatzteil zur Außenmanschette ist die Höhe verstellbar und der Verbrauch von Silikon kann reduziert werden.

Größe 8,8 x 7,3 x 4,0–4,8 cm, Farbe: Blau, Stück

**266834 26,95**



## Wachsdraht

Geschmeidiger und spannungsfreier Wachsdraht

- Frei von unerwünschten Rückstellkräften
- Dimensionsstabil
- Verbrennt rückstandsfrei

mittelhart, grün, Ø 2,5 mm, Rolle 250 g	<b>231000</b>	<b>10,95</b>
hart, blau, Ø 2,5 mm, Rolle 250 g	<b>231010</b>	<b>10,95</b>
mittelhart, grün, Ø 3,0 mm, Rolle 250 g	<b>231001</b>	<b>10,95</b>
hart, blau, Ø 3,0 mm, Rolle 250 g	<b>231011</b>	<b>10,95</b>
mittelhart, grün, Ø 3,5 mm, Rolle 250 g	<b>231002</b>	<b>10,95</b>
hart, blau, Ø 3,5 mm, Rolle 250 g	<b>231012</b>	<b>10,95</b>
mittelhart, grün, Ø 4,0 mm, Rolle 250 g	<b>231003</b>	<b>10,95</b>
hart, blau, Ø 4,0 mm, Rolle 250 g	<b>231013</b>	<b>10,95</b>
mittelhart, grün, Ø 5,0 mm, Rolle 250 g	<b>231004</b>	<b>10,95</b>
hart, blau, Ø 5,0 mm, Rolle 250 g	<b>231014</b>	<b>10,95</b>

1000 x probiert –  
immer wieder toll!




## Wachsprofilstäbe

Mittelharter, gut verformbarer Wachsdraht für die Gestaltung von Randleisten oder individuellen Retentionen

- Spannungsfrei
- Dimensionsstabil
- Farbe: Grün
- Verbrennt rückstandsfrei

Ø 0,6 mm, 12 g	<b>231100</b>	<b>9,35</b>
Ø 0,8 mm, 25 g	<b>231101</b>	<b>9,35</b>
Ø 1,0 mm, 35 g	<b>231102</b>	<b>9,35</b>
Ø 1,2 mm, 35 g	<b>231103</b>	<b>9,35</b>

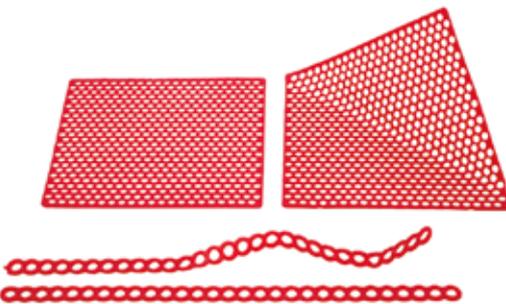


## Wachsretentionen

Kompakte Retentionen

- Sehr gute Haftung am Modell
- Leicht adaptierbar
- Dimensionsstabil
- Farbe: Rot

Lochretentionen, gerade, Packung 40 Stege	<b>231105</b>	<b>17,60</b>
Rundlochgitter, 71 x 70 mm, Packung 20 Tafeln	<b>231107</b>	<b>15,50</b>
Gitterretentionen, 75 x 65 mm, Packung 20 Gitter	<b>237363</b>	<b>15,40</b>

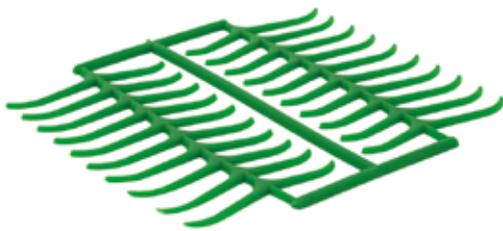

## Wachsschablonen

Anatomisch vorgeformte Klammerprofile aus rückstandslos verbrennbarem Wachs

- Sehr druckfest
- Formstabil
- Gute Adaptierbarkeit
- Farbe: Lindgrün

MK (Molarenklammern), Packung 10 Tafeln	<b>231108</b>	<b>12,95</b>
PK (Prämolarenklammern), Packung 10 Tafeln	<b>231109</b>	<b>12,95</b>
RKG (Ringklammern, gerade), Packung 10 Tafeln	<b>231110</b>	<b>12,95</b>



## Vorbereitungswachs

Lässt sich blasenfrei und formstabil adaptieren. Haftet beim Dublieren sicher am Modell.

- Größe 75 x 150 mm
- Farbe: Rot

Stärke 0,5 mm, Packung 15 Platten	<b>143136</b>	<b>10,80</b>
Stärke 0,7 mm, Packung 15 Platten	<b>143137</b>	<b>10,80</b>



## Gusswachsplatten

Plattenwachs mit verschiedenen Oberflächen. Wählen Sie zwischen glatten und strukturierten Platten:

- Transparent
- Sehr gut zu adaptieren
- Sichere Haftung am Modell
- Farbe: Grün

Gusswachs glatt

- Formstabil
- Größe 80 x 175 mm

Gusswachs strukturiert, grob geadert/genarbt

- Druckstabil, reißfest
- Größe 75 x 150 mm

Stärke 0,3 mm, glatte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231060</b>	<b>9,20</b>
Stärke 0,35 mm, glatte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231061</b>	<b>9,20</b>
Stärke 0,4 mm, glatte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231062</b>	<b>9,20</b>
Stärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231063</b>	<b>9,20</b>
Stärke 0,6 mm, glatte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231064</b>	<b>9,20</b>
Stärke 0,35 mm, fein genarbte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231050</b>	<b>10,45</b>
Stärke 0,4 mm, fein genarbte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231051</b>	<b>10,45</b>
Stärke 0,5 mm, fein genarbte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231052</b>	<b>10,45</b>
Stärke 0,6 mm, fein genarbte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231053</b>	<b>10,45</b>
Stärke 0,35 mm, grob geaderte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231055</b>	<b>10,45</b>
Stärke 0,4 mm, grob geaderte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231056</b>	<b>10,45</b>
Stärke 0,5 mm, grob geaderte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231057</b>	<b>10,45</b>
Stärke 0,6 mm, grob geaderte Oberfläche, Packung 15 Platten	<b>231058</b>	<b>10,45</b>



## Modellierwachs

Zähelastisches, nicht schmierendes Plattenwachs. Nach dem Erwärmen länger knetbar und nach dem Abkühlen hart und formbeständig.

- Verbrennt rückstandsfrei
- Farbe: Rosa
- Größe 83 x 186 mm

**Information:**

- Sommerwachs – Erstarrungstemperatur ca. 56 °C
- Winterwachs – Erstarrungstemperatur ca. 54 °C

Standard, Stärke 1,25 mm, 500 g	<b>143287</b>	<b>7,20</b>
Sommer, Stärke 1,25 mm, 500 g	<b>185934</b>	<b>7,20</b>
Winter, Stärke 1,25 mm, 500 g	<b>185933</b>	<b>7,20</b>
Standard, Stärke 1,25 mm, 2.500 g	<b>141950</b>	<b>30,95</b>
Sommer, Stärke 1,25 mm, 2.500 g	<b>185930</b>	<b>30,95</b>
Winter, Stärke 1,25 mm, 2.500 g	<b>185929</b>	<b>30,95</b>
Standard, Stärke 1,5 mm, 500 g	<b>143195</b>	<b>7,20</b>
Sommer, Stärke 1,5 mm, 500 g	<b>185932</b>	<b>7,20</b>
Winter, Stärke 1,5 mm, 500 g	<b>185931</b>	<b>7,20</b>
Standard, Stärke 1,5 mm, 2.500 g	<b>141951</b>	<b>30,95</b>
Sommer, Stärke 1,5 mm, 2.500 g	<b>185928</b>	<b>30,95</b>
Winter, Stärke 1,5 mm, 2.500 g	<b>185927</b>	<b>30,95</b>

Toll  
in Form!



Toll im Preis!



Ab 3 Dosen  
**6,95 €**



## Silikonspray

Universell einsetzbares Spray, gut geeignet zum Schmieren von Schlössern und Gelenken von Zahnzangen und Scheren vor der Sterilisation. Schützt wirksam vor Korrosion und Ablagerungen. Auch zur Pflege von Trimmern, Küvetten, Artikulatoren oder Vibratoren.

Einfaches Einsprühen verhindert das Anhaften von Gipsen. Daher ist das Produkt im Labor auch als Trennmittel für die Kunststofftechnik anwendbar.

- Wachs gegen Gips
- Wachs gegen Wachs
- Wachs gegen Kunststoff
- Wachs gegen Keramik

Spraydose 400 ml	<b>146289</b>	<b>7,70</b>
------------------	---------------	-------------



## Wachspinsel

Zum Glätten von Wachsflächen

Größe 6, Stück	<b>146660</b>	<b>4,65</b>
----------------	---------------	-------------



## Ausblasdüsen

Ohne Schlauch, zum Trocknen und Ausblasen

- Außen-Ø: 8 mm
- Innen-Ø: 6 mm

Typ F (Freuding) für Schlauch mit Überwurfmutter, Stück	<b>146096</b>	<b>37,40</b>
Typ B (BEGO) für Schlauch mit Schelle, Stück	<b>70587</b>	<b>23,70</b>



## Elektrolyt

Zum elektrolytischen Glänzen von Chrom-Kobalt-Legierungen. Es verfügt über eine sehr gute Tiefenwirkung und kann in allen handelsüblichen Glanzgeräten (vorzugsweise Bewegungsbädern) angewendet werden.

Flasche 1 l	<b>143013</b>	<b>14,40</b>
Kanister 5 l	<b>161968</b>	<b>54,95</b>



## Gussküvetten

Besonders langlebige Gussküvetten aus Edelstahl. Universell verwendbar für alle gängigen Gusschleudern oder Vakuum-Druck-Gießgeräte (BEGO, Degussa, Reitel etc.).

- Höhe 55 mm
- Wandstärke 1,5 mm

Größe: 1 x, Ø 30 mm, für 60 g Einbettmasse, Stück	<b>149729</b>	<b>4,70</b>
Größe: 3 x, Ø 48 mm, für 180 g Einbettmasse, Stück	<b>149731</b>	<b>5,20</b>
Größe: 6 x, Ø 65 mm, für 360 g Einbettmasse, Stück	<b>149733</b>	<b>6,90</b>
Größe: 9 x, Ø 80 mm, für 540 g Einbettmasse, Stück	<b>149734</b>	<b>7,95</b>



## Gusstrichterformer für Gusschleudern

Robuste, elastische Gummiformen mit Metallboden. Für Vakuumeinbettung geeignet, großer Gusstrichter für Gusschleudern. Für alle gängigen Gusschleudern (BEGO, Degussa, Reitel etc.) geeignet.

Größe: 1 x, Stück	<b>170697</b>	<b>5,20</b>
Größe: 3 x, Stück	<b>170698</b>	<b>5,50</b>
Größe: 6 x, Stück	<b>170699</b>	<b>6,60</b>
Größe: 9 x, Stück	<b>170700</b>	<b>7,20</b>
Größe: Universal, ohne Metallboden, für Degussa-Systeme, Stück	<b>170701</b>	<b>6,50</b>



## Gusstrichterformer für Vakuum-Druck-Gießgeräte

Robuste, elastische Gummiformen mit Metallboden. Für Vakuumeinbettung geeignet, reduzierter Gusstrichter für Vakuum-Druck-Gießgeräte. Geeignet für Heraeus und Reitel Vakuum-Druck-Gießgeräte.

Größe: 1 x, Stück	<b>177548</b>	<b>5,20</b>
Größe: 3 x, Stück	<b>177545</b>	<b>5,50</b>
Größe: 6 x, Stück	<b>177546</b>	<b>6,60</b>
Größe: 9 x, Stück	<b>177547</b>	<b>7,20</b>



## Muffelringeinlage

Extrem flexible, reißfeste Einlage für Muffelringe aus Metall. Hochtemperaturbeständig, mit hervorragender Wärmeisolierung. Asbestfrei, aus Keramikfaser.

Rolle, Größe 50 mm x 1 mm x 25 m	<b>143188</b>	<b>13,50</b>
----------------------------------	---------------	--------------



## Muffelzange

Zum sicheren Greifen von heißen Gussmuffeln. Zuverlässiger Griff, unabhängig von der Muffelgröße.

- Rostfrei

Länge 43 cm, Stück	<b>153230</b>	<b>19,80</b>
--------------------	---------------	--------------

## Silikon- und Wachsentspanner

Hochwirksames Netzmittel für die Gusstechnik. Es werden Wachsmodelle sowie auch Abdrücke aus Silikon und Polyether entspannt und dadurch wird eine gute Benetzung, vor allem zwischen Wachs und Einbettmassen, gewährleistet. Die Einbettmasse fließt leicht und genau adaptierend über das Wachsojekt. Er ist schnell trocknend und hinterlässt keinen unerwünschten Trenn- oder Schmierfilm. Zusätzlich wird eine störende Blasenbildung beim Einbetten verhindert. Das Netzmittel ist unschädlich und reagiert nicht mit Einbettmassen.



Flasche 1 l	<b>145044</b>	<b>18,95</b>
Applikationsflasche 100 ml (leer)	<b>145045</b>	<b>4,20</b>



## Silikon-Knetmasse Technik

Kondensationsvernetzendes Silikon-Knetmaterial mit sehr hoher Endhärte, grün. Detailgetreu mit hoher Dimensionsstabilität, klebefrei, einfach zu verarbeiten, hitzebeständig. Geeignet für Vorwälle, Schlüssel, Unterfütterungen, bei Reparaturen und skelettierten Arbeiten sowie Fixationen.

- 85 Shore A
- Farbe: Grün

Dose 900 ml (ca. 1,6 kg)	<b>10496</b>	<b>16,75</b>
Eimer 5,8 l (ca. 10 kg)	<b>10497</b>	<b>69,95</b>

## ORBI-Pastenhärter universal

Für technische Silikon-Abformmassen

### Hinweis:

- Produkt ist nur für den technischen Einsatz vorgesehen!

Tube 60 ml	<b>245970</b>	<b>11,70</b>
------------	---------------	--------------

## PROtect finish

PROtect finish findet im zahntechnischen Labor, in der allgemeinen Zahnarztpraxis sowie beim Kieferorthopäden Verwendung. Mit PROtect finish behandelte Arbeiten weisen an der Oberfläche einen geringeren Restmonomergehalt auf als unbehandelte Arbeiten. Dazu kommt ein höherer Vernetzungsgrad innerhalb der Arbeit, wodurch sich die mechanischen Eigenschaften des Werkstücks weiter verbessern.

Zahntechnik: PROtect finish verleiht prothetischen Arbeiten und kieferorthopädischen Apparaten einen feinen Hochglanz. Im Verlauf des Herstellungsprozesses entstandene, unschöne Schleifspuren treten optisch zurück.

Zahnarztpraxis: PROtect finish maskiert den zunächst unangenehmen Geschmack einer neuen Prothese, regt den Speichelfluss des Patienten bei der Eingliederung an und sorgt so für gute Haftung und ein sofortiges angenehmes Tragegefühl. Wir empfehlen daher, auch laborseitig vorbehandelte Prothesen und Apparate kurz vor dem ersten Einsetzen nochmals mit PROtect finish zu behandeln.

- PROtect finish wirkt zusätzlich bakterizid innerhalb 1 Min. (gem. EN 1040)

Spraydose 75 ml	<b>19166</b>	<b>10,35</b>
-----------------	--------------	--------------

## ORBI PROtray LC

Leicht zu modellierendes, lichterhärtendes Löffelmaterial mit hervorragenden physikalischen Eigenschaften. Das Material lässt sich bei normaler Raumbeleuchtung und Tageslicht ausreichend lange bearbeiten und in allen Lichtöfen (Halogen, UV) zu hoher Stabilität aushärten. Angenehme Handhabung dank reduzierter Inhibitionsschicht, diese lässt sich mit einem alkoholbefeuchteten Tuch leicht abwischen. Die exakt geschnittenen Platten weisen eine Stärke von 2,3 mm auf und sind in der Packung beidseitig durch ein spezielles Trägerpapier vor Verkleben geschützt. Die Löffelplatten sind geeignet für individuelle Abformlöffel für voll- und teilbezahnte Kiefer, Funktionslöffel für unbezahnte Kiefer, Kunststoffbasen für Zahnaufstellungen, Basen für Bisserschablonen und Bissregistratur, Implantatabformungen.

Löffelplatten, OK, blau, 50 Stück	<b>35231</b>	<b>45,95</b>
Löffelplatten, OK, rosa, 50 Stück	<b>35232</b>	<b>45,95</b>

## Küvette

Handliche, stabile 4-teilige Küvette aus Messing, Standardgröße. Außenseiten poliert, innen matt belassen. Leichte Gängigkeit.

- Größe innen 72 x 84 x 50 mm

Stück	<b>140754</b>	<b>62,85</b>
-------	---------------	--------------



## Küvettenbügel Nirosta

Küvettenbügel, komplett mit Haltebügel und Schraubenschlüssel für das Einspannen der Küvetten in eine Presse. Diese Bügelform garantiert während des ganzen Polymerisationsvorgangs einen konstanten Druck auf die Küvette. Mit dem praktischen Haltebügel kann nach der Polymerisation der Küvettenbügel gefahrlos aus dem kochenden Wasser genommen werden.

- Säulenabstand 107 mm

für 1 Küvette, Stück	<b>148150</b>	<b>62,80</b>
für 1–2 Küvetten, Stück	<b>148151</b>	<b>67,50</b>
für 1–3 Küvetten, Stück	<b>148152</b>	<b>76,90</b>



## Unterfütterungsgerät 3S

Einfaches, präzises Unterfütterungsgerät mit Schnellspannschrauben. Das Gerät ist aus nicht rostendem Metall, die Säulen sind aus Messing. Die Schnellspannschrauben ermöglichen ein gleichmäßiges Schließen des Gerätes. Bissserhöhungen werden somit fast vollkommen ausgeschlossen.


Abmessungen: Ø 110 mm, Höhe 100 mm

Stück	<b>187208</b>	<b>50,50</b>
Schnellspannschraube, Messing	<b>153623</b>	<b>5,40</b>



## Brenngutträgerpinzette

300 mm, Stück	<b>266833</b>	<b>16,90</b>
---------------	---------------	--------------

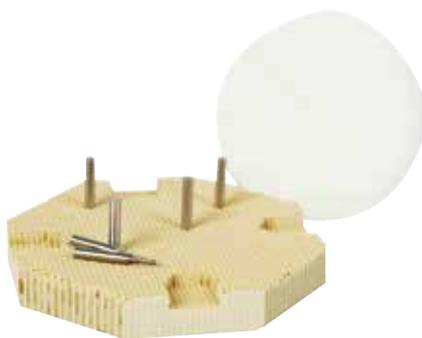

## Wabenbrenngutträger

Keramischer Brenngutträger mit Hunderten von Maschen, zur optimalen Positionierung der Haltestifte

- Hitzebeständig bis 1.400 °C
- 2 Größen

**Praxistipp:** Neue Haltestifte können durch Oxidation Verfärbungen an der Keramik bewirken. Sie sollten daher vor dem Erstgebrauch gründlich gereinigt und bei 1–2 Bränden ohne Berührung mit dem Werkstück mitgebrannt werden. Anschließend sollte ein Berühren mit den Fingern vermieden werden.

Bei vollkeramischen Werkstücken empfehlen wir den Einsatz von ORBIS Brenngutwatte.

Set 102, 75 x 75 mm, mit Brenngutträger, 6 Haltestiften, 2 x Brenngutwatte	<b>187471</b>	<b>47,50</b>
Brenngutträger-Haltestifte, Packung 10 Stück	<b>188097</b>	<b>33,80</b>



## Wabenbrenngutträger mit Keramikstiften, rund

- Für Zirkon geeignet
- Kein Metallstift
- Ø 8 cm

Set, 2 x Wabenbrenngutträger + 20 Stifte	<b>266829</b>	<b>25,95</b>
Keramikstifte, Packung 10 Stück	<b>266830</b>	<b>15,95</b>



## Magnetbohrerstände mit Topf

Standfester, drehbarer Magnetbohrerstände aus rostfreiem Material. Weitere 6 Töpfchen dienen der Aufnahme von nicht magnetischen Schleifkörpern.

- Höhe 103 mm
- Magnetplatte Ø 115 mm
- Farbe: Rot

Stück	<b>149057</b>	<b>46,95</b>
-------	---------------	--------------



## Magnetbohrerstände

Standfester, drehbarer Magnetbohrerstände aus rostfreiem Material

- Höhe 103 mm
- Magnetplatte Ø 115 mm
- Farbe: Grau

Stück	<b>149056</b>	<b>43,50</b>
-------	---------------	--------------



## Diamantscheibe, flexibel

Doppelseitig diamantierte Trennscheibe, zum feinen Separieren und Konturieren von harten Gipsen, Keramiken, Verblendkunststoffen und Kunstharzen. Montiert und zentriert.

- Figur 355
- Stärke: 0,17 mm – Separieren, Konturieren
- Stärke: 0,19 mm – Separieren, seitliches Beschleifen
- Empfohlene Drehzahl: 10.000–20.000 UpM

Stärke 0,17 mm, Ø 22 mm, Stück	<b>145667</b>	<b>12,20</b>
--------------------------------	---------------	--------------



## Diamantscheibe HT, flexibel

Doppelseitig diamantierte Hightechtrennscheibe, zum feinen Separieren und Konturieren von harten Gipsen, Keramiken, Verblendkunststoffen und Kunstharzen. Die Stanzungen der Scheibe erhöhen die Ausbringrate und versorgen sie mit kühlender Luft. Für schnelles und ruhiges Arbeiten. Montiert und zentriert.

- Figur 355 – Ø 22 mm
- Stärke: 0,17 mm
- Empfohlene Drehzahl: 5.000–10.000 UpM

Diamantscheibe, Stück	<b>187638</b>	<b>18,50</b>
-----------------------	---------------	--------------




### Diamantscheibe, flexibel

Doppelseitig diamantierte Trennscheibe, zum feinen Separieren und Konturieren von harten Gipsen, Keramiken, Verblendkunststoffen und Kunstharzen. Montiert und zentriert.

- Figur 355
- Stärke: 0,17 mm – Separieren, Konturieren
- Stärke: 0,19 mm – Separieren, seitliches Beschleifen
- Empfohlene Drehzahl: 10.000–20.000 UpM

Stärke 0,19 mm, Ø 19 mm, Stück	<b>145665</b>	<b>11,90</b>
Stärke 0,19 mm, Ø 22 mm, Stück	<b>145666</b>	<b>11,90</b>

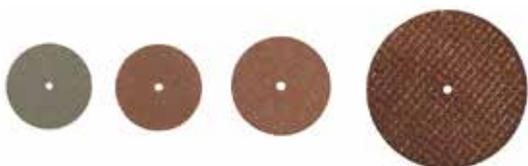

### Trennscheiben

Hochwertige Trennscheiben, besonders bruchfest, aus reinem Siliciumcarbid gefertigt, hinterlassen daher keine dunklen Schleifspuren an Keramik

- Hohe Standzeit

Für sehr feine Separierarbeiten, Stärke 0,20 mm, Ø 22 mm, max. 15.000 UpM, Packung 100 Stück	<b>143198</b>	<b>38,80</b>
Zum Trennen von Gusskanälen an Modellguss- und NEM-Gerüsten, Stärke 0,30 mm, Ø 22 mm, max. 15.000 UpM, Packung 200 Stück	<b>143288</b>	<b>40,90</b>
Für Chrom-Kobalt, Stärke 0,60 mm, Ø 25 mm, max. 15.000 UpM, Packung 100 Stück	<b>143135</b>	<b>14,80</b>
Für Chrom-Kobalt- und NEM-Legierungen mit Glasfaserverstärkung. Sehr hohe Standzeit und sehr abrasiv, Stärke 1,00 mm, Ø 40 mm, max. 25.000 UpM, Packung 25 Stück	<b>189367</b>	<b>37,20</b>



### Trennscheiben Fiber-Disk

Verstärkungseinlage aus Glasfaser, keine unangenehme Geruchsentwicklung beim Schleifen, extreme Bruchfestigkeit, lange Lebensdauer bei einer besonders hohen Schnittleistung, weniger Instrumentenwechsel

- **Fiber-Disk Ø 22 x 0,2 mm:** Trennen und Beschleifen aller Legierungen, insbesondere im Kronen- und Brückenbereich
- **Fiber-Disk Ø 22 x 0,3 mm:** Trennen und Beschleifen aller Legierungen (auch für Titanlegierungen), insbesondere im Kronen- und Brückenbereich
- **Fiber-Disk Ø 40 x 0,5 mm:** Trennen und Beschleifen aller Legierungen, insbesondere im Modellgussbereich

Ø 22 x 0,2 mm, Packung 25 Stück	<b>266842</b>	<b>44,50</b>
Ø 22 x 0,3 mm, Packung 25 Stück	<b>266843</b>	<b>44,50</b>
Ø 40 x 0,5 mm, Packung 25 Stück	<b>266844</b>	<b>44,50</b>



### Druckverschlussbeutel

Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel zum Versand von Modellen und Abformungen zwischen Praxis und Labor

- Mit separater Einstecktasche für Auftragszettel und andere Dokumente
- Aus recycelbarem Polyethylen
- Abmessungen: 180 x 250 mm – 50µm

Packung 100 Stück	<b>258443</b>	<b>10,40</b>
-------------------	---------------	--------------





## Schleifkörper

Keramische Spezialschleifkörper zur Bearbeitung von Chrom-Kobalt-Legierungen, aus Siliciumcarbid und hochwertigem Edelmetall.  
Gleichmäßige Körnung und 3 optimal eingestellte Bindungshärten sorgen für überraschende Schleifergebnisse.

- Hochfester, rostfreier Schaft
- Perfekter Rundlauf

Figur 731, rosa: Korn mittel, Bindung hart, Packung 100 Stück **143107** **63,95**

Figur 731, braun: Korn mittel, Bindung mittel, Packung 100 Stück **143093** **63,95**

Figur 731, hellbraun: Korn fein, Bindung weich, Packung 100 Stück **143100** **63,95**

Figur 732, rosa: Korn mittel, Bindung hart, Packung 100 Stück **143108** **63,95**

Figur 732, braun: Korn mittel, Bindung mittel, Packung 100 Stück **143095** **63,95**

Figur 732, hellbraun: Korn fein, Bindung weich, Packung 100 Stück **143101** **63,95**

Figur 733, rosa: Korn mittel, Bindung hart, Packung 100 Stück **143110** **63,95**

Figur 733, braun: Korn mittel, Bindung mittel, Packung 100 Stück **143096** **63,95**

Figur 733, hellbraun: Korn fein, Bindung weich, Packung 100 Stück **143102** **63,95**



## Korundleinen

Verschleißfeste Schleifstreifen, mit sehr flexiblem Leinen als Trägermaterial.  
Die gleichmäßige Kornbeschichtung garantiert eine gute Anpassung an Rundungen und Konturen und damit eine gleichmäßige Schleif- und Polierleistung.  
Vollkunstharzbindemittel für hervorragende Kornhaftung.

- Schleifleinen: braun

Korundleinen, Körnung 80, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>162291</b>	<b>20,40</b>
Korundleinen, Körnung 100, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79225</b>	<b>20,40</b>
Korundleinen, Körnung 120, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79226</b>	<b>20,40</b>
Korundleinen, Körnung 150, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79227</b>	<b>20,40</b>
Korundleinen, Körnung 180, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79228</b>	<b>20,40</b>
Korundleinen, Körnung 220, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79229</b>	<b>20,40</b>
Korundleinen, Körnung 240, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79230</b>	<b>20,40</b>



## Korundpapier

Verschleißfeste Schleifstreifen, mit Papier als Trägermaterial. Die gleichmäßige Kornbeschichtung garantiert eine gute Anpassung an Rundungen und Konturen und damit eine gleichmäßige Schleif- und Polierleistung. Vollkunstharzbindemittel für hervorragende Kornhaftung.

- Farbe: beige

Korundpapier, Körnung 80, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>162286</b>	<b>11,80</b>
Korundpapier, Körnung 100, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79212</b>	<b>11,80</b>
Korundpapier, Körnung 120, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79213</b>	<b>11,80</b>
Korundpapier, Körnung 150, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79214</b>	<b>11,80</b>
Korundpapier, Körnung 180, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79215</b>	<b>11,80</b>
Korundpapier, Körnung 220, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79216</b>	<b>11,80</b>
Korundpapier, Körnung 240, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>79217</b>	<b>11,80</b>
Korundpapier, Körnung 400, Breite 15 mm, Rolle mit 50 m	<b>162289</b>	<b>11,80</b>

## Mandrells

Instrumententräger mit sicherem Halt und sehr gutem Rundlauf. Für alle unmontierten Instrumente, wie Gummipolierer, Filzkegel. Auch mit verstärktem Schaft verfügbar, dann auch für Polier-, Schleif- oder Trennscheiben, Kreissägen, Steine oder Bürsten geeignet. Die Streifenträger nehmen alle Schleifpapiere in Streifenzuschnitt auf.

- Schaft-Ø 2,35 mm
- Mit gutem Rundlauf



HD 301 A, konisch, vernickelt, Packung 10 Stück	<b>185268</b>	<b>5,60</b>
HD 310 M, zylindrisch, vernickelt, Packung 10 Stück	<b>146436</b>	<b>6,80</b>
HD 303/045 RS, mit Fixierschraube, Packung 10 Stück	<b>143196</b>	<b>8,95</b>
HD 304/045 RS, verstärkter Schaft, mit Fixierschraube, Packung 10 Stück	<b>143539</b>	<b>8,95</b>
HD 308, konisch, für Schleifmittelstreifen, vernickelt, Packung 10 Stück	<b>143521</b>	<b>9,90</b>
HD 308 C, zylindrisch, für Schleifmittelstreifen, vernickelt, Packung 10 Stück	<b>185269</b>	<b>4,40</b>



## Gummipolierer

Unmontierte Gummipolierer für alle Polierarbeiten bis hin zum Hochglanzpolieren. Geringe Wärmeentwicklung dank feinsten Polierkörper aus Siliciumcarbid und elastischer Bindung in hochwertiger Hartgummimasse. Optimale Drehzahl, je nach Durchmesser zwischen 6.000 und 12.000 UpM.

- Schwarz: hart, zum Finieren und Polieren von Chrom-Kobalt-Legierungen
- Grün: Standard, zum Entfernen von Riefen und zum Polieren von Chrom-Kobalt-Legierungen
- Blau: Zur Hochglanzpolitur von unedlen und halbedlen Metallen sowie von Chrom-Kobalt-Legierungen
- Rad Ø 22,2 mm
- Linse Ø 22,2 mm
- Walze Ø 6,3 mm, Länge 24 mm

Rad, schwarz: hart, zum Finieren, Packung 100 Stück	<b>143020</b>	<b>26,70</b>
Rad, grün: Standardpolierer, Packung 100 Stück	<b>143019</b>	<b>26,70</b>
Rad, blau: Hochglanzpolitur, Packung 100 Stück	<b>143018</b>	<b>26,70</b>
Walze, schwarz: hart, zum Finieren, Packung 100 Stück	<b>143273</b>	<b>26,70</b>
Walze, grün: Standardpolierer, Packung 100 Stück	<b>143022</b>	<b>26,70</b>
Walze, blau: Hochglanzpolitur, Packung 100 Stück	<b>143021</b>	<b>26,70</b>
Linse, schwarz: hart, zum Finieren, Packung 100 Stück	<b>143017</b>	<b>31,90</b>
Linse, grün: Standardpolierer, Packung 100 Stück	<b>143016</b>	<b>31,90</b>
Linse, blau: Hochglanzpolitur, Packung 100 Stück	<b>143015</b>	<b>31,90</b>



## Pinselfürsten

Miniatur-Pinselfürsten, montiert für Handstück.  
Zum feinen Ausarbeiten und Polieren von zahnmedizinischen Werkstücken.

Ziegenhaarborsten, weich, weiß, Packung 12 Stück	<b>185272</b>	<b>9,45</b>
Kunststoffborsten, hart, schwarz, Packung 12 Stück	<b>185273</b>	<b>9,45</b>



## Polierbürsten, Holzkern

Polierbürsten, 4-reihig, breite oder spitze Kontur. Mit weichen, schwarzen Standardborsten. Geeignet zur Vor- und Nachpolitur von Metallen und Kunststoffen.

- Drehzahl 1.500–5.000 UpM
- Tipp: Vor dem ersten Einsatz gut wässern!

breit, Ø 40/80 mm, Stück	<b>143285</b>	<b>2,95</b>
--------------------------	---------------	-------------

spitz, Ø 40/80 mm, Stück	<b>145468</b>	<b>2,95</b>
--------------------------	---------------	-------------



## Polierbürsten, Kunststoffkern

Schmale und mittelbreite Polierbürsten, spitze Kontur. Mit schwarzen Chunking-Borsten. Geeignet zur Vor- und Nachpolitur von Kunststoffen. Die schmale, 1-reihige Bürste ist besonders geeignet für schlecht zugängliche Interdentalräume in der Kunststofftechnik.

- 1-reihig: Drehzahl 1.500–5.000 UpM
- Mehrreihig: Drehzahl 6.000–10.000 UpM

1-reihig, spitz, Ø 26–44 mm, Stück	<b>24228</b>	<b>1,30</b>
------------------------------------	--------------	-------------

2-reihig, spitz, Ø 26–55 mm, Stück	<b>143296</b>	<b>1,40</b>
------------------------------------	---------------	-------------

3-reihig, spitz, Ø 26–55 mm, Stück	<b>143293</b>	<b>1,70</b>
------------------------------------	---------------	-------------



## Polierbürsten, schmal

Schmale Polierbürsten mit Metallkern, spitze Kontur. Geeignet zur Vor- und Nachpolitur von Kunststoffen. Die schmalen, 1-reihigen Bürsten sind besonders geeignet für schlecht zugängliche Interdentalräume in der Kunststofftechnik.

- Metallkern und -zentrum: Drehzahl 6.000–10.000 UpM
- Metallkern und Kunststoffzentrum: Drehzahl 1.500–5.000 UpM

Metallkern und -zentrum, Borsten schwarz, hart, 1-reihig, spitz, Ø 23/49 mm, Stück	<b>143292</b>	<b>1,60</b>
Metallkern und Kunststoffzentrum, Borsten schwarz, hart, 1-reihig, spitz, Ø 23/49 mm, Stück	<b>143291</b>	<b>1,95</b>
Metallkern und Kunststoffzentrum, Ziegenhaar, weich, 1-reihig, spitz, Ø 23/49 mm, Stück	<b>147439</b>	<b>1,95</b>



## Radbürsten, montiert

Hochwertige Radbürsten mit Naturborsten, ideal zum Reinigen und Polieren von Prothesenkunststoffen, zur Reinigung der Interproximalräume nach dem Entformen von Prothesen und für allgemeine Reinigungsarbeiten an zahntechnischen Arbeiten. Sehr gut geeignet zum Auftragen von Polierpasten auf laborgefertigte Kompositarbeiten, Metalle und Keramiken.

- Montiert für Handstück

Typ 9, Soft, Ø 15 mm, Packung 25 Stück	<b>128727</b>	<b>22,40</b>
Typ 11, Soft, Ø 18 mm, Packung 25 Stück	<b>128724</b>	<b>22,40</b>
Typ 12, Soft, Ø 20 mm, Packung 25 Stück	<b>128725</b>	<b>22,40</b>
Typ 11, Standard, Ø 18 mm, Packung 25 Stück	<b>128728</b>	<b>22,40</b>



## Radbürsten, unmontiert

Miniatur-Radbürsten, unmontiert für Handstückmandrell.  
Zum feinen Ausarbeiten und Polieren von zahntechnischen Werkstücken.

Kunststoffborsten, hart, schwarz, Ø 17 mm, Packung 12 Stück	<b>145005</b>	<b>9,45</b>
Kunststoffborsten, hart, schwarz, Ø 19 mm, Packung 12 Stück	<b>145006</b>	<b>9,45</b>
Kunststoffborsten, hart, schwarz, Ø 21 mm, Packung 12 Stück	<b>145007</b>	<b>9,45</b>
Ziegenhaarborsten, weich, weiß, Ø 17 mm, Packung 12 Stück	<b>145008</b>	<b>9,95</b>
Ziegenhaarborsten, weich, weiß, Ø 19 mm, Packung 12 Stück	<b>145009</b>	<b>9,95</b>
Ziegenhaarborsten, weich, weiß, Ø 21 mm, Packung 12 Stück	<b>145010</b>	<b>9,95</b>



## Silberdrahtbürsten

Universell einsetzbare Bürsten für die Reinigung und Politur hochempfindlicher Metalloberflächen. Hinterlässt keine Spuren auf kupferhaltigen Legierungen.

- Draht, Ø nur 0,08 mm • Auch zur Reinigung von Schmuckstücken und Münzen

Rad, montiert, Ø 19 mm, Packung 12 Stück	<b>146175</b>	<b>25,10</b>
Pinsel, montiert, Packung 12 Stück	<b>146568</b>	<b>24,50</b>



## Diamantpolierpaste

Wasserlösliches Diamantpoliermittel mit hochwertigen Naturdiamanten. Die gleichmäßige Korngröße von nur 2 µm ermöglicht die Hochglanzpolitur von Keramik, Edelmetallen und NEM-Aufbrennlegierungen. Sparsame Anwendung aus der Dosierspritze.

### Hinweis:

Die Diamantpolierpaste ist nicht zum intraoralen Gebrauch bestimmt!

Spritze 5 g, Stück	<b>185271</b>	<b>20,95</b>
--------------------	---------------	--------------



## Strahlkorund

Nichtmetallisches, hochwertiges synthetisches Feinstrahlmittel aus reinem Aluminiumoxid. Frei von Quarz und anderen Schadstoffen.

- 50 µm: entfernt Einbettmassen, Oxide und Schmutz von Edelmetallgerüsten und Keramik
- 110–150 µm: ideal zur Bearbeitung von Gold, halbedlen und NEM-Legierungen
- 210–250 µm: zur Bearbeitung von Chrom-Kobalt-Legierungen

Körnung 50 µm, Karton 25 kg	<b>148020</b>	<b>82,35</b>
Körnung 50 µm, Kanister 5 kg	<b>265355</b>	<b>20,80</b>
Körnung 110–150 µm, Karton 25 kg	<b>148021</b>	<b>82,35</b>
Körnung 110–150 µm, Kanister 5 kg	<b>265354</b>	<b>20,90</b>
Körnung 210–250 µm, Karton 25 kg	<b>148022</b>	<b>82,35</b>
Körnung 210–250 µm, Kanister 5 kg	<b>265356</b>	<b>20,55</b>



## Occlublast

Perlstrahlmittel aus reinem Natronglas, bleifrei. Ideal zum Glätten oder Glänzen von EM- und NEM-Legierungen, ohne Materialabtrag!

- 50 µm: entfernt auch Zahnstein und Gipsreste
- 125 µm: entfernt auch Einbettmassen und Stumpfmateriale bei metallfreien Keramikronen

Körnung 50 µm, Kanister 5 kg	<b>265359</b>	<b>15,90</b>
Körnung 50 µm, Karton 25 kg	<b>143525</b>	<b>64,50</b>
Körnung 125 µm, Kanister 6 kg	<b>265358</b>	<b>15,90</b>
Körnung 125 µm, Karton 25 kg	<b>143527</b>	<b>64,50</b>



## Modellierbesteck

Für die Grundausstattung:


Halteklemme gerade und gebogen, Iwanson Tasterzirkel, Folienschere gerade, Klemmpinzette gebogen, Lötpinzette gebogen, Wachsmesser groß, Wachsmesser klein, Modellierinstrument Le Cron groß, Modellierinstrument Zahle klein

Modellierbesteck, Etui mit 10 Instrumenten, Stück	<b>142151</b>	<b>69,90</b>
---	---------------	--------------

## Modellierbesteck Thomas

Modellierinstrumente für die Aufwachtechnik

- Aus rostfreiem Stahl

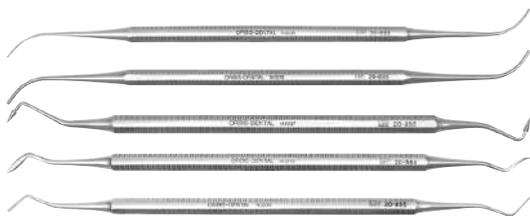

<b>Satz mit je 1 Modellierinstrument, PK Thomas, Nr. 1–5</b>	<b>143234</b>	<b>26,30</b>
Modellierinstrument, PK Thomas, Nr. 1, Stück	143235	5,50
Modellierinstrument, PK Thomas, Nr. 2, Stück	143236	5,50
Modellierinstrument, PK Thomas, Nr. 3, Stück	143237	5,50
Modellierinstrument, PK Thomas, Nr. 4, Stück	143238	5,50
Modellierinstrument, PK Thomas, Nr. 5, Stück	143239	5,50

## Modellierbesteck Thomas Color

Modellierinstrumente für die Aufwachtechnik



<b>Satz mit je 1 Modellierinstrument, PK Thomas Color, Nr. 1–5</b>	<b>148526</b>	<b>58,50</b>
Modellierinstrument, PK Thomas Color, Nr. 1, gelb, Stück	148527	13,20
Modellierinstrument, PK Thomas Color, Nr. 2, grün, Stück	148528	13,20
Modellierinstrument, PK Thomas Color, Nr. 3, blau, Stück	148529	13,20
Modellierinstrument, PK Thomas Color, Nr. 4, rot, Stück	148530	13,20
Modellierinstrument, PK Thomas Color, Nr. 5, silber, Stück	148531	13,20

## Modellierinstrumente

Hochwertige Modellierinstrumente für die Zahntechnik

- Aus rostfreiem Stahl



Modellierinstrument Le Cron, Länge 160 mm, Stück	143232	5,50
Modellierinstrument Zahle, Form A, Länge 125 mm, Stück	143240	5,50
Modellierinstrument Zahle, Form B, Länge 125 mm, Stück	174534	5,50

## Wachsmesser, nach Fahnenstock (Kunststoff)

Wachsmesser, doppelendig.  
Mit Griff aus Kunststoff und festen Klingen.



Wachsmesser nach Fahnenstock, Länge 130 mm, Stück	143242	3,90
Wachsmesser nach Fahnenstock, Länge 170 mm, Stück	143241	4,20

## Wachsmesser, nach Fahnenstock (Holz)

Wachsmesser, doppelendig.  
Mit Holzgriff und festen Klingen.



Wachsmesser nach Fahnenstock, Länge 130 mm, Stück	266831	4,20
Wachsmesser nach Fahnenstock, Länge 170 mm, Stück	266832	4,40



## Wachsmesser, nach Antkoviak

Wachsmesser, einendig.  
Mit Griff aus Kunststoff und austauschbarer Klinge.

Wachsmesser RS, Länge 115 mm, Stück	<b>143230</b>	<b>4,90</b>
Ersatzklinge mit Gewinde, Stück	<b>141414</b>	<b>3,60</b>



## Wachsmesser, nach Ermert

Wachsmesser, doppelendig. Mit Griff aus Kunststoff und festen Klingen. Gute Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten. Erlaubt präzises Modellieren, Schneiden, Schaben und Ausformen.

Wachsmesser nach Ermert, Länge 130 mm, Stück	<b>143231</b>	<b>6,20</b>
--	---------------	-------------

## Keramikinstrumente

Hochwertige Modellierinstrumente für die Keramikverblendtechnik

- Aus rostfreiem Stahl



Riffelinstrument, Länge 160 mm, Stück	<b>149752</b>	<b>7,80</b>
Gravierinstrument, Länge 150 mm, Stück	<b>149756</b>	<b>7,70</b>
Dünnes Messer, Länge 135 mm, Stück	<b>149797</b>	<b>8,70</b>



## Kondensierspatel

Modellierinstrument für die Verblendtechnik.  
Mit flexiblem Spatel auf der einen Seite und mittelhartem Kunststoffkopf auf der anderen Seite. Gut geeignet zur klopfenden und vibrierenden Verdichtung.

Länge 155 mm, Stück	<b>149799</b>	<b>10,85</b>
---------------------	---------------	--------------



## Big Brush

Beste Rotmarder-Kolinsky-Qualität.  
Durch die Metallkugel im Griff erfolgt jedes Mal, wenn der Pinsel angeschlagen wird, eine Formgebung der Pinselspitze.

- Naturhaar
- Größe 8 (leicht größer)

Stück	<b>146661</b>	<b>36,80</b>
-------	---------------	--------------



## Kombipinsel

Doppelseitiger Pinsel, auf der einen Seite weiches Feinhaar (Größe 14), auf der anderen Seite stärkeres Kunsthaar (Größe 16)

Stück	<b>189649</b>	<b>12,80</b>
-------	---------------	--------------



## Pinselset

Zum Auftragen von Kunststoffverblendmassen

1 Griff, 3 Ansätze, Packung	<b>143300</b>	<b>8,95</b>
6 Stück Ersatzpinsel, Packung	<b>143301</b>	<b>9,30</b>

## Keramikpinsel, synthetisch

Kolinsky-Imitation mit synthetischer Haarmischung, besonders für Keramikarbeiten geeignet

- Handgemacht
- Nahtlose Silberzwinge
- LED-UV-Direktdruck



Größe 2/0, Stück	<b>266726</b>	<b>2,05</b>
Größe 0, Stück	<b>266727</b>	<b>2,15</b>
Größe 1, Stück	<b>266728</b>	<b>2,25</b>
Größe 2, Stück	<b>266729</b>	<b>2,35</b>
Größe 3, Stück	<b>266730</b>	<b>2,65</b>
Größe 4, Stück	<b>266731</b>	<b>3,05</b>
Größe 5, Stück	<b>266732</b>	<b>3,25</b>
Größe 6, Stück	<b>266733</b>	<b>3,75</b>
Größe 7, Stück	<b>266735</b>	<b>4,05</b>
Größe 8, Stück	<b>266734</b>	<b>4,45</b>
Größe 10, Stück	<b>266736</b>	<b>5,75</b>

## Rotmarderpinsel

Kolinsky-Qualität mit federharten Haaren, besonders für Keramikarbeiten geeignet

- Handgemacht



Größe 00, Stück	<b>146124</b>	<b>2,05</b>
Größe 0, Stück	<b>146125</b>	<b>2,15</b>
Größe 1, Stück	<b>146126</b>	<b>2,55</b>
Größe 2, Stück	<b>146127</b>	<b>2,85</b>
Größe 3, Stück	<b>146128</b>	<b>3,25</b>
Größe 4, Stück	<b>146129</b>	<b>3,55</b>
Größe 5, Stück	<b>146130</b>	<b>4,65</b>
Größe 6, Stück	<b>146131</b>	<b>5,75</b>
Größe 7, Stück	<b>146132</b>	<b>7,35</b>
Größe 8, Stück	<b>146133</b>	<b>10,15</b>
Größe 10, Stück	<b>146135</b>	<b>14,15</b>

## Dial Caliper N

Analoger Schnelltester mit austauschbaren Messspitzen für Metall und Wachs

- Messbereich: 0–10 mm
- Skalierung 0,1 mm



Stück	<b>194951</b>	<b>75,90</b>
Ersatzspitzen, Set	<b>251652</b>	<b>20,65</b>



## Tasterzirkel, nach Iwanson

Einfaches Wandstärken-Messgerät aus rostfreiem Stahl, beidseitig ablesbar. Messspitzen für Metall.

- Messbereich 0–10 mm
- Skalierung 0,1 mm

Stück	<b>143250</b>	<b>15,70</b>
-------	---------------	--------------



## Gipsschneidezange

Robuste Ausführung

- Aus rostfreiem Stahl

Länge 20 cm, Stück	<b>145399</b>	<b>28,60</b>
--------------------	---------------	--------------



## Teleskopkronenzange

Stabile Ausführung, gute Haftkraft der Innenteleskope durch diamantbeschichtete Brachen

- Aus rostfreiem Stahl

normal, Länge 150 mm, Stück	<b>143253</b>	<b>70,90</b>
mini, Länge 120 mm, Stück	<b>146866</b>	<b>67,90</b>



## Keramogrip

Kronen und Brücken können sicher gefasst werden. Die elliptisch geformten Diamantspitzen sind auswechselbar.

- Aus rostfreiem Stahl

Länge 150 mm, Stück	<b>146742</b>	<b>30,50</b>
---------------------	---------------	--------------



## Lötinzette

Lötinzette mit Holzgriff, gebogen

- Aus rostfreiem Stahl

Länge 165 mm, Stück	<b>143248</b>	<b>5,80</b>
---------------------	---------------	-------------

## Zangen für die Zahntechnik

Langlebige Technikzangen. Hochwertige Verarbeitung, korrosionsbeständig. Sehr leichtgängig, liefern genaue Biegeresultate. Dank glatter Oberfläche leicht zu reinigen.

- Aus rostfreiem Stahl



Klammernbiegezange nach Aderer  
klein, Länge 115 mm, Drahtstärke max.  $\varnothing$  0,7 mm, Stück

**143251 22,50**

Klammernbiegezange nach Aderer  
mittel, Länge 130 mm, Drahtstärke max.  $\varnothing$  0,9 mm, Stück

**143252 22,50**

Flachspitzzange  
glatt, Länge 135 mm, Stück

**143517 21,95**

Flachspitzzange  
gerieft, Länge 135 mm, Stück

**143518 21,95**

Kramponzange  
Länge 155 mm, Stück

**143515 32,95**

## Halteklemme, nach Mosquito

Zum Halten von Gerüsten in der Keramik

- Aus rostfreiem Stahl




gerade, Länge 130 mm, Stück

**143249 8,80**

gebogen, Länge 130 mm, Stück

**143562 8,80**

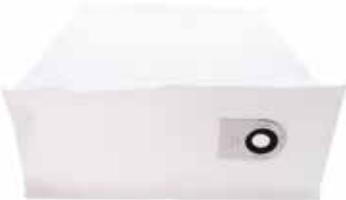

## Orbis Absaugfilter

Ersatzfilter für Absauganlagen folgender Hersteller:  
Dental Art (Klinckmann) • Freuding • KaVo • Zubler

für FL/ASP, Beutel 1 Stück

**247559 16,70**

für Zubler, Beutel 3 Stück

**247560 26,30**

für TA 035, Beutel 3 Stück

**247556 31,35**

für 0.658.2350, Beutel 2 Stück

**247549 36,80**

für 0.658.2160, Beutel 5 Stück

**247540 43,90**

für MA 635, Beutel 1 Stück

**247557 28,40**

für F4 530, Beutel 1 Stück

**248400 28,30**

für MA 528, fein, Karton 1 Stück

**247558 57,50**

für 0.658.9802, Karton 1 Stück

**247552 85,90**

für 0.657.1142, Beutel 1 Stück

**247535 155,90**



# Staubfrei arbeiten

... dank ORBIS Absaugfilter

**Achtung Feinstaub – schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter!**

ORBIS Absaugfilter ...

- ... filtern selbst Kleinstpartikel aus der Luft
- ... schützen vor den Auswirkungen von Feinstaub
- ... passen in Absauganlagen von Dental Art, Freuding, KaVo, Zubler

**Freuen Sie sich auf saubere Luft –  
ohne Kobalt, Nickel, Beryllium,  
Quarz, Gips, Gold, Kunststoff  
oder andere Feinstäube!**







**ORBIS Dental Handelsgesellschaft mbH**  
Schuckertstraße 21 • D-48153 Münster  
Tel.: 0251/3226-786 • [www.orbis-dental.de](http://www.orbis-dental.de)